FitCute®




Kegel Rejuve

User Guide

Contents

English 3
Français 12
Deutsch 21
Nederlands 30
Español 39
Português 48
Italiano 57
Svenska 66
Polski 75
Čeština 84
Русский 93
Українська 102
简体中文 111
繁體中文 120
日本語 129
한국어 138
Manufacturer & EC REP 147

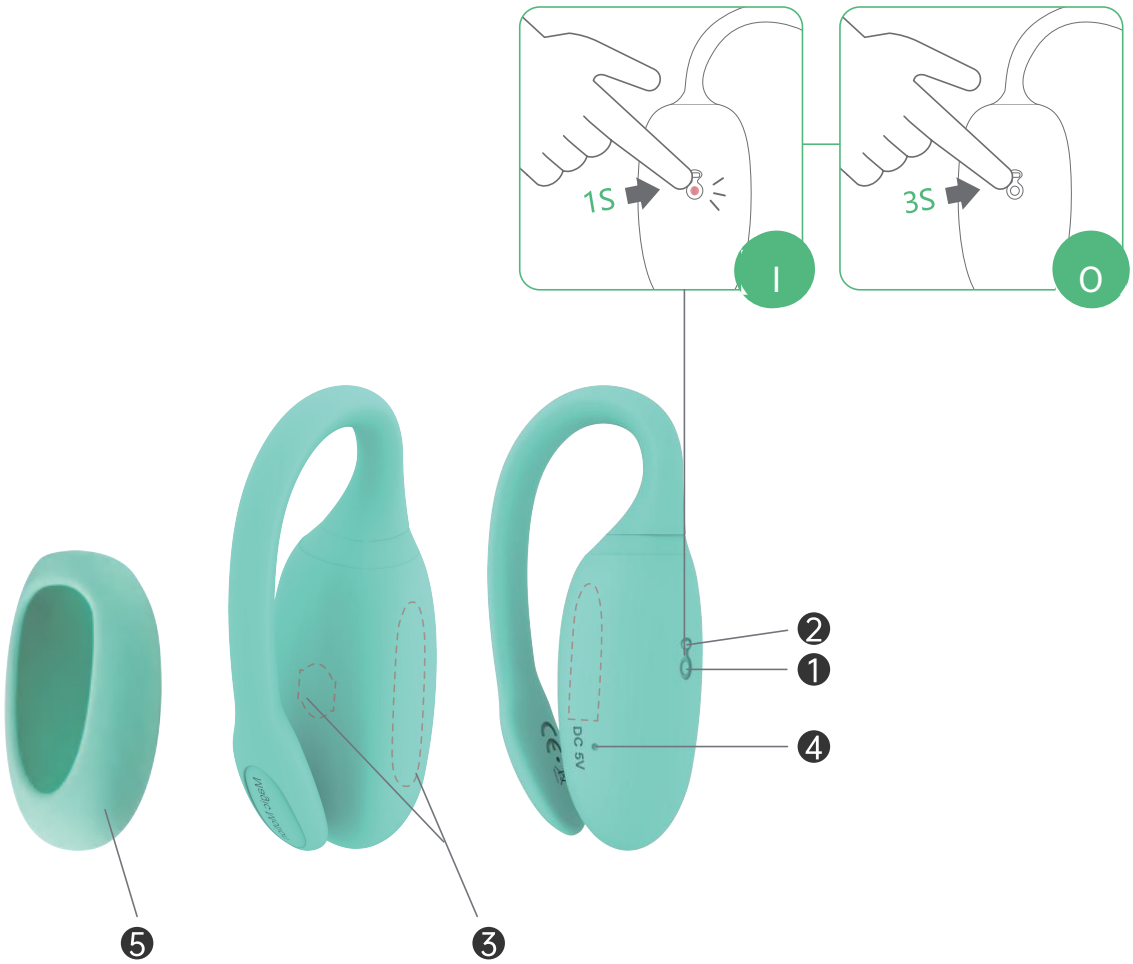

1 Power on/off

ON · 1 s

OFF · 3 s


2 LED Light


3 Touch sensor areas

4 Charging port

5 Rejuve Cover

English

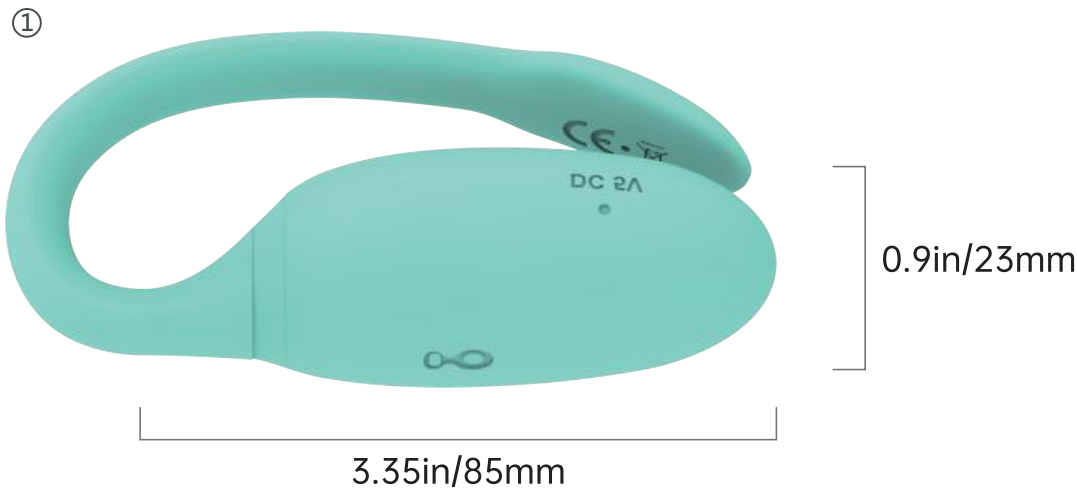

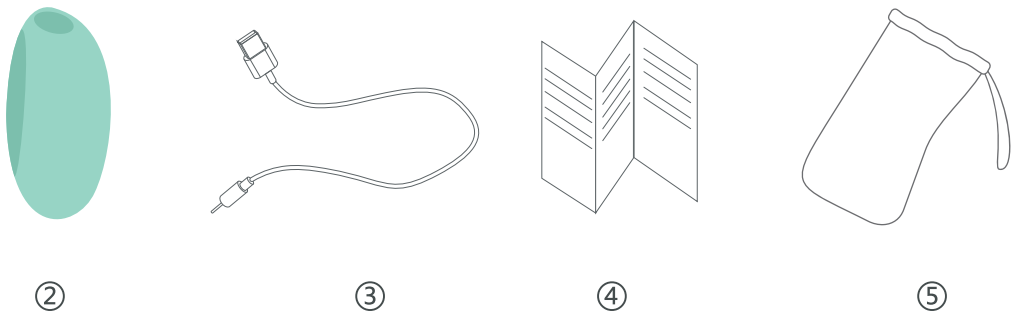

1 Kegel Rejuve


2 Rejuve Cover

3 Charging Cable

4 User Guide


5 Storage Bag

Preparation for use

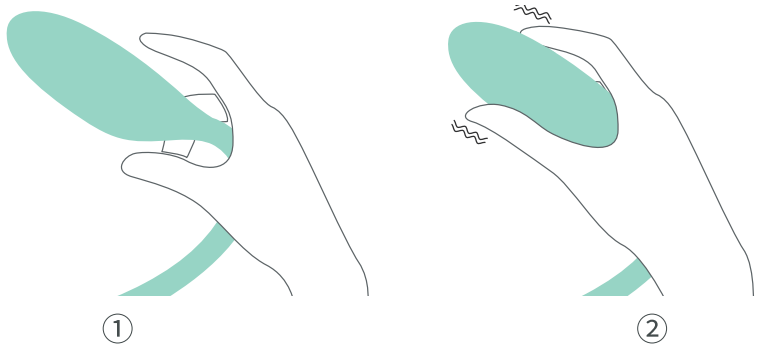

Touch the sensor

Find pelvic floor muscle

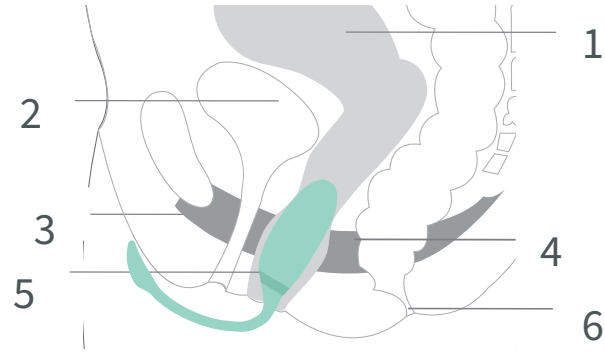

1 Uterus

2 Urinary bladder

3 Urethra

4 Pelvic floor muscles


5 Vagina

6 Anus




A water-based lubricant

Using Kegel Rejuve with Rejuve Cover

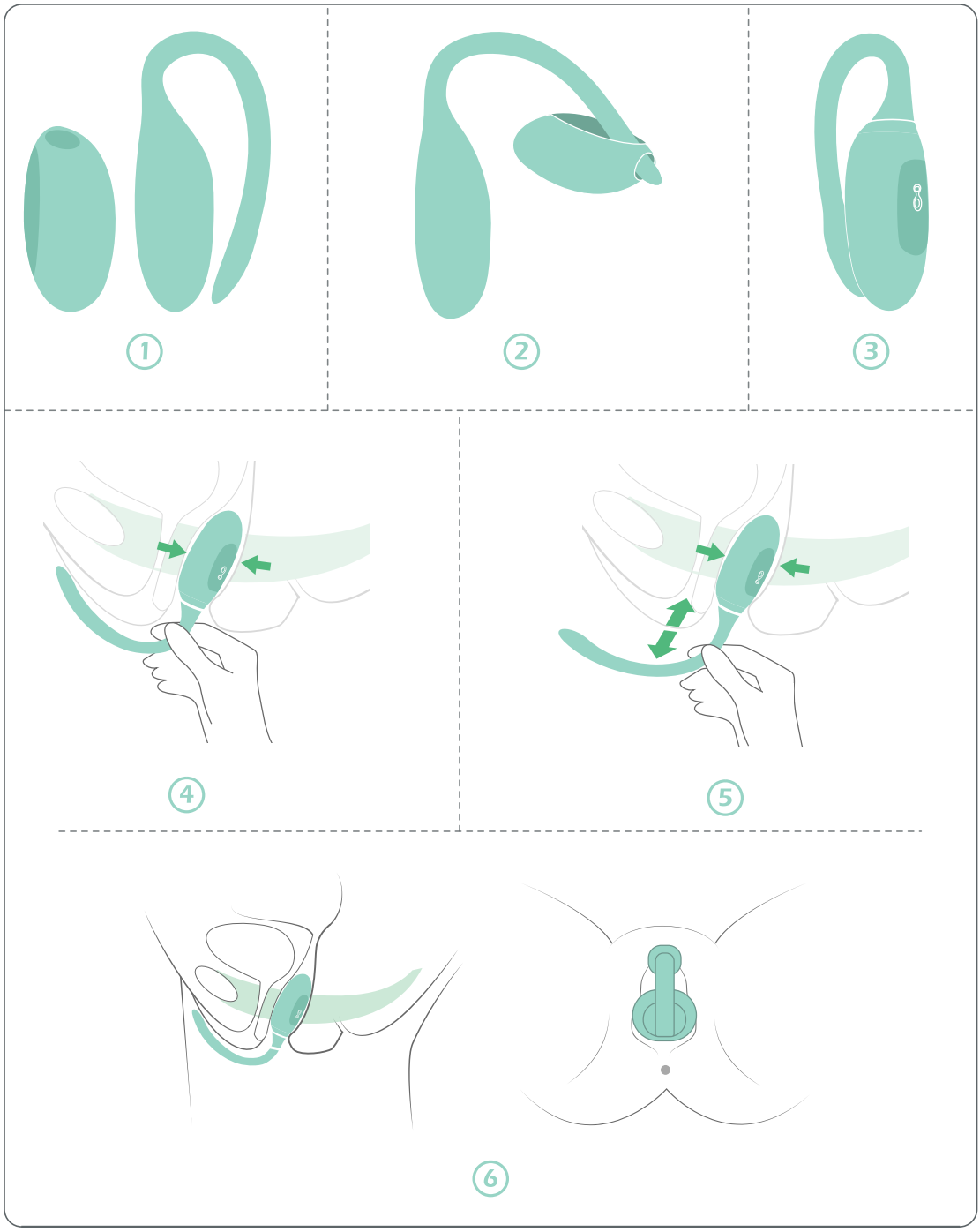

Force-Feedback Training Mode

ON · 1 s

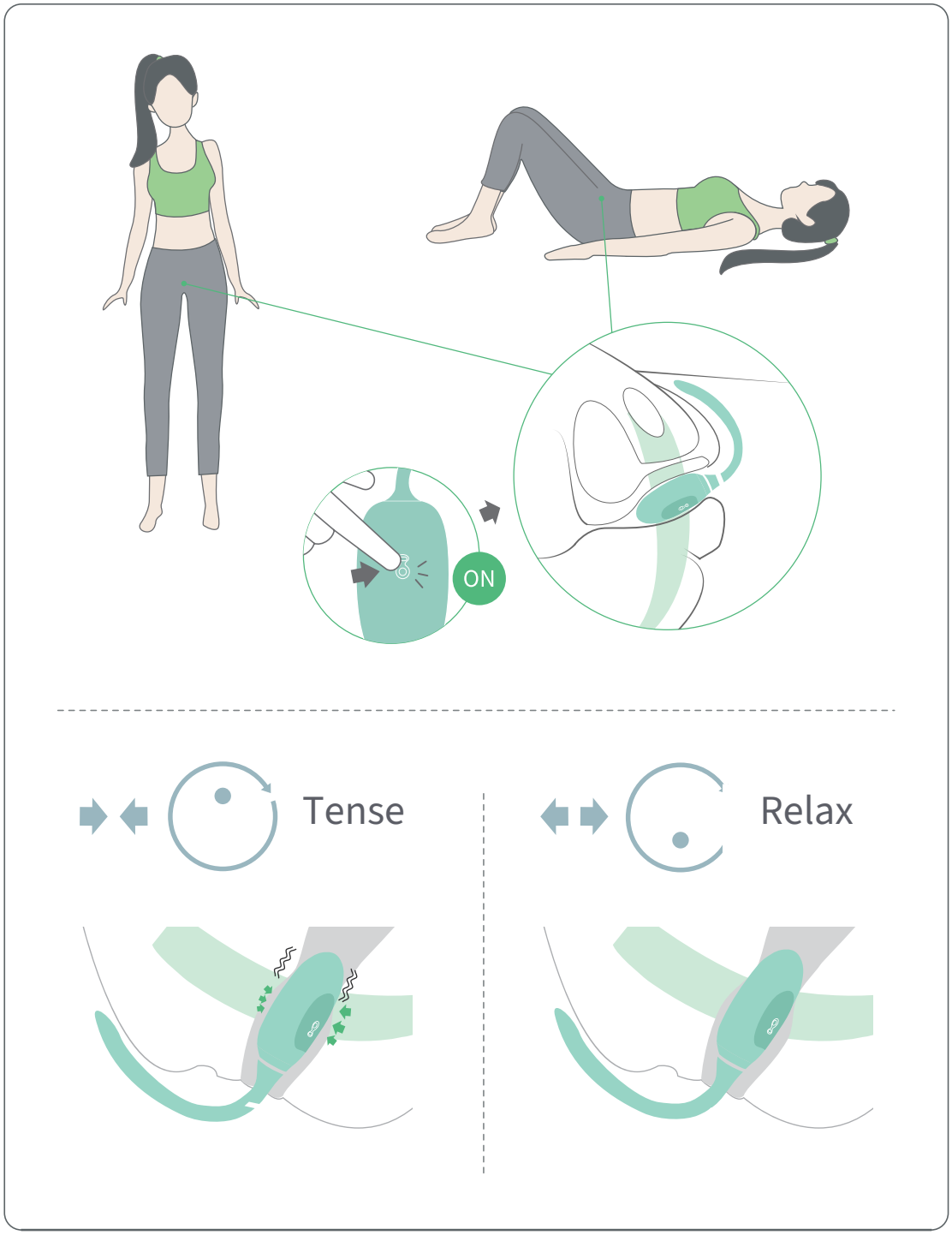

Smartphone Workout Mode

Supports iOS & Android smartphones & tablets

1 Download APP



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play


2 Connection



Charging

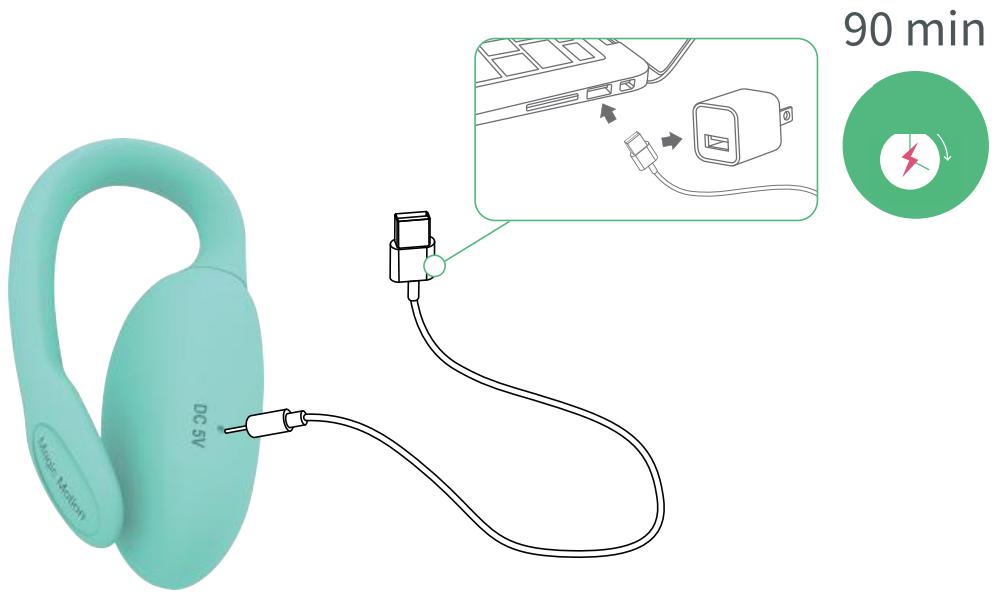

Maintenance

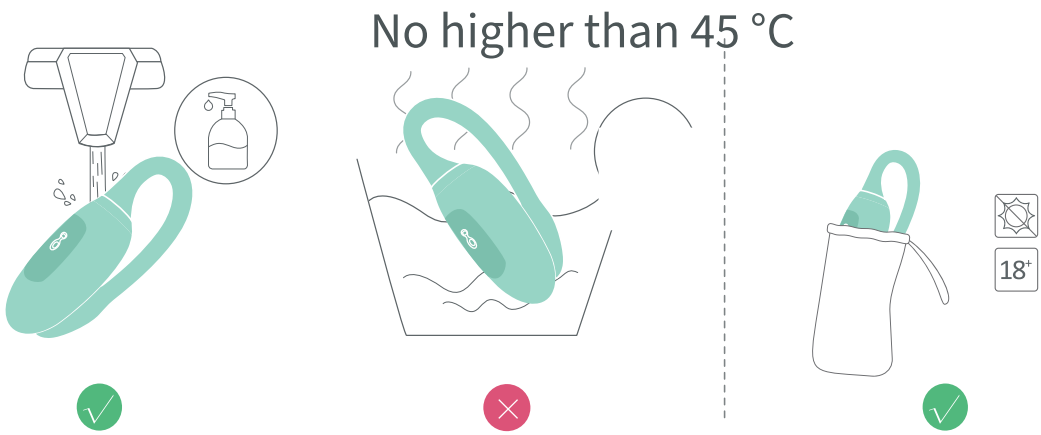

18+: adults only

Specification

Model: SMV10

Size: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Material: Silicone/ ABS

Charging voltage: DC 5V

Maximum charging current: 300mA

Weight: 27g

Operating time: 150 minutes

Charging time: 90 minutes

Waterproof: IPX4

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz

Maximum RF Transmit Power: 0.95 dBm

Customer Support

For support or warranty questions, email customercare@magicsmotion.com. Include the model and issue; include proof of purchase for warranty questions.


Important Safety Information

Safe Use: For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.

Charging Safety: Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety: Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal: Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Observe the stated IPX4 rating; it does not apply to the charging cable or power supply. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.

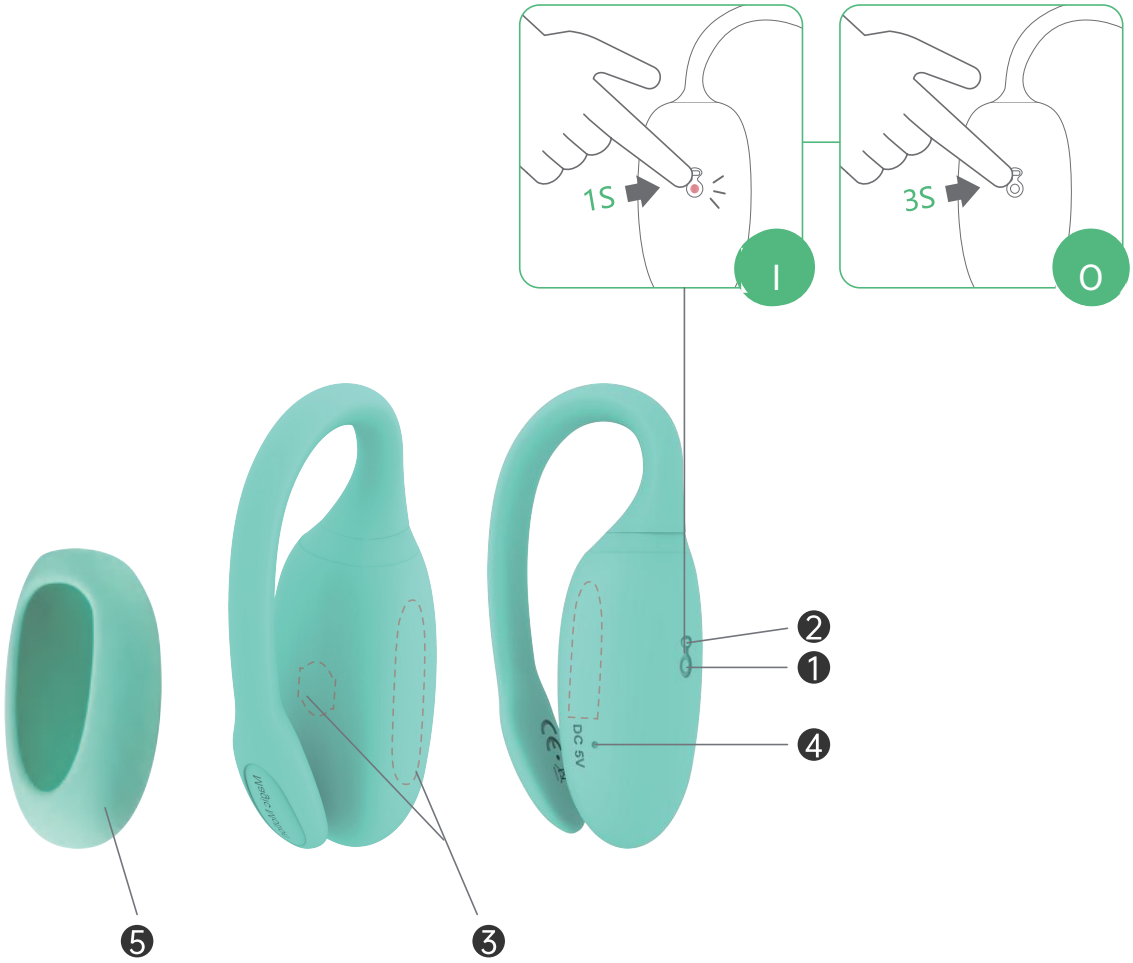

1 Marche/arrêt

MARCHE · 1 s

ARRÊT · 3 s


2 Voyant LED


3 Zones du capteur tactile

4 Port de charge

5 Housse Rejuve

①

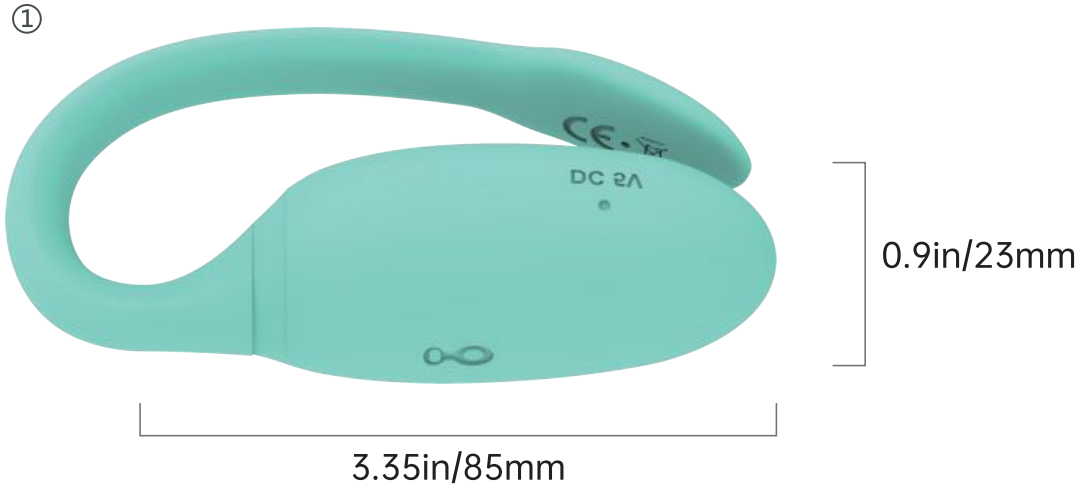

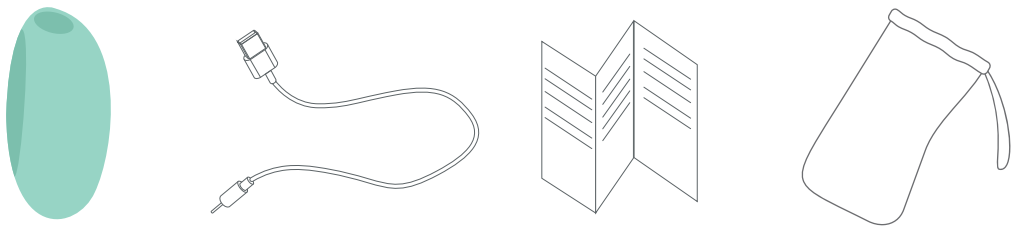

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Housse Rejuve

3 Câble de charge

4 Guide utilisateur

5 Pochette de rangement

Préparation à l’utilisation

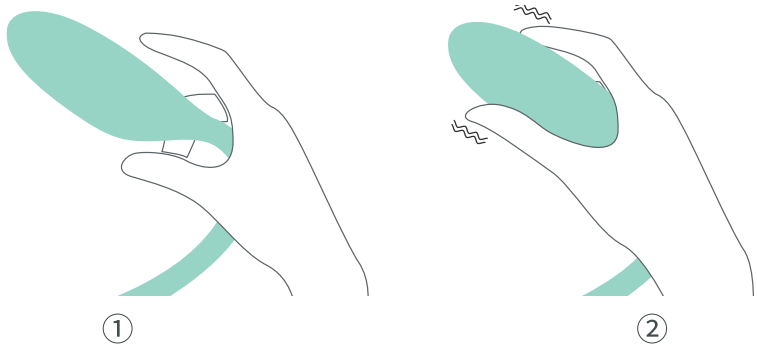

Touchez le capteur

Repérez les muscles du plancher pelvien



1 Utérus

2 Vessie

3 Urètre

4 Muscles du plancher pelvien


5 Vagin

6 Anus




Lubrifiant à base d’eau

Utilisation de Kegel Rejuve avec la housse Rejuve

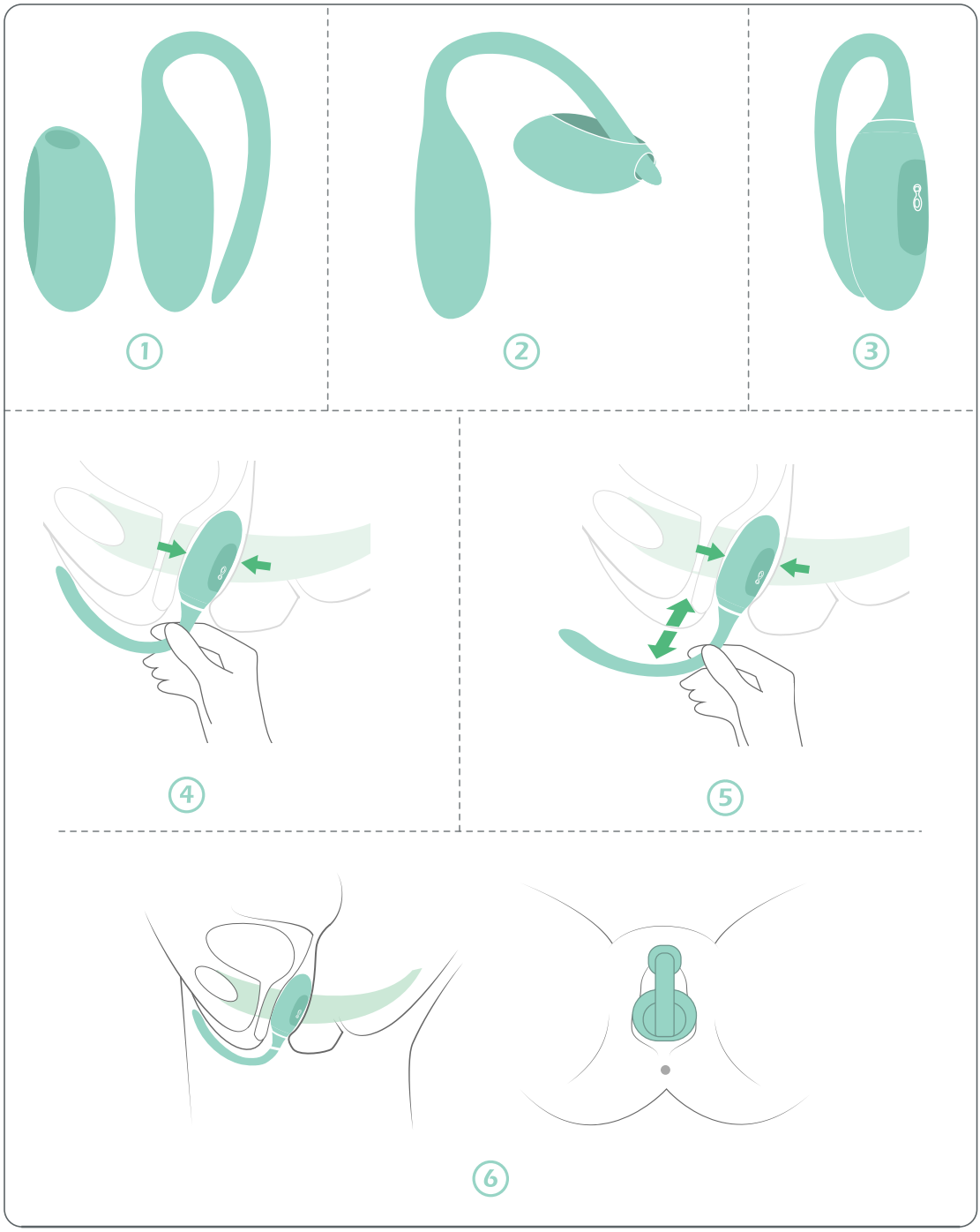

Mode d’entraînement à retour de force

MARCHE · 1 s

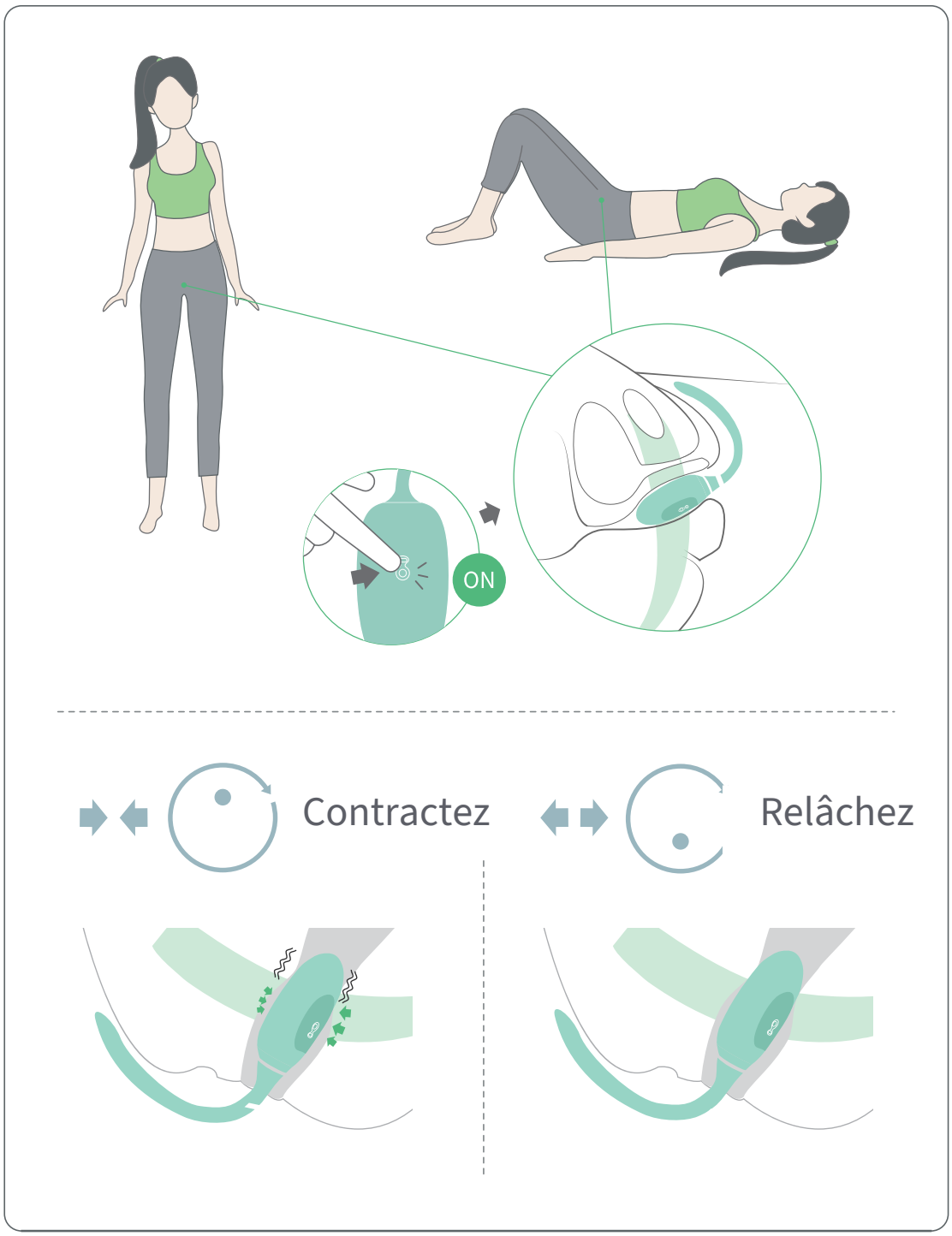

Mode d’entraînement sur smartphone

Compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android

1 Télécharger l’application

Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Connexion



Charge

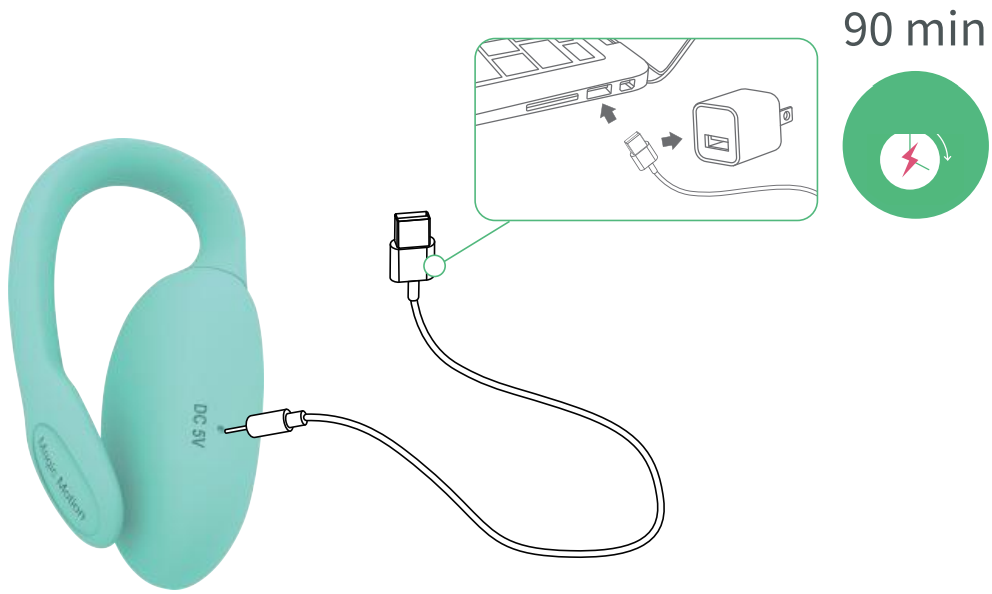

Entretien



18+ : adultes uniquement

Spécification

Modèle: SMV10

Taille: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Matériau: silicone / ABS

Poids: 27g

Tension de charge: 5V

Courant de charge maximum: 300mA

Étanchéité: IPX4

Durée de fonctionnement: environ 150 minutes

Temps de charge: 90 minutes

Bande de fréquences de fonctionnement: 2402–2480 MHz

Puissance RF maximale d’émission: 0.95 dBm

Assistance clientèle

Pour l’assistance ou la garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquez le modèle et le problème ; joignez la preuve d’achat pour la garantie.


Informations de sécurité importantes

Sécurité d'utilisation: Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.

Sécurité de charge: Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie: Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination: Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Respecter l'indice IPX4 indiqué ; il ne s'applique pas au câble de charge ni à l'alimentation. Ranger au sec, à l’abri du soleil et des enfants. Déposer l’appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

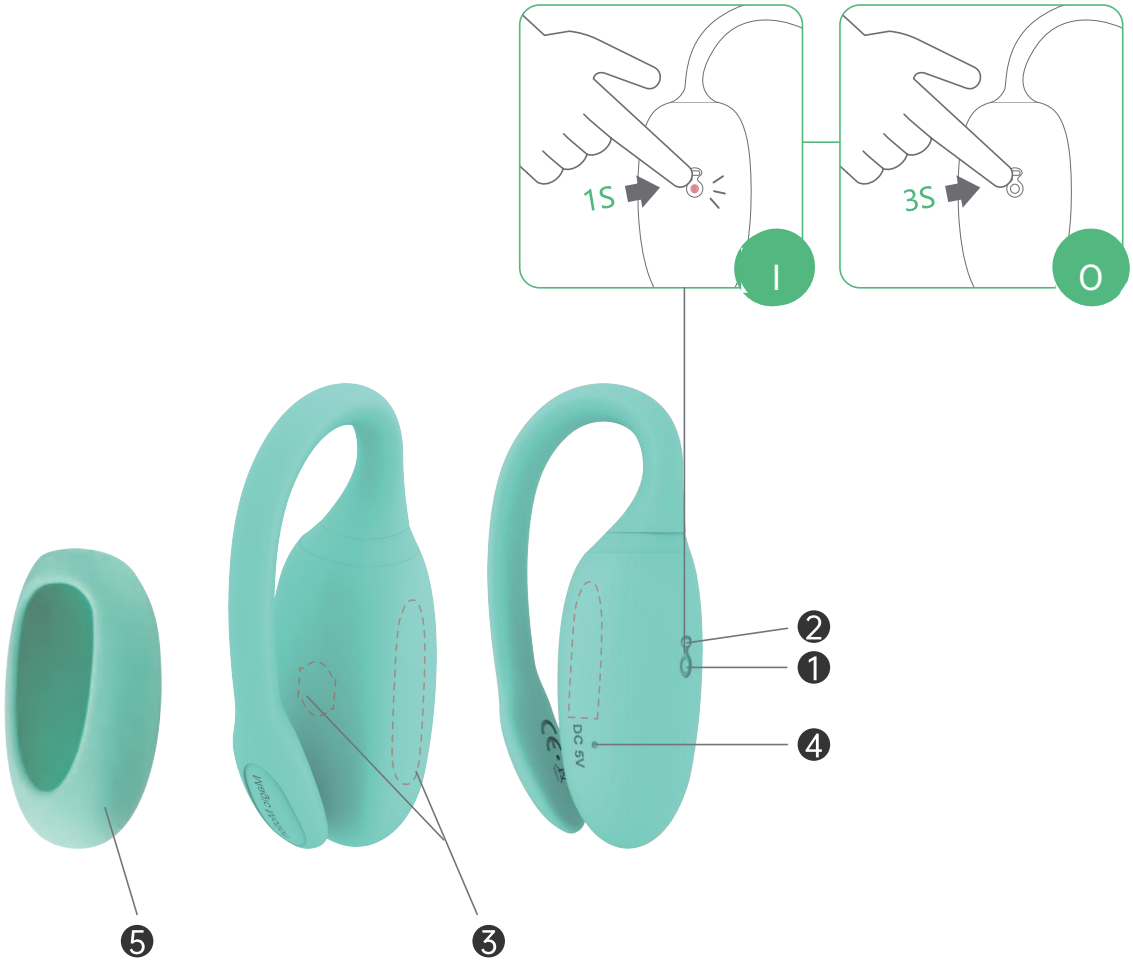

1 Ein-/Ausschalten

EIN · 1 s

AUS · 3 s


2 LED-Leuchte


3 Berührungssensorbereiche

4 Ladeanschluss

5 Rejuve-Hülle

①

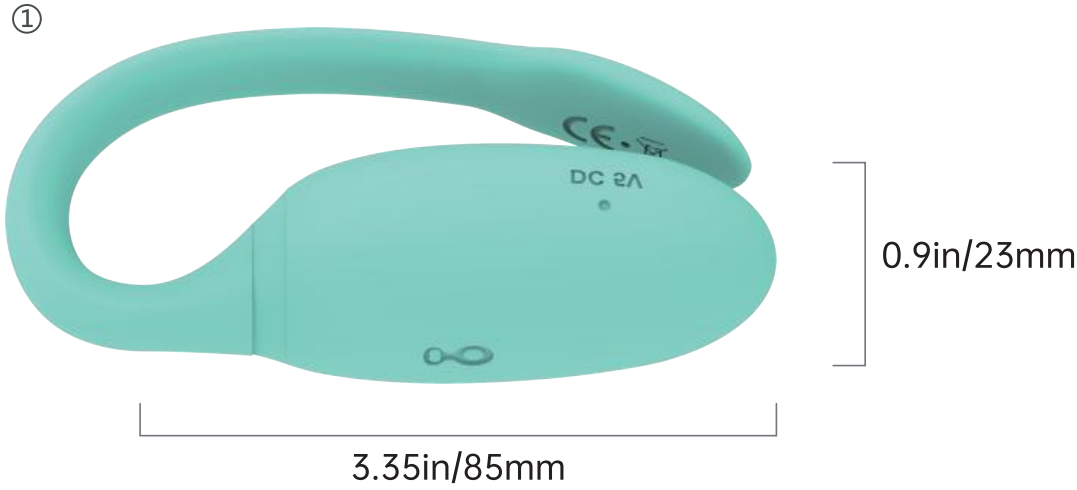

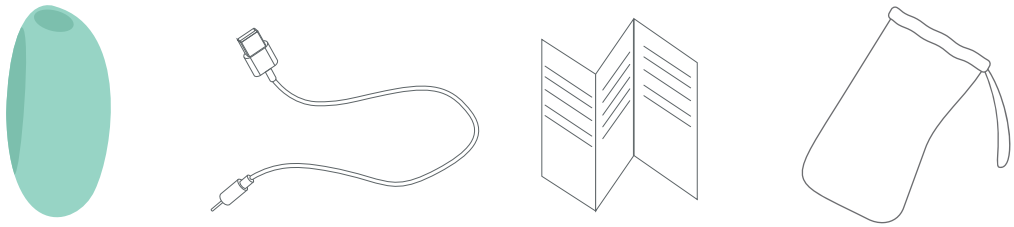

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Rejuve-Hülle

3 Ladekabel

4 Bedienungsanleitung


5 Aufbewahrungsbeutel

Vorbereitung zur Verwendung

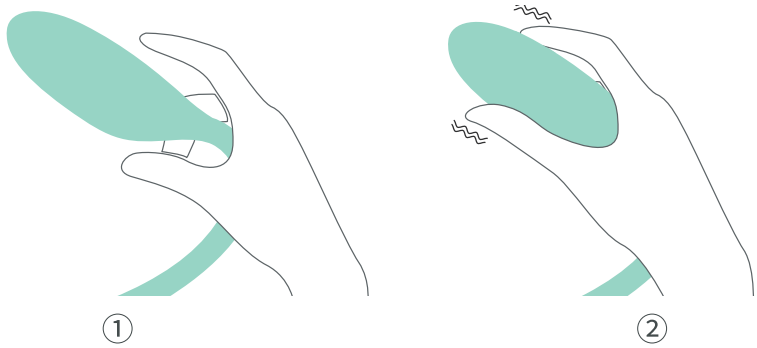

Berühren Sie den Sensor

Finden Sie die Beckenbodenmuskulatur

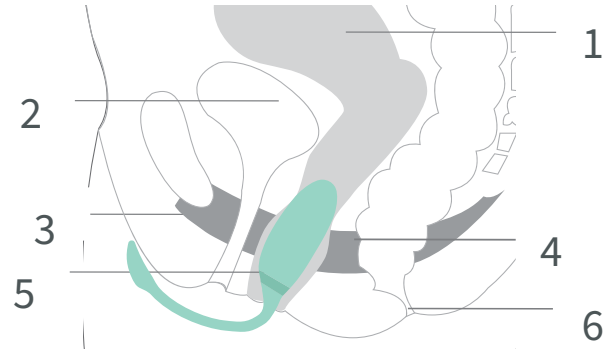

1 Gebärmutter

2 Harnblase

3 Harnröhre

4 Beckenbodenmuskeln


5 Vagina

6 Anus



Gleitmittel auf Wasserbasis

Kegel Rejuve mit der Rejuve-Hülle verwenden

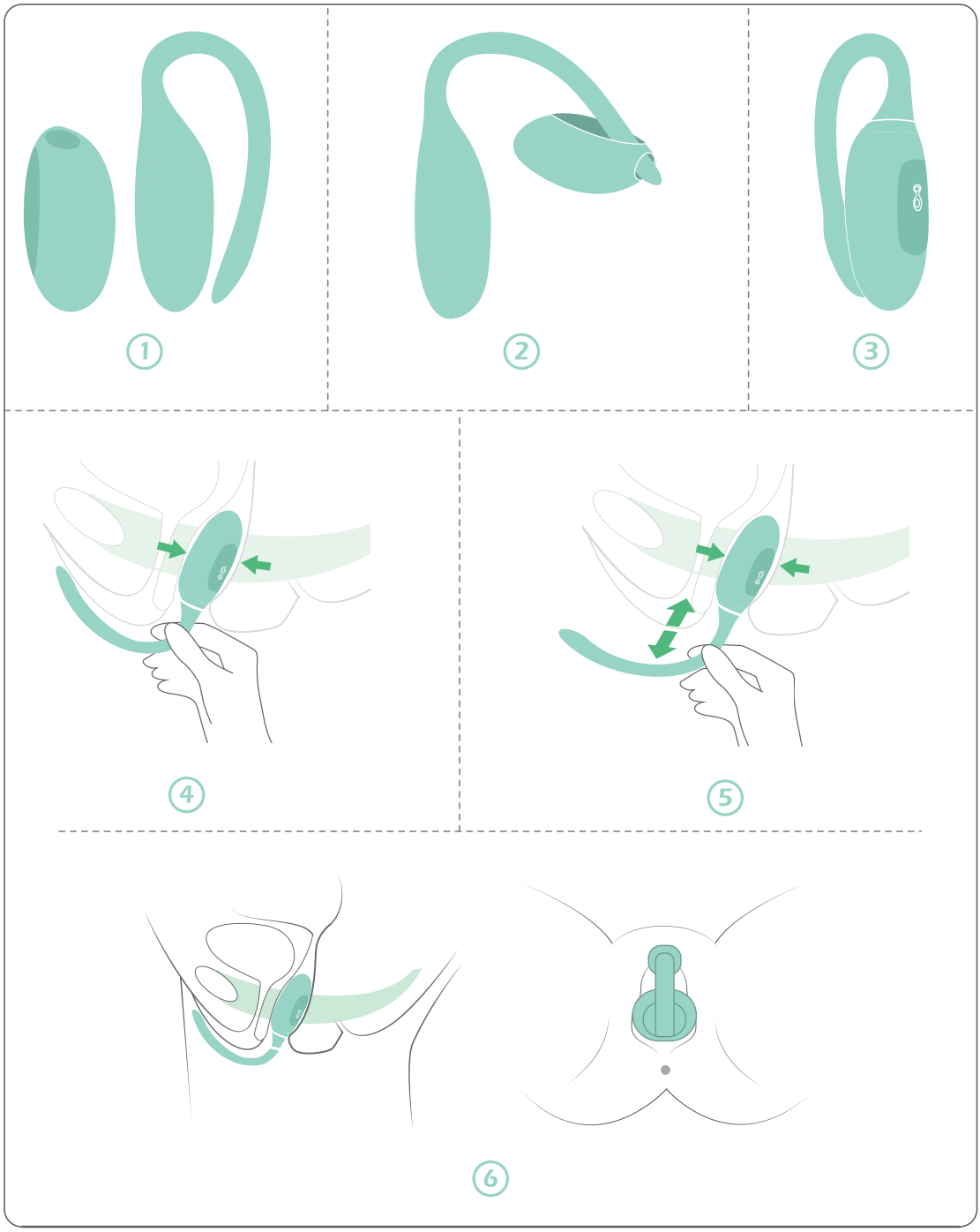

Trainingsmodus mit Kraftrückmeldung

EIN · 1 s



Smartphone-Trainingsmodus

Für Smartphones und Tablets mit iOS oder Android

1 App herunterladen



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Verbindung



Aufladen

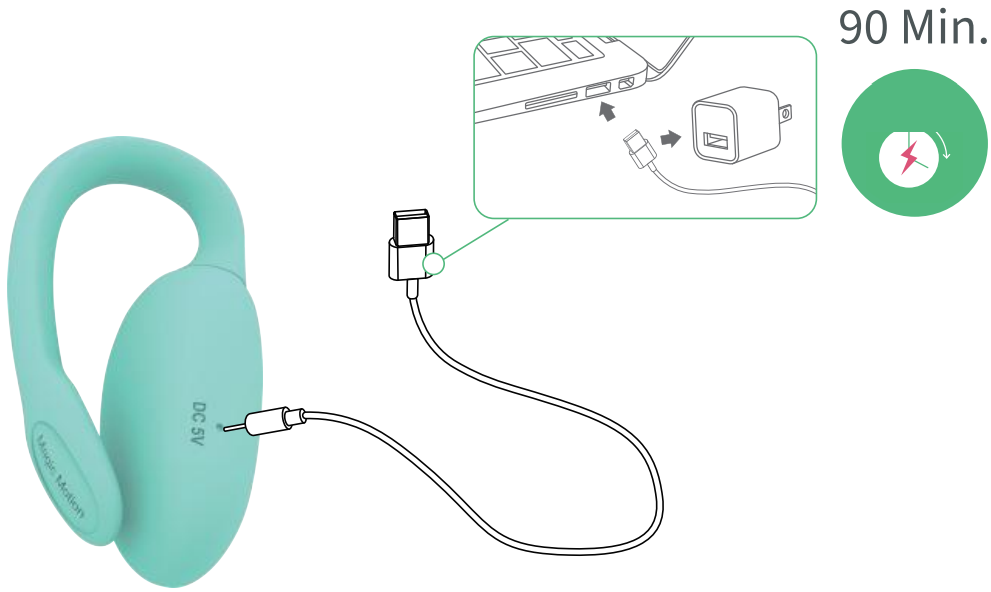

Pflege



18+: nur für Erwachsene

Spezifikation

Modell: SMV10

Größe: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Material: Silikon / ABS

Ladespannung: DC 5V

Maximaler Ladestrom: 300mA

Ladezeit: 90 Minuten

Betriebsdauer: ca. 150 Minuten

Wasserdichtigkeit: IPX4

Gewicht: 27g

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale RF-Sendeleistung: 0.95 dBm

Kundensupport

Für Support- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Modell und Problem angeben; bei Garantiefragen den Kaufbeleg beifügen.


Wichtige Sicherheitsinformationen

Sichere Verwendung: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.

Sicheres Laden: Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit: Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung: Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Die angegebene Schutzart IPX4 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Netzteil. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.

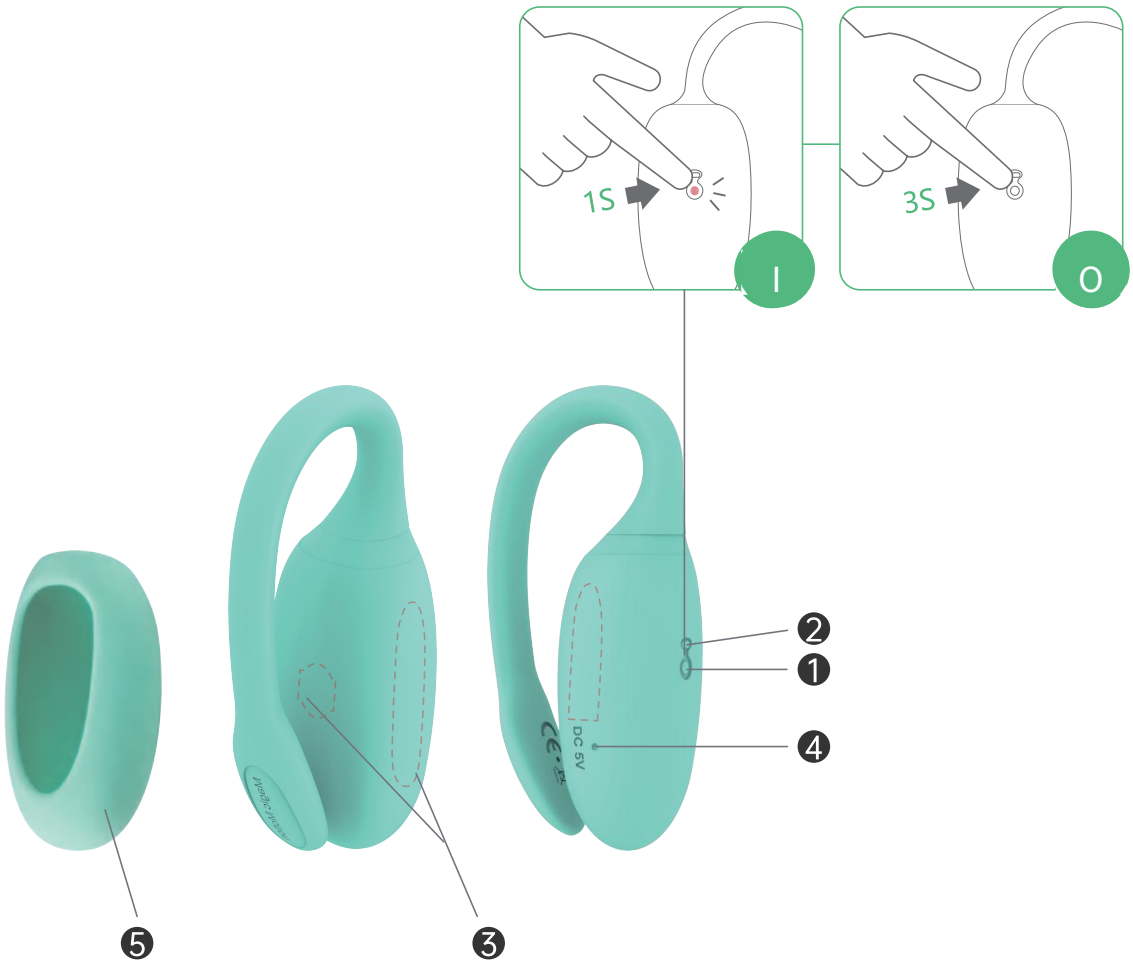

1 Aan/uit

AAN · 1 s

UIT · 3 s


2 Ledlampje


3 Aanraaksensorzones

4 Oplaadpoort

5 Rejuve-hoes

①

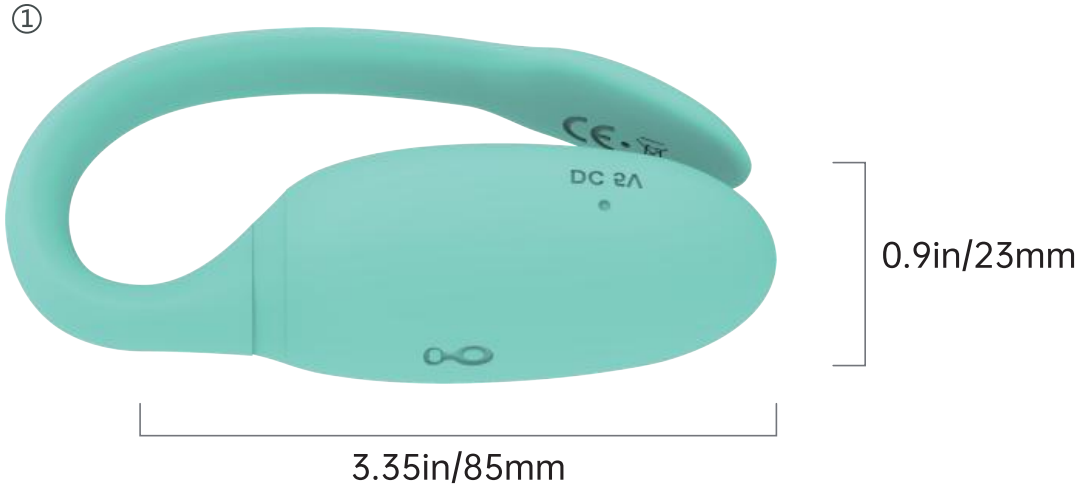

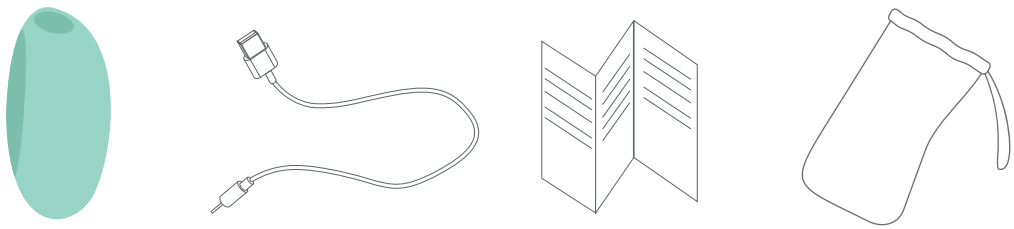

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Rejuve-hoes

3 Oplaadkabel

4 Gebruikershandleiding


5 Opbergzakje

Voorbereiding voor gebruik

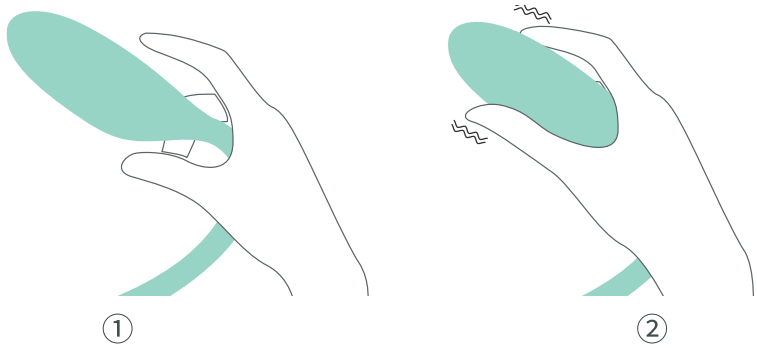

Raak de sensor aan

Vind de bekkenbodemspieren

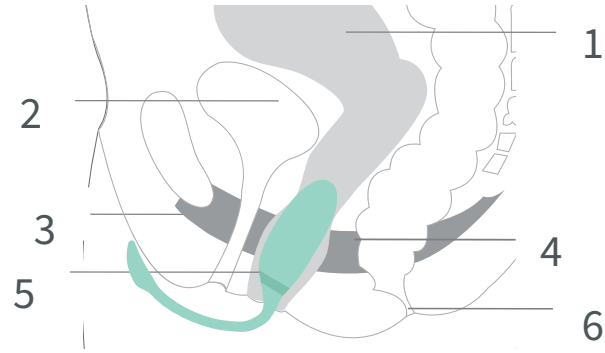

1 Baarmoeder

2 Urineblaas

3 Urinebuis

4 Bekkenbodemspieren


5 Vagina

6 Anus



Glijmiddel op waterbasis

Kegel Rejuve gebruiken met de Rejuve-hoes

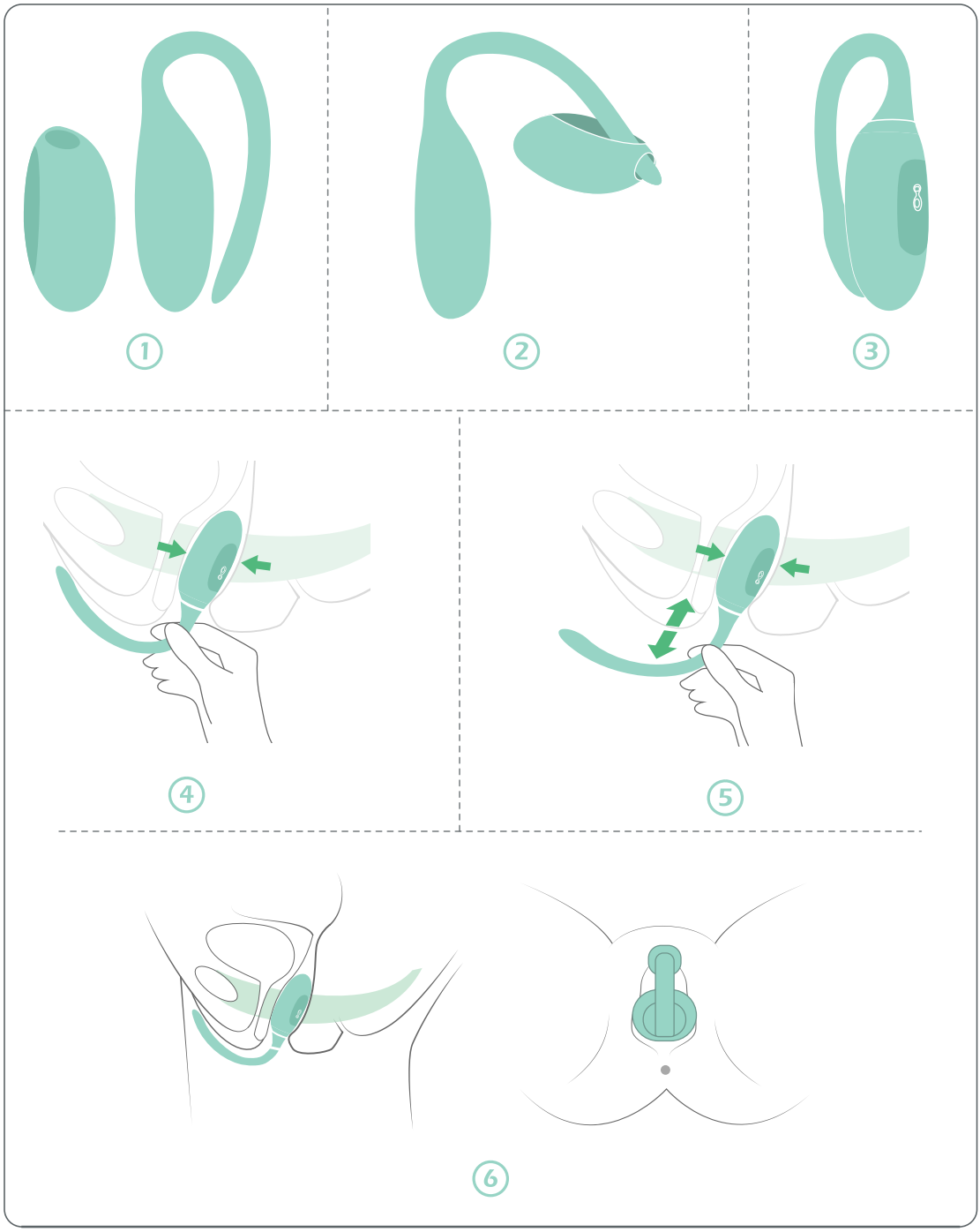

Trainingsmodus met krachtterugkoppeling

AAN · 1 s



Trainingsmodus met smartphone

Voor smartphones en tablets met iOS of Android

1 App downloaden

Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Verbinding



Opladen

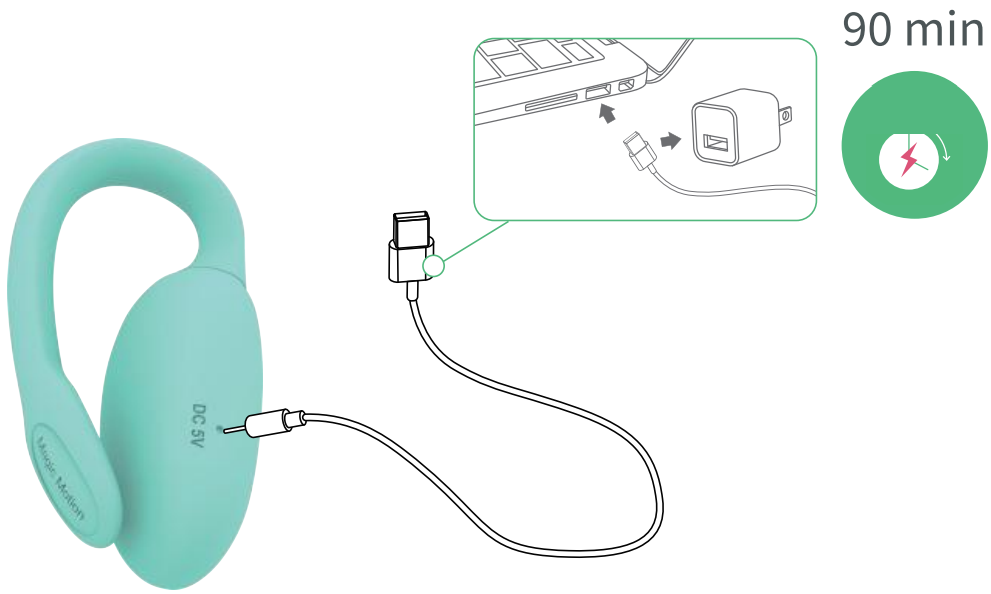

Onderhoud



18+: alleen voor
en

Specificaties

Model: SMV10

Afmetingen: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Materiaal: siliconen / ABS

Laadspanning: DC 5V

Maximale laadstroom: 300mA

Gewicht: 27g

Gebruiksduur: 150 minuten

Oplaadtijd: 90 minuten

Waterdichtheid: IPX4

Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz

Maximaal RF-zendvermogen: 0.95 dBm

Klantenondersteuning

Voor ondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld model en probleem; voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.


Belangrijke veiligheidsinformatie

Veilig gebruik: Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

Veilig opladen: Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid: Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer: Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Houd rekening met de opgegeven IPX4-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

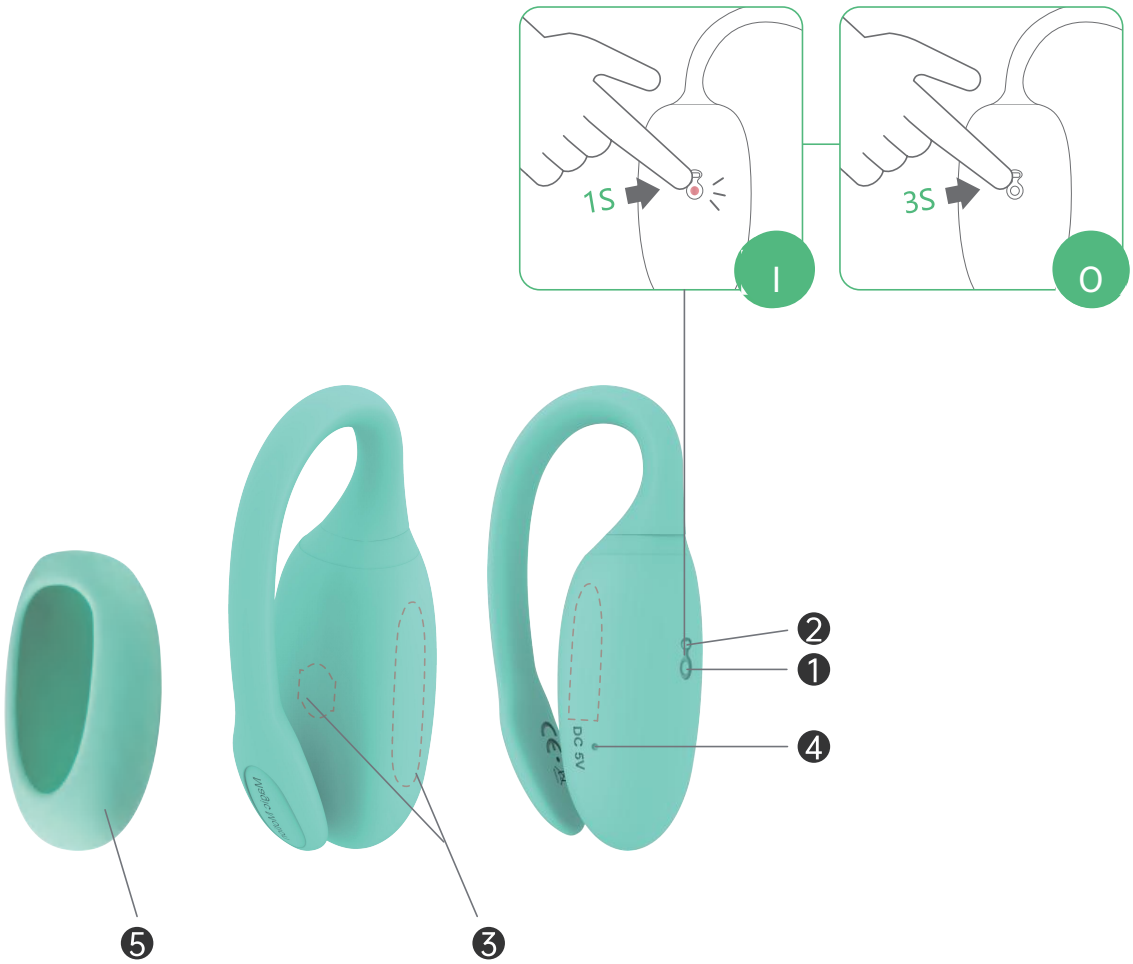

1 Encendido/apagado

ENCENDIDO · 1 s

APAGADO · 3 s


2 Luz LED


3 Zonas del sensor táctil

4 Puerto de carga

5 Funda Rejuve

①

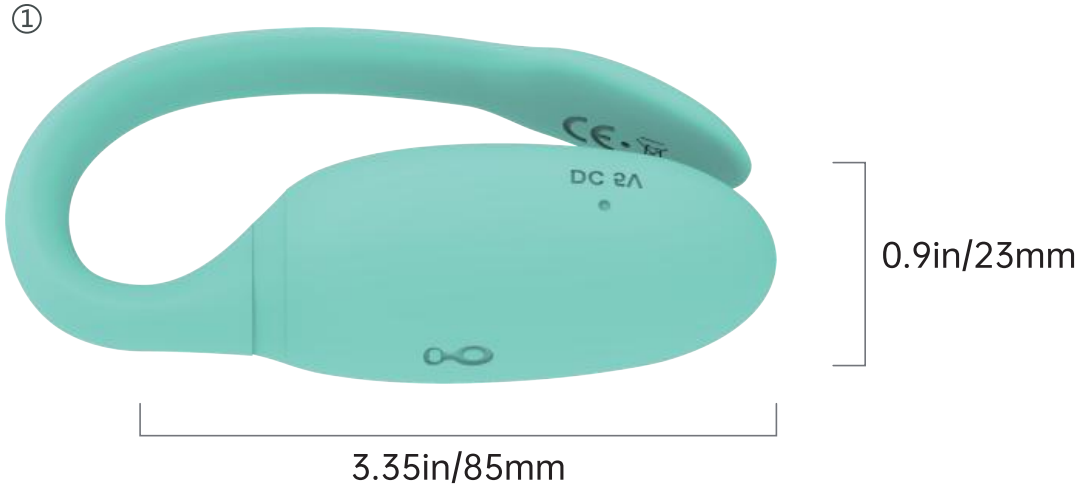

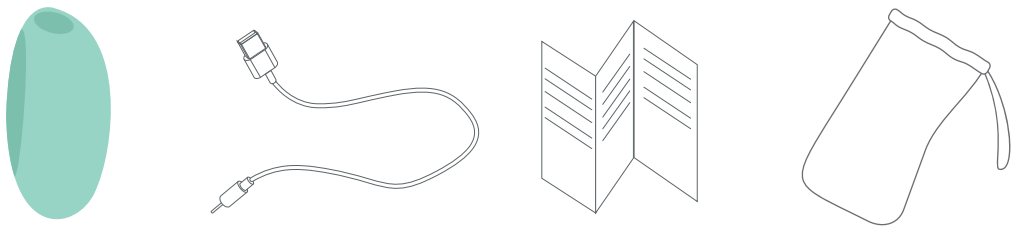

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Funda Rejuve

3 Cable de carga

4 Guía de usuario


5 Bolsa de almacenamiento

Preparación para el uso

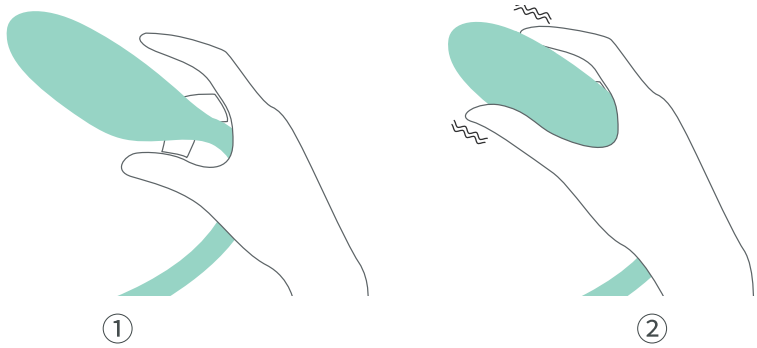

Toque el sensor

Localice los músculos del suelo pélvico

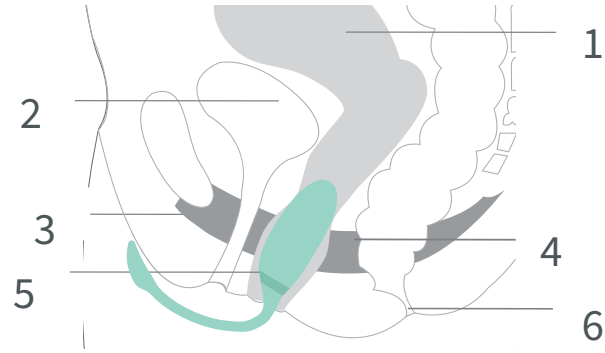

1 Útero

2 Vejiga

3 Uretra

4 Músculos del suelo pélvico


5 Vagina

6 Ano




Lubricante a base de agua

Uso de Kegel Rejuve con la funda Rejuve

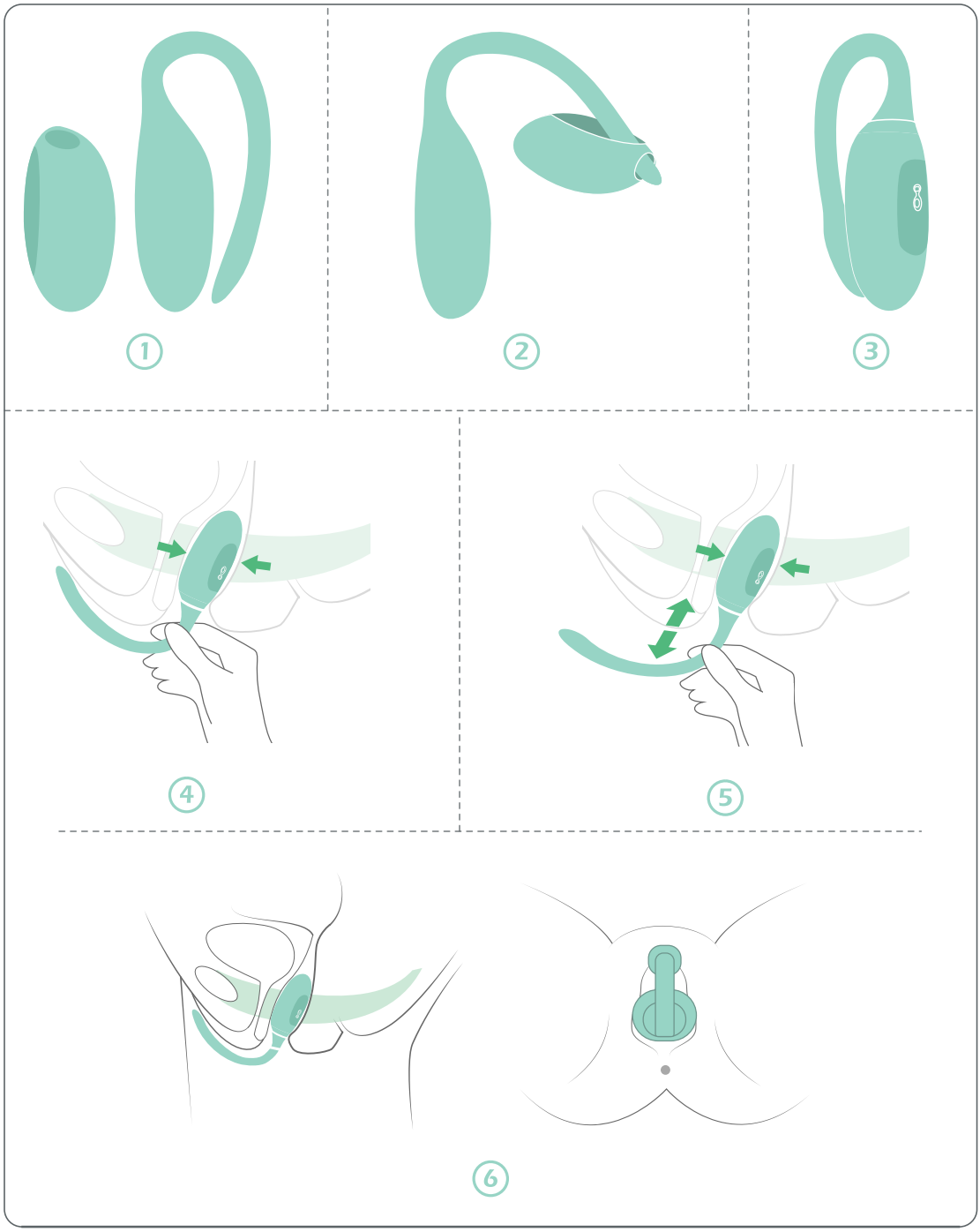

Modo de entrenamiento con retroalimentación de fuerza

ENCENDIDO · 1 s

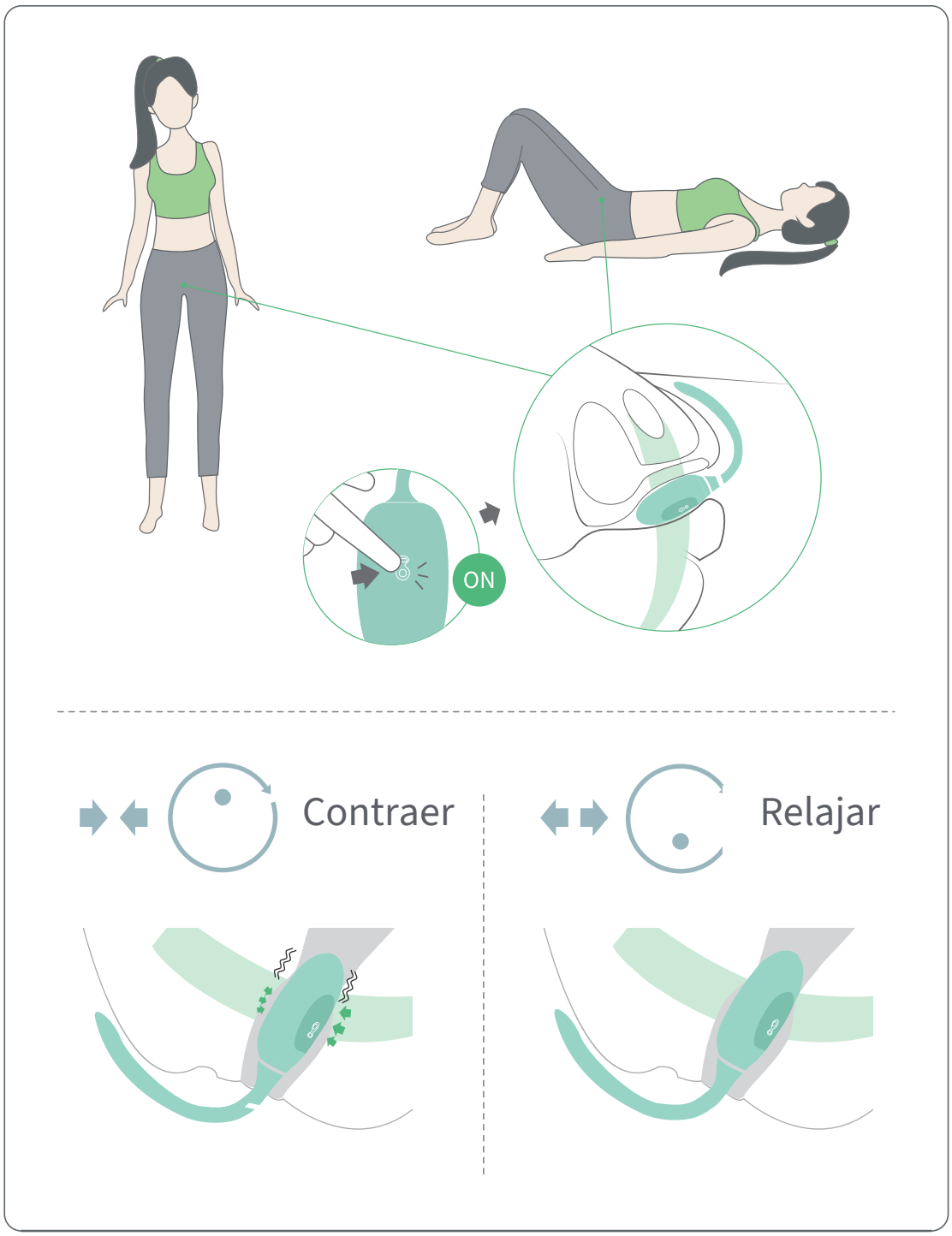

Modo de entrenamiento con smartphone

Compatible con smartphones y tabletas iOS y Android

1 Descargar la aplicación



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Conexión



Carga

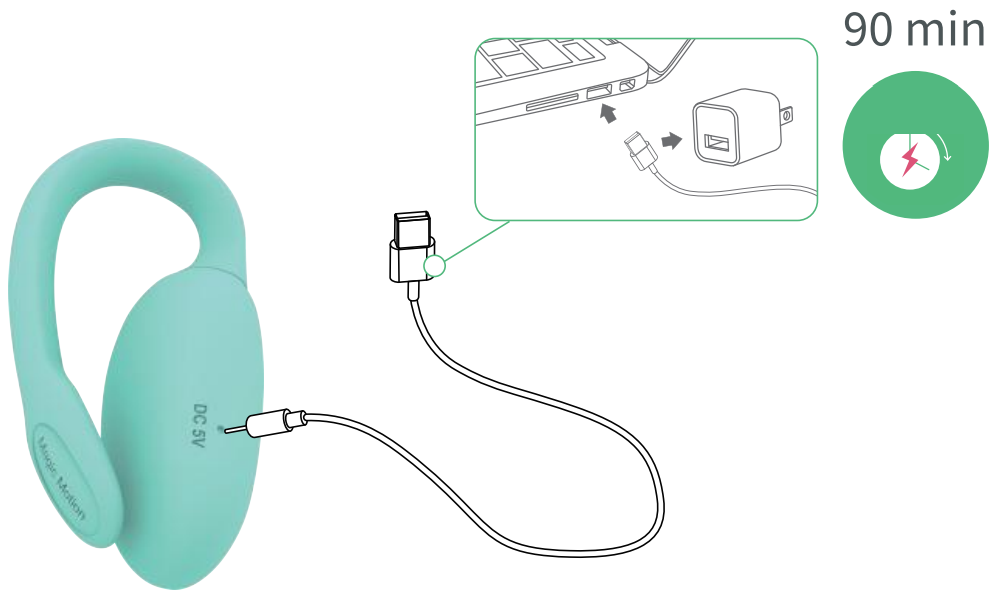

Mantenimiento



18+: solo para adultos

Especificación

Modelo: SMV10

Tamaño: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Material: silicona / ABS

Voltaje de carga: DC 5V

Corriente máxima de carga: 300mA

Peso: 27g

Tiempo de funcionamiento: unos 150 minutos

Tiempo de carga: 90 minutos

Clasificación a prueba de agua: IPX4

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de transmisión de RF: 0.95 dBm

Atención al cliente

Para asistencia o garantía: customercare@magicsmotion.com.
Indique el modelo y el problema; adjunte el comprobante de compra para la garantía.


Información importante de seguridad

Uso seguro: Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.

Carga segura: Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería: No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación: Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Respetar la clasificación IPX4 indicada; no se aplica al cable de carga ni a la fuente de alimentación. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.

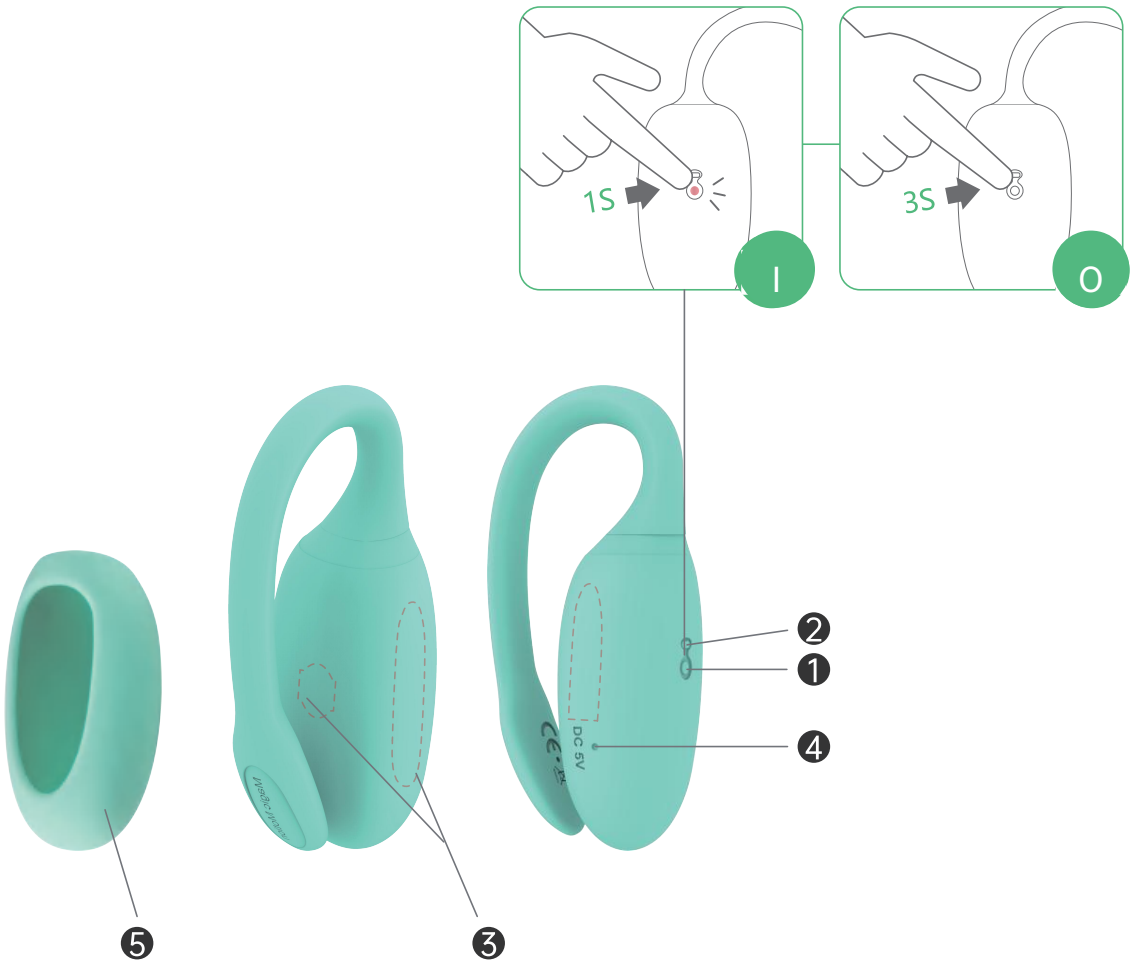

1 Ligar/desligar

LIGADO · 1 s

DESLIGADO · 3 s


2 Luz LED


3 Áreas do sensor tátil

4 Porta de carregamento

5 Capa Rejuve

①

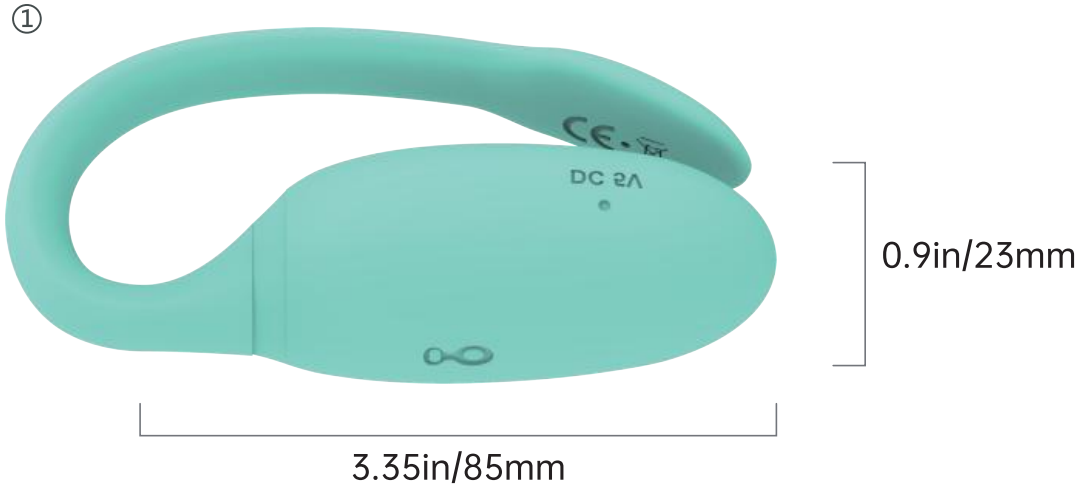

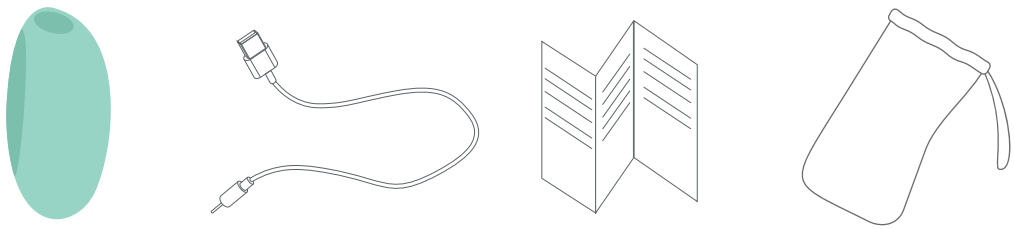

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Capa Rejuve

3 Cabo de carregamento

4 Guia do utilizador


5 Bolsa de arrumação

Preparação para utilização

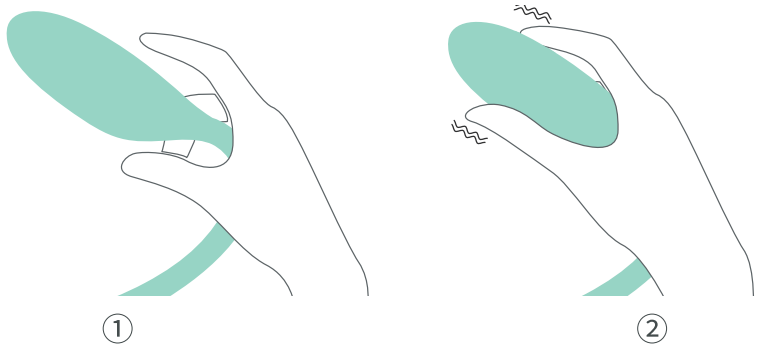

Toque no sensor

Localize os músculos do pavimento pélvico

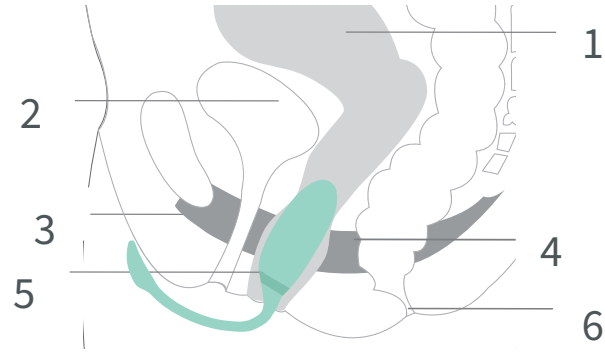

1 Útero

2 Bexiga

3 Uretra

4 Músculos do pavimento pélvico


5 Vagina

6 Ânus




Lubrificante à base de água

Utilizar Kegel Rejuve com a capa Rejuve

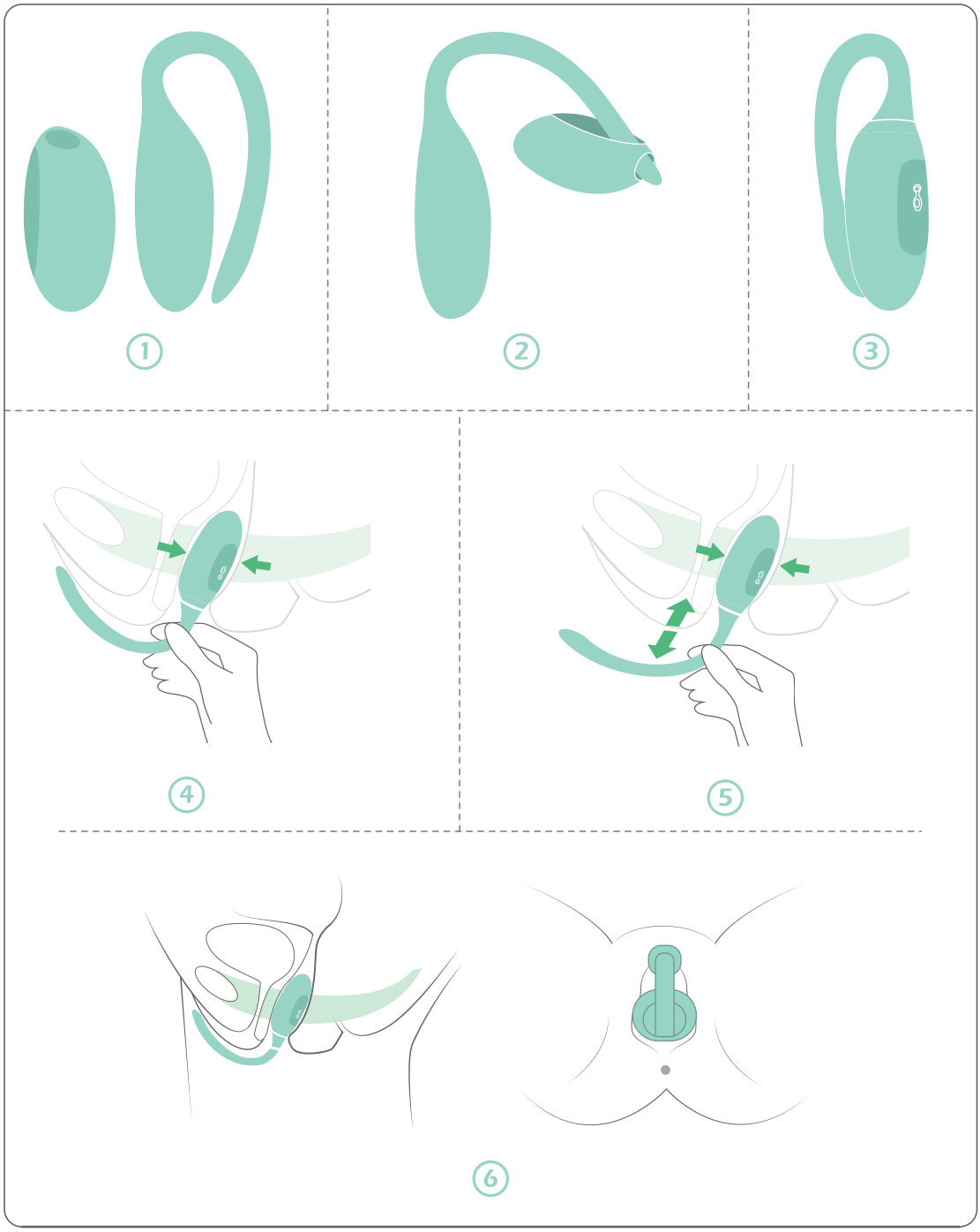

Modo de treino com retorno de força

LIGADO · 1 s

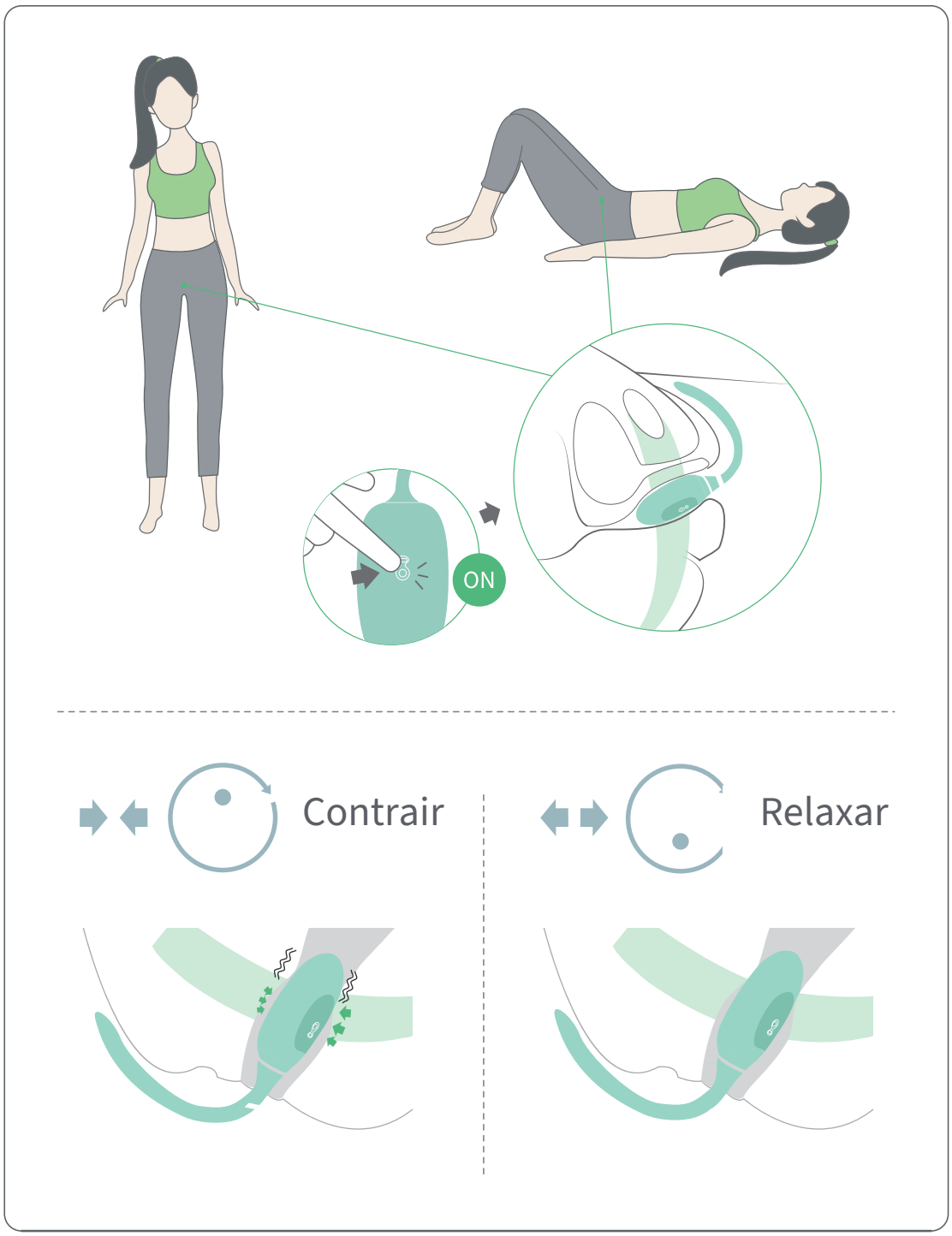

Modo de treino com smartphone

Compatível com smartphones e tablets iOS e Android

1 Descarregar a aplicação



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play


2 Ligação



Carregamento

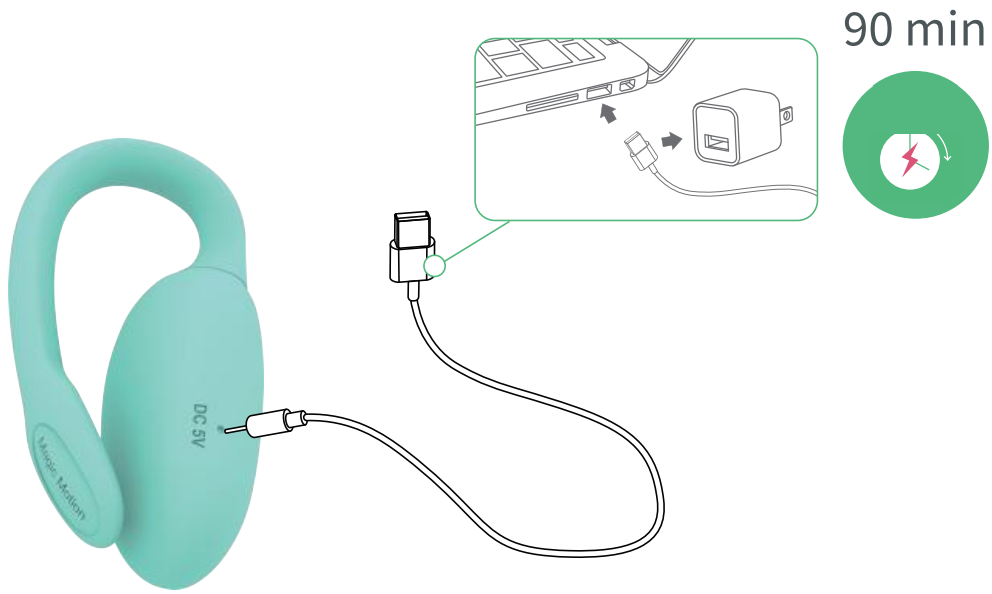

Manutenção

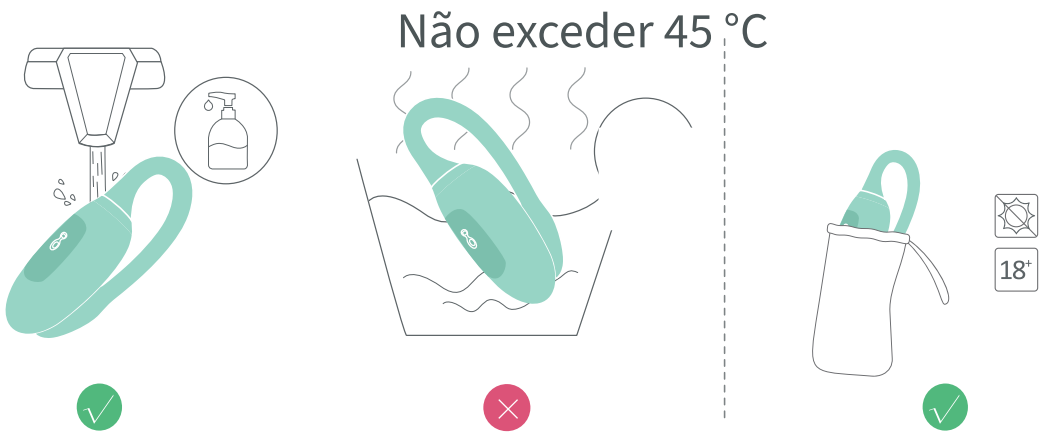

18+: apenas para adultos

Especificação

Modelo: SMV10

Tamanho: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Material: silicone / ABS

Tensão de carregamento: DC 5 V

Corrente máxima de carregamento: 300mA

O tempo de carga: 90 minutos

Tempo de funcionamento: cerca de 150 minutos

Classificação à prova d'água: IPX4

Peso: 27g

Banda de frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz

Potência máxima de transmissão de RF: 0.95 dBm

Apoio ao cliente

Para assistência ou garantia: customercare@magicsmotion.com. Indique o modelo e o problema; junte o comprovativo de compra para a garantia.


Informações de segurança importantes

Utilização segura: Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.

Carregamento seguro: Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria: Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.

Limpeza, armazenamento e eliminação: Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Respeitar a classificação IPX4 indicada; não se aplica ao cabo de carregamento nem à fonte de alimentação. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.

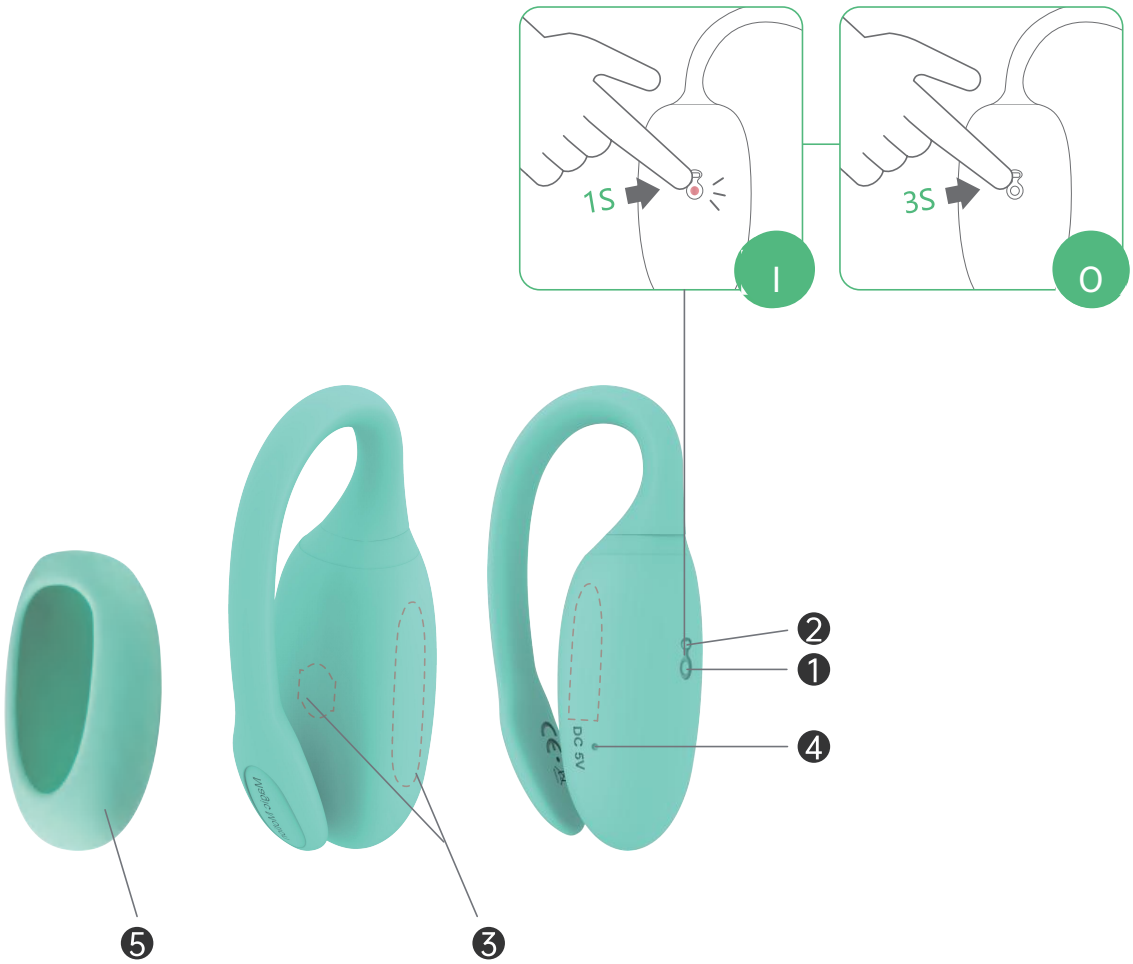

1 Accensione/spegnimento

ACCESO · 1 s SPENTO · 3 s


2 Spia LED


3 Aree del sensore tattile

4 Porta di ricarica

5 Copertura Rejuve

①

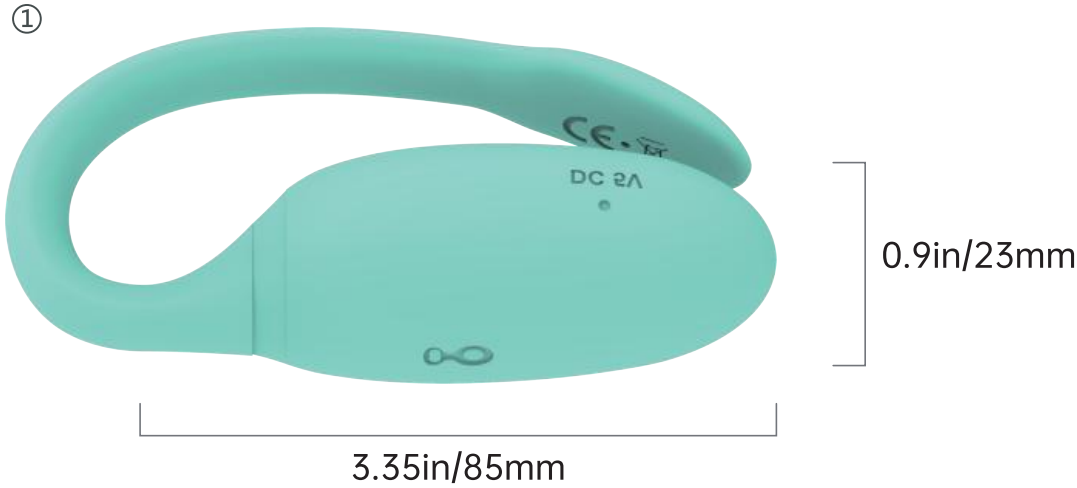

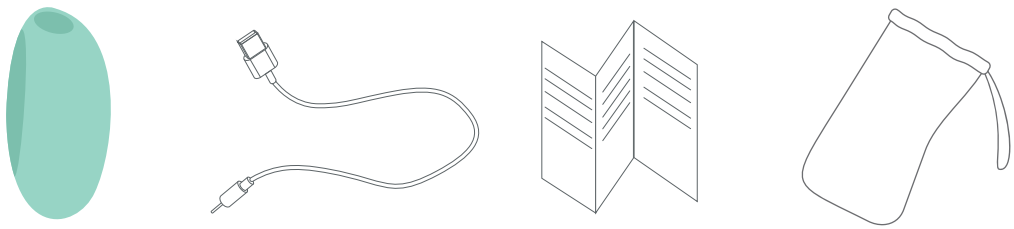

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Copertura Rejuve

3 Cavo di ricarica

4 Guida utente


5 Custodia

Preparazione all’uso

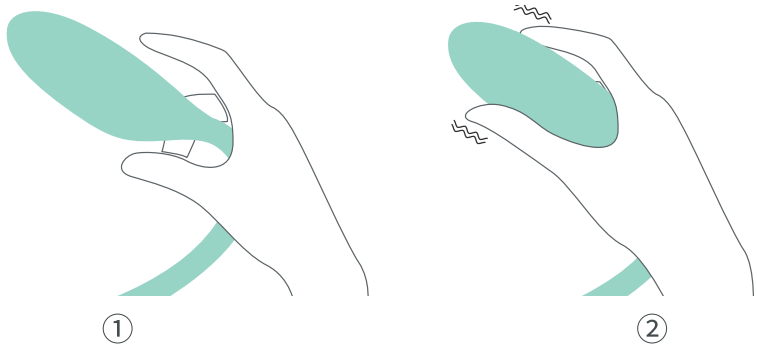

Toccare il sensore

Individuare i muscoli del pavimento pelvico

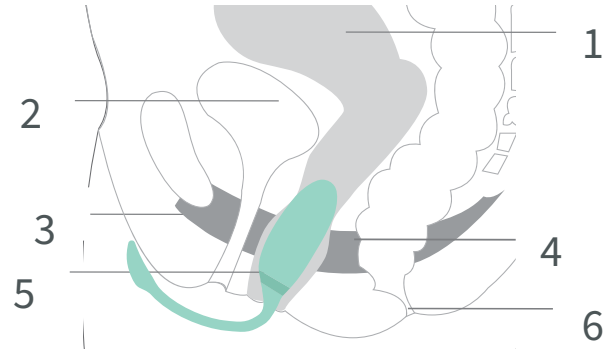

1 Utero

2 Vescica

3 Uretra

4 Muscoli del pavimento pelvico


5 Vagina

6 Ano




Lubrificante a base d’acqua

Uso di Kegel Rejuve con la copertura Rejuve

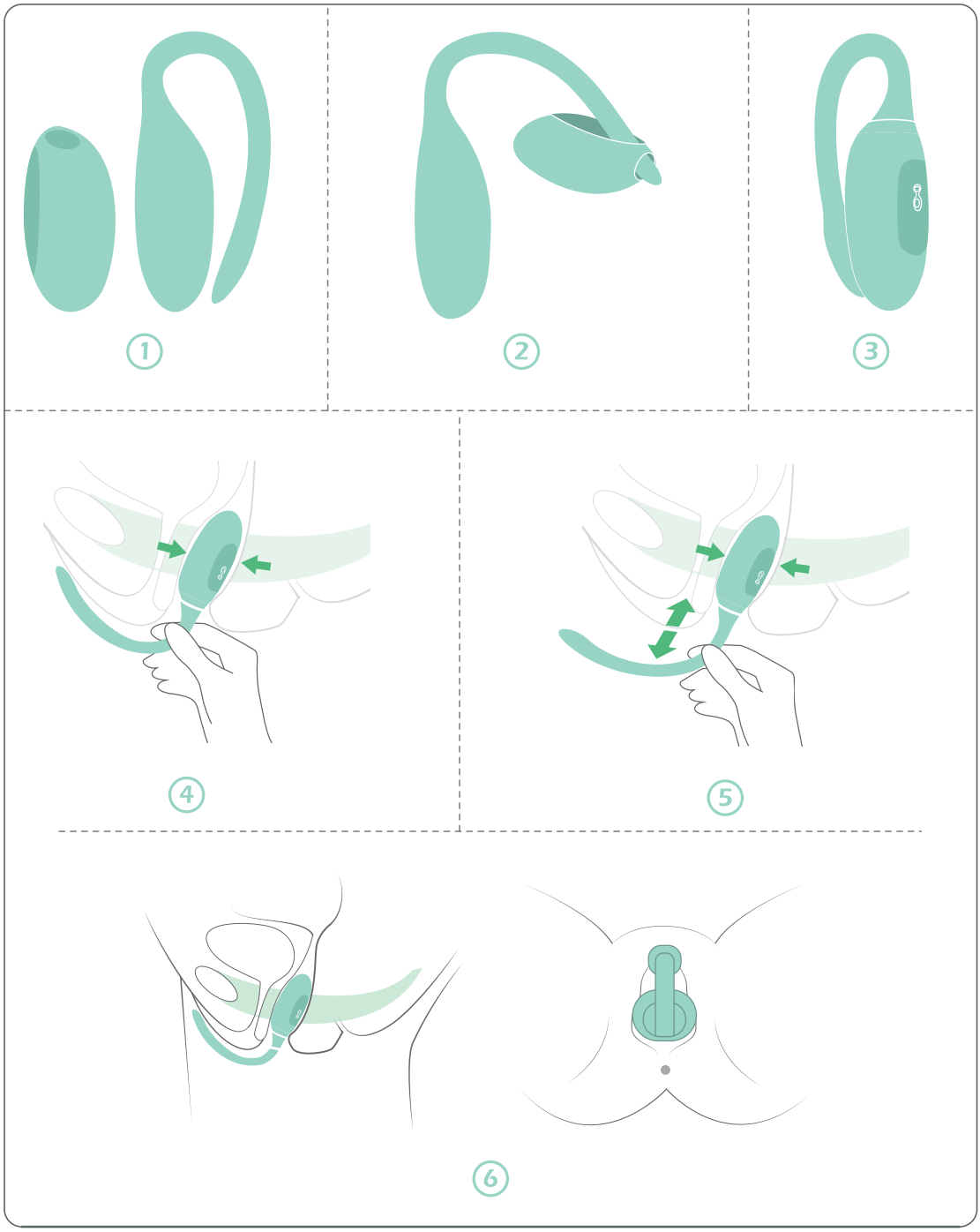

Modalità di allenamento con ritorno di forza

ACCESO · 1 s

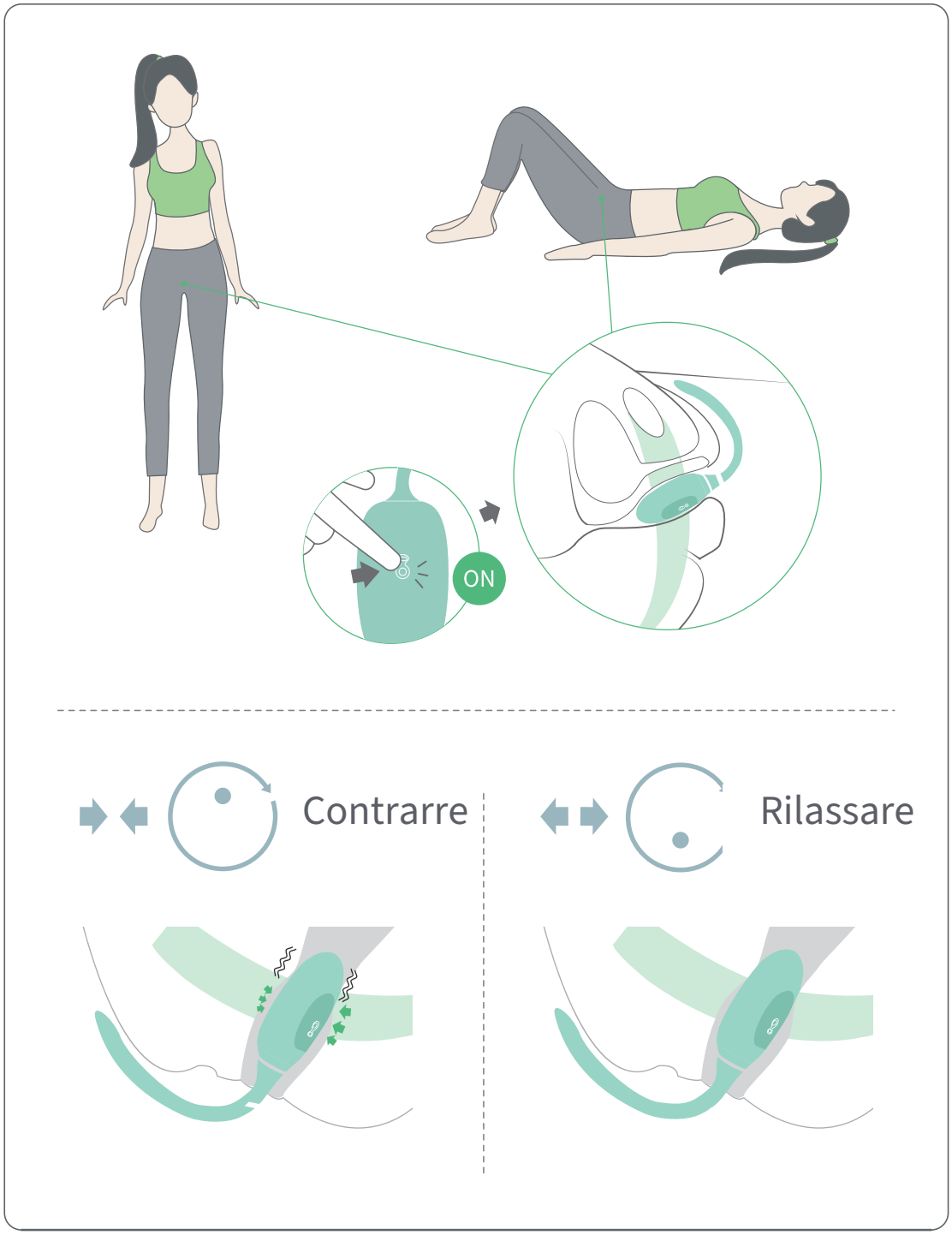

Modalità di allenamento con smartphone

Compatibile con smartphone e tablet iOS e Android

1 Scaricare l'app



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Connessione



Ricarica

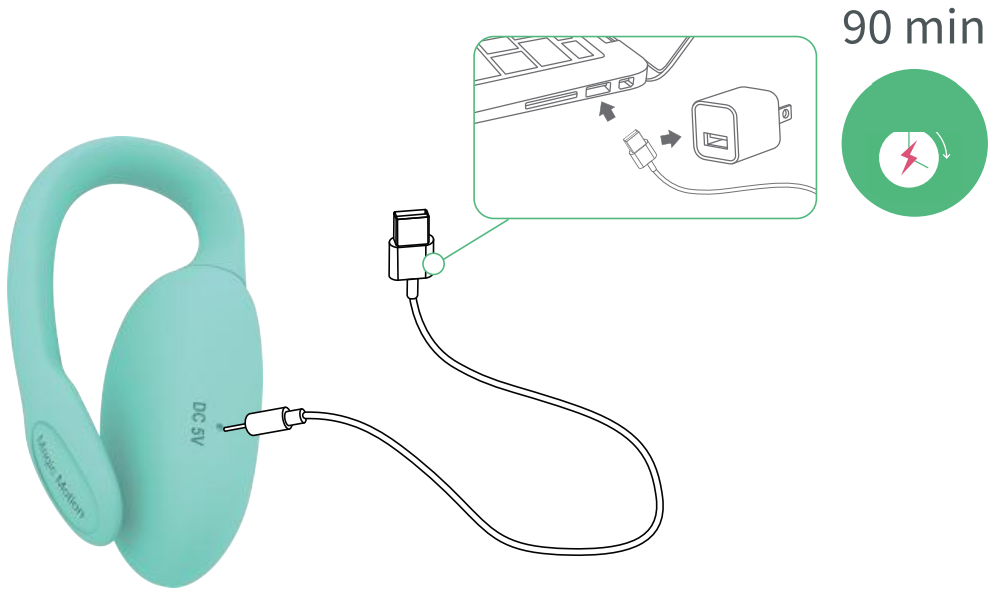

Manutenzione



18+: solo per adulti

Specificazione

Modello: SMV10

Dimensioni: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Materiale: silicone / ABS

Tensione di carica: DC 5 V.

Corrente di carica massima: 300mA

Peso: 27 g

Tempo di funzionamento: 150 minuti

Tempo di ricarica: 90 minuti

Grado di impermeabilità: IPX4

Banda di frequenza operativa: 2402–2480 MHz

Massima potenza di trasmissione RF: 0.95 dBm

Assistenza clienti

Per assistenza o garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare modello e problema; allegare la prova d’acquisto per la garanzia.


Informazioni importanti sulla sicurezza

Uso sicuro: Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.

Ricarica sicura: Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria: Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.

Pulizia, conservazione e smaltimento: Pulire prima e dopo l'uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Rispettare il grado IPX4 indicato; non si applica al cavo di ricarica né all'alimentatore. Conservare all'asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.

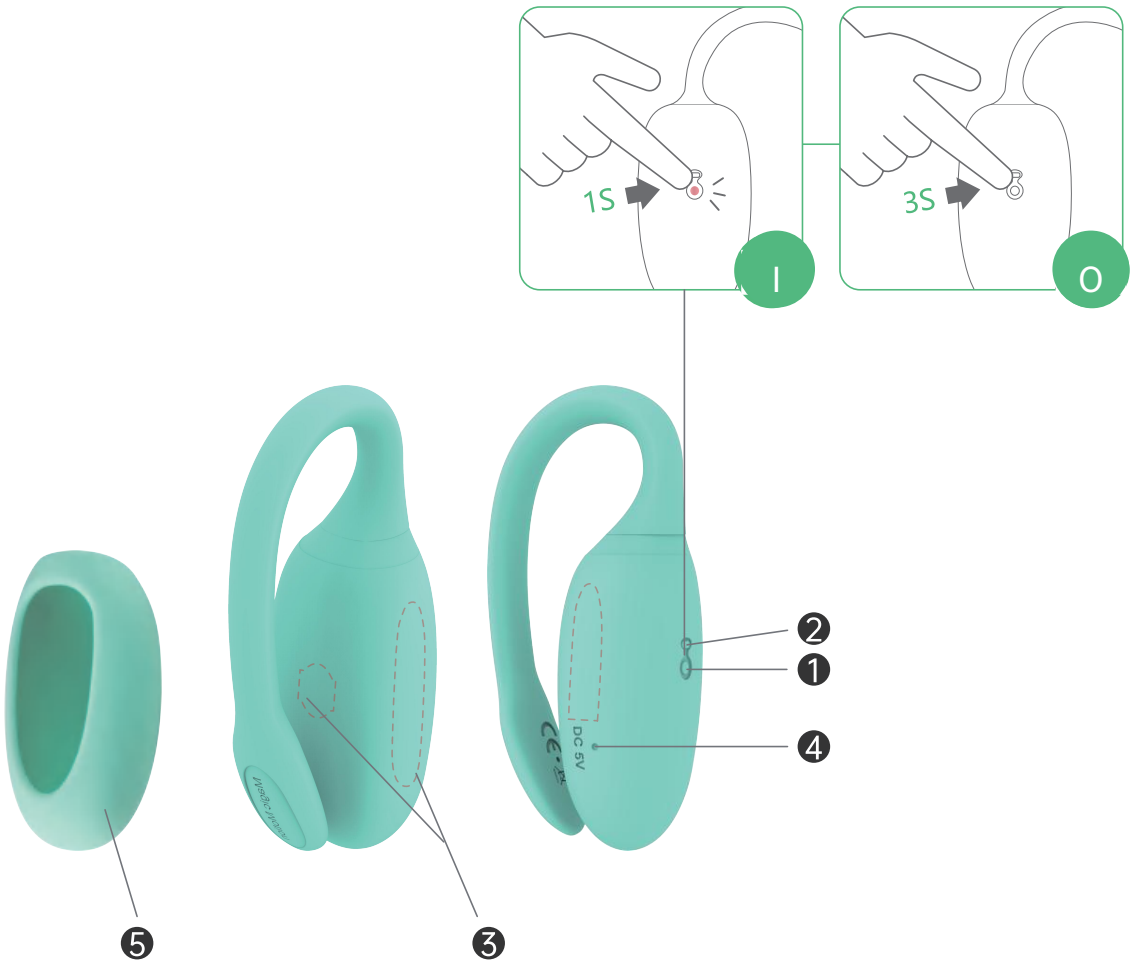

1 På/av

PÅ · 1 s

AV · 3 s


2 LED-lampa


3 Pekkänsliga sensorområden

4 Laddningsport

5 Rejuve-skydd

①

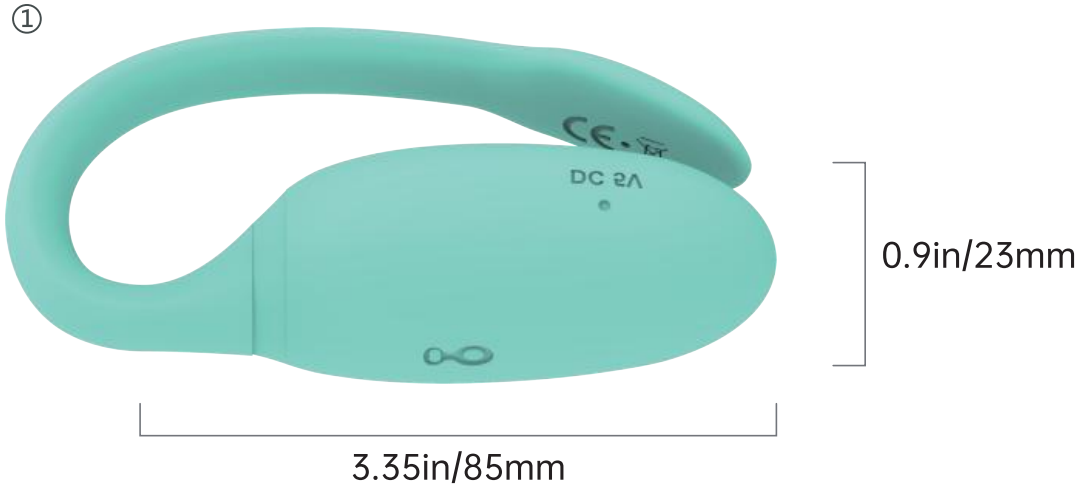

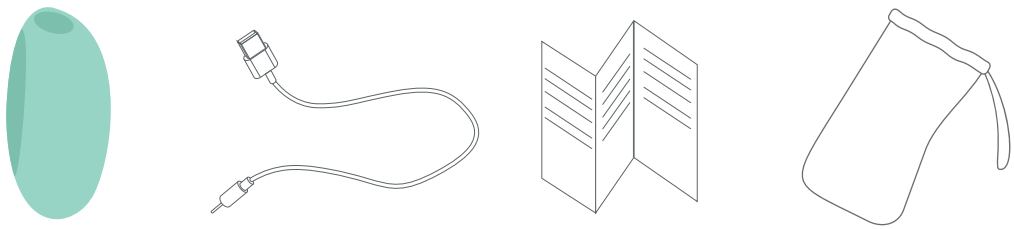

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Rejuve-skydd

3 Laddkabel

4 Bruksanvisning


5 Förvaringspåse

Förberedelser för användning

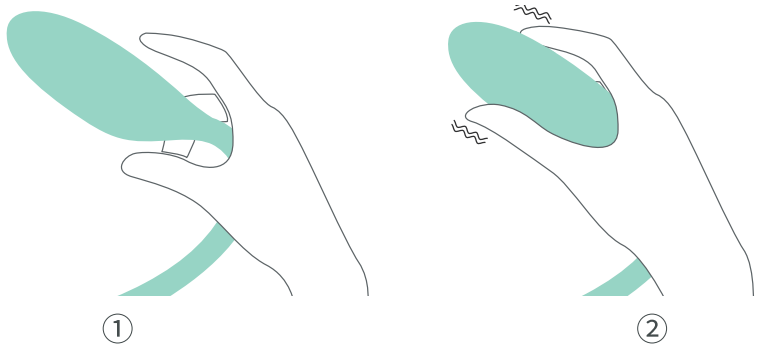

Rör vid sensorn

Hitta bäckenbottenmusklerna

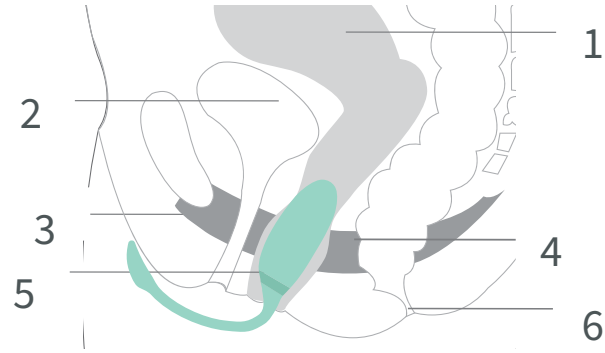

1 Livmoder

2 Urinblåsa

3 Urinrör

4 Bäckenbottenmuskler


5 Slida

6 Anus




Vattenbaserat glidmedel

Använda Kegel Rejuve med Rejuve-skyddet

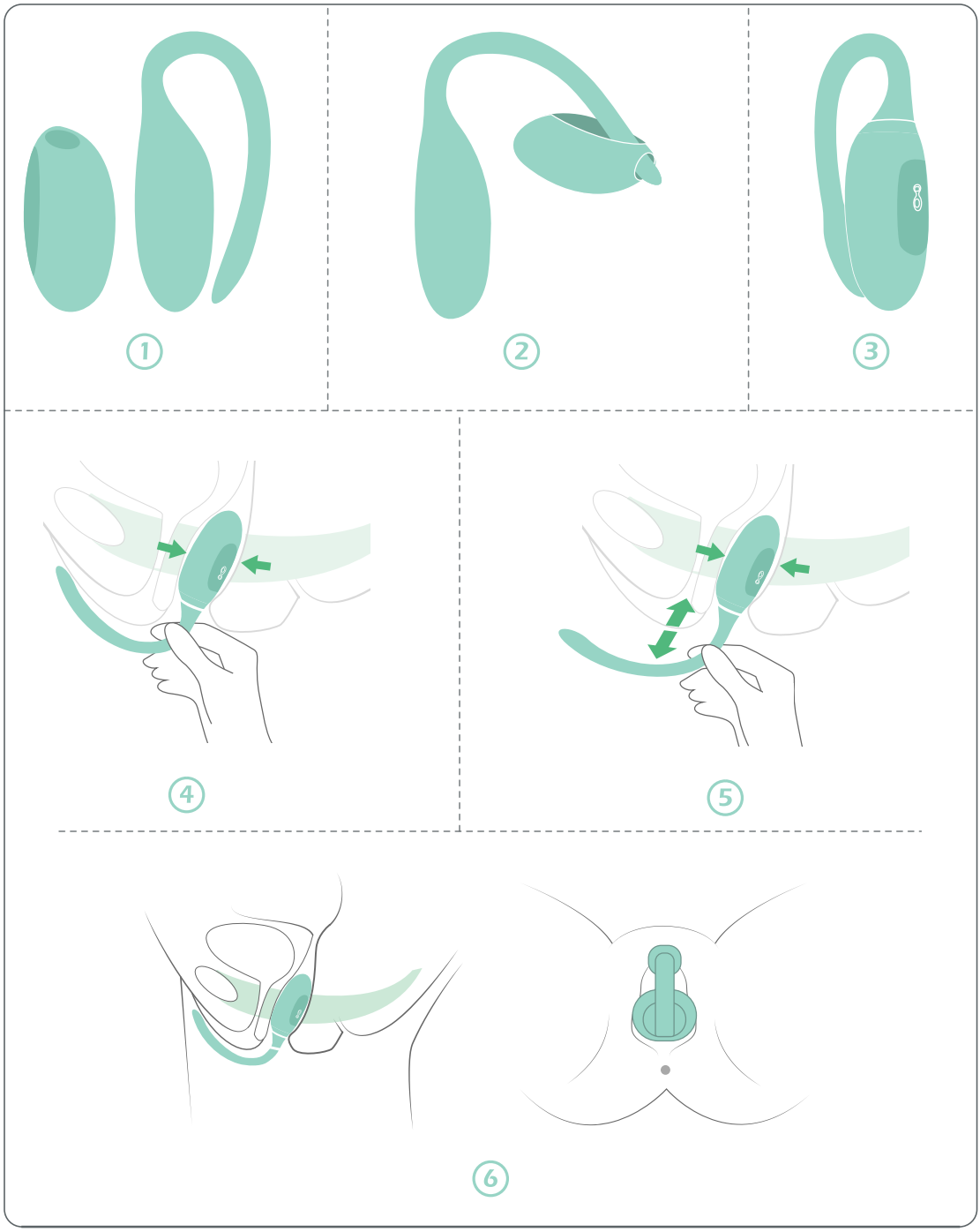

Träningsläge med kraftåterkoppling

PÅ · 1 s

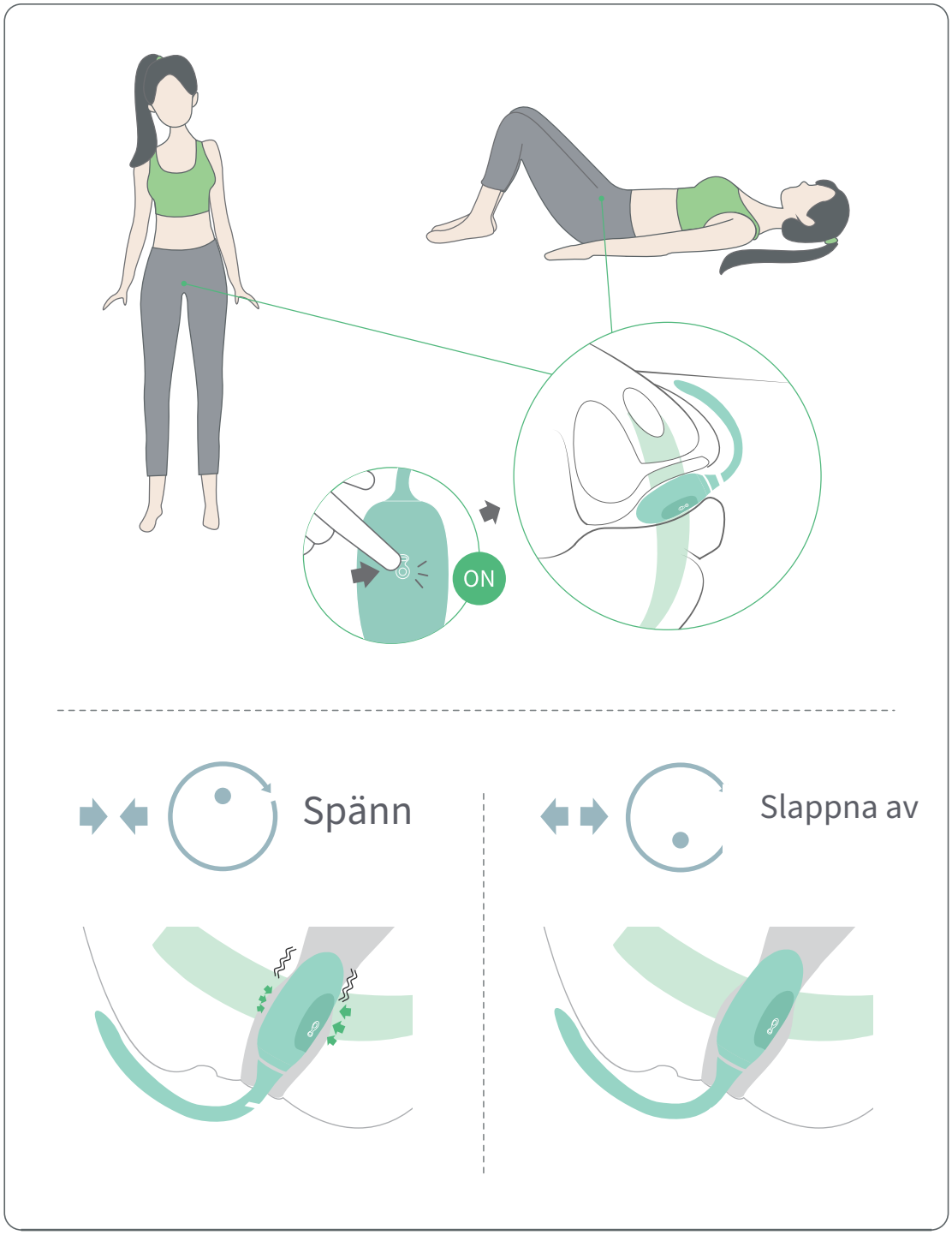

Träningsläge med smartphone

För smartphones och surfplattor med iOS eller Android

1 Ladda ned appen



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play


2 Anslutning



Laddning

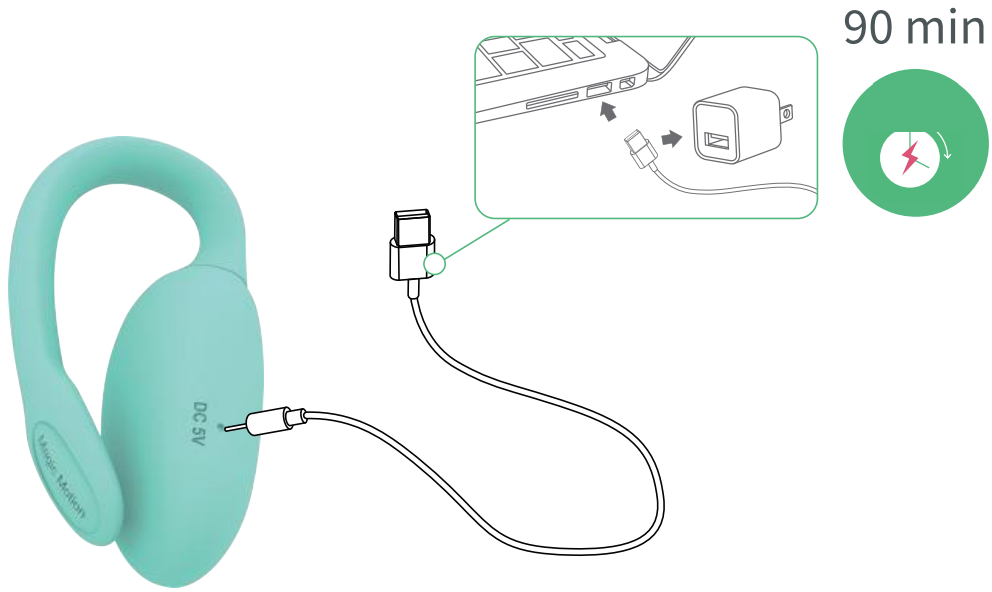

Skötsel

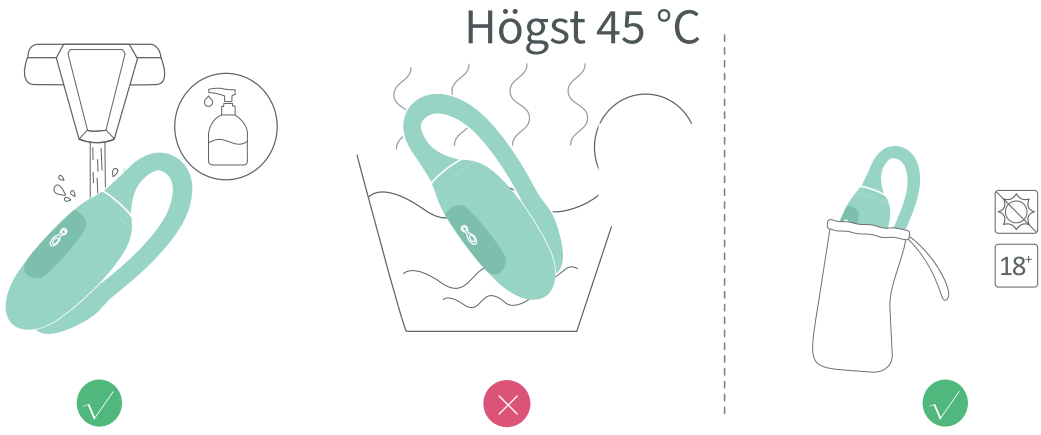

18+: endast för vuxna

Specifikationer

Modell: SMV10

Storlek: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Material: silikon / ABS

Laddspänning: DC 5V

Maximal laddström: 300mA

Vikt: 27g

Drifttid: 150 minuter

Laddningstid: 90 minuter

Vattentäthet: IPX4

Driftfrekvensband: 2402–2480 MHz

Maximal RF-sändareffekt: 0.95 dBm

Kundsupport

För support eller garanti: customercare@magicsmotion.com. Ange modell och problem; bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.


Viktig säkerhetsinformation

Säker användning: Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.

Säker laddning: Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet: Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.

Rengöring, förvaring och avfallshantering: Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Följ den angivna IPX4-klassningen; den gäller inte laddkabeln eller nätadaptern. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.

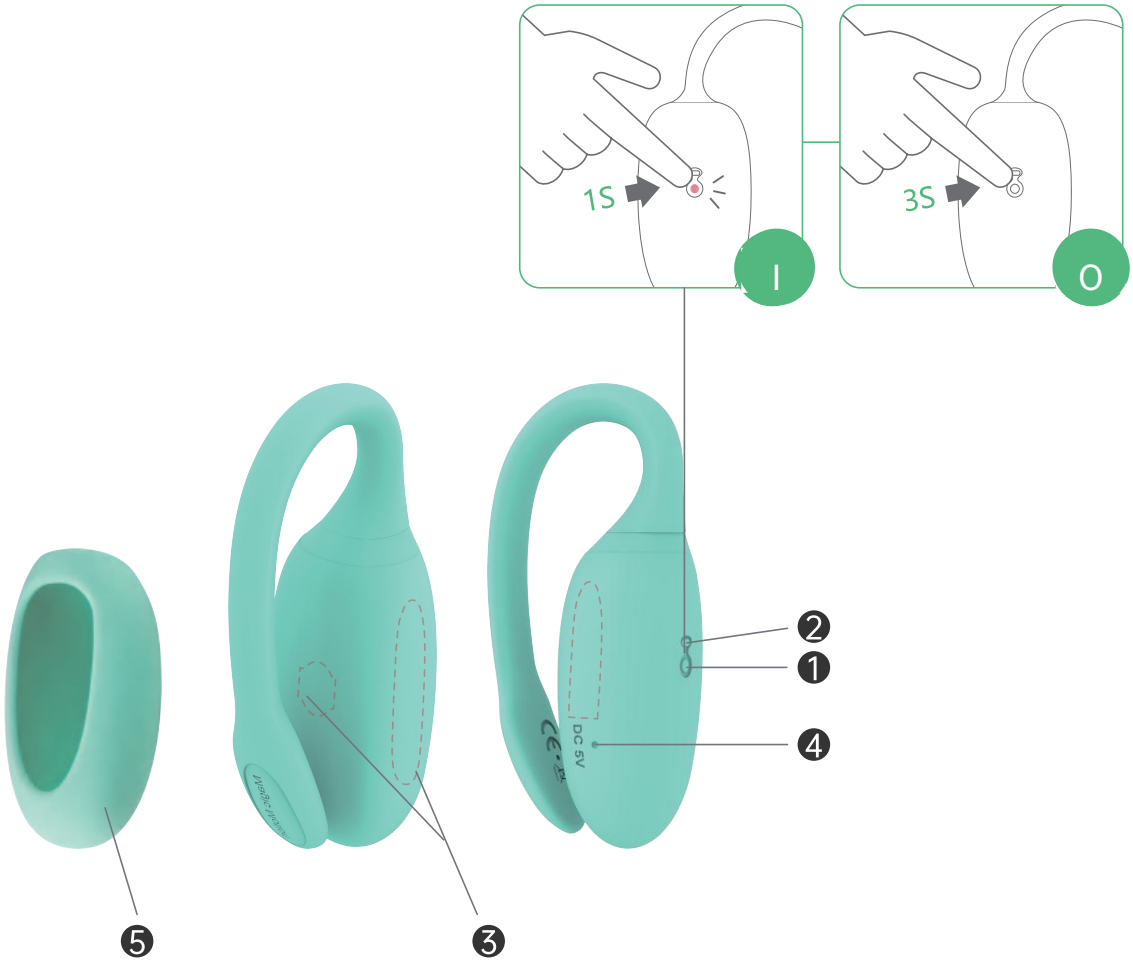

1 Włączanie/wyłączanie

WŁ. · 1 s

WYŁ. · 3 s


2 Dioda LED


3 Obszary czujnika dotykowego

4 Port ładowania

5 Nakładka Rejuve

①

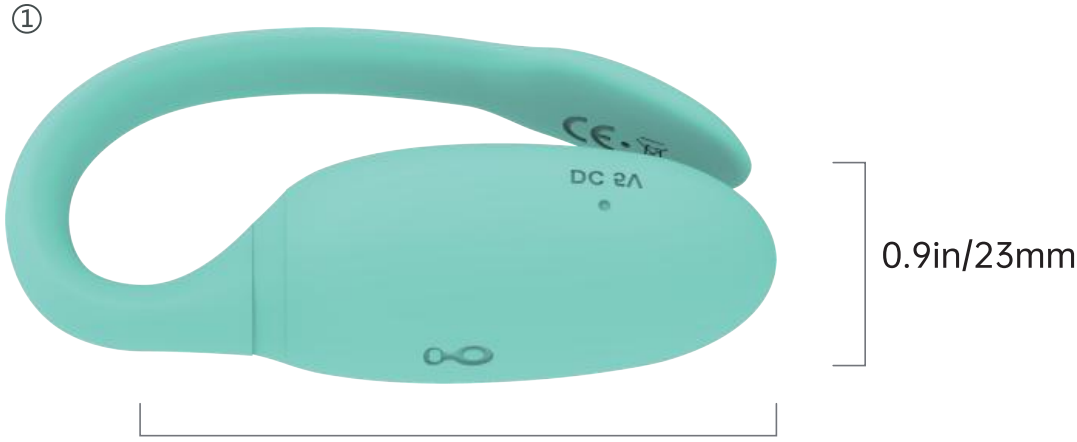

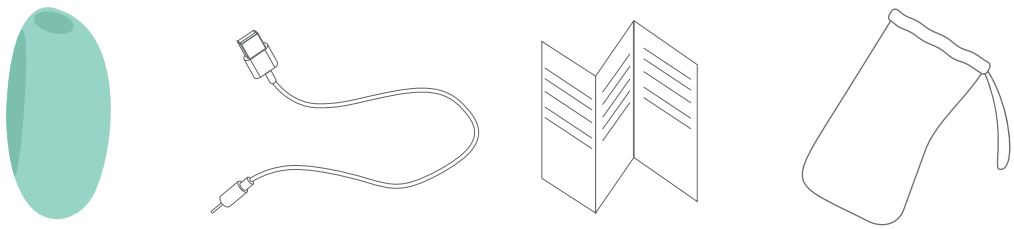

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Nakładka Rejuve

3 Kabel ładujący

4 Instrukcja obsługi

5 Woreczek do przechowywania

Przygotowanie do użycia

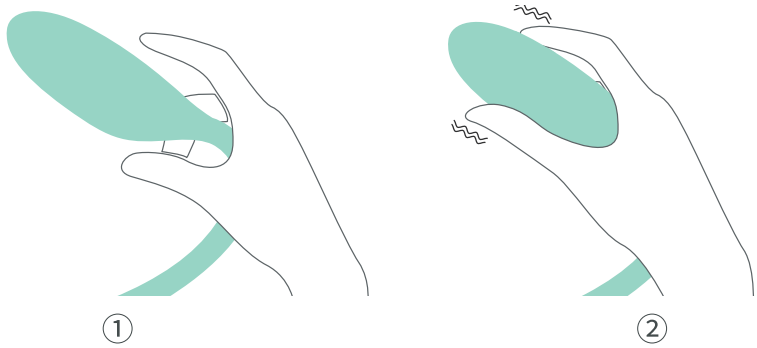

Dotknij czujnika

Znajdź mięśnie dna miednicy



1 Macica

2 Pęcherz moczowy

3 Cewka moczowa

4 Mięśnie dna miednicy


5 Pochwa

6 Odbyt




Lubrykant na bazie wody

Używanie Kegel Rejuve z nakładką Rejuve

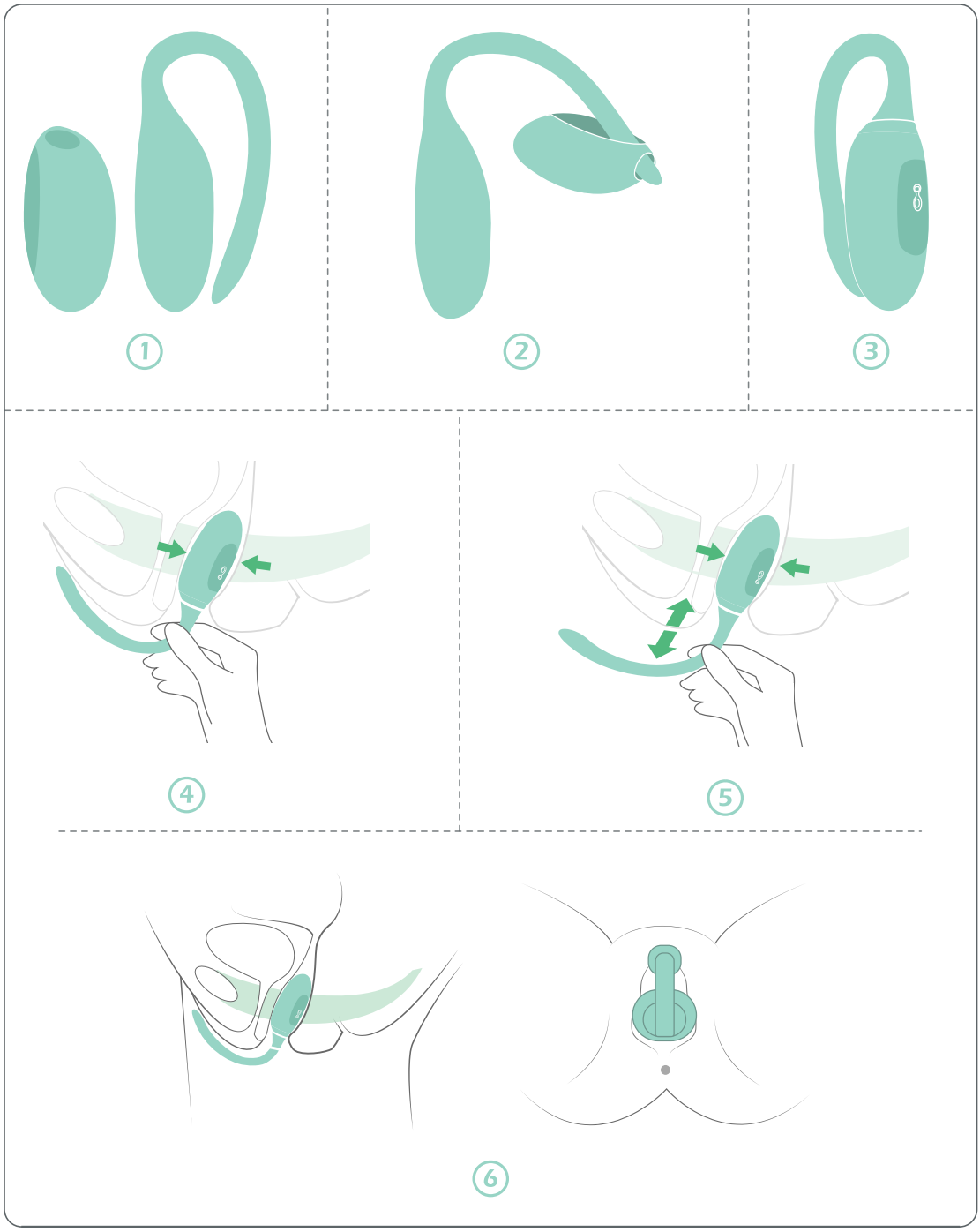

Tryb treningu ze sprzężeniem zwrotnym siły

Wł. · 1 s

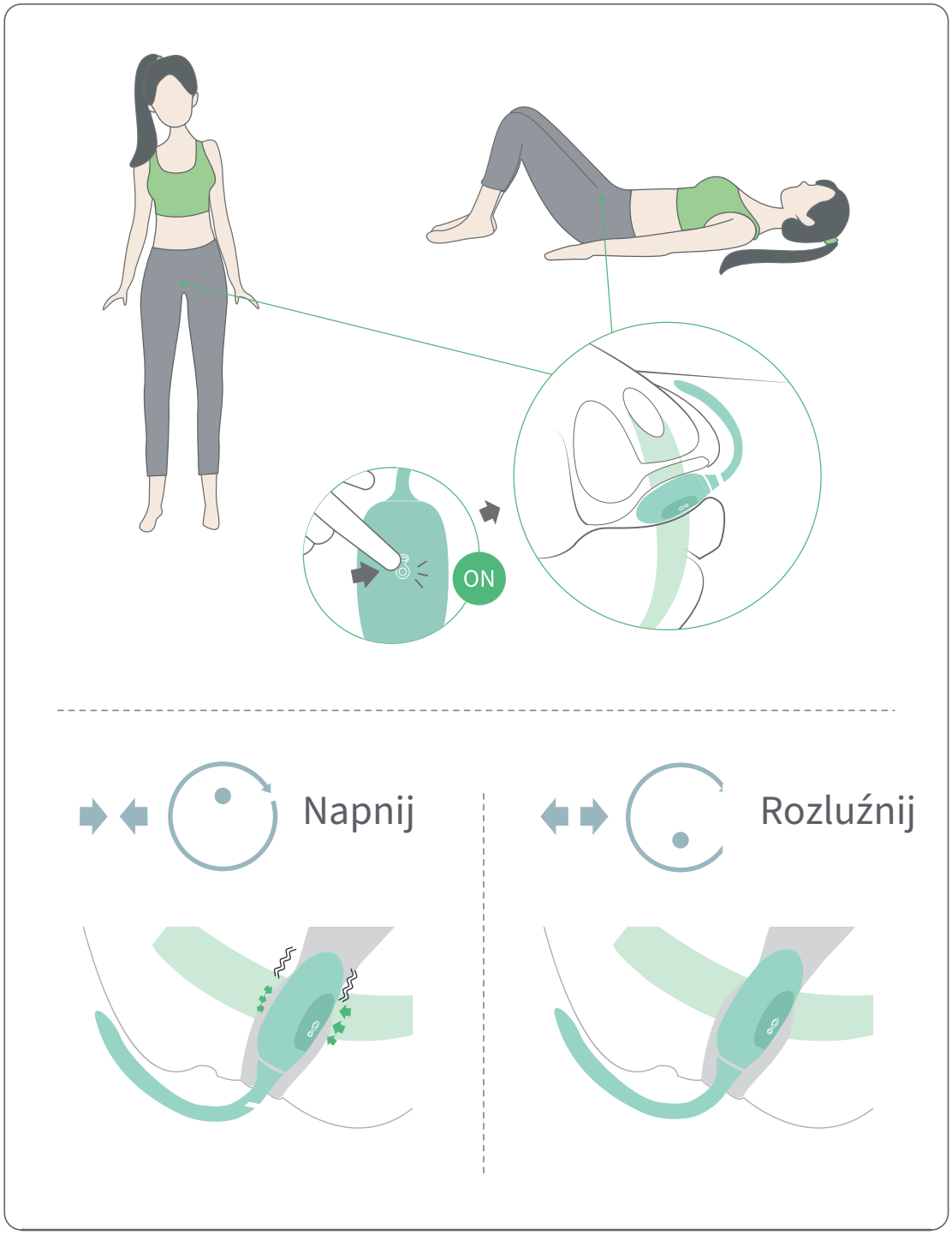

Tryb treningu ze smartfonem

Obsługuje smartfony i tablety z systemem iOS i Android

1 Pobierz aplikację

Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Połączenie



Ładowanie

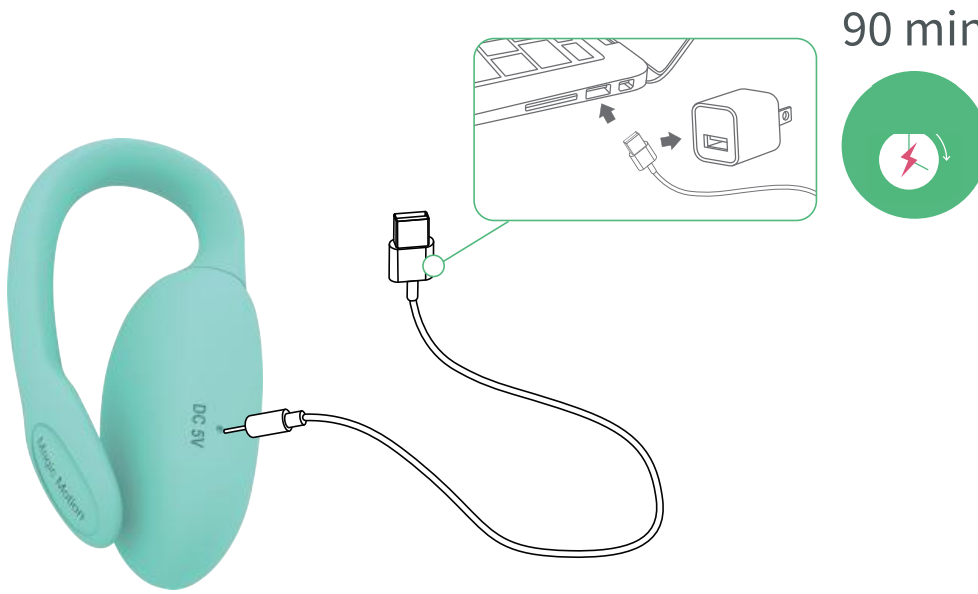

Konserwacja



18+: tylko dla dorosłych

Specyfikacja

Model: SMV10

Rozmiar: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Materiał: silikon / ABS

Napięcie ładowania: DC 5V

Maksymalny prąd ładowania: 300mA

Waga: 27g

Czas pracy: 150 minut

Czas ładowania: 90 minut

Wodoodporność: IPX4

Pasmo częstotliwości roboczej: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc nadawcza RF: 0.95 dBm

Obsługa klienta

Pomoc lub gwarancja: customercare@magicsmotion.com. Podaj model i problem; przy gwarancji dołącz dowód zakupu.


Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczne użytkowanie: Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.

Bezpieczne ładowanie: Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora: Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.

Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja: Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przestrzegać podanej klasy IPX4; nie dotyczy ona kabla ładującego ani zasilacza. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.

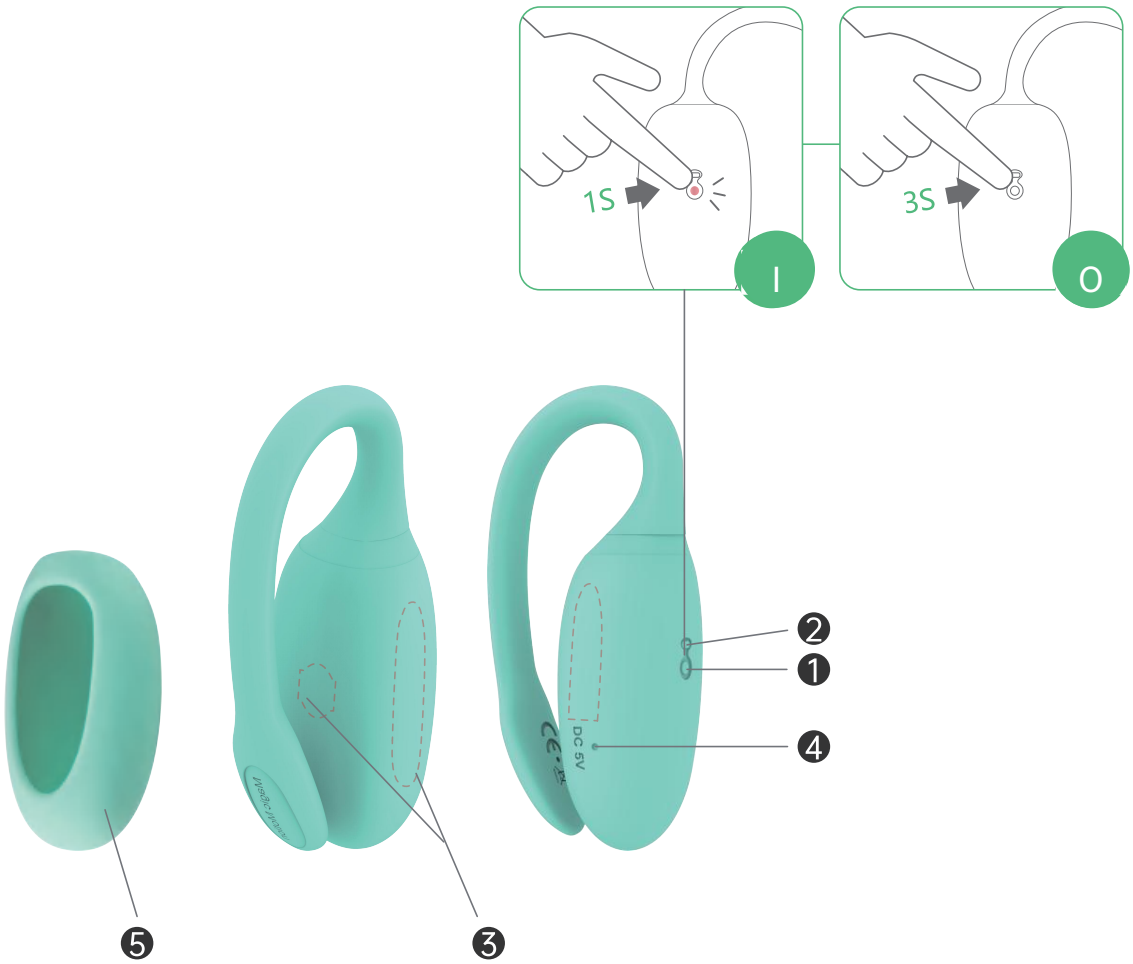

1 Zapnutí/vypnutí

ZAP. · 1 s

VYP. · 3 s


2 LED kontrolka


3 Oblasti dotykového senzoru

4 Nabíjecí port

5 Kryt Rejuve

①

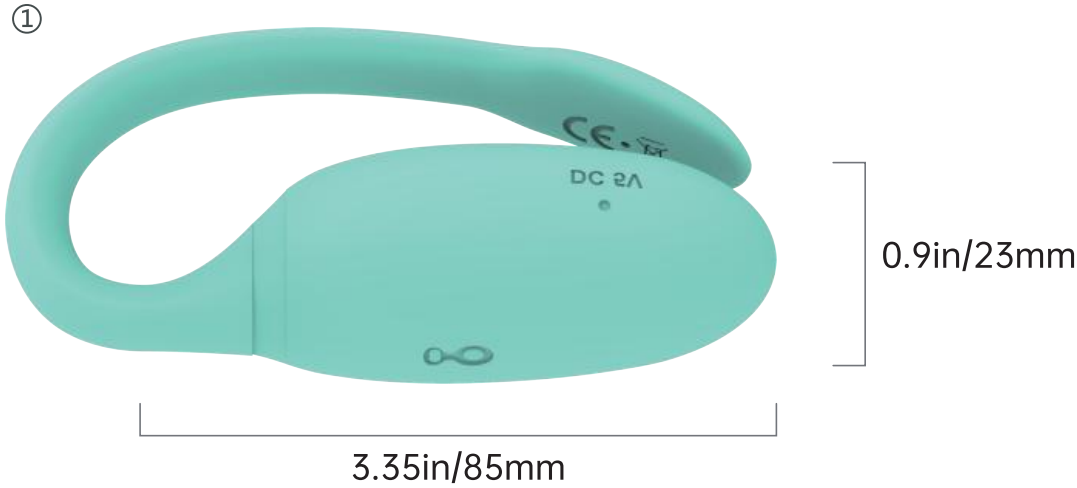

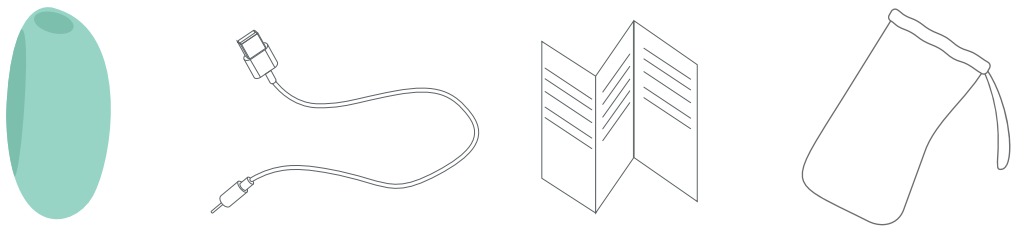

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Kryt Rejuve

3 Nabíjecí kabel

4 Uživatelská příručka


5 Úložný sáček

Příprava k použití

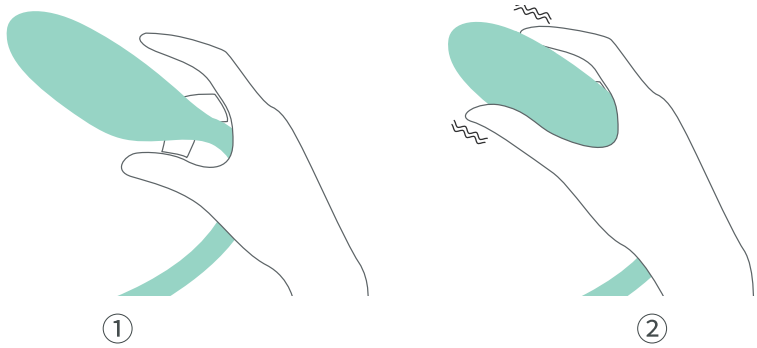

Dotkněte se senzoru

Najděte svaly pánevního dna

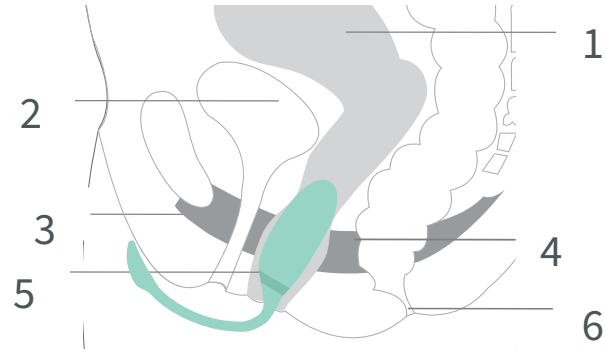

1 Děloha

2 Močový měchýř

3 Močová trubice

4 Svaly pánevního dna


5 Pochva

6 Řitní otvor




Lubrikant na vodní bázi

Použití Kegel Rejuve s krytem Rejuve

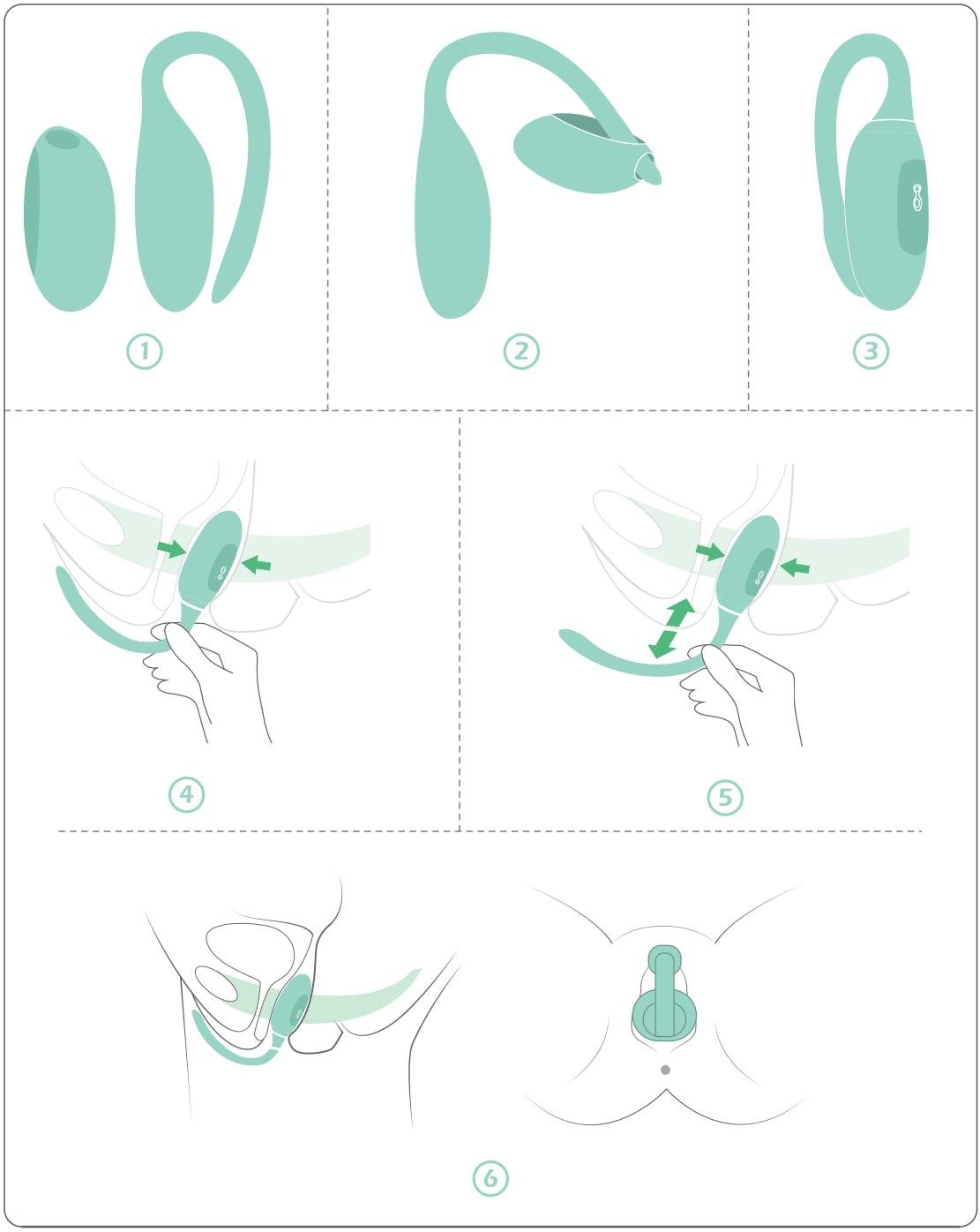

Režim tréninku se silovou zpětnou vazbou

ZAP. · 1 s

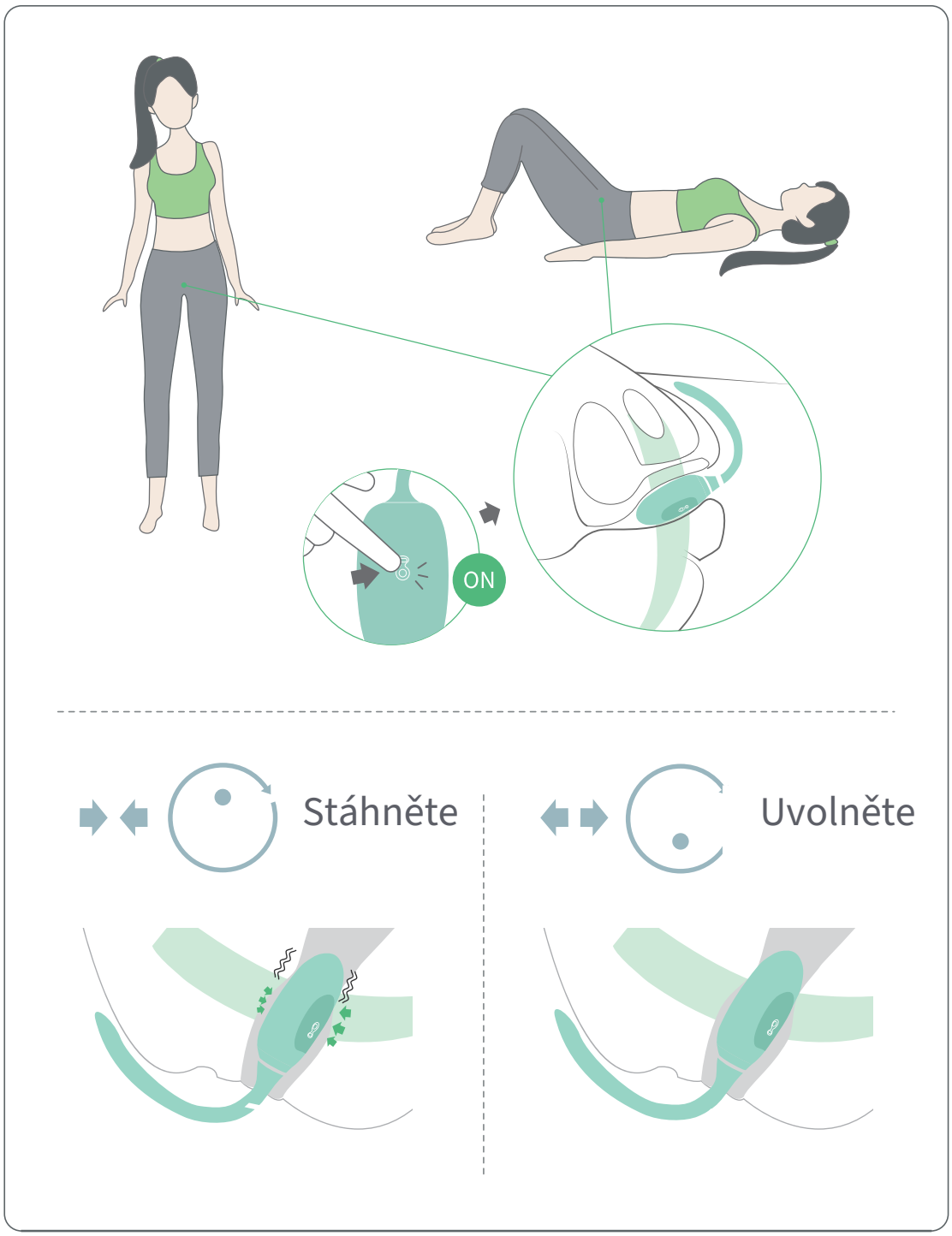

Režim tréninku s chytrým telefonem

Pro chytré telefony a tablety se systémy iOS a Android

1 Stáhněte aplikaci



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Připojení



Nabíjení

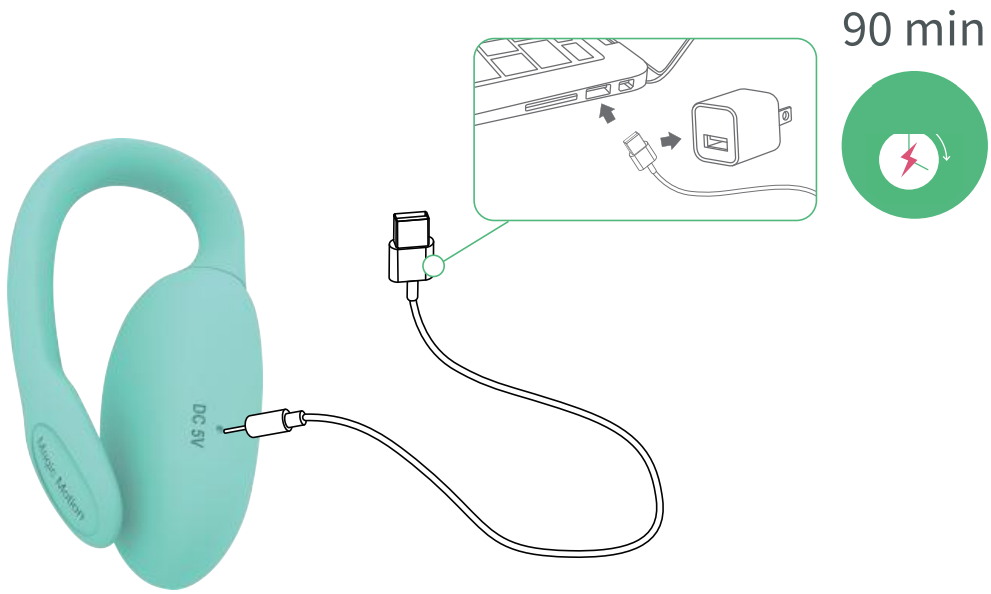

Údržba



18+: pouze pro dospělé

Specifikace

Model: SMV10

Rozměry: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Materiál: silikon / ABS

Nabíjecí napětí: DC 5V

Maximální nabíjecí proud: 300mA

Hmotnost: 27g

Doba provozu: 150 minut

Doba nabíjení: 90 minut

Voděodolnost: IPX4

Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální RF vysílací výkon: 0.95 dBm

Zákaznická podpora

Podpora nebo záruka: customercare@magicsmotion.com. Uveďte model a problém; u záruky přiložte doklad o koupi.


Důležité bezpečnostní informace

Bezpečné používání: Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.

Bezpečné nabíjení: Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie: Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace: Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Dodržujte uvedené krytí IPX4; nevztahuje se na nabíjecí kabel ani napájecí zdroj. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.

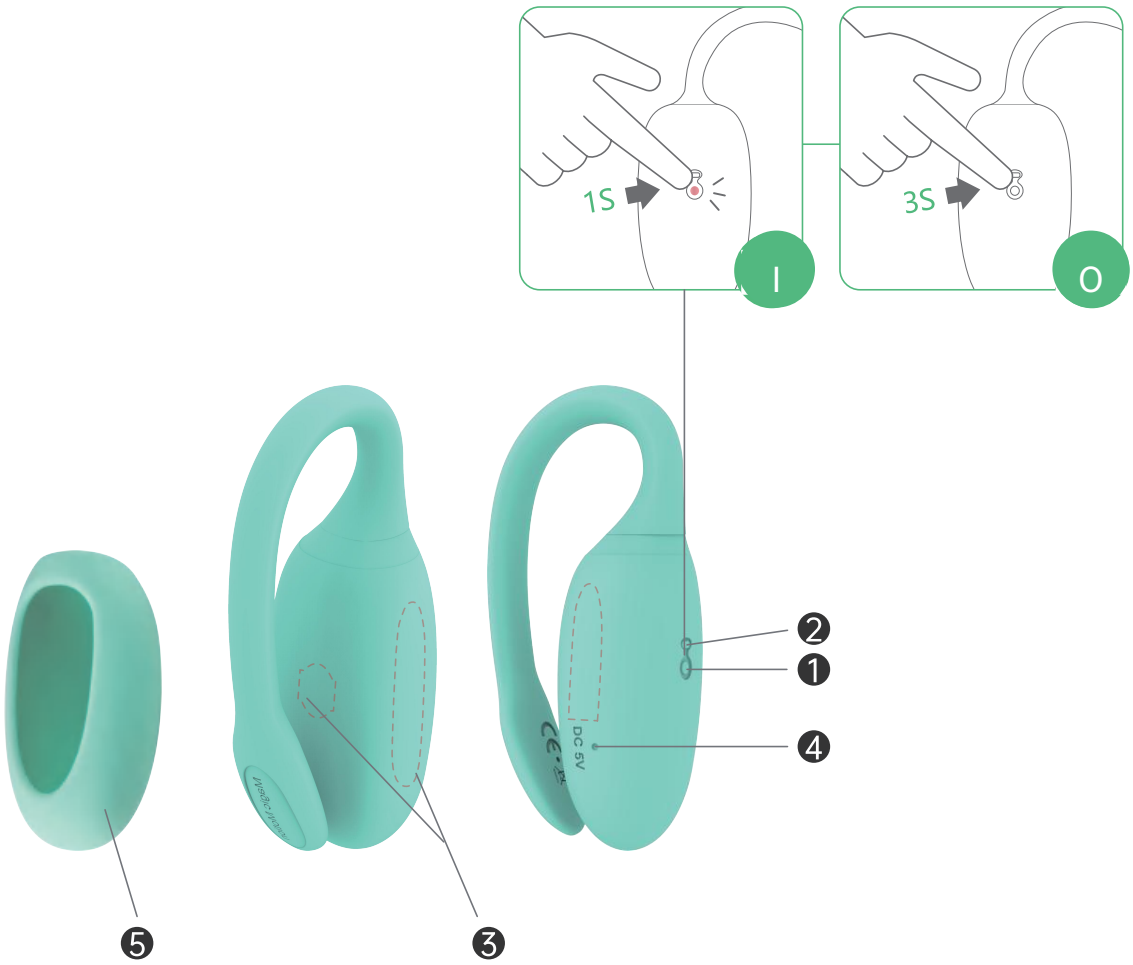

1 Включение/выключение

ВКЛ. · 1 s

ВЫКЛ. · 3 s


2 Светодиодный индикатор


3 Зоны сенсорного датчика

4 Разъём зарядки

5 Чехол Rejuve

①

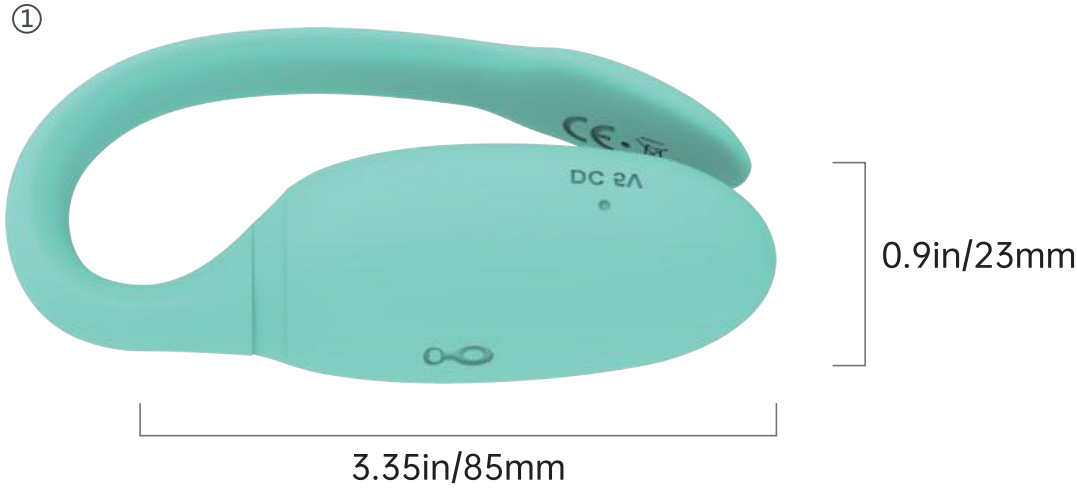

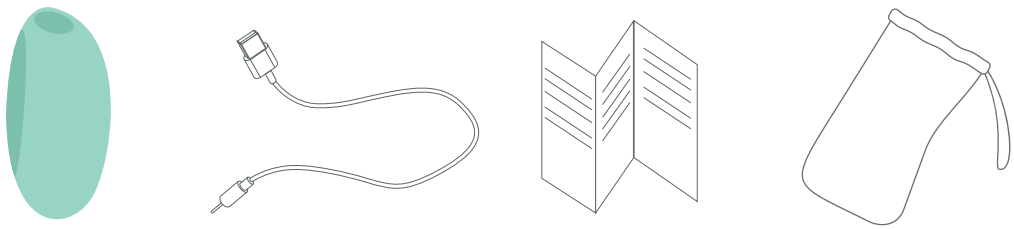

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Чехол Rejuve

3 Зарядный кабель

4 Руководство пользователя


5 Мешочек для хранения

Подготовка к использованию

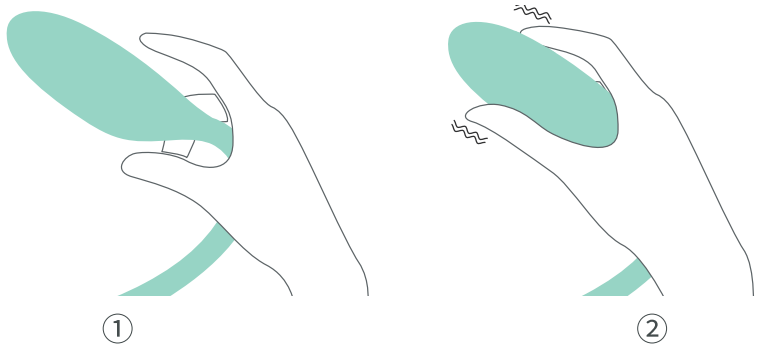

Коснитесь датчика

Найдите мышцы тазового дна

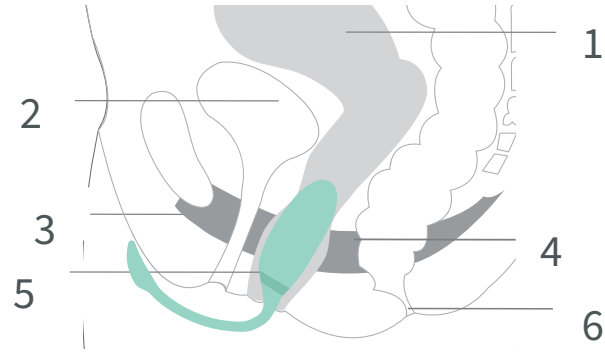

1 Матка

2 Мочевой пузырь

3 Уретра

4 Мышцы тазового дна


5 Влагалище

6 Анус




Лубрикант на водной основе

Использование Kegel Rejuve с чехлом Rejuve

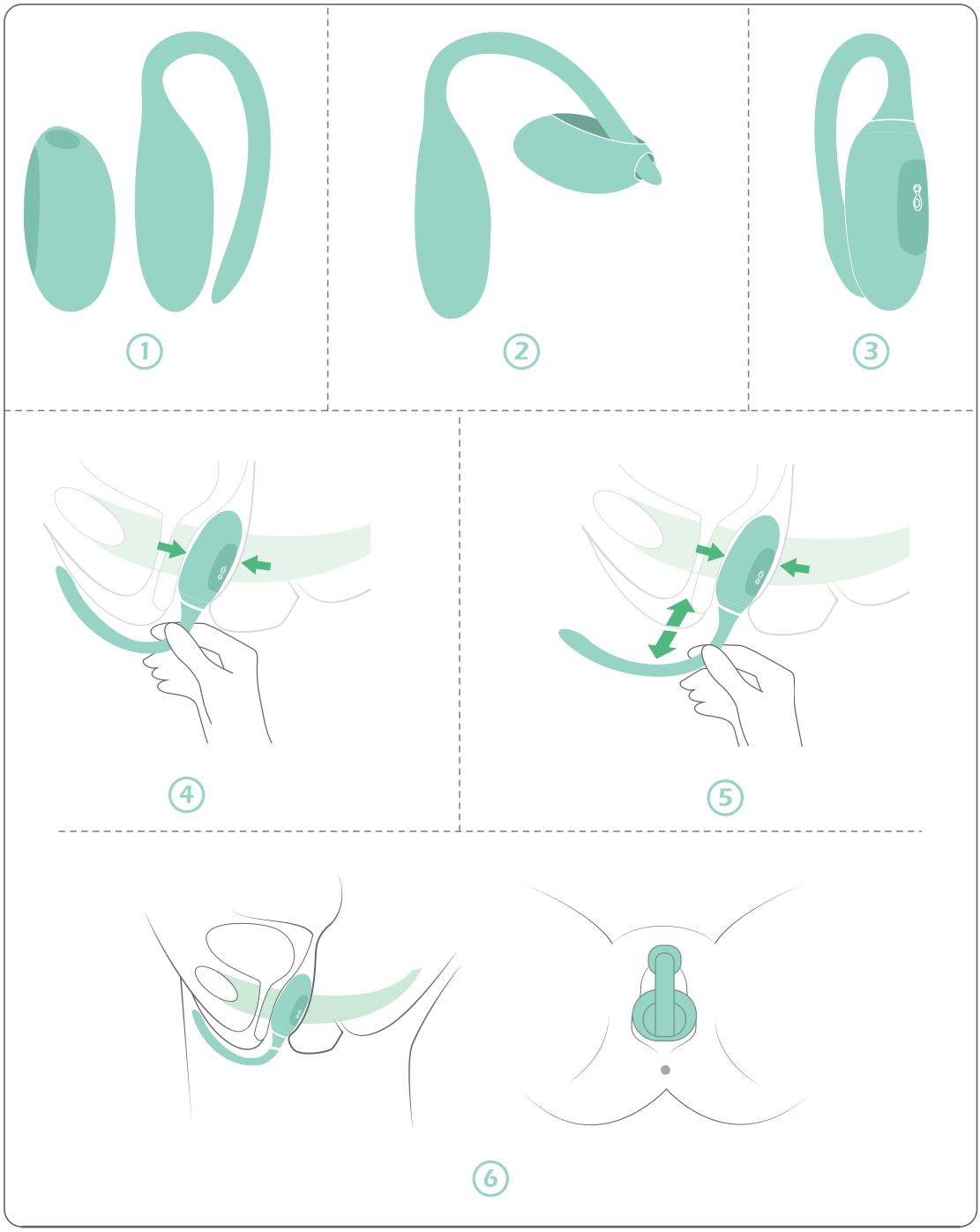

Режим тренировки с силовой обратной связью

ВКЛ. · 1 s

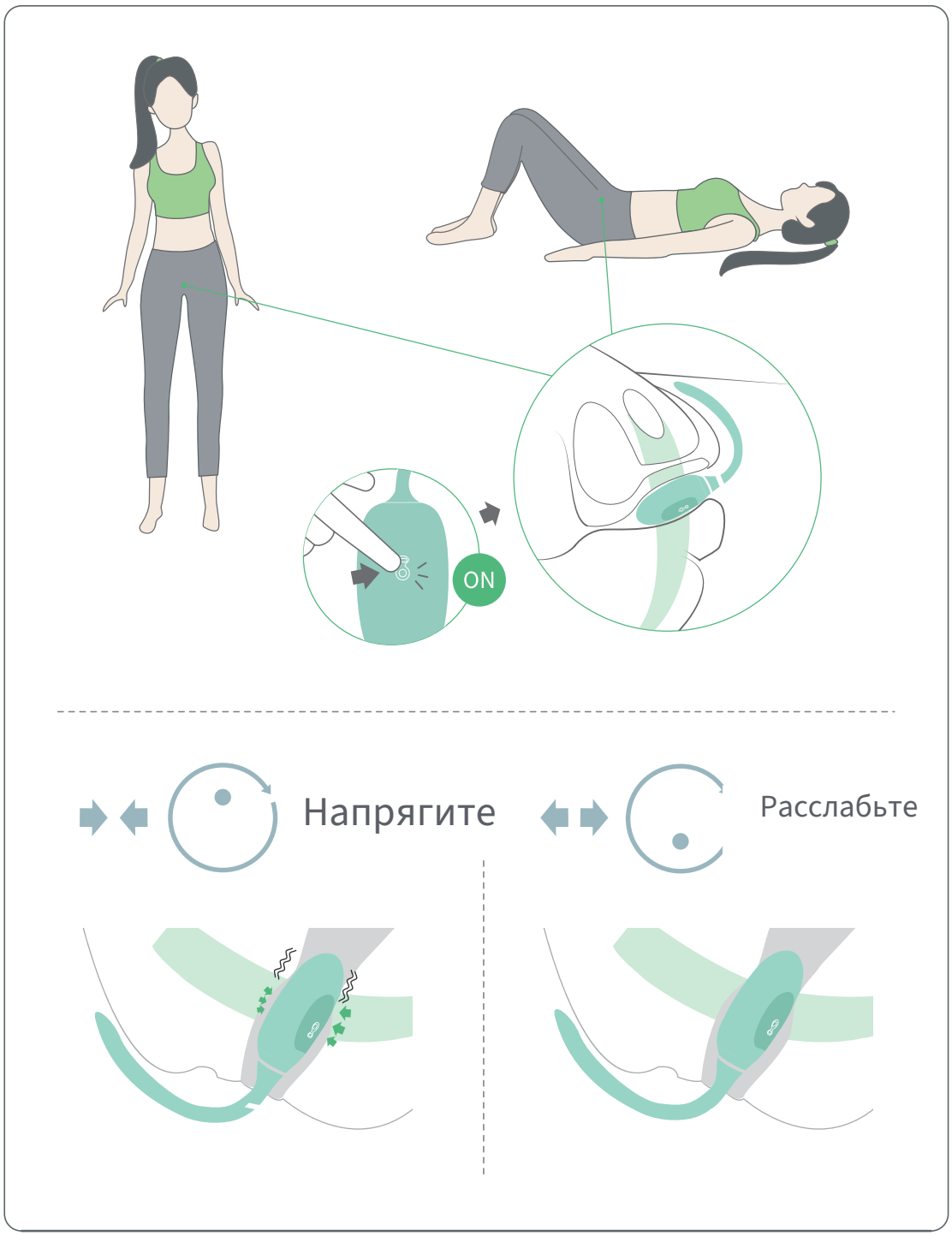

Режим тренировки со смартфоном

Поддержка смартфонов и планшетов с iOS и Android

1 Скачайте приложение



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Подключение



Зарядка

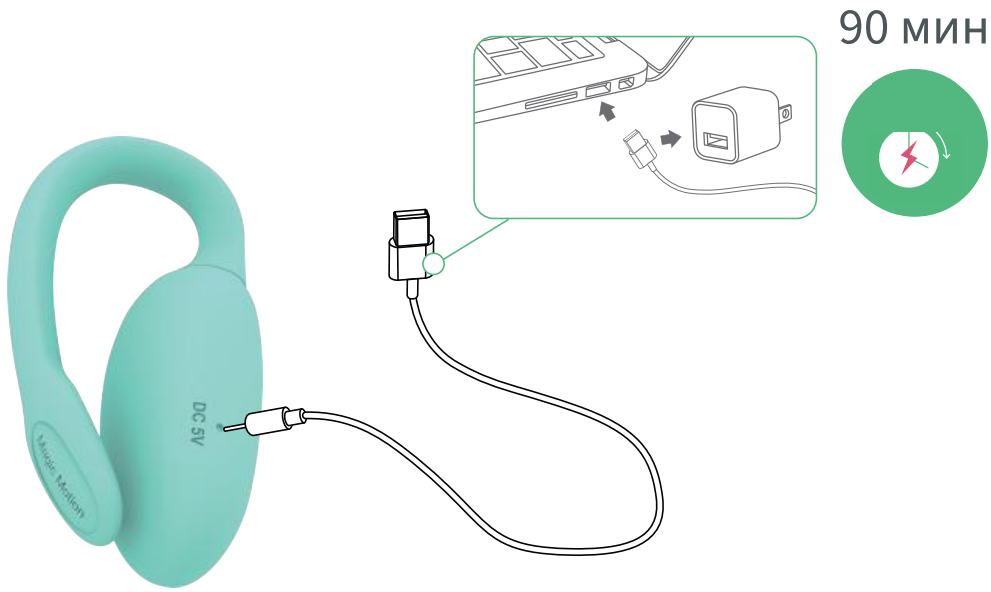

Уход



18+: только для взрослых

Спецификация

Модель: SMV10

Размер: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Материал: силикон / ABS

Зарядное напряжение: DC 5 В

Максимальный зарядный ток: 300 мА

Время работы: около 150 минут

Время зарядки: 90 минут

Вес: 27 г

Водонепроницаемый рейтинг: IPX4

Рабочий диапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальная мощность передачи RF: 0.95 dBm

Служба поддержки

Поддержка и гарантия: customercare@magicsmotion.com. Укажите модель и проблему; для гарантии приложите подтверждение покупки.


Важная информация по безопасности

Безопасное использование: Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.

Безопасная зарядка: Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора: Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.

Очистка, хранение и утилизация: Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Соблюдайте указанную степень защиты IPX4; она не распространяется на зарядный кабель и блок питания. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.

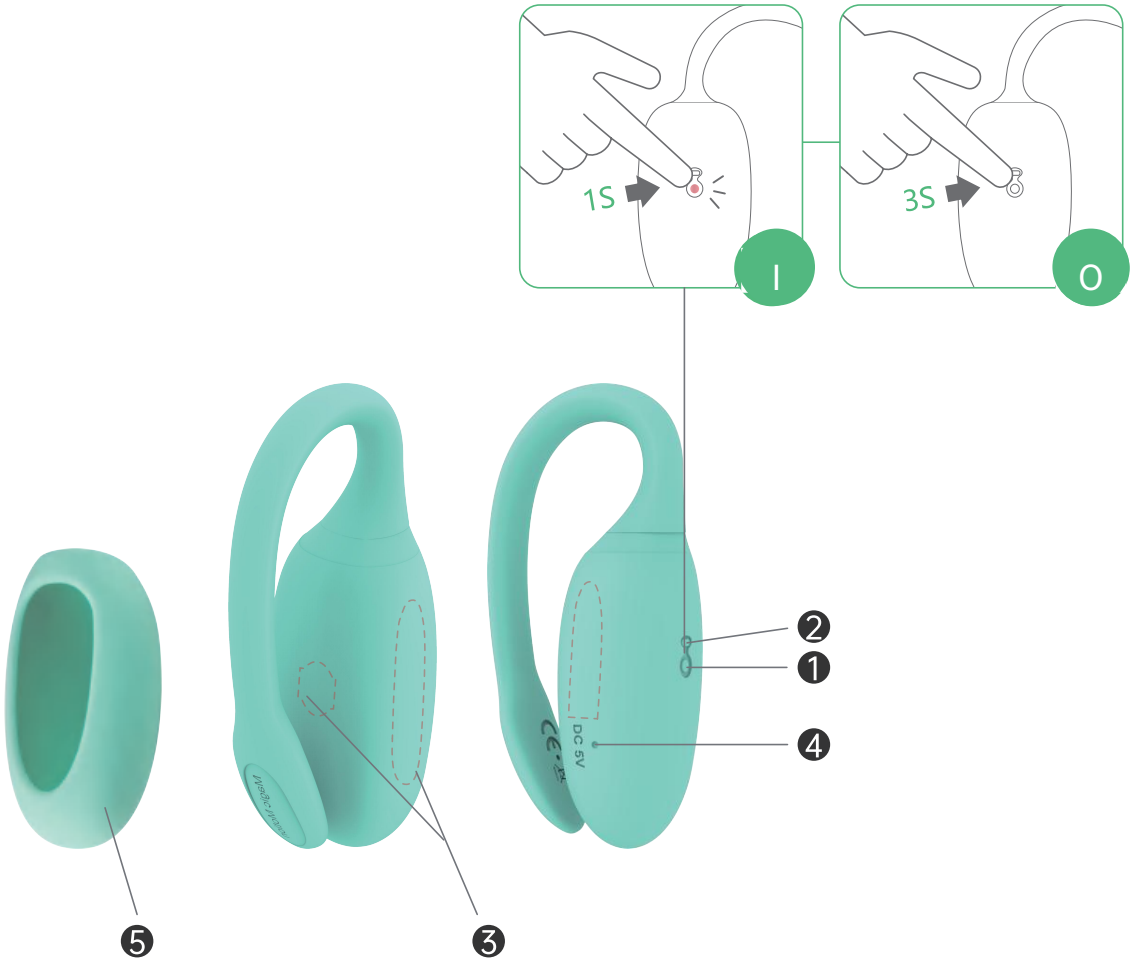

1 Увімкнення/вимкнення

УВІМК. · 1 s

ВИМК. · 3 s


2 Світлодіодний індикатор


3 Зони сенсорного датчика

4 Порт заряджання

5 Чохол Rejuve

①

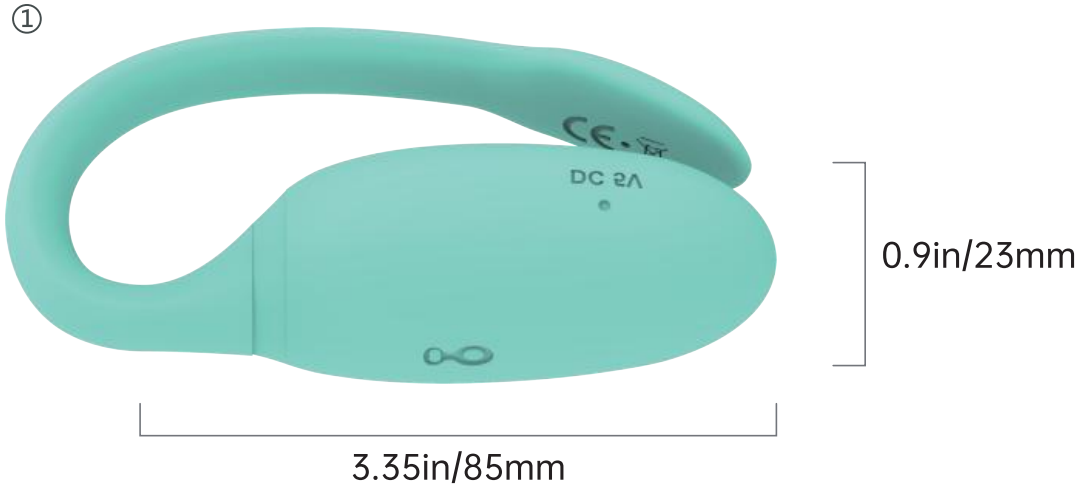

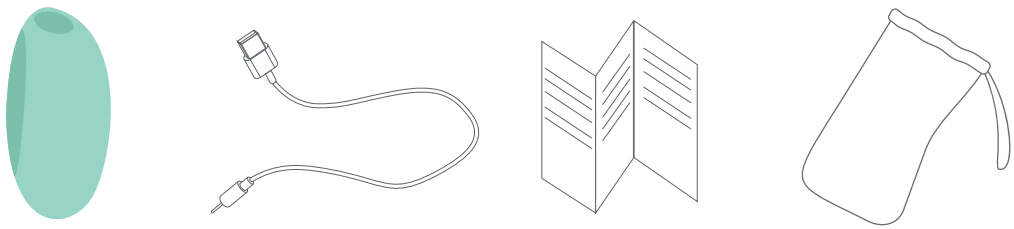

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Чохол Rejuve

3 Зарядний кабель

4 Інструкція користувача


5 Мішечок для зберігання

Підготовка до використання

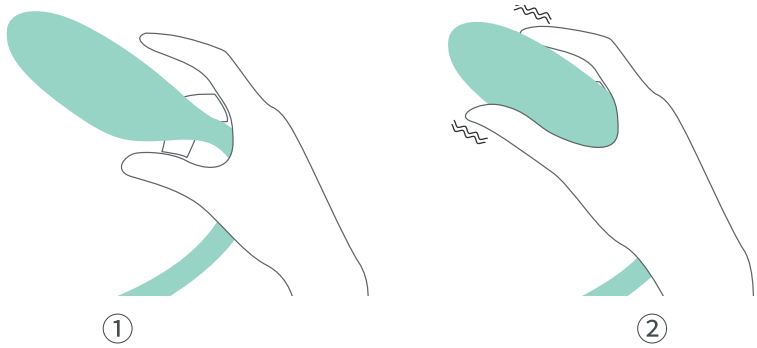

Торкніться датчика

Знайдіть м’язи тазового дна

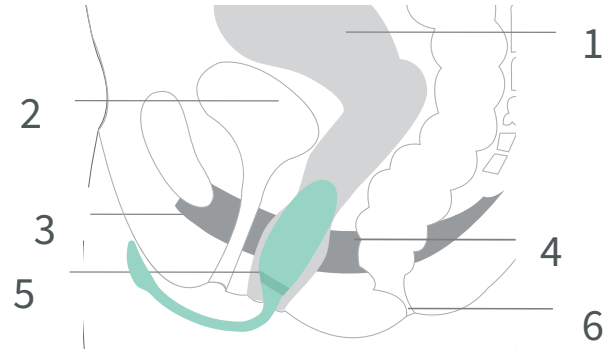

1 Матка

2 Сечовий міхур

3 Уретра

4 М’язи тазового дна


5 Піхва

6 Анус




Лубрикант на водній основі

Використання Kegel Rejuve з чохлом Rejuve

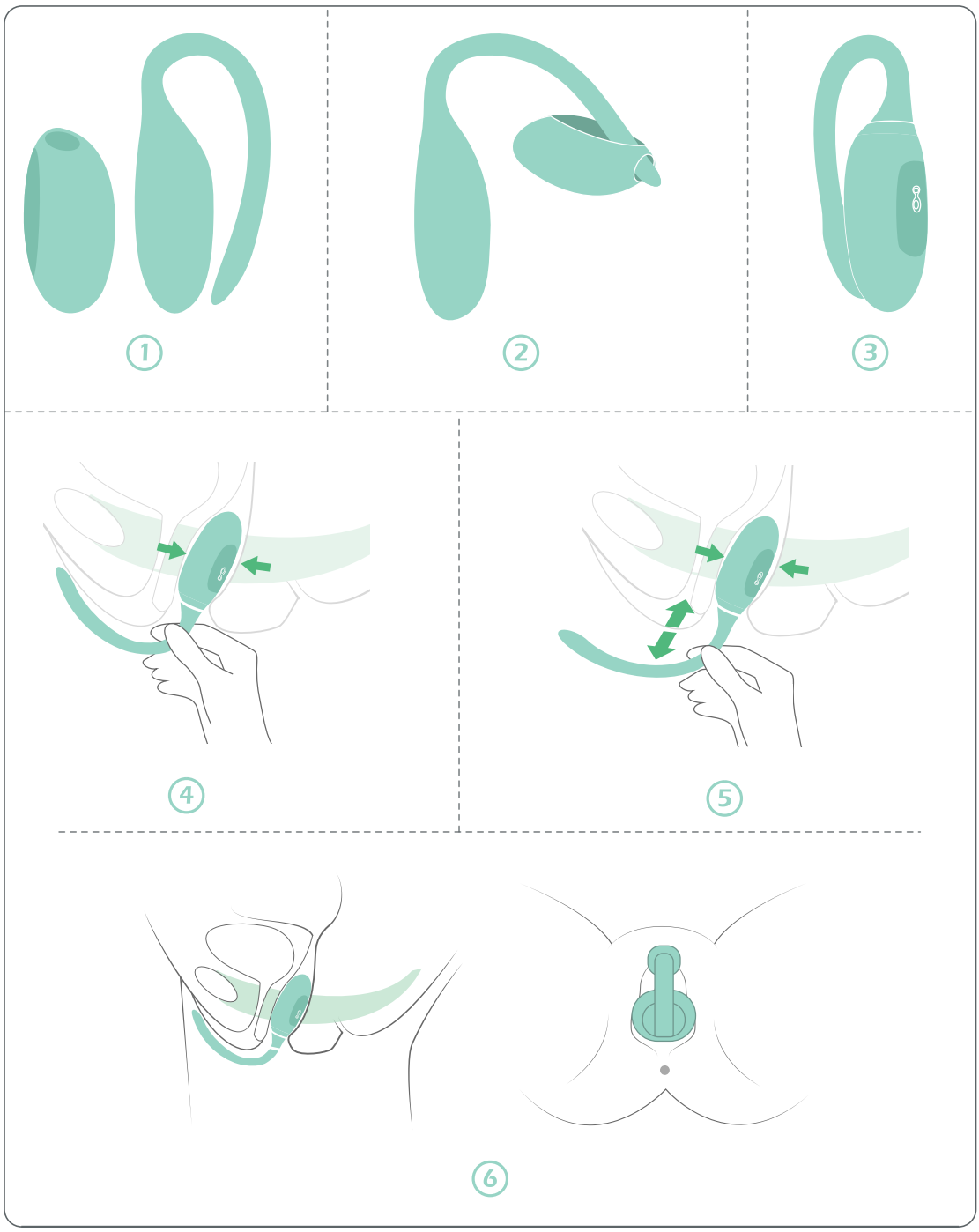

Режим тренування зі зворотним зв’язком за силою

УВІМК. · 1 s

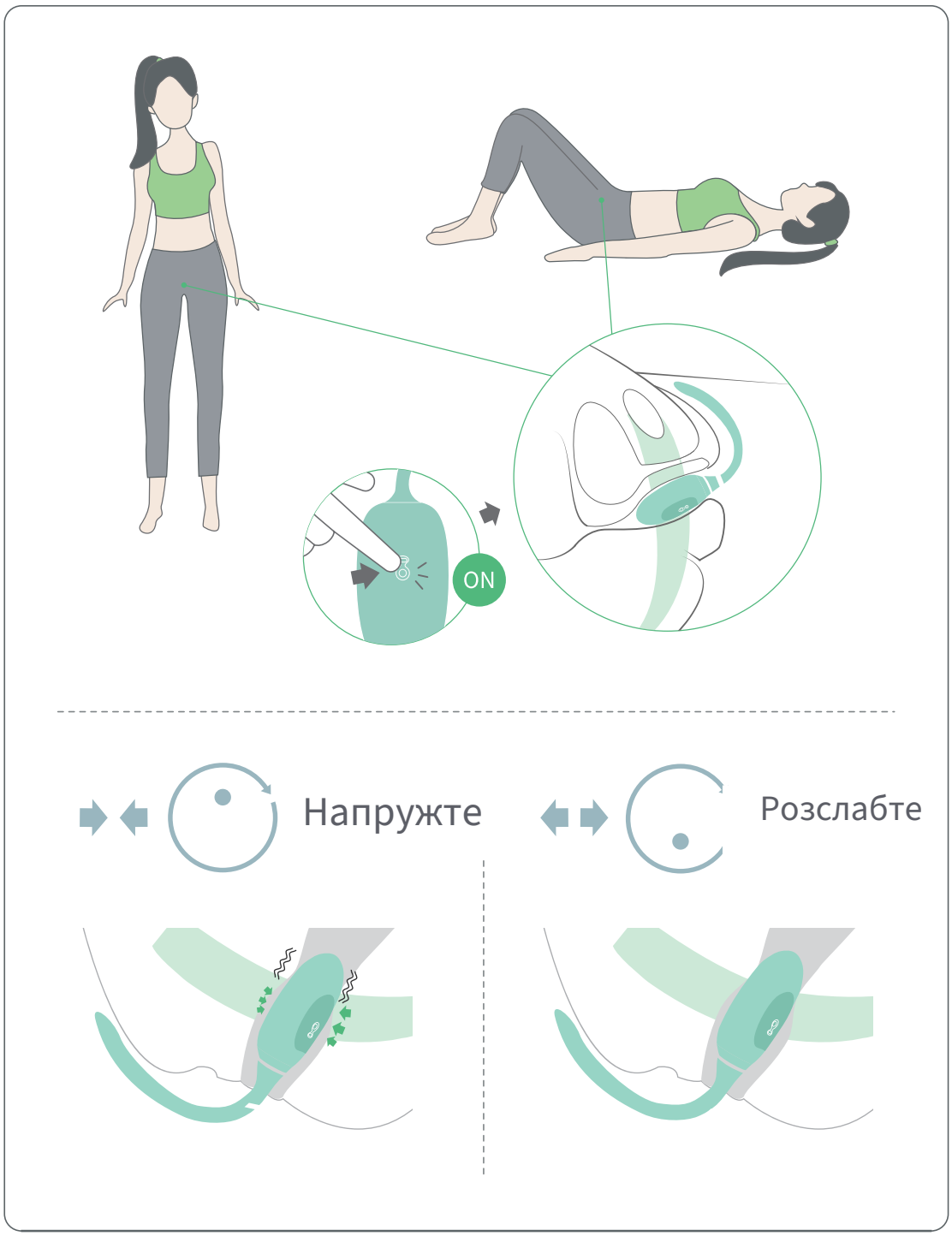

Режим тренування зі смартфоном

Підтримує смартфони й планшети з iOS та Android

1 Завантажте застосунок



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 Підключення



Заряджання

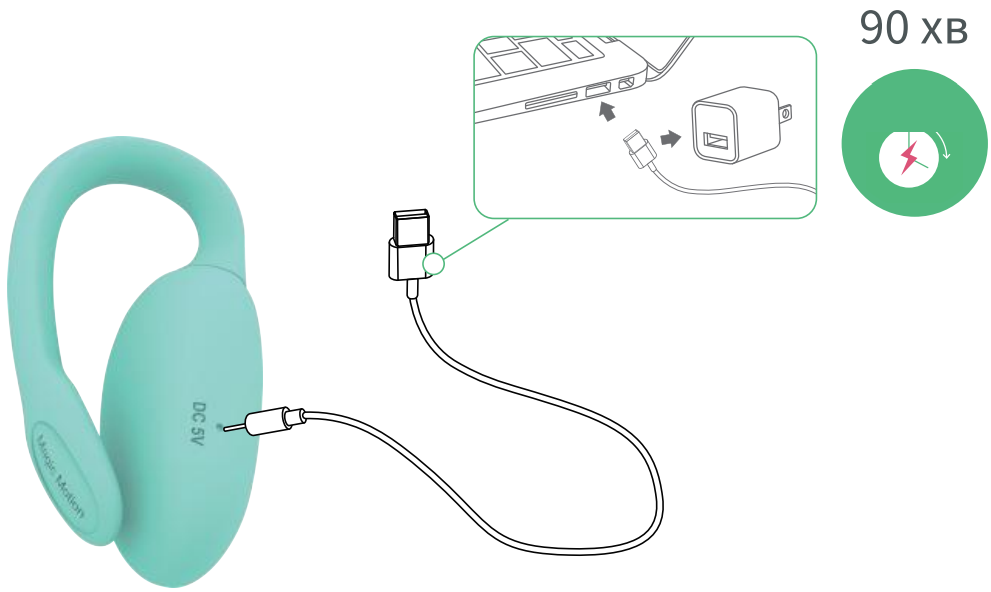

Догляд



18+: лише для дорослих

Технічні характеристики

Модель: SMV10

Розмір: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

Матеріал: силікон / ABS

Напруга заряджання: DC 5 В

Максимальний струм заряджання: 300 мА

Вага: 27 г

Час роботи: 150 хвилин

Час заряджання: 90 хвилин

Водозахист: IPX4

Робочий діапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальна потужність передавання RF: 0.95 dBm

Підтримка клієнтів

Підтримка та гарантія: customercare@magicsmotion.com.
Вкажіть модель і проблему; для гарантії додайте підтвердження покупки.


Важлива інформація з безпеки

Безпечне використання: Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.

Безпечне заряджання: Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора: Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація: Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX4; він не поширюється на зарядний кабель і блок живлення. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.

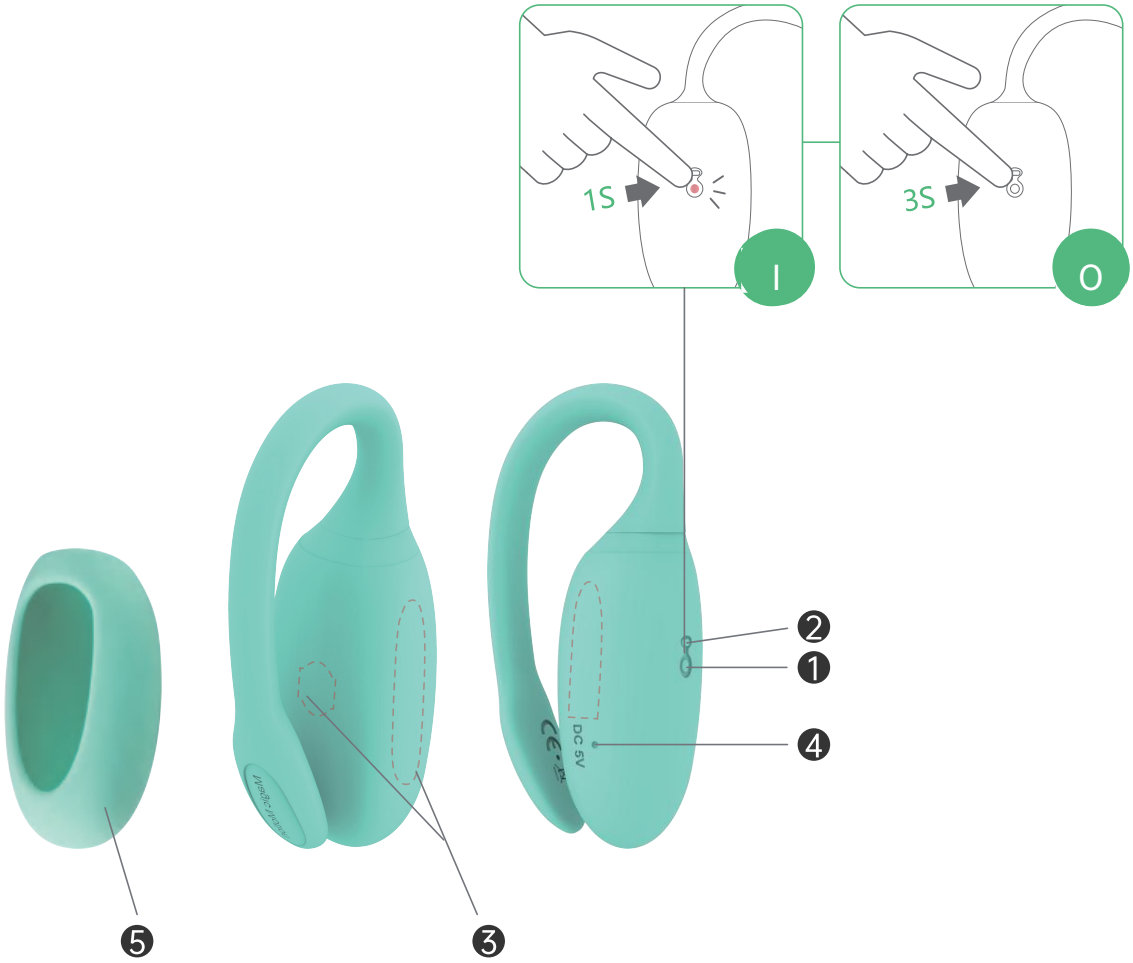

1 电源开关

开 · 1 s　　关 · 3 s

2 LED指示灯


3 触摸感应区


4 充电口

5 Rejuve调节套

简体中文

①

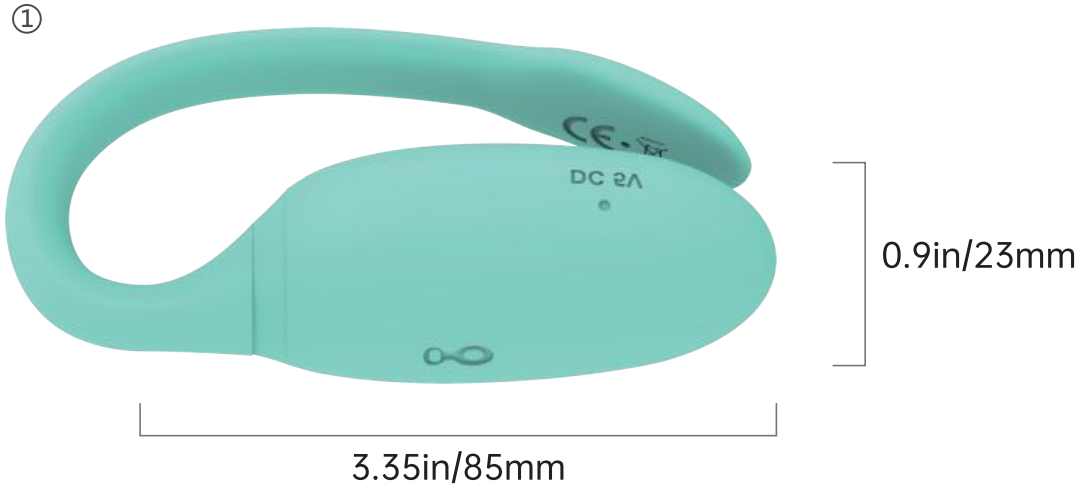

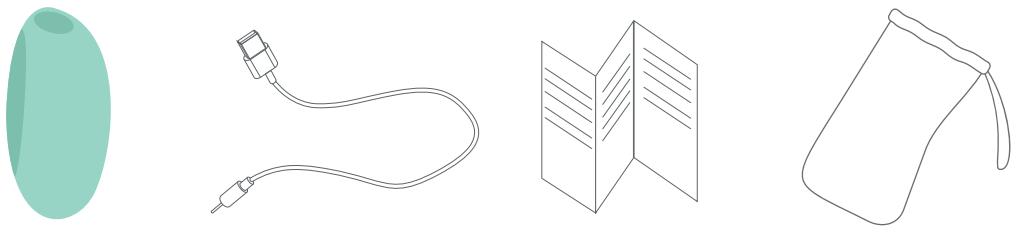

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve凯格尔春之芽


2 Rejuve调节套

3 充电线

4 使用指南

5 收纳袋

使用准备

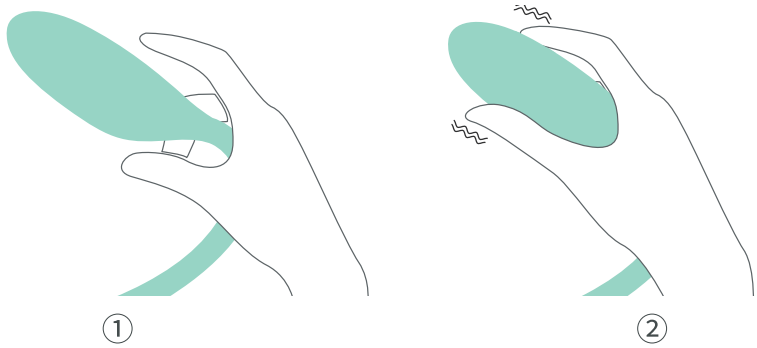

触摸传感器

找到盆底肌



1 子宫

2 膀胱

3 尿道

4 盆底肌


5 阴道

6 肛门




水性润滑剂

配合Rejuve调节套使用Kegel Rejuve

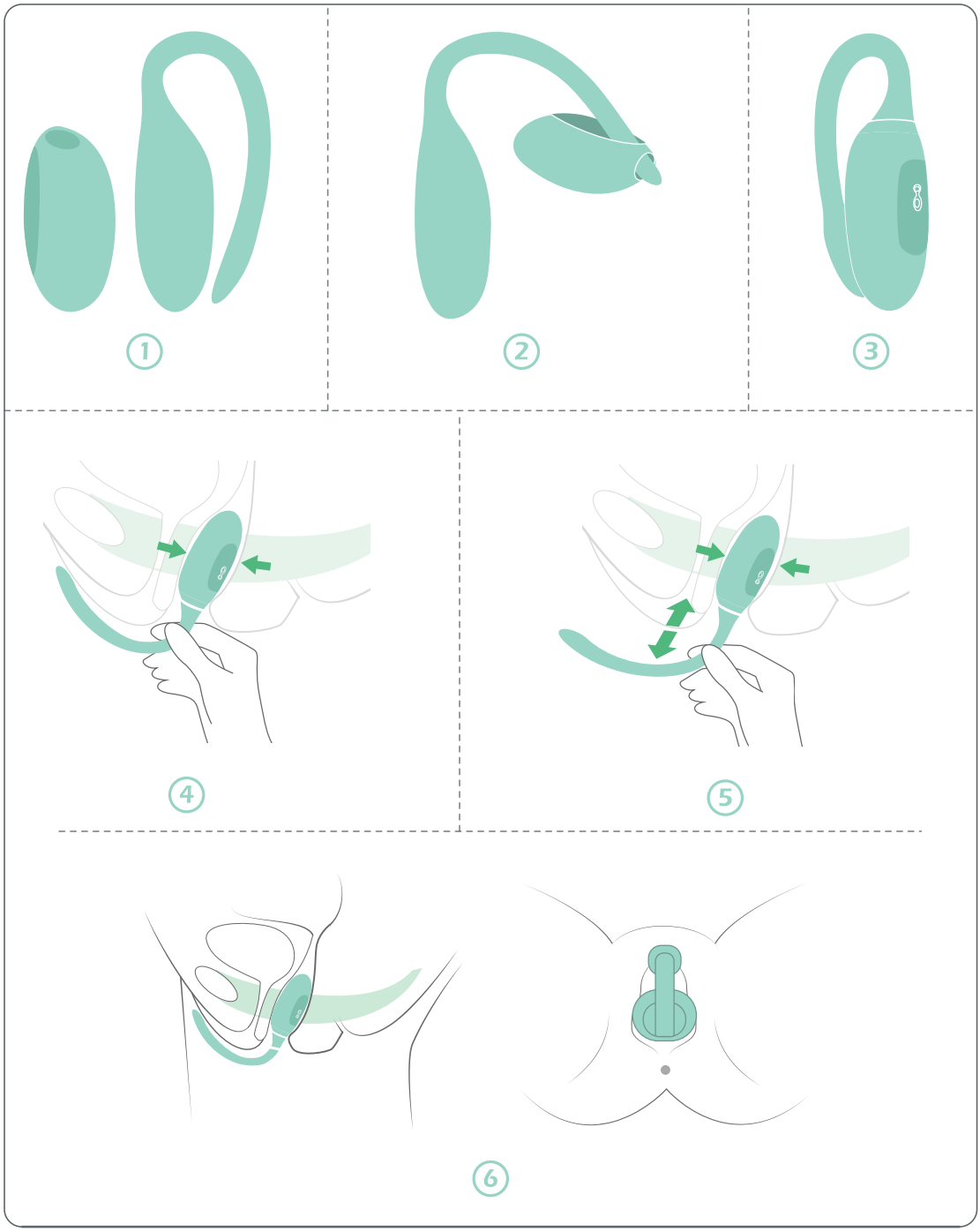

力反馈训练模式

开 · 1 s

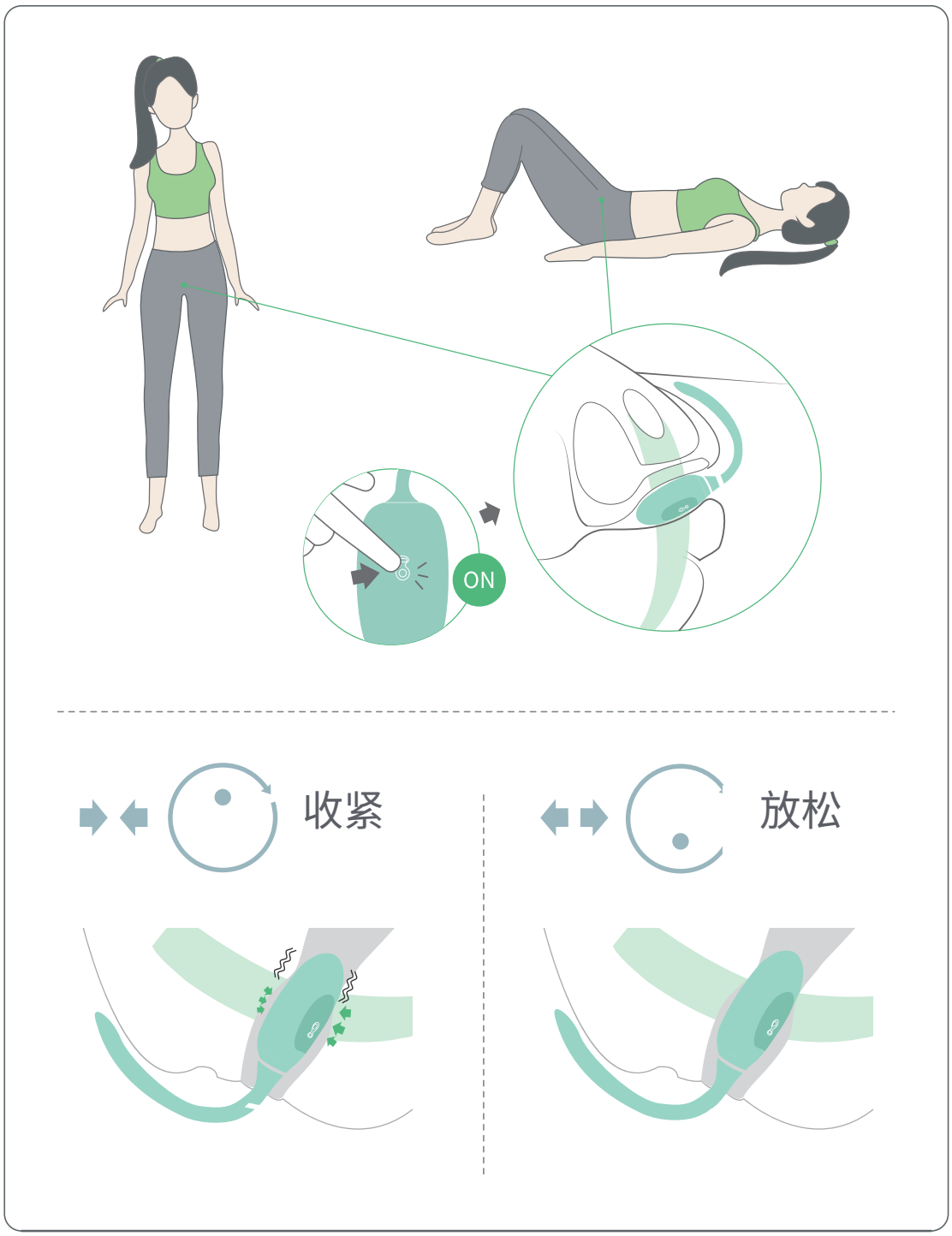

智能手机训练模式

支持iOS和Android智能手机及平板电脑

1 下载App



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 连接



充电

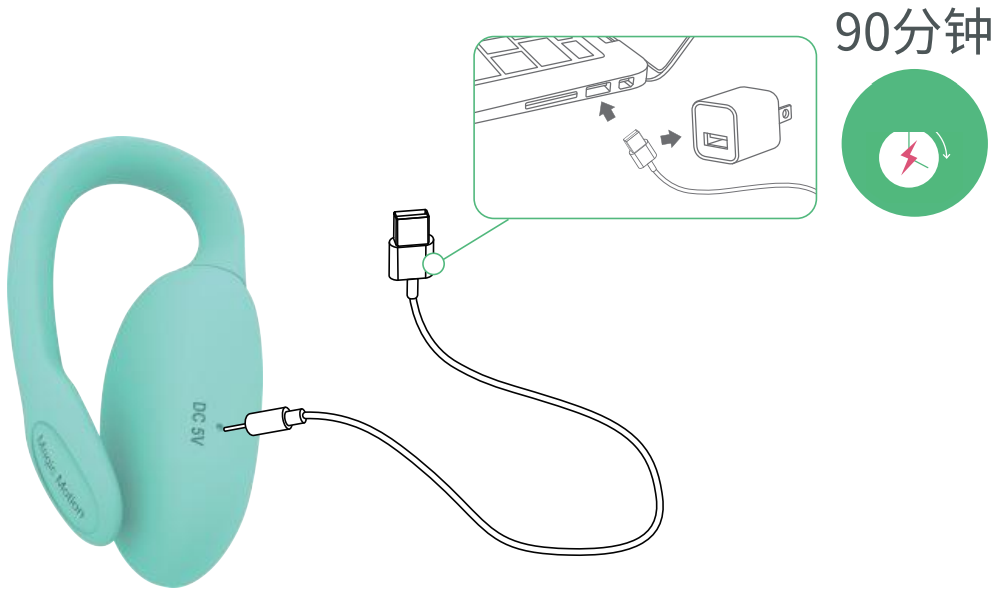

保养



18岁以上：仅限成人

规格

型号：SMV10

尺寸：Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

充电电压：直流 5V

最大充电电流：300mA

材质：矽/ ABS

重量：27克

充电时间：约90分钟

工作时间：约150分钟

防水等级：IPX4

工作频段：2402–2480 MHz

最大发射功率：0.95 dBm

测试标准：GB 4706.1-2005

客户支持

产品支持或保修咨询：customercare@magicsmotion.com。请说明型号和问题；保修咨询请附购买凭证。


重要安全信息

使用安全：仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全：使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。

电池安全：不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收：使用前后按本手册清洁，干燥后存放。遵守标示的IPX4防水等级；该等级不适用于充电线或电源。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品／电池回收点，不得混入生活垃圾。

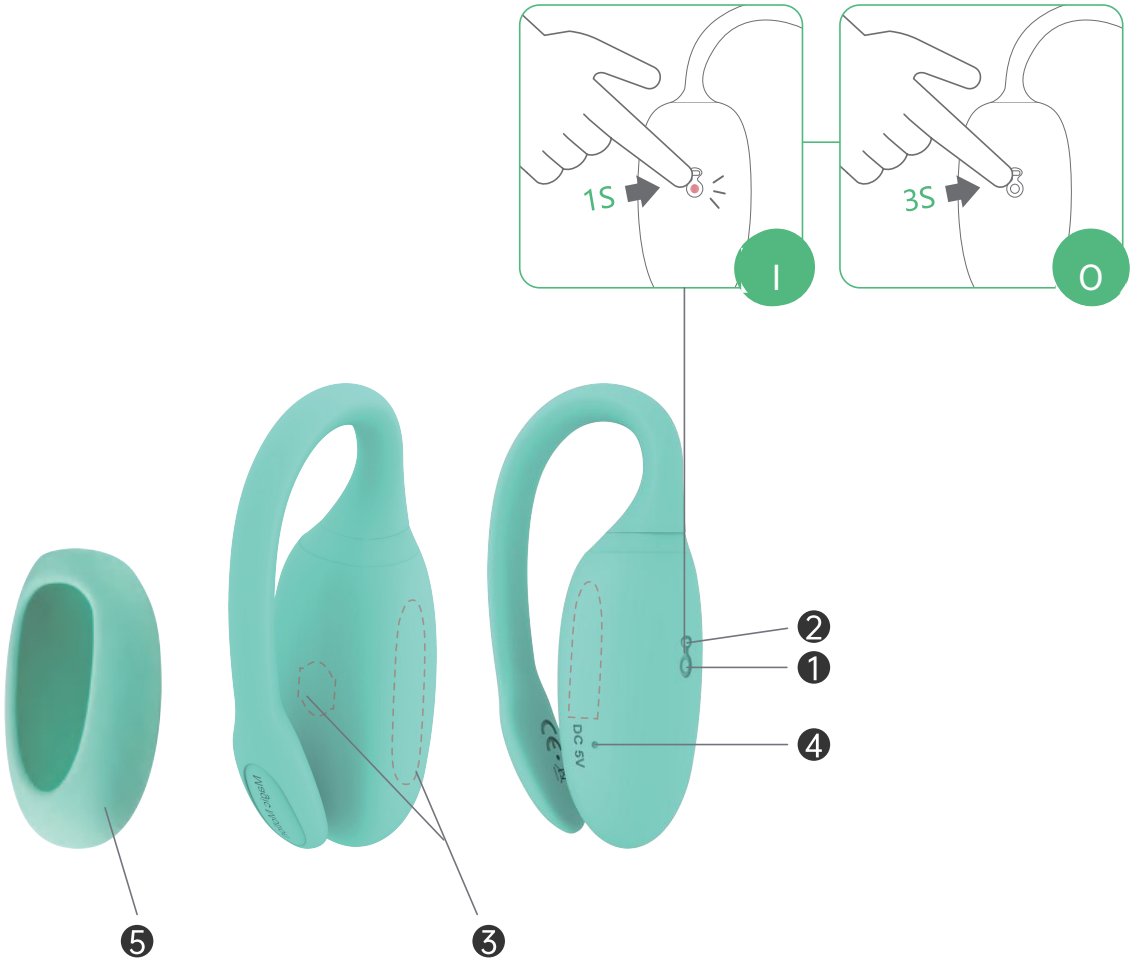

1 電源開關

開 • 1 s　　關 • 3 s


2 LED指示燈


3 觸摸感應區

4 充電口

5 Rejuve調節套

①

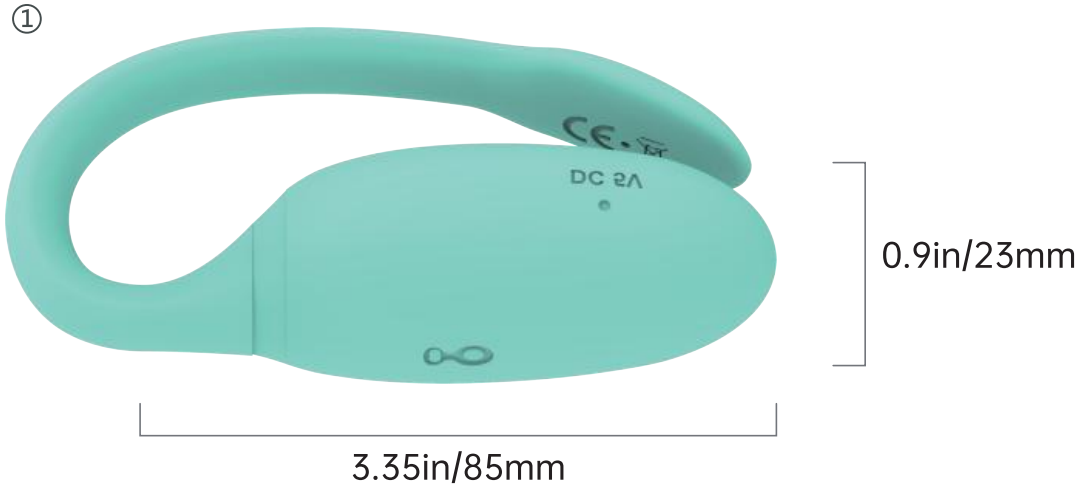

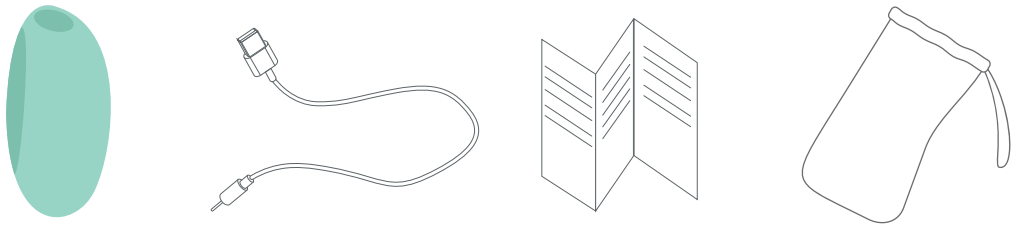

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve凱格爾春之芽


2 Rejuve調節套

3 充電線

4 使用指南


5 收納袋

使用準備

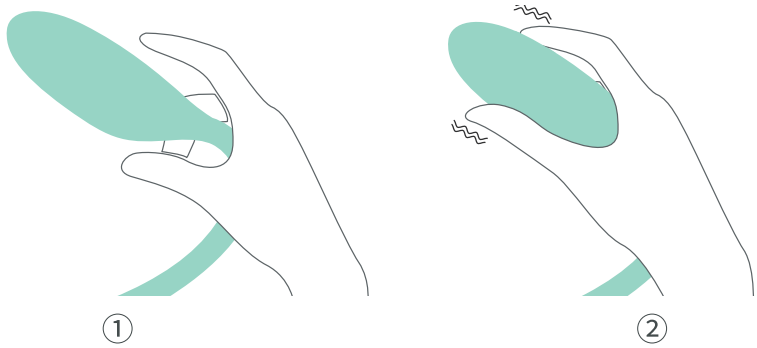

觸摸傳感器

找到盆底肌

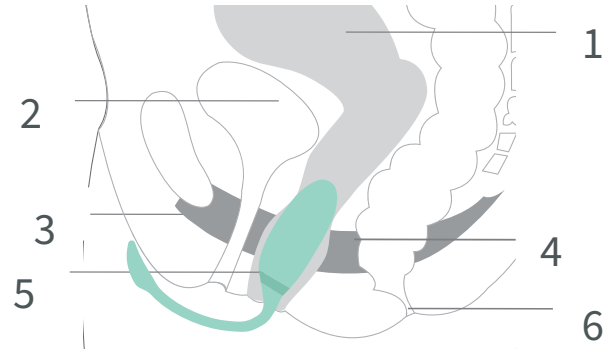

1 子宮

2 膀胱

3 尿道

4 盆底肌


5 陰道

6 肛門




水性潤滑劑

配合Rejuve調節套使用Kegel Rejuve

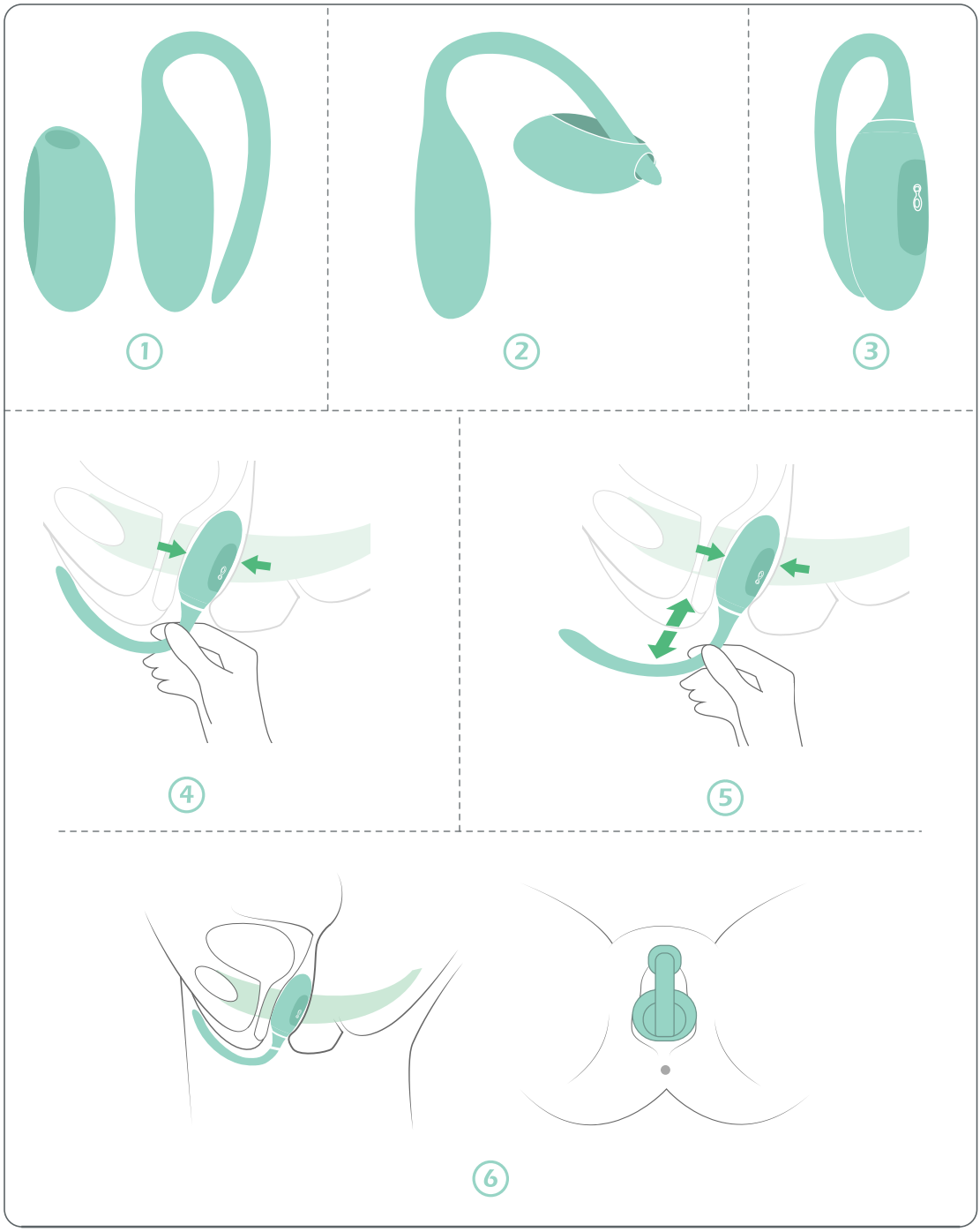

力反饋訓練模式

開・1 s

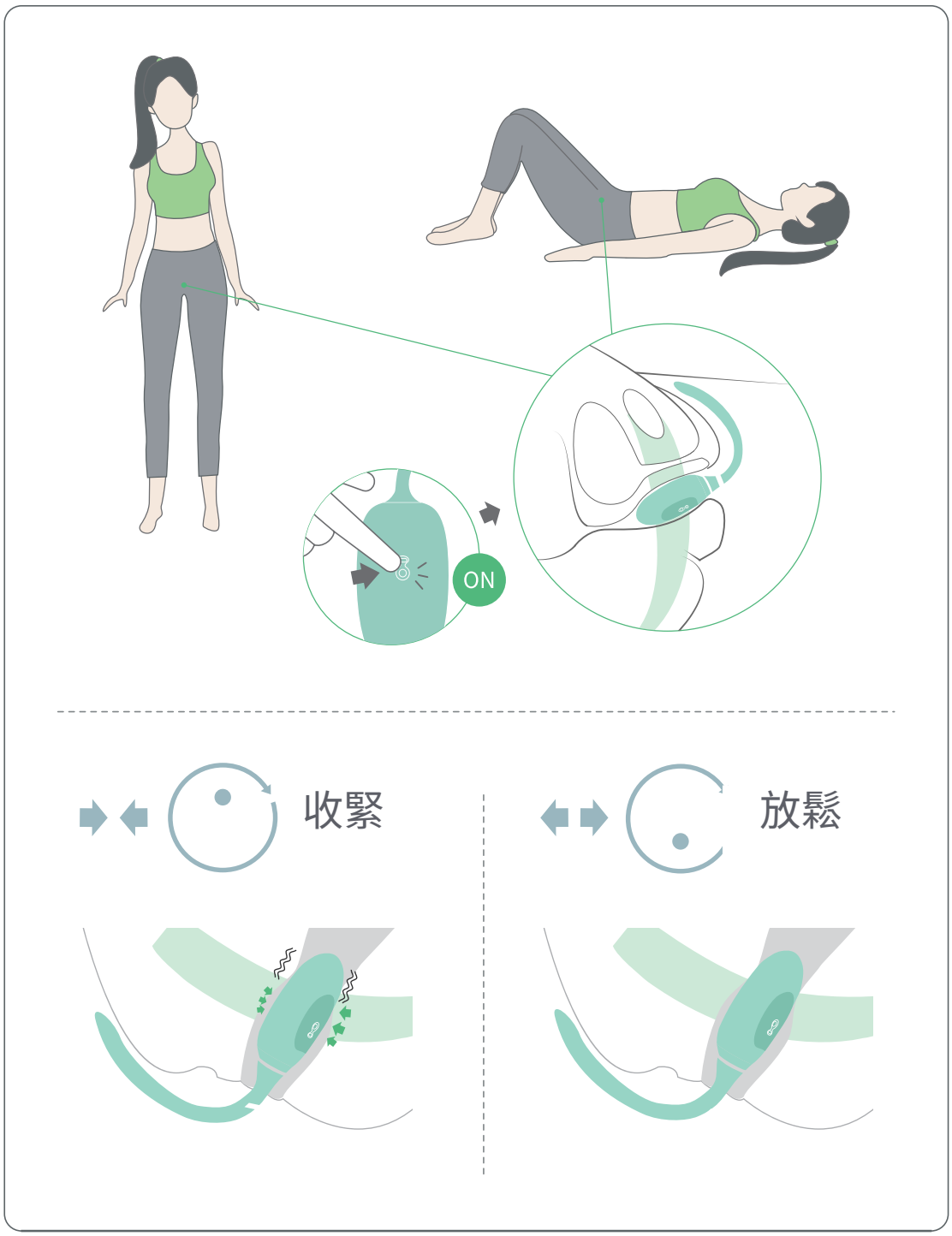

智慧型手機訓練模式

支援iOS和Android智慧型手機及平板電腦

1 下載App



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 連接



充電

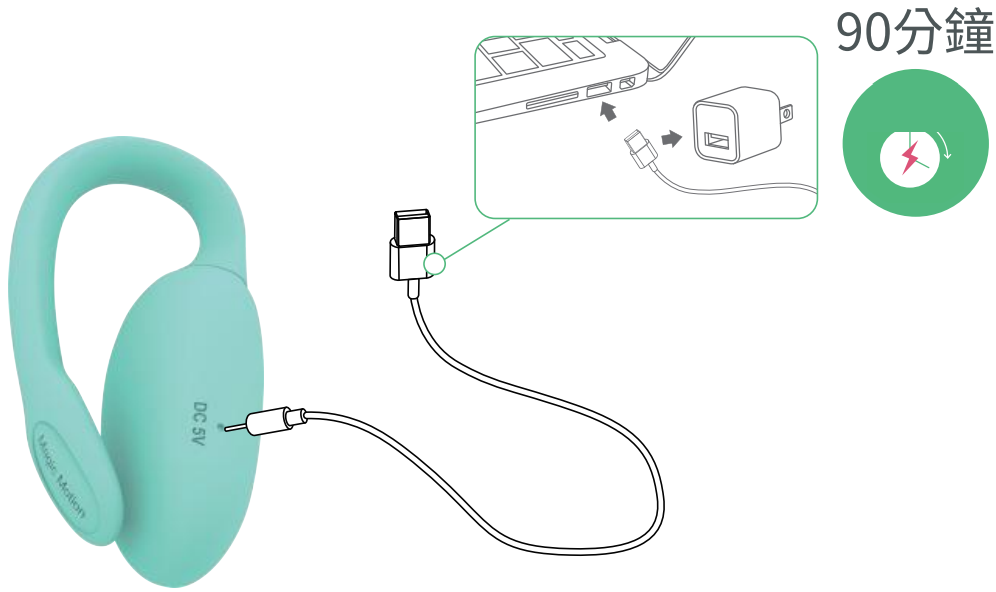

保養



18歲以上：僅限成人

規格

型號：SMV10

尺寸：Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

充電電壓：直流 5V

最大充電電流：300mA

材質：矽/ ABS

重量：27克

充電時間：約90分鐘

工作時間：約150分鐘

防水等級：IPX4

工作頻段：2402–2480 MHz

最大射頻發射功率：0.95 dBm

客戶支援

產品支援或保固諮詢：customercare@magicsmotion.com。請說明型號及問題；保固諮詢請附購買憑證。


重要安全資訊

使用安全：僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。

充電安全：使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全：不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。

清潔、儲存與回收：使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。遵守標示的IPX4防水等級；該等級不適用於充電線或電源。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品／電池回收點，不得混入生活垃圾。

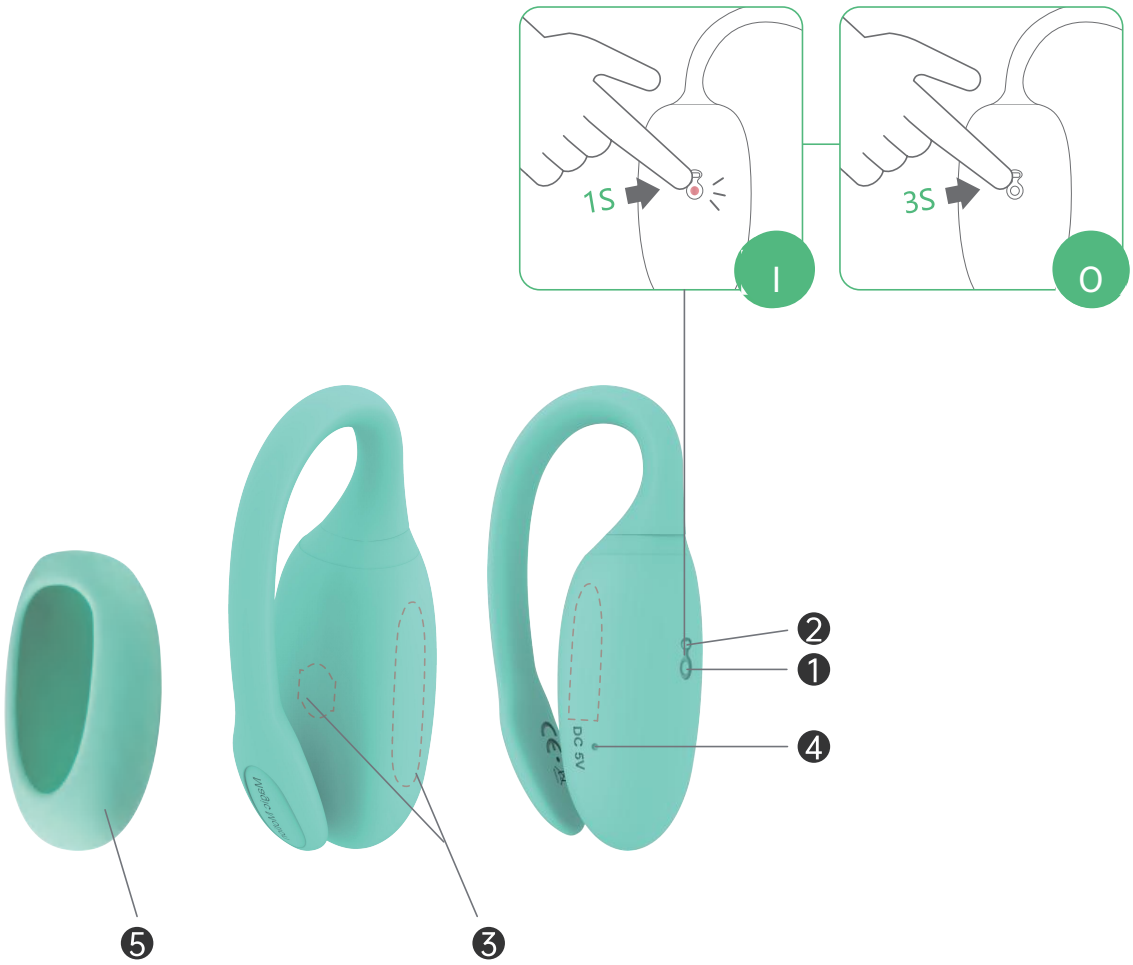

1 電源オン／オフ

オン・1 s　　オフ・3 s

2 LEDランプ


3 タッチセンサー部


4 充電ポート

5 Rejuveカバー

日本語

①

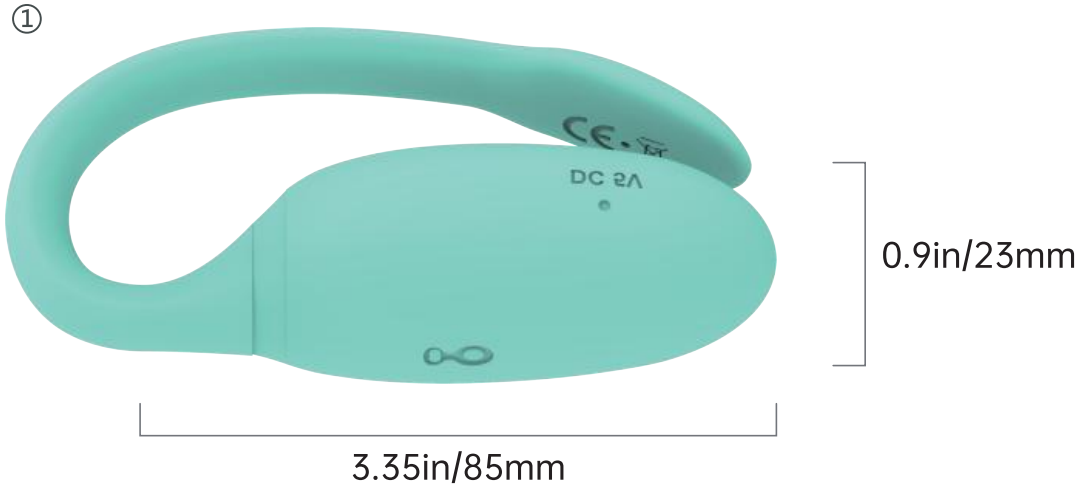

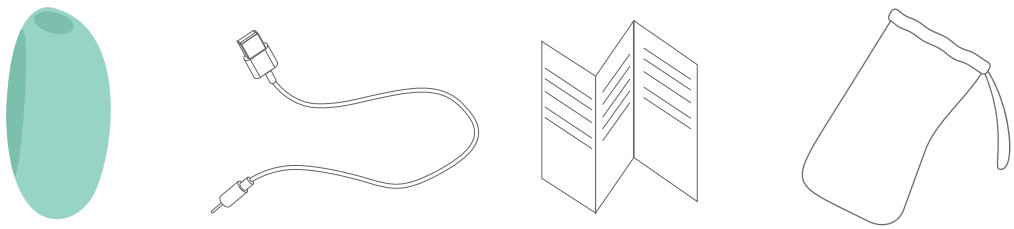

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Rejuveカバー

3 充電ケーブル

4 ユーザーガイド


5 収納袋

使用前の準備

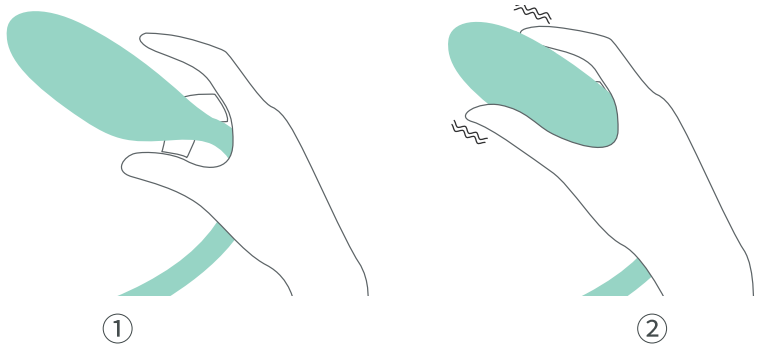

センサーに触れる

骨盤底筋を見つける

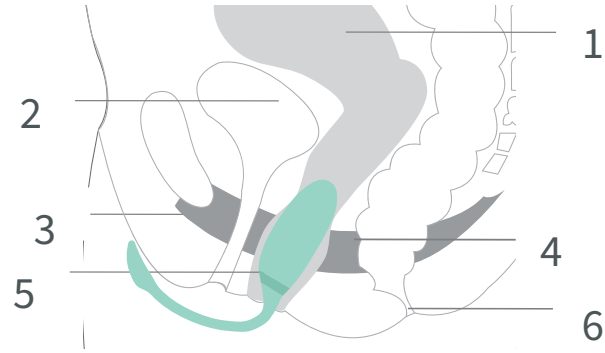


1 子宮
2 膀胱
3 尿道
4 骨盤底筋
5 膣
6 肛門




水性潤滑剤

Rejuveカバーを付けてKegel Rejuveを使う

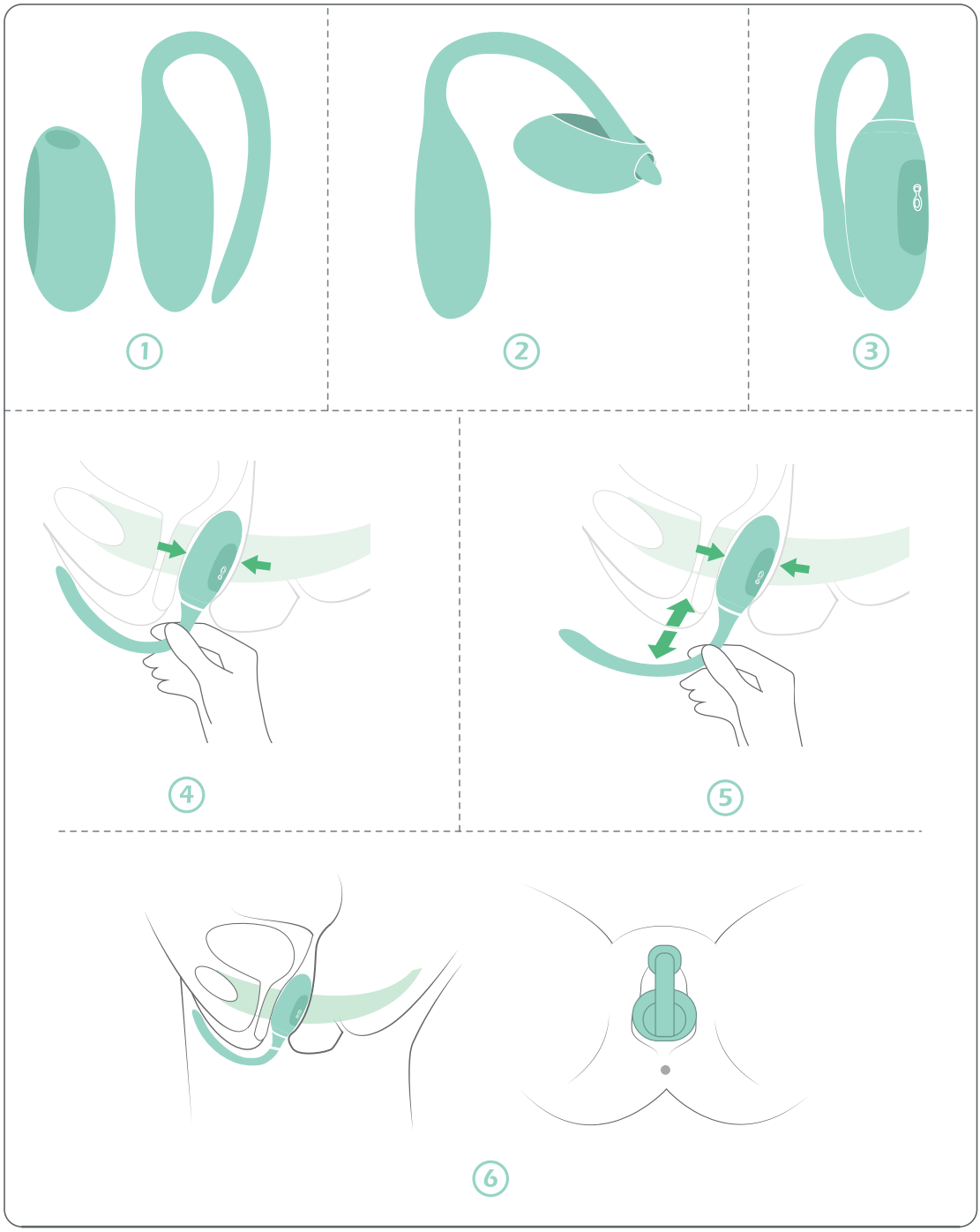

力覚フィードバック トレーニングモード

オン・1s

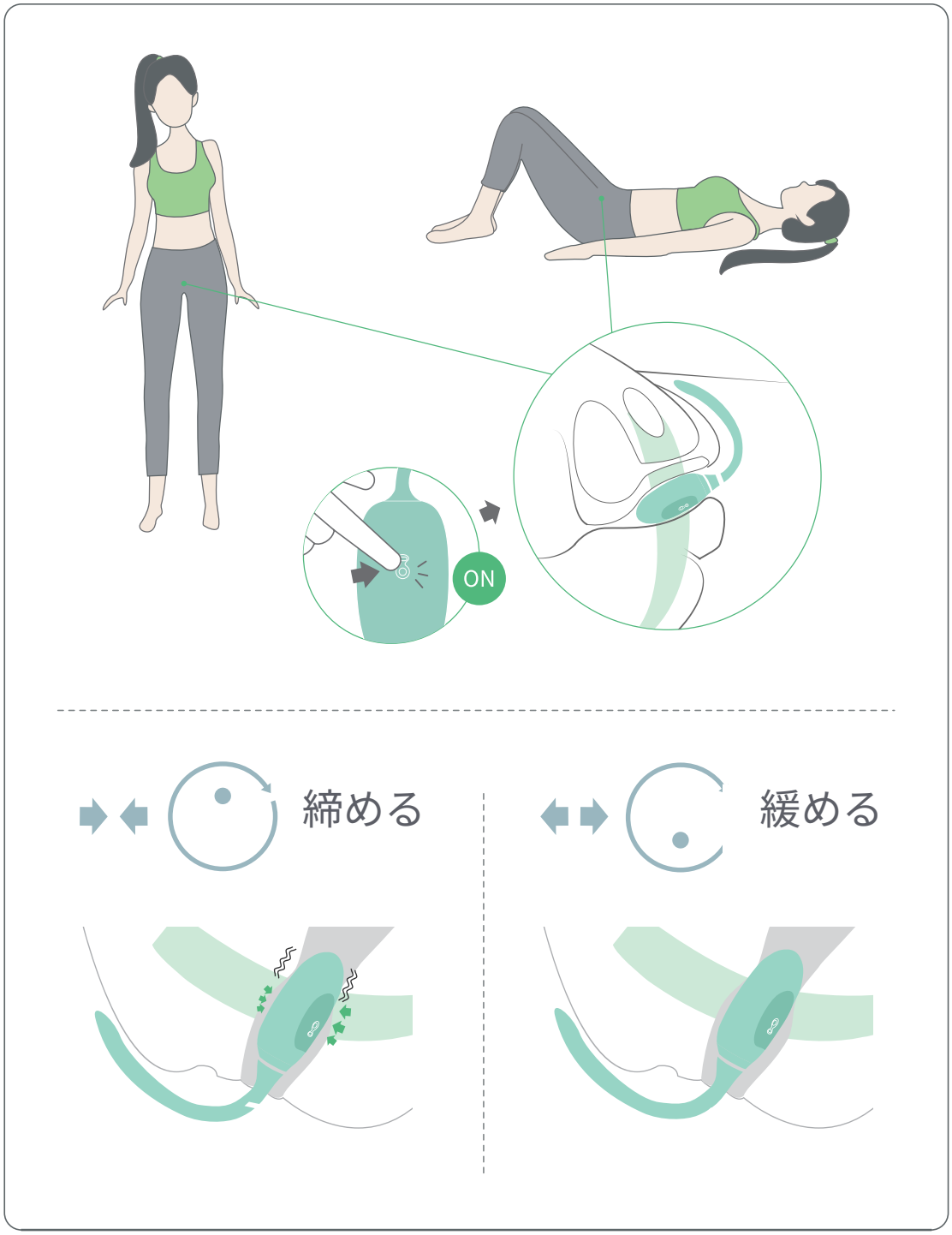

スマートフォントレーニングモード

iOS・Androidのスマートフォンとタブレットに対応

1 アプリをダウンロード



Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 接続



充電

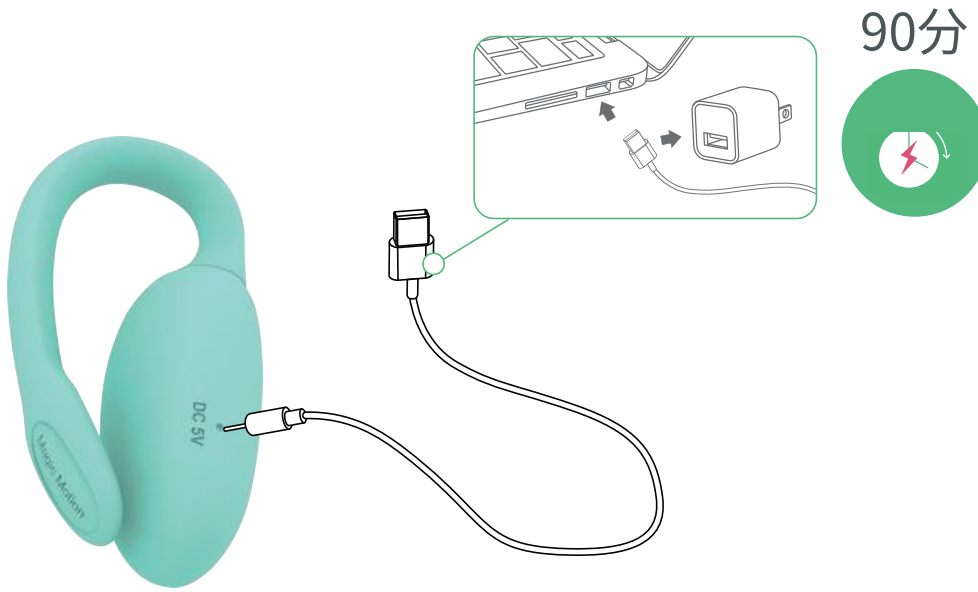

お手入れ



18歳以上：成人専用

仕様

モデル：SMV10

サイズ：Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

材質：シリコン/ ABS

充電電圧：DC 5V

充電時間：約90分

稼働時間：約150分

重さ：27g

防水評価：IPX4

最大充電電流：300mA

動作周波数帯：2402–2480 MHz

最大RF送信電力：0.95 dBm

カスタマーサポート

製品サポート・保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。型番と問題をお知らせください。保証の場合は購入証明を添えてください。


安全上の重要なお知らせ

安全な使用：18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。

充電時の安全：付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全：本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄：使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。表示されたIPX4等級を守ってください。充電ケーブルや電源には適用されません。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。

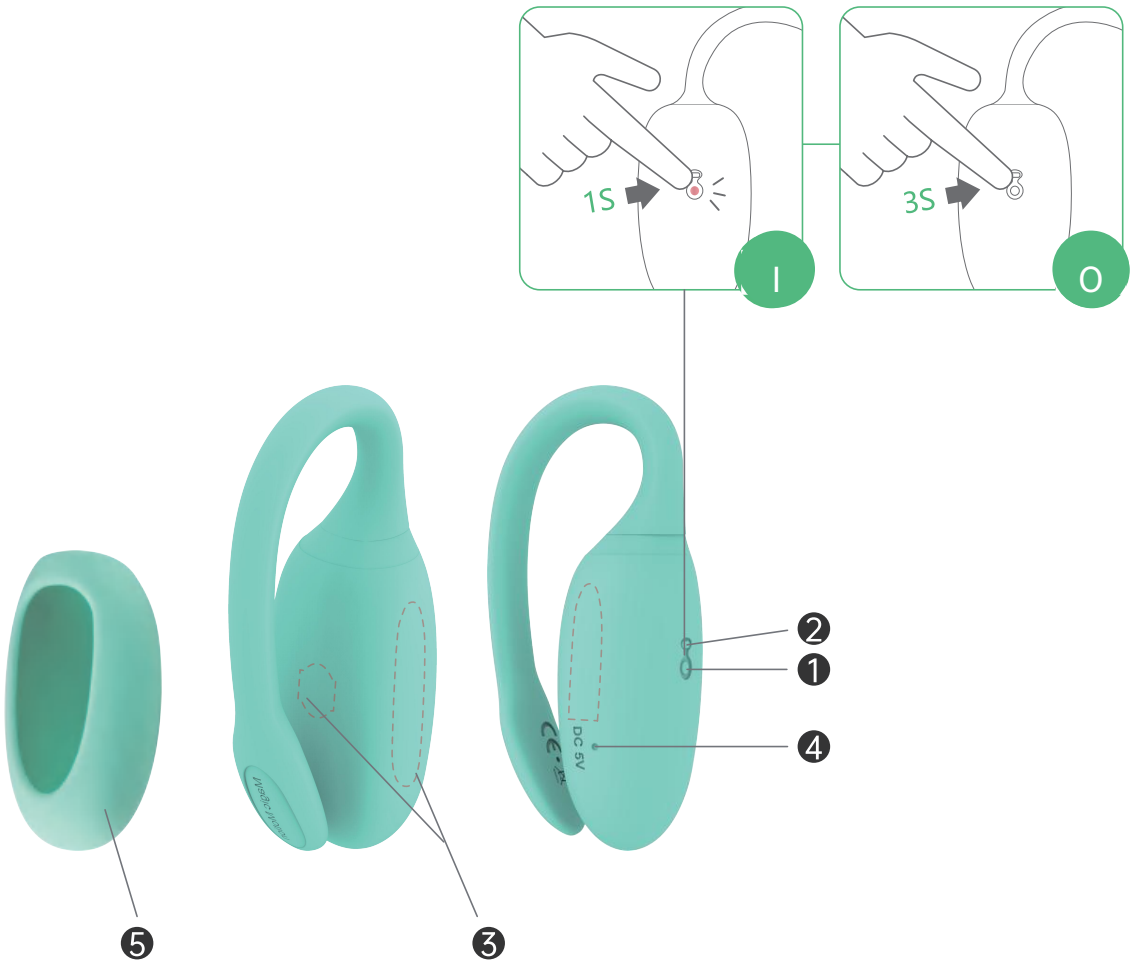

1 전원 켜기/끄기

켜짐 · 1 s　　꺼짐 · 3 s


2 LED 표시등


3 터치 센서 영역

4 충전 포트

5 Rejuve 커버

①

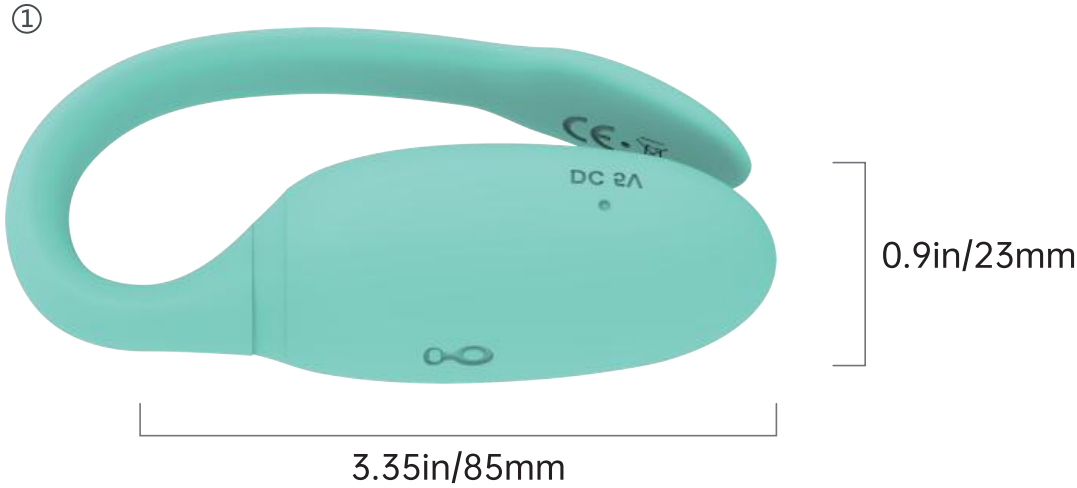

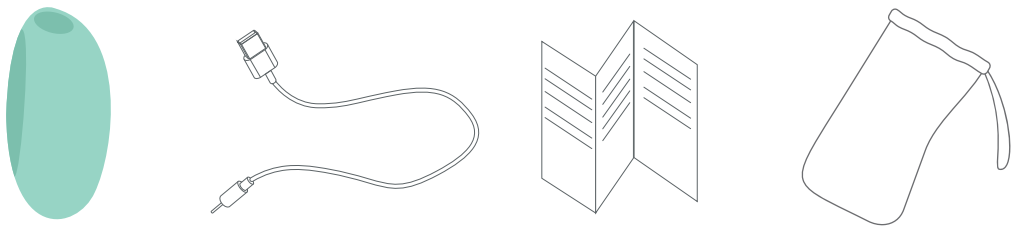

② ③ ④ ⑤

1 Kegel Rejuve


2 Rejuve 커버

3 충전 케이블

4 사용 설명서


5 보관 주머니

사용 준비

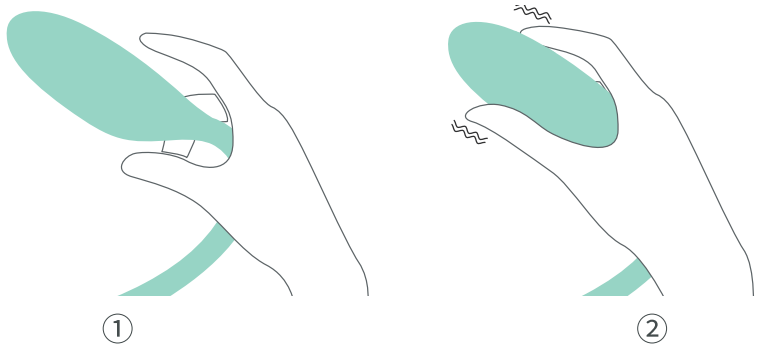

센서를 터치하세요

골반저근 찾기

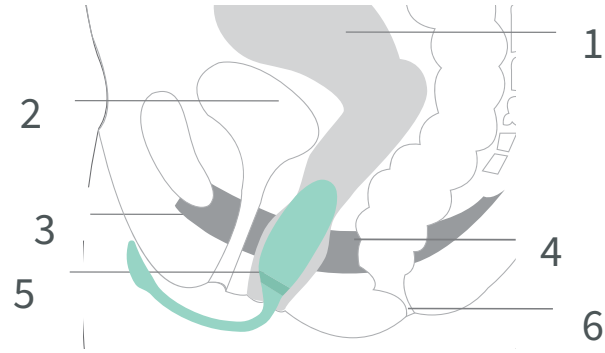


1 자궁
2 방광
3 요도
4 골반저근
5 질
6 항문



수성 윤활제

Rejuve 커버와 함께 Kegel Rejuve 사용

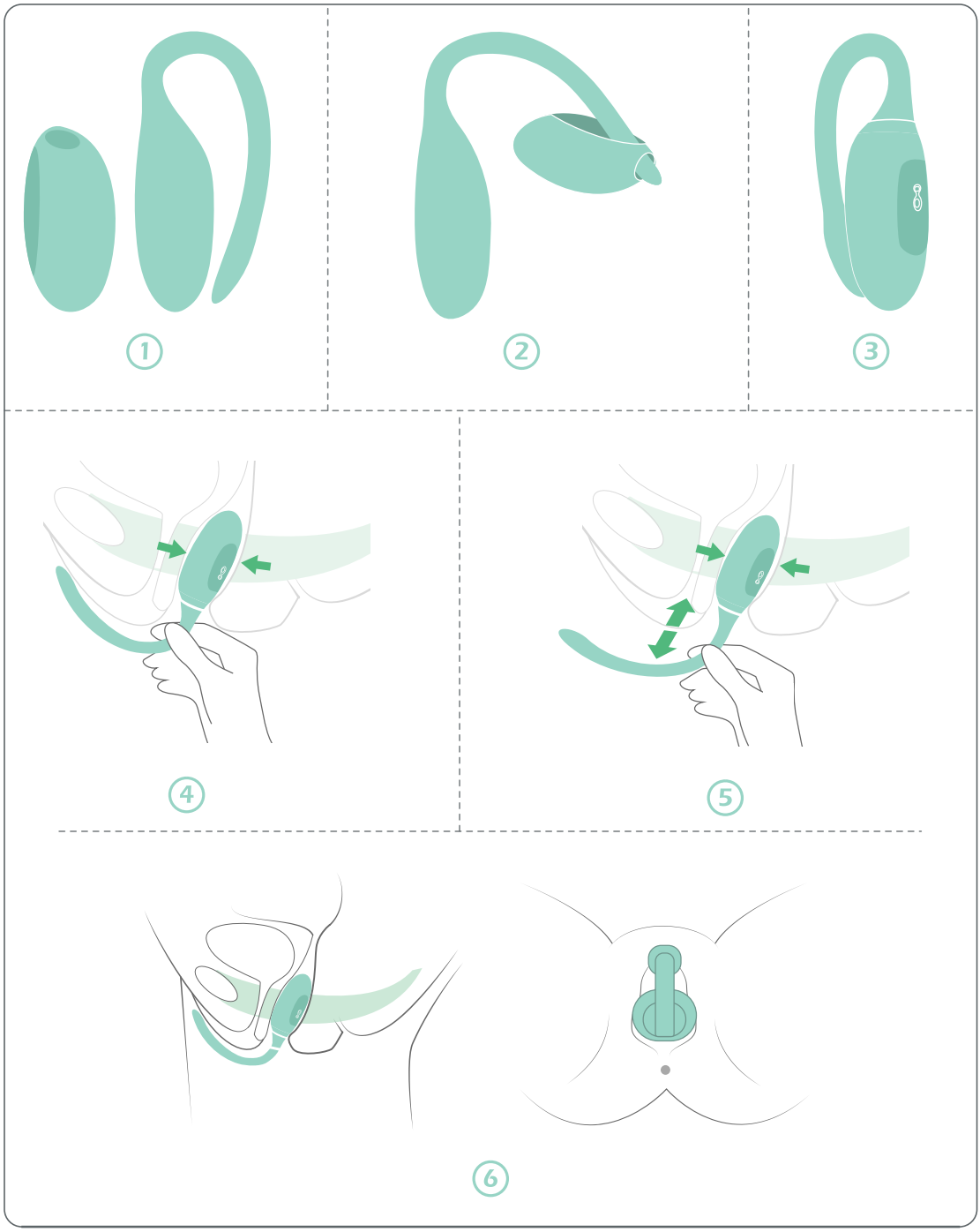

힘 피드백 훈련 모드

켜짐 · 1 s



스마트폰 훈련 모드

iOS 및 Android 스마트폰과 태블릿 지원

1 앱 다운로드

Magic Kegel


Available on the App Store

Google play

2 연결



충전

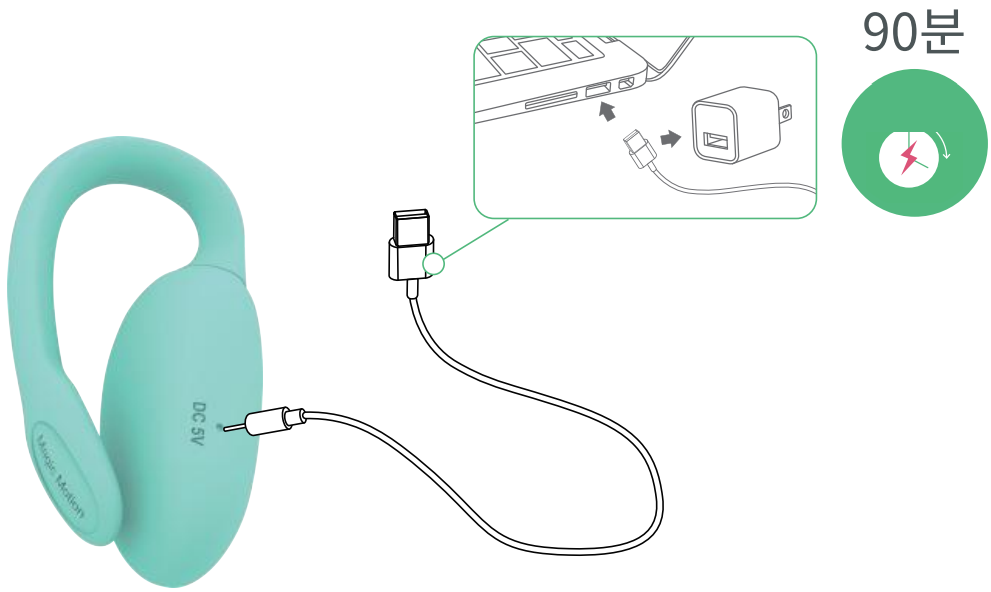

관리



18세 이상: 성인 전용

사양

모델: SMV10

크기: Φ0.91x3.35(6.89) inch / Φ23x85(175)mm

재질: 실리콘 / ABS

무게: 27g

충전 전압: DC 5V

최대 충전 전류: 300mA

충전 시간: 약 90분

작동 시간: 약 150분

방수 등급: IPX4

작동 주파수 대역: 2402–2480 MHz

최대 RF 송신 전력: 0.95 dBm

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 모델명과 문제를 알려주세요. 보증 문의에는 구매 증빙을 첨부하세요.

중요 안전 정보

안전한 사용: 18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전: 동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전: 기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기: 사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 표시된 IPX4 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

FitCute®

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER

Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,

Minhang District, Shanghai, China

EC	REP

Interslash BV

Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL