
Kegel Master

Gen 2

Your Personal Coach Kegel Exercise

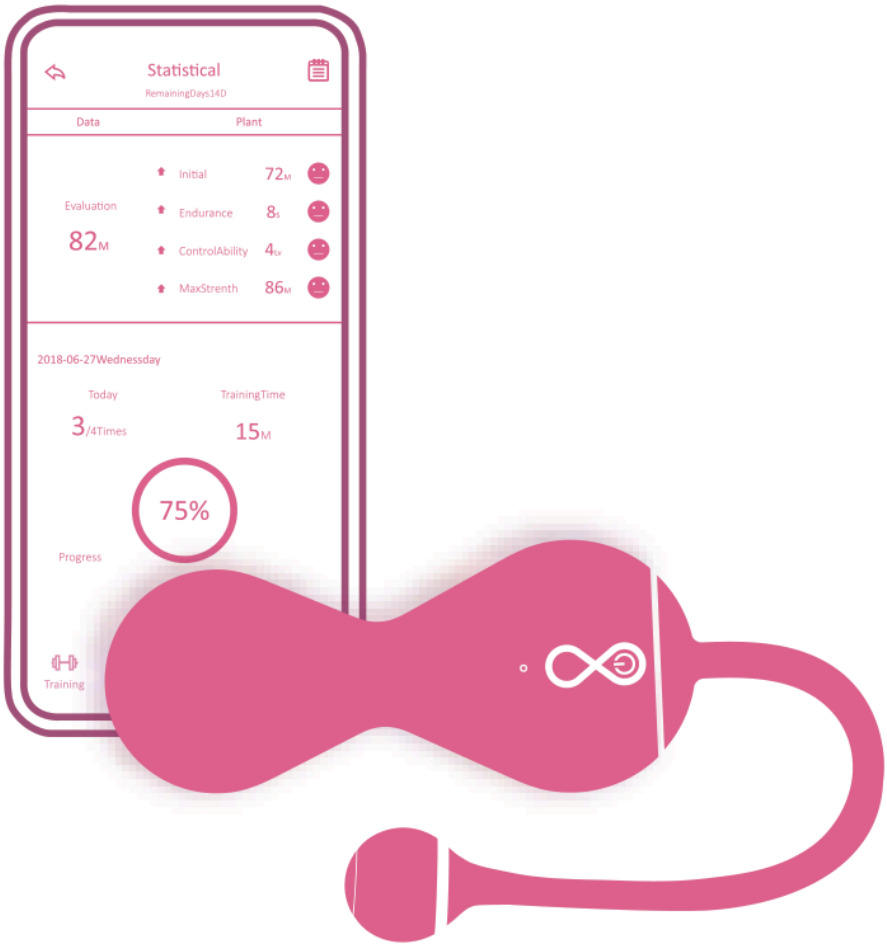

User Guide

www.magicsmotion.com

Contents

English 3

Français 11

Deutsch 19

Nederlands 27

Español 35

Português 43

Italiano 51

Svenska 59

Polski 67

Čeština 75

Русский 83

Українська 91


简体中文 99

繁體中文 107


日本語 115

한국어 123

Manufacturer & EC REP 131

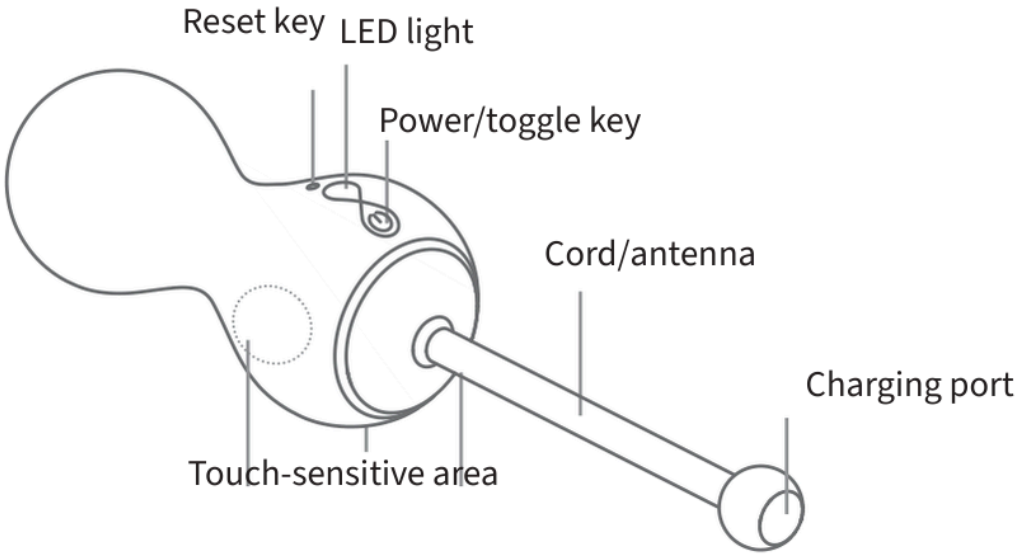

Package List

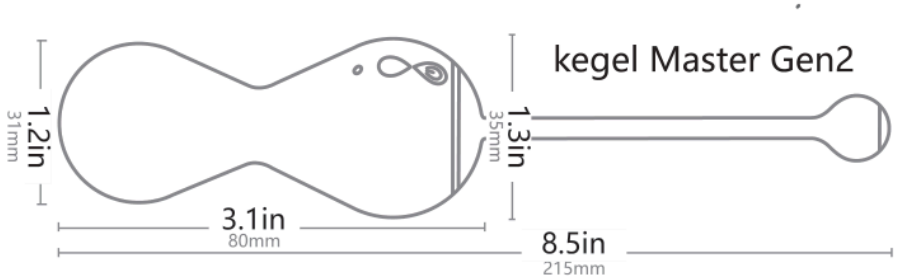



Anchor



Magnetic USB cable



User guide



Storage bag

Smartphone Workout Mode

Step1: APP Download

1. Search for "**Magic Kegel**" in IOS App Store or Google Play


2. Scan below QR code to download directly.

3. Download from


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Step2: Run "Magic Kegel" APP


Turn on your
Kegel Master Gen 2 device

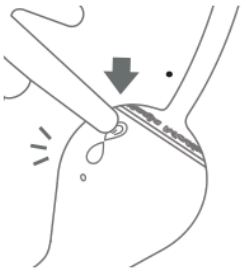

Follow the app guide to connect.

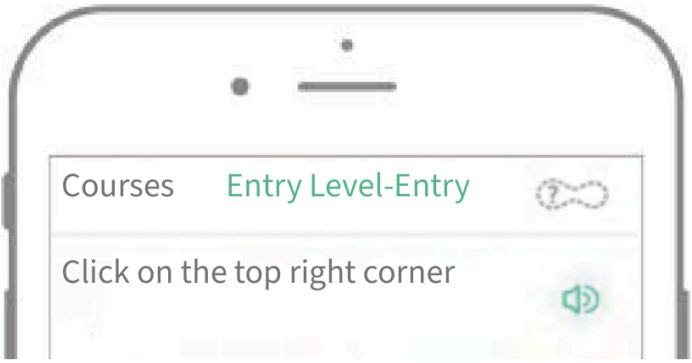

The device is connected when this message appears.

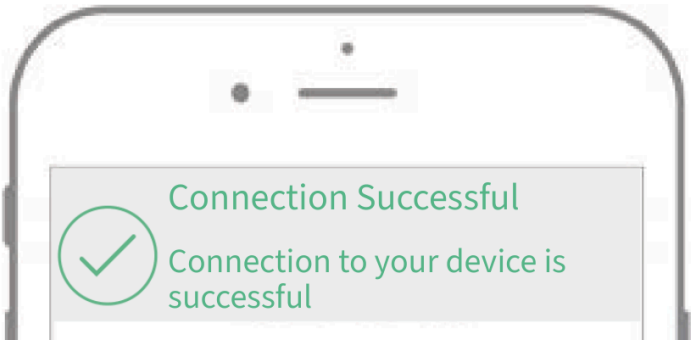

Step3: Enjoy Kegel Training


Find a comfortable position for inserting. Many women find lying on the back or standing as most comfortable. Kegel Master Gen 2 LED facing upward, please check below picture. For pushing forward easily, apply a bit water-based lubricant on the top of device or on the condom.



Tips: Please leave the cord of Kegel Master Gen 2 outside the body, at least 4 cm length, to keep good signal without barrier.

Step4: Power Off


The device will turn off after pressing Power Key for 3 seconds, the LED light will turn off to indicate turn-off status.

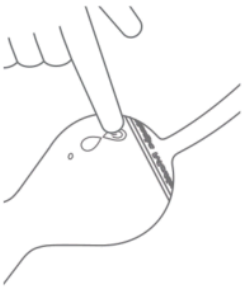

Tips: Kegel Master Gen 2 will turn off automatically when it disconnected with App in 5 minutes.


Independent Mode (Without SmartPhone) **- Squeeze for vibration**

Turn on Kegel Master Gen 2 and squeeze pelvic floor muscles to control the strength of vibration of device.

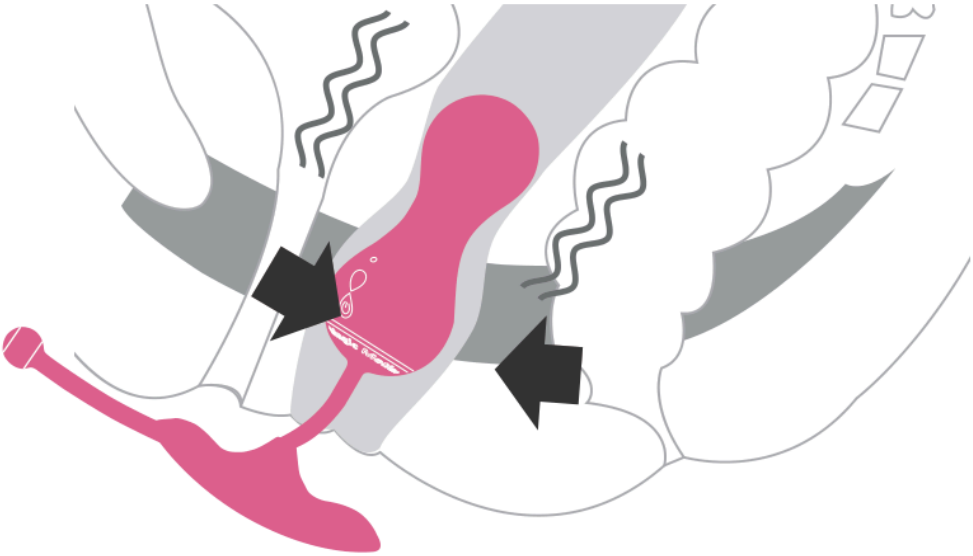


Charging Battery


Step 1 Open the cap of the magnetic charging port for charging.

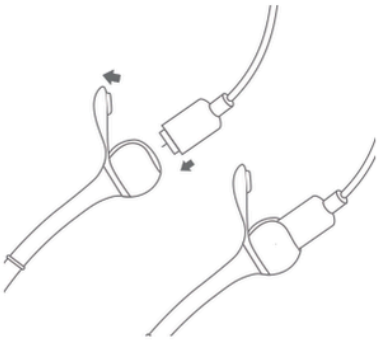

Step 2 Connect USB port to smartphone power adapter, laptop, Computer or power charging bank.

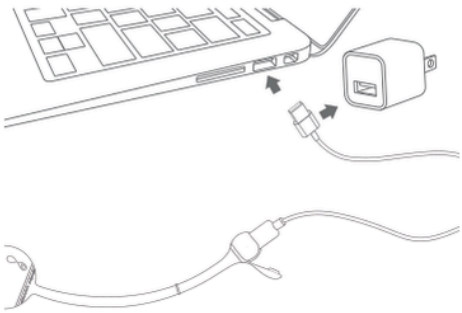

Step3 LED light on to show charging normally.The LED light will be off when the charging is finished.

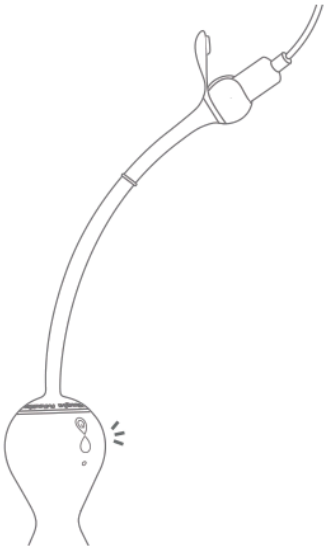

Tips: For first use, please charge the battery for 1 hour after the power is fully used.

Cleaning Magic kegel Master Gen2

Before Usage


Please clean Kegel Master Gen 2 with cleanser or warm water and anti-bacterial soap before first use.

After Usage

Please clean Kegel Master Gen 2 with cleanser or warm water and anti-bacterial soap and dry it.

Storage

Keep Master in a cool and ventilated place. Avoid direct sunlight and keep it away from children.

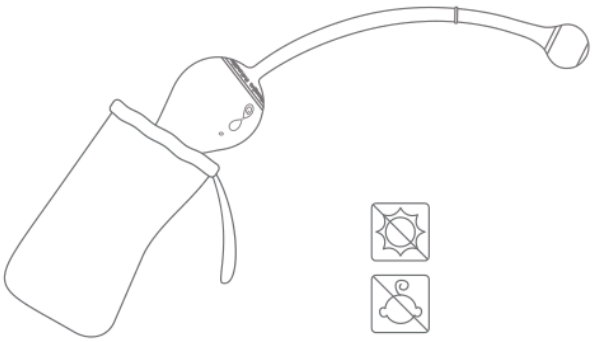

Specification

Model: SMV02

Material: Body-safe silicone / ABS

Weight: 58g

Battery: 200mAh

Charging voltage: 5V

Maximum Charging Current: 500mA

Charging time: 60 minutes

Working time: 180 minutes

Waterproof: IPX6

Operating Frequency Band: 2402–2480 MHz

Maximum RF Transmit Power: −2.94 dBm

Important Safety Information

Safe Use: For adults aged 18 and over only. Use only as described in this guide. Keep away from children. Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell. Do not use the toy if it is unusually hot, damaged or deformed, or discoloured.


Charging Safety: Use the supplied charging cable and a power supply compatible with the device's rated input. Keep charging contacts dry and the cable and power supply away from water. Do not use during charging. Disconnect when fully charged.

Battery Safety: Do not disassemble, puncture or heat the device or battery, or expose them to fire. Stop use and charging if there is unusual heat, swelling, leakage or damage.

Cleaning, Storage & Disposal: Clean before and after use according to this guide, and dry before storage. Observe the stated IPX6 rating; it does not apply to the charging cable or power supply. Store dry, away from sunlight and children. Take the device and its battery to an appropriate electronics/battery collection point; do not dispose of them with household waste.


Customer Support


For support or warranty questions, email customercare@magicsmotion.com. Include the model and issue; include proof of purchase for warranty questions.

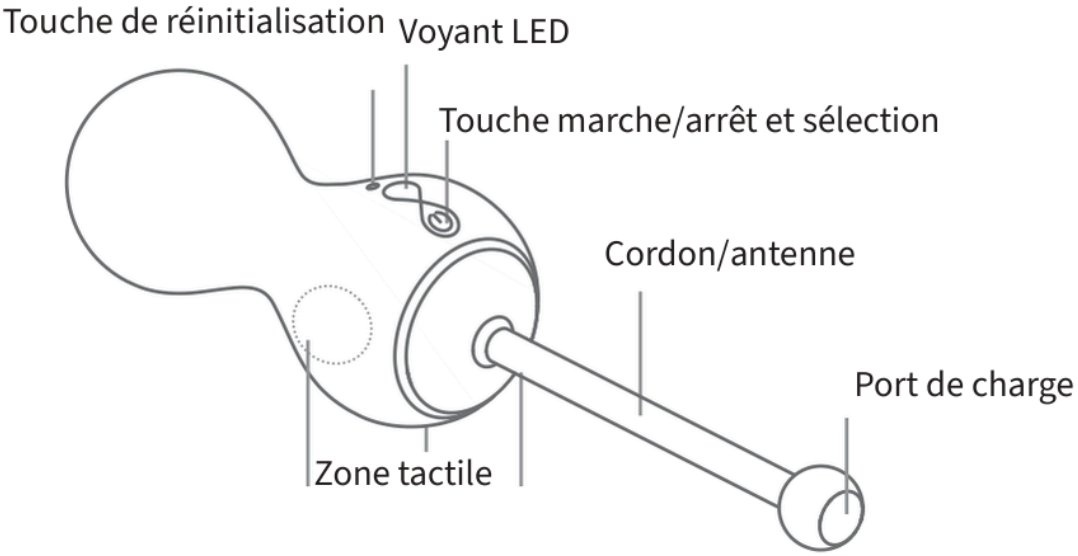

Liste de colisage

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

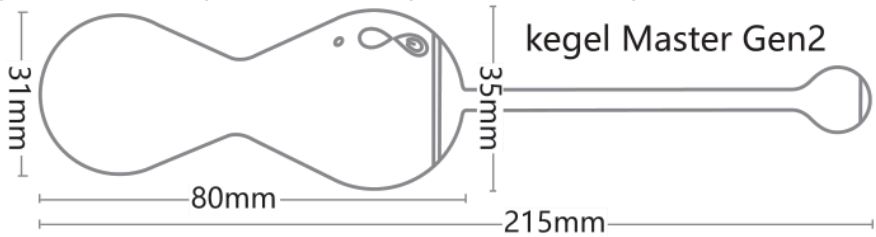

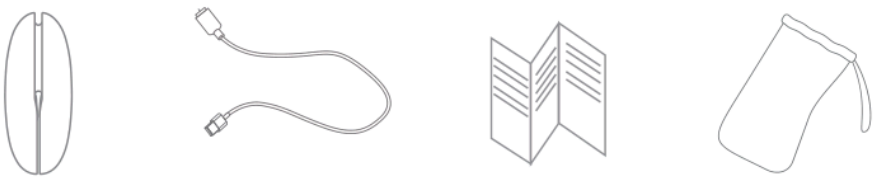

Ancre

Câble USB magnétique

Guide d'utilisation

Pochette de rangement

Première utilisation

Etape 1: Téléchargement de l'APP

1.Recherchez **"Magic Kegel "**
dans l'App Store IOS ou Google Play




2. Scan ci-dessous le code QR à télécharger directement.

3. Télécharger à partir de.


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Etape 2 Exécuter " Magic Kegel " APP


Allumez votre Kegel Master Gen2.

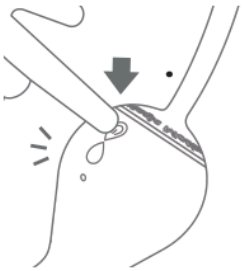

Suivez le guide de l'application pour vous connecter.

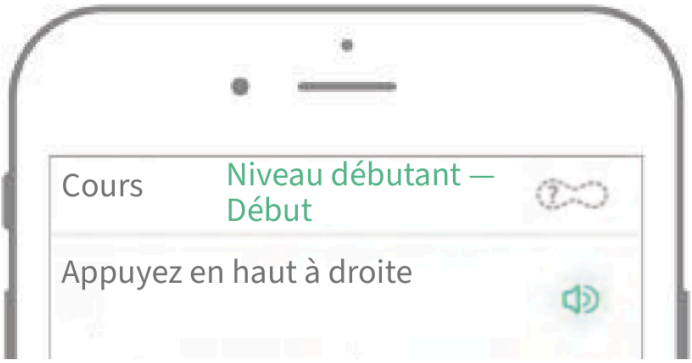


La connexion est établie lorsque « Connexion réussie » apparaît.

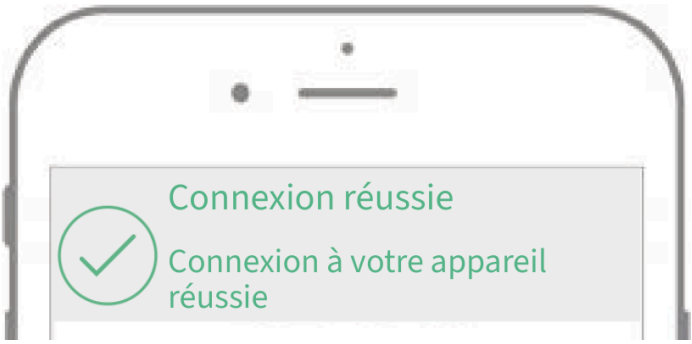

Étape 3 : profitez de l'entraînement Kegel


Trouvez une position confortable pour insérer l'appareil. Beaucoup de femmes préfèrent s'allonger sur le dos ou rester debout. Insérez Kegel Master Gen2 avec le voyant LED vers le haut, comme illustré ci-dessous. Pour faciliter l'insertion, appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur le bout de l'appareil ou sur le préservatif.

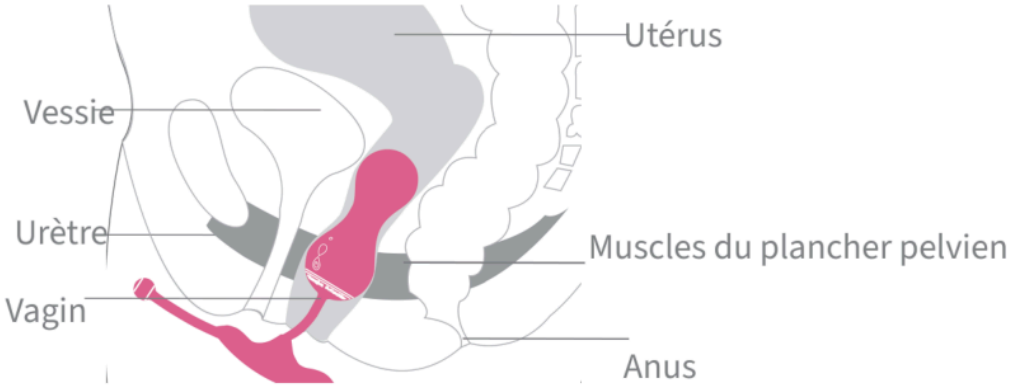

Conseil : laissez au moins 4 cm du cordon de Kegel Master Gen2 hors du corps pour maintenir un bon signal sans obstacle.

Étape 4 : arrêt

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil ; le voyant LED s'éteint pour indiquer l'arrêt.

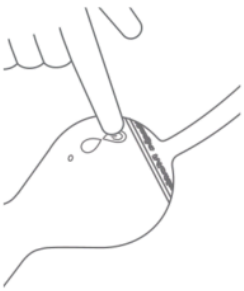


Conseil : Kegel Master Gen2 s'éteint automatiquement après 5 minutes de déconnexion de l'application.

Modes indépendants(Sans SmartPhone)


Pression pour mode vibration (mode par défaut)

Activez Kegel Master Gen2 et pressez les muscles du plancher pelvien pour contrôler la force des vibrations de Kegel Master Gen2.

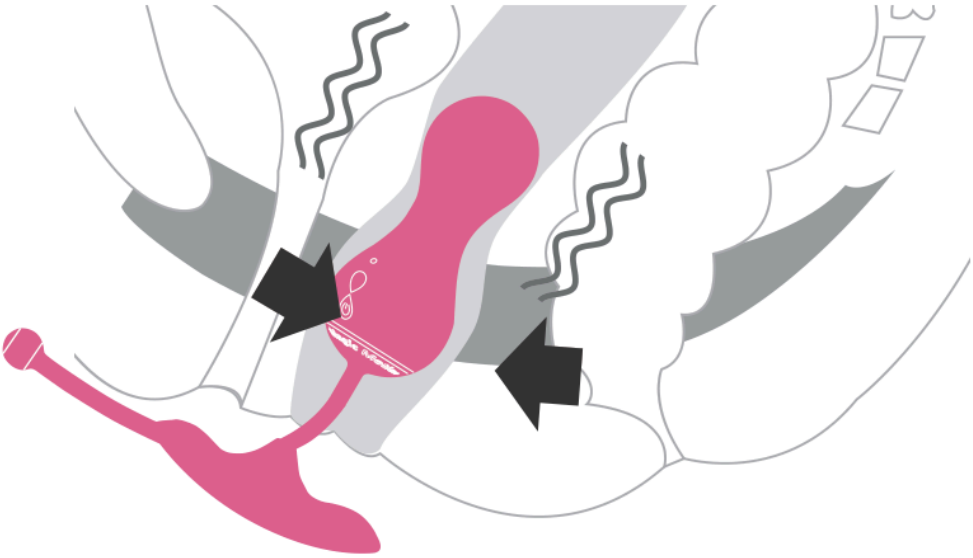


Recharge de la batterie


Étape 1 Ouvrez le capuchon du port de charge magnétique pour recharger.

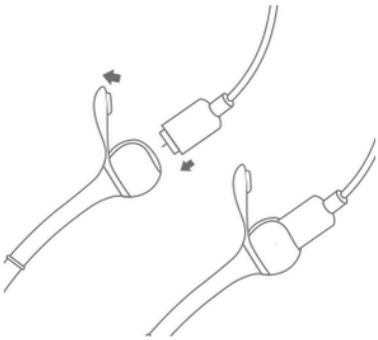

Étape 2 Branchez le connecteur USB sur un adaptateur de smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur ou une batterie externe.

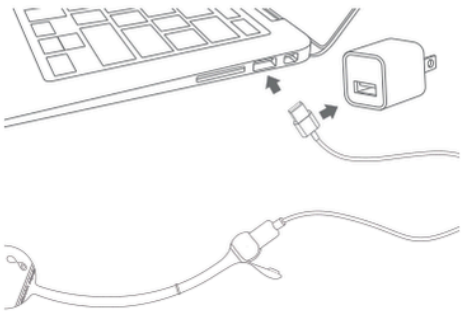

Etape3 Le voyant DEL allumé indique que la charge est normale.Le voyant DEL s'éteint lorsque la charge est terminée.

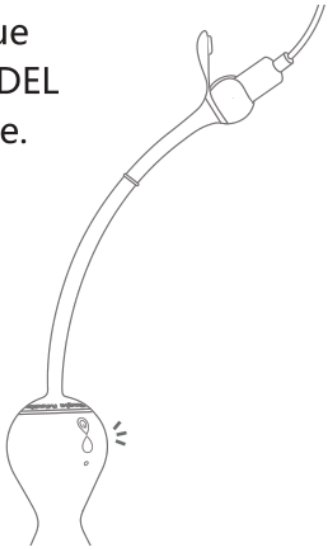

Astuce : à la première utilisation, chargez la batterie 1 heure après décharge complète.

Nettoyage du Kegel Master Gen2

Avant Usage


Veuillez nettoyer Kegel Master Gen2 avec un nettoyant ou de l'eau chaude et du savon antibactérien avant la première utilisation.

Après usage

Veuillez nettoyer Kegel Master Gen2 avec un nettoyant ou de l'eau tiède et du savon antibactérien et séchez-le.

Stockage

Conserver Kegel Master Gen2 dans un endroit frais et ventilé. Évitez les rayons directs du soleil et tenez-le à l'écart des enfants.

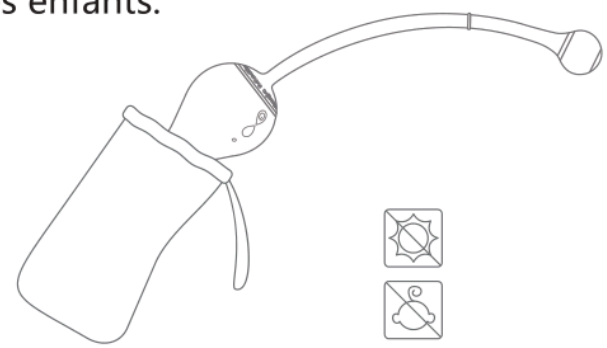

Spécification

Modèle: SMV02

Matériau: silicone de sécurité pour le corps / ABS

Poids: 58g

Tension de charge: 5V

Courant de charge maximum: 500mA

Temps de charge: 60 minutes

Temps de travail: 180 minutes

Étanche: IPX6

Batterie: 200mAh

Bande de fréquences de fonctionnement: 2402–2480 MHz
Puissance RF maximale d’émission: −2.94 dBm

Informations de sécurité importantes

Sécurité d'utilisation: Réservé aux adultes de 18 ans et plus. Utiliser uniquement comme décrit dans ce guide. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessures ! Enlevez les piercings ou bijoux de la zone intime avant utilisation. N’utilisez pas le produit sur une peau irritée ou blessée. Arrêtez en cas de douleur ou d’inconfort. Ne l’utilisez pas s’il est anormalement chaud, endommagé ou déformé, ou décoloré.


Sécurité de charge: Utiliser le câble fourni et une alimentation compatible avec l'entrée nominale de l'appareil. Garder les contacts secs et le câble et l'alimentation à l'écart de l'eau. Ne pas utiliser pendant la charge. Débrancher une fois la charge terminée.

Sécurité de la batterie: Ne pas démonter, percer ou chauffer l'appareil ou la batterie, ni les exposer au feu. Cesser l'utilisation et la charge en cas de chaleur anormale, de gonflement, de fuite ou de dommage.

Nettoyage, rangement et élimination: Nettoyer avant et après utilisation selon ce guide, puis sécher avant rangement. Respecter l'indice IPX6 indiqué ; il ne s'applique pas au câble de charge ni à l'alimentation. Ranger au sec, à l’abri du soleil et des enfants. Déposer l’appareil et sa batterie dans un point de collecte adapté aux appareils électroniques et aux batteries ; ne pas les jeter avec les déchets ménagers.


Assistance clientèle

Pour l’assistance ou la garantie : customercare@magicsmotion.com. Indiquez le modèle et le problème ; joignez la preuve d’achat pour la garantie.

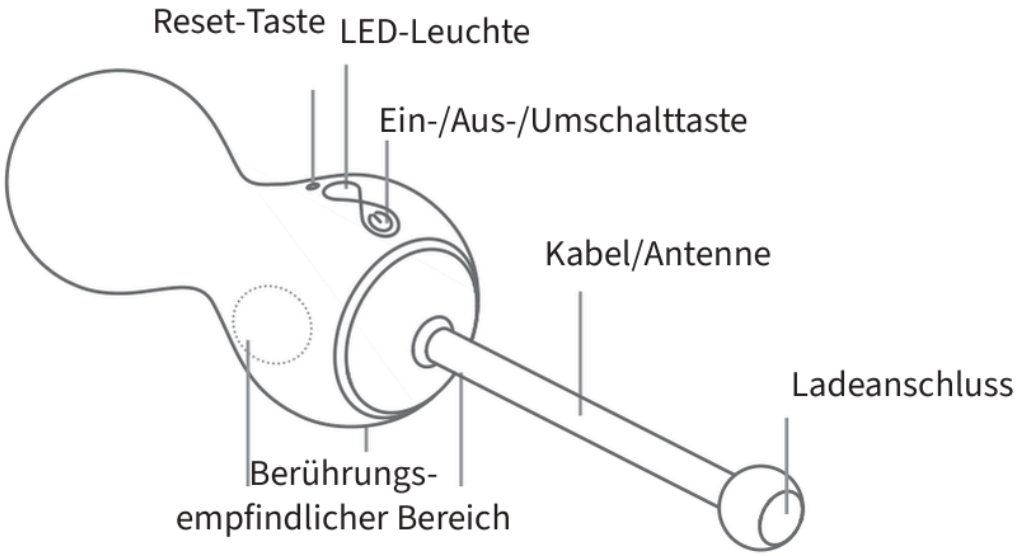

Paketliste

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

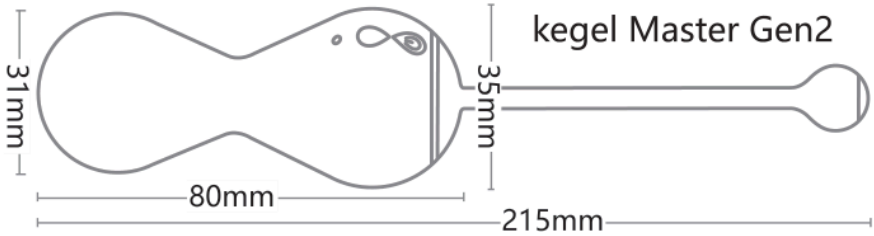



Anker



Magnetisches USB-Kabel



Bedienungs-anleitung



Aufbewahrungs-beutel

Smartphone Workout-Modus

Schritt 1: APP Download

1.Suchen Sie nach “Magic Kegel” im iOS App Store oder Google Play


2. Scannen Sie unter dem QR-Code, den Sie direkt herunterladen können.

3. Download von


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Schritt 2: “Magic Kegel” APP starten


Schalten Sie Ihr Kegel Master Gen 2 Gerät ein.

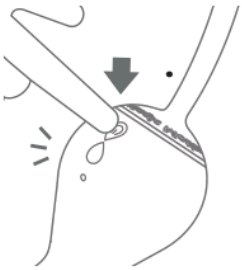

Folgen Sie der App-Anleitung zum Verbinden.

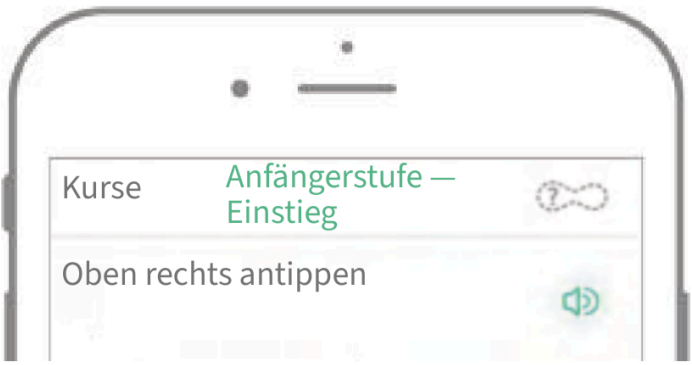

Die Verbindung steht, wenn „Verbindung erfolgreich“ erscheint.

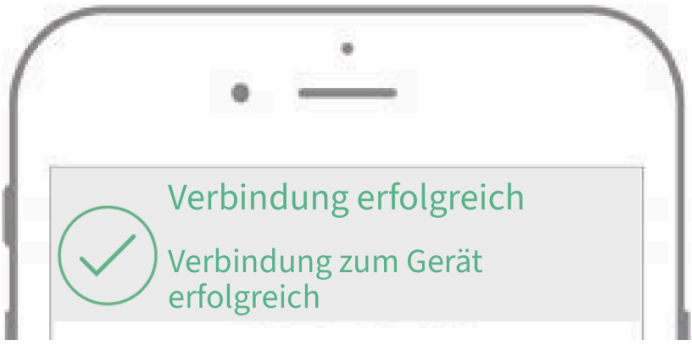

Schritt 3: Kegel-Training


Wählen Sie eine bequeme Position zum Einführen. Viele Frauen empfinden Rückenlage oder Stehen als angenehm. Führen Sie Kegel Master Gen2 mit der LED nach oben ein, wie unten abgebildet. Tragen Sie etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf die Gerätespitze oder das Kondom auf, um das Einführen zu erleichtern.



Tipp: Lassen Sie mindestens 4 cm des Kabels von Kegel Master Gen2 außerhalb des Körpers, damit das Signal ungehindert empfangen wird.

Schritt 4: Ausschalten


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die LED erlischt und zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

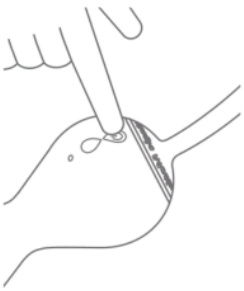

Tipp: Kegel Master Gen2 schaltet sich automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang von der App getrennt ist.


Unabhängiger Modus (ohne SmartPhone) **- für Vibration drücken**

Schalten Sie Kegel Master Gen 2 ein und drücken Sie die Beckenbodenmuskulatur, um die Stärke der Vibration des Gerätes zu kontrollieren

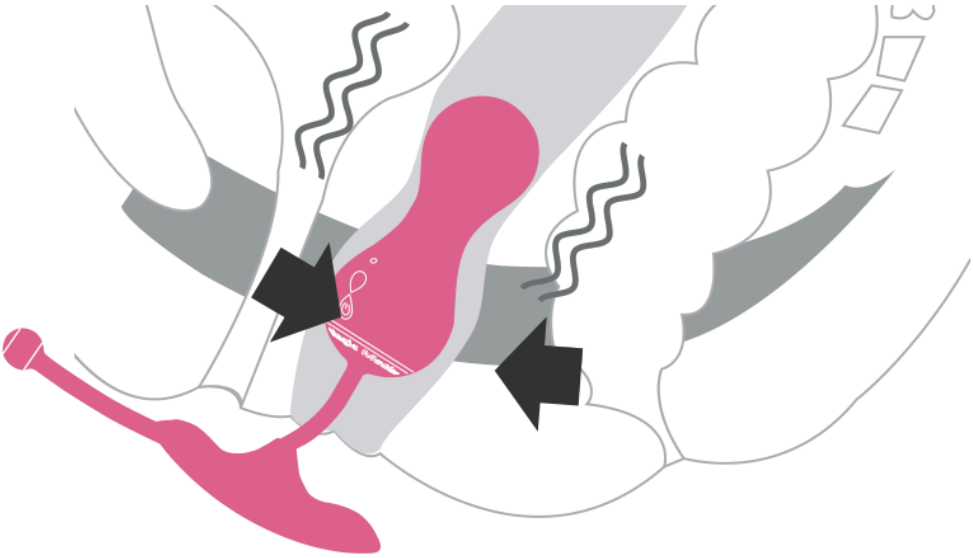


Akku laden


Schritt 1 Öffnen Sie zum Laden die Kappe des magnetischen Ladeanschlusses.

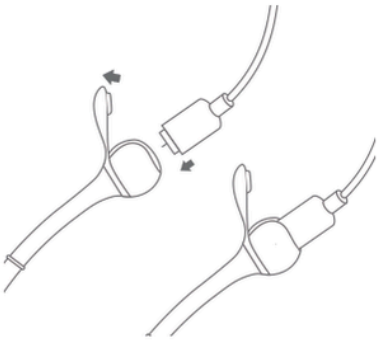

Schritt 2 Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem Smartphone-Netzteil, Laptop, Computer oder einer Powerbank.

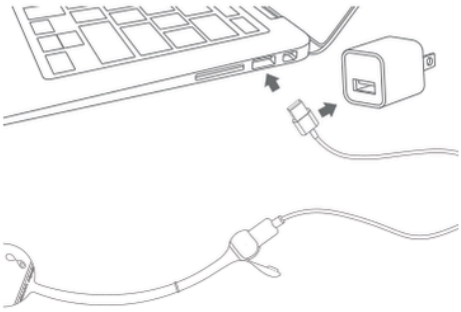

Schritt 3 Die LED leuchtet auf, um den normalen Ladevorgang anzuzeigen. Die LED-Leuchte erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

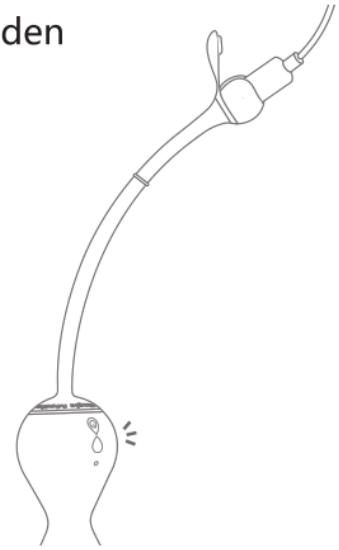

Tipps: Für den ersten Gebrauch laden Sie den Akku bitte 1 Stunde lang auf, nachdem der Strom vollständig verbraucht ist.

Reinigung von Kegel Master Gen 2

Vor der Verwendung


Bitte reinigen Sie Kegel Master Gen 2 vor dem ersten Gebrauch mit Reiniger oder warmem Wasser und antibakterieller Seife.

Nach der Verwendung

Bitte reinigen Sie Kegel Master Gen 2 mit Reiniger oder warmem Wasser und antibakterieller Seife und trocknen Sie es.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Master an einem kühlen und belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie sie von Kindern fern.

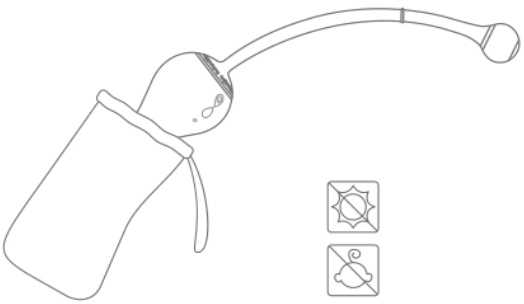

Spezifikation

Modell: SMV02

Material: Körpersicheres Silikon / ABS

Gewicht: 58g

Ladespannung: 5V

Maximaler Ladestrom: 500mA

Ladezeit: 60 Minuten

Arbeitszeit: 180 Minuten

Wasserdicht: IPX6

Batterie: 200mAh

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale RF-Sendeleistung: −2.94 dBm

Wichtige Sicherheitsinformationen

Sichere Verwendung: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nur gemäß dieser Anleitung verwenden. Von Kindern fernhalten. Verletzungsgefahr! Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brechen Sie die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab. Nicht verwenden, wenn es ungewöhnlich heiß, beschädigt oder verformt oder verfärbt ist.


Sicheres Laden: Das mitgelieferte Ladekabel und eine mit den Nenneingangsdaten des Geräts kompatible Stromversorgung verwenden. Ladekontakte trocken halten und Kabel sowie Stromversorgung von Wasser fernhalten. Während des Ladens nicht verwenden. Nach vollständiger Ladung trennen.

Akkusicherheit: Gerät oder Akku nicht zerlegen, durchstechen, erhitzen oder Feuer aussetzen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Aufblähung, Auslaufen oder Beschädigung Verwendung und Laden beenden.


Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung: Vor und nach der Verwendung gemäß dieser Anleitung reinigen und vor der Aufbewahrung trocknen. Die angegebene Schutzart IPX6 beachten; sie gilt nicht für Ladekabel oder Netzteil. Trocken, vor Sonne und Kindern geschützt aufbewahren. Gerät und Akku zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien bringen; nicht im Hausmüll entsorgen.

Kundensupport

Für Support- oder Garantiefragen: customercare@magicsmotion.com. Modell und Problem angeben; bei Garantiefragen den Kaufbeleg beifügen.

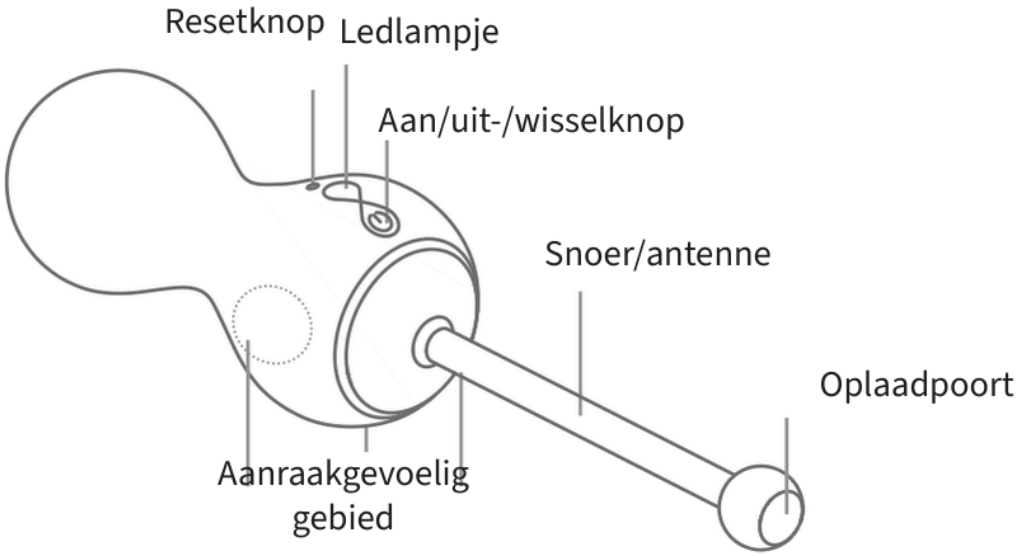

Inhoud verpakking

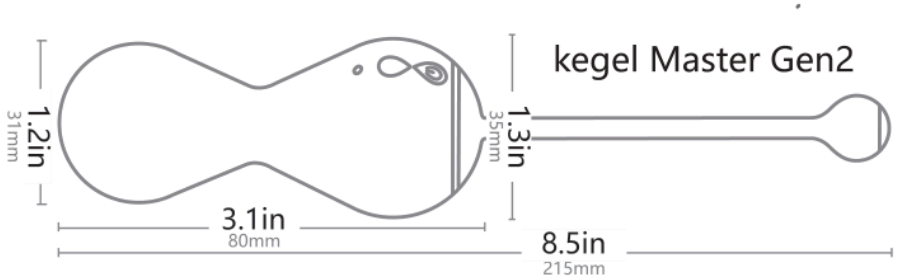


Anker


Magnetische USB-kabel


Gebruikers-handleiding


Opbergzakje

Trainingsmodus met smartphone


Stap 1: app downloaden

1. Zoek naar “Magic Kegel” in de iOS App Store of Google Play.
2. Scan de QR-code hieronder om direct te downloaden.
3. Download via


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Stap 2: start de app “Magic Kegel”

Zet je Kegel Master Gen2 aan.

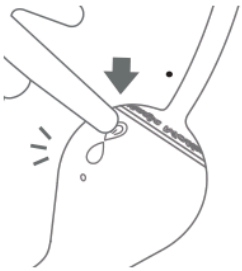

Volg de instructies in de app om verbinding te maken.

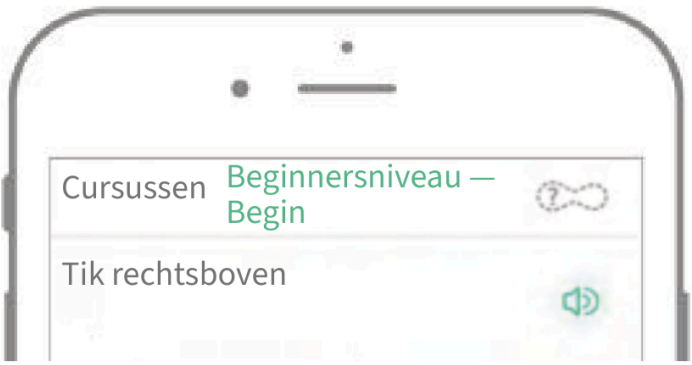


De verbinding is geslaagd wanneer “Verbinding geslaagd” verschijnt.



Stap 3: geniet van kegeltraining


Zoek een comfortabele houding om het apparaat in te brengen. Veel vrouwen vinden liggen op de rug of staan het prettigst. Breng Kegel Master Gen2 in met het ledlampje naar boven, zie de afbeelding hieronder. Breng voor gemakkelijk inbrengen wat glijmiddel op waterbasis aan op de punt van het apparaat of op het condoom.

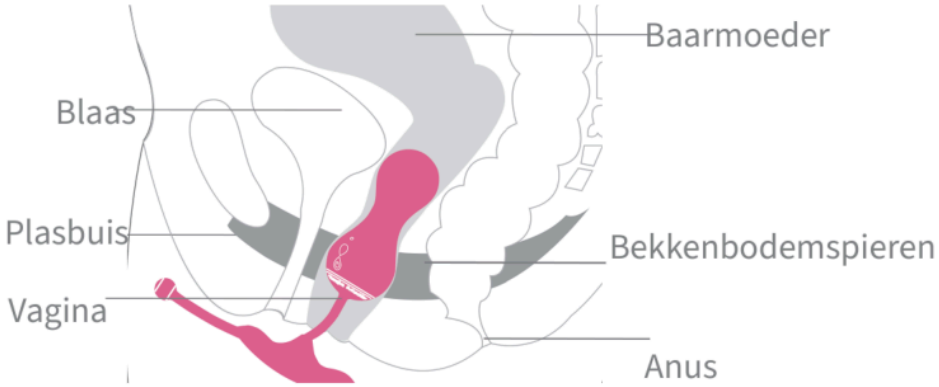

Tip: laat minstens 4 cm van het snoer van Kegel Master Gen2 buiten het lichaam, voor een goed signaal zonder belemmering.

Stap 4: uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen; het ledlampje gaat uit om aan te geven dat het apparaat uit is.

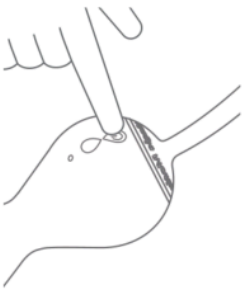


Tip: Kegel Master Gen2 schakelt automatisch uit als het 5 minuten niet met de app verbonden is.

Onafhankelijke modus (zonder smartphone)


- Knijpen voor vibratie

Zet Kegel Master Gen2 aan en span je bekkenbodemspieren aan om de sterkte van de vibratie te regelen.

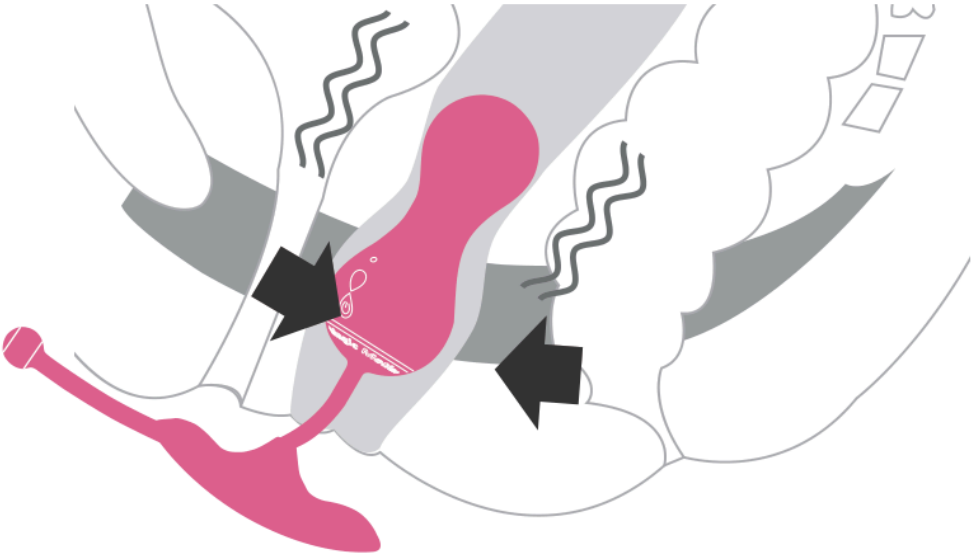


Batterij opladen


Stap 1 Open het kapje van de magnetische oplaadpoort om op te laden.

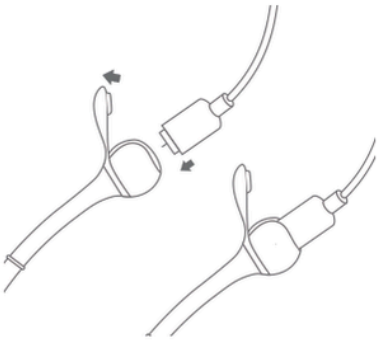

Stap 2 Sluit de USB-stekker aan op een smartphone-adapter, laptop, computer of powerbank.

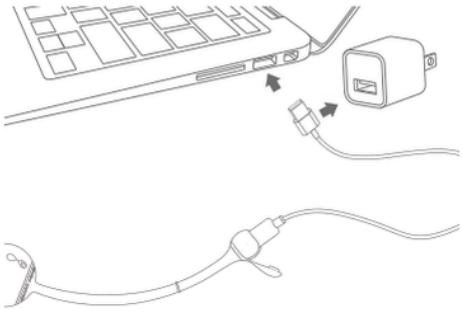

Stap 3 Het ledlampje brandt om aan te geven dat het apparaat normaal oplaadt. Het ledlampje gaat uit wanneer het opladen voltooid is.

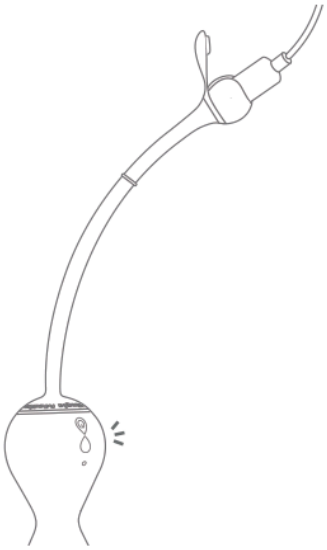

Tip: laad de batterij bij het eerste gebruik 1 uur op nadat deze volledig leeg is.

Kegel Master Gen2 reinigen

Voor gebruik


Reinig Kegel Master Gen2 voor het eerste gebruik met een reinigingsmiddel of warm water en antibacteriële zeep.

Na gebruik

Reinig Kegel Master Gen2 met een reinigingsmiddel of warm water en antibacteriële zeep en droog het af.

Opbergen

Bewaar het apparaat op een koele, geventileerde plaats. Vermijd direct zonlicht en houd het buiten bereik van kinderen.

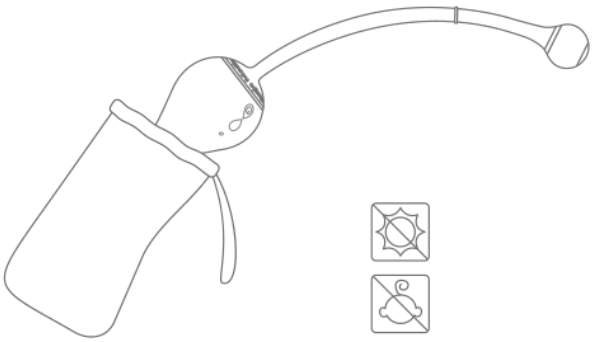

Specificaties

Model: SMV02

Materiaal: lichaamsveilige siliconen / ABS

Gewicht: 58g

Batterij: 200mAh

Laadspanning: 5V

Maximale laadstroom: 500mA

Oplaadtijd: 60 minuten

Gebruiksduur: 180 minuten

Waterdichtheid: IPX6

Werkfrequentieband: 2402–2480 MHz

Maximaal RF-zendvermogen: −2.94 dBm

Belangrijke veiligheidsinformatie

Veilig gebruik: Alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Buiten bereik van kinderen houden. Risico op letsel! Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied vóór gebruik. Gebruik het product niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Stop bij pijn of onwel worden. Gebruik het niet als het: 1. ongewoon heet is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.


Veilig opladen: Gebruik de meegeleverde laadkabel en een voeding die past bij de nominale ingangsspecificaties van het apparaat. Houd laadcontacten droog en kabel en voeding uit de buurt van water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Koppel los wanneer volledig opgeladen.

Batterijveiligheid: Demonteer, doorboor of verhit het apparaat of de batterij niet en stel ze niet bloot aan vuur. Stop het gebruik en opladen bij abnormale warmte, zwelling, lekkage of schade.

Reiniging, opslag en afvoer: Reinig vóór en na gebruik volgens deze handleiding en droog vóór het opbergen. Houd rekening met de opgegeven IPX6-classificatie; deze geldt niet voor de laadkabel of voeding. Bewaar droog, uit de zon en buiten bereik van kinderen. Lever het apparaat en de batterij in bij een geschikt inzamelpunt voor elektronica en batterijen; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.


Klantenondersteuning

Voor ondersteuning of garantievragen: customercare@magicsmotion.com. Vermeld model en probleem; voeg bij garantievragen het aankoopbewijs toe.

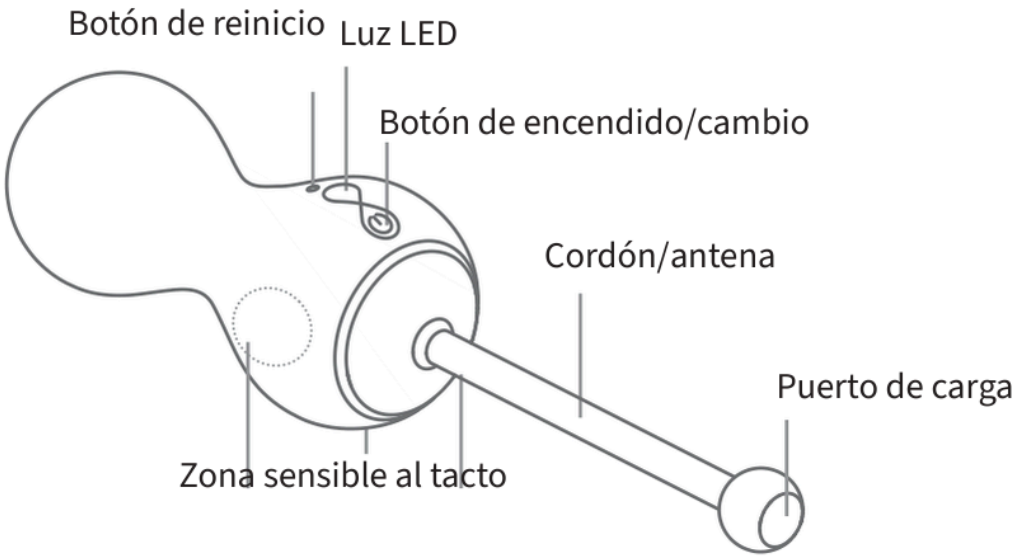

Lista de Empaque

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

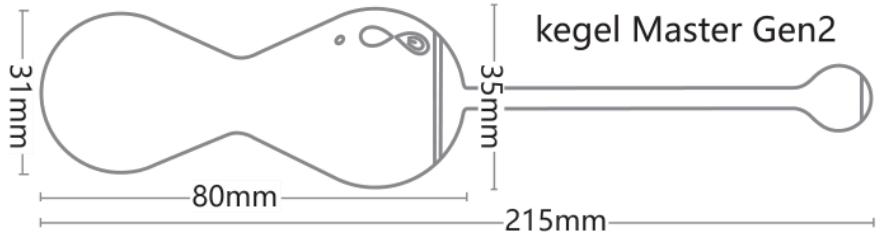



Ancla



Cable USB magnético



Guía de usuario



Bolsa de almacenamiento

Modo de Entrenamiento para Teléfono Inteligente

Paso 1: Descargue la Aplicación

1. Busque **"Magic Kegel"** en IOS App Store o Google Play


2. Escanee el código QR para descargarlo directamente.

3. Descargue desde


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Paso 2:Ejecute la Aplicación "Magic Kegel"


Encienda su dispositivo Kegel Master Gen 2.

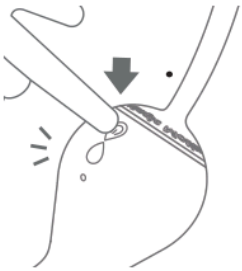

Sigue las instrucciones de la app para conectar.

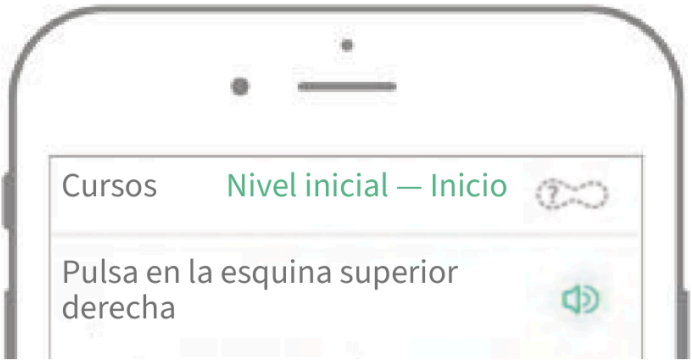


La conexión se ha establecido cuando aparece «Conexión correcta».

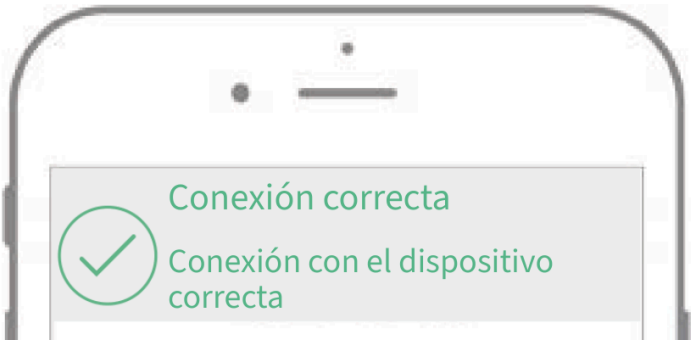

Paso 3: disfruta del entrenamiento Kegel


Busca una postura cómoda para insertar el dispositivo. Muchas mujeres prefieren tumbarse boca arriba o estar de pie. Introduce Kegel Master Gen2 con el LED hacia arriba, como se muestra abajo. Para facilitar la inserción, aplica un poco de lubricante a base de agua en la punta del dispositivo o en el preservativo.

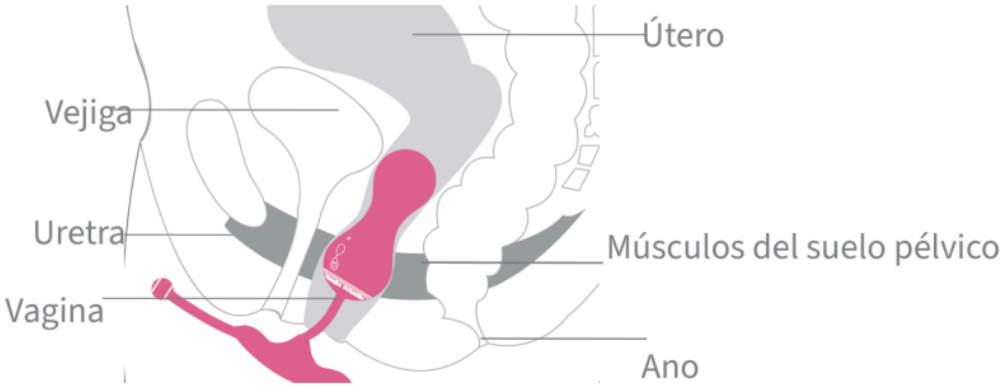

Consejo: deja al menos 4 cm del cordón de Kegel Master Gen2 fuera del cuerpo para mantener una buena señal sin obstáculos.

Paso 4: apagar


Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el dispositivo. El LED se apaga para indicar que está apagado.

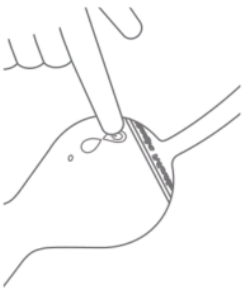

Consejo: Kegel Master Gen2 se apaga automáticamente tras 5 minutos desconectado de la app.


Modo Independiente (sin el teléfono inteligente) **- Apriete para que vibre**

Encienda el Kegel Master Gen 2 y apriete los músculos del s uelo pélvico para controlar la fuerza de vibración del dispositivo.

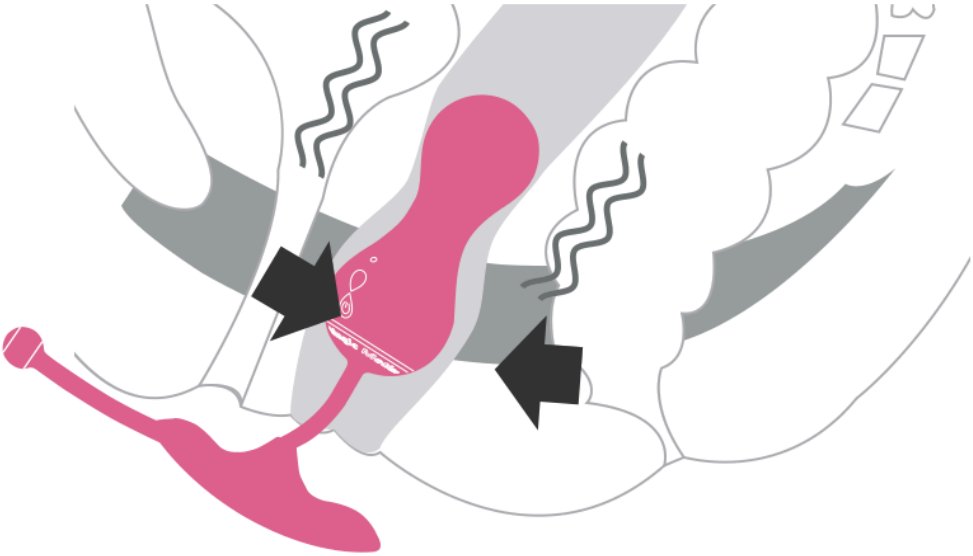


Carga de la batería


Paso 1 Abre la tapa del puerto de carga magnético para cargar.

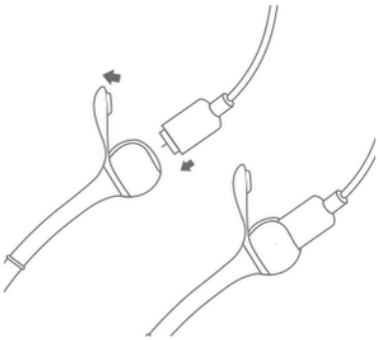

Paso 2 Conecta el USB a un adaptador de smartphone, un portátil, un ordenador o una batería externa.

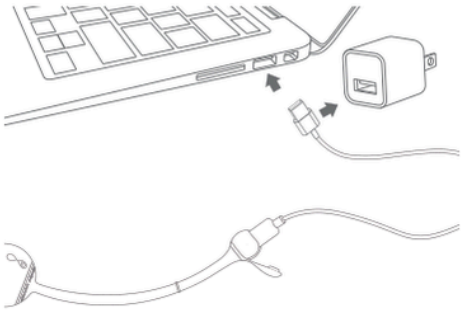

Paso 3 La luz LED encendida muestra que se está cargando normalmente.
La luz LED se apagará cuando esté cargado

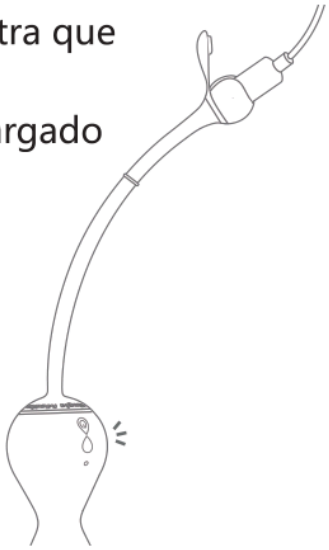

Consejo: Para el primer uso, por favor cargue la bacteria por 1 hora después que la energía se haya usado por completo

Limpieza del Magic kegel Master Gen 2

Antes de Usar


Por favor limpie el Kegel Master Gen 2 con un limpiador o agua caliente y jabón antibacterial antes del primer uso.

Después de Usar

Por favor limpie el Kegel Master Gen 2 con un limpiador o agua caliente y jabón antibacterial y séquelo.

Almacenaje

Manténgalo en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa y manténgalo alejado de los niños.

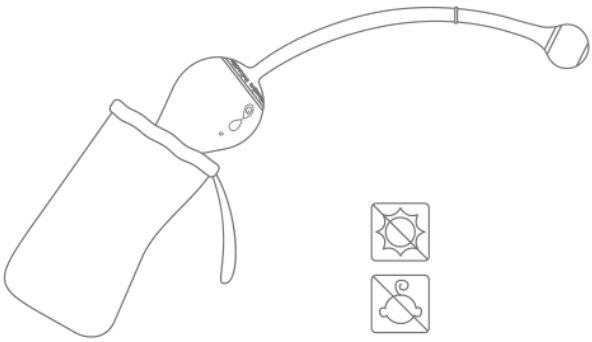

Especificación

Modelo: SMV02

Material: Silicona segura para el cuerpo / ABS

Peso: 58g

Voltaje de carga: 5V

Tiempo de funcionamiento: 180 minutos

Tiempo de carga: 60 minutos

Corriente de carga máxima: 500mA

Impermeabilidad: IPX6

Batería: 200mAh

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz
Potencia máxima de transmisión de RF: −2.94 dBm

Información importante de seguridad

Uso seguro: Solo para adultos de 18 años o más. Utilizar únicamente como se indica en esta guía. Mantener fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de lesiones! Retire cualquier piercing o joya del área íntima antes del uso. No utilice el producto sobre piel irritada o dañada. Suspenda el uso si siente dolor o malestar. No lo use si está inusualmente caliente, dañado o deformado, o decolorado.


Carga segura: Utilizar el cable suministrado y una fuente de alimentación compatible con la entrada nominal del dispositivo. Mantener secos los contactos y alejar el cable y la fuente de alimentación del agua. No utilizar durante la carga. Desconectar al completar la carga.

Seguridad de la batería: No desmontar, perforar ni calentar el dispositivo o la batería, ni exponerlos al fuego. Suspender el uso y la carga si hay calor anormal, hinchazón, fugas o daños.

Limpieza, almacenamiento y eliminación: Limpiar antes y después del uso según esta guía y secar antes de guardar. Respetar la clasificación IPX6 indicada; no se aplica al cable de carga ni a la fuente de alimentación. Guardar en un lugar seco, protegido del sol y de los niños. Llevar el dispositivo y la batería a un punto adecuado de recogida de aparatos electrónicos y baterías; no desechar con la basura doméstica.


Atención al cliente

Para asistencia o garantía: customercare@magicsmotion.com. Indique el modelo y el problema; adjunte el comprobante de compra para la garantía.

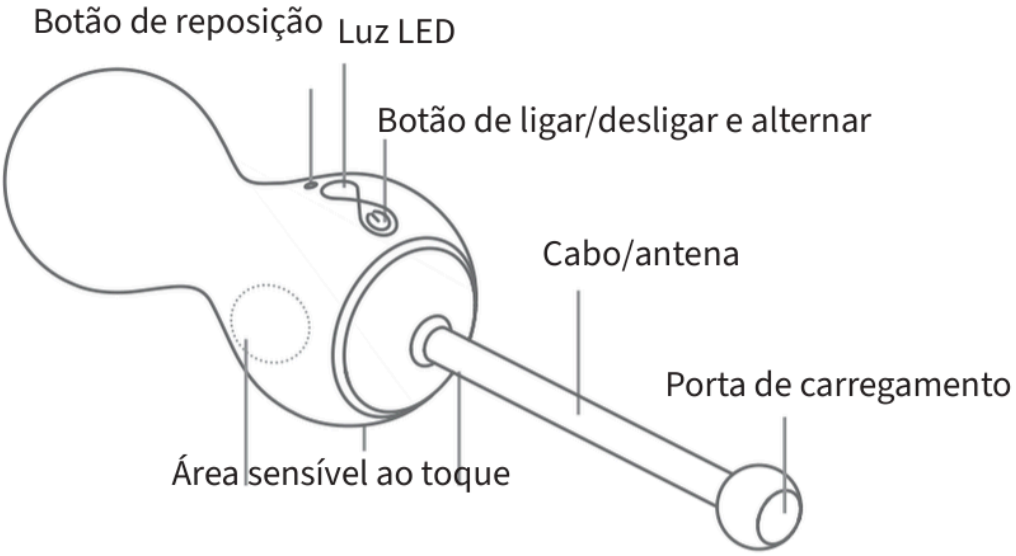

Lista de Embalagem

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

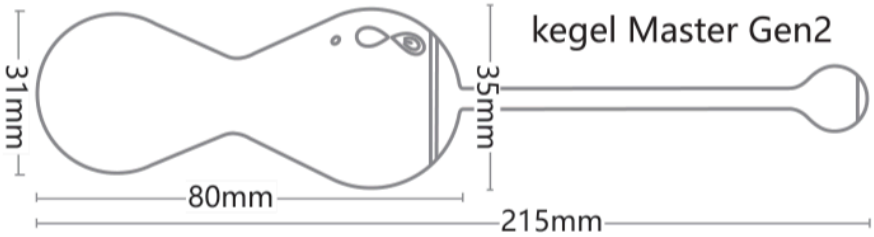



Âncora



Cabo USB magnético



Guia do utilizador



Bolsa de armazenamento

Modo de Treinamento para Smart Phones

Passo 1: Download do APP

1. Procure por **"Magic Kegel "** na App Store do iOS ou no Google Play


2. Digitalize abaixo o código QR para baixar diretamente.

3. Download de


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Passo 2: Execute o aplicativo "Magic Kegel"


Ligue o seu dispositivo Kegel Master Gen2.

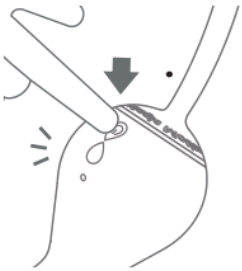

Siga as instruções da aplicação para ligar.

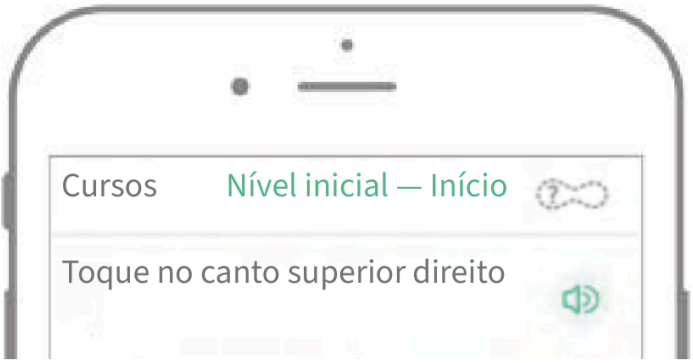


A ligação foi estabelecida quando aparecer «Ligação bem-sucedida».

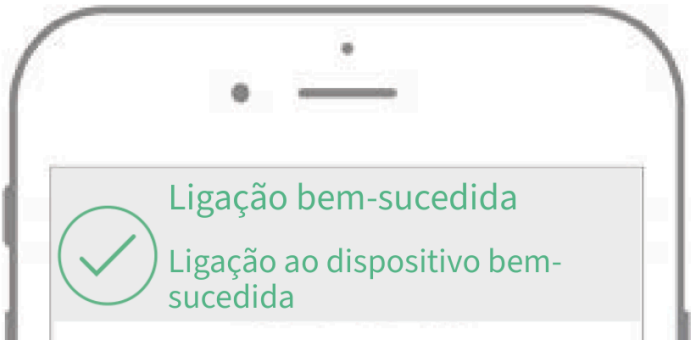

Passo 3: desfrute do treino Kegel


Encontre uma posição confortável para introduzir o dispositivo. Muitas mulheres preferem deitar-se de costas ou ficar de pé. Introduza Kegel Master Gen2 com o LED virado para cima, como ilustrado abaixo. Para facilitar a introdução, aplique um pouco de lubrificante à base de água na ponta do dispositivo ou no preservativo.

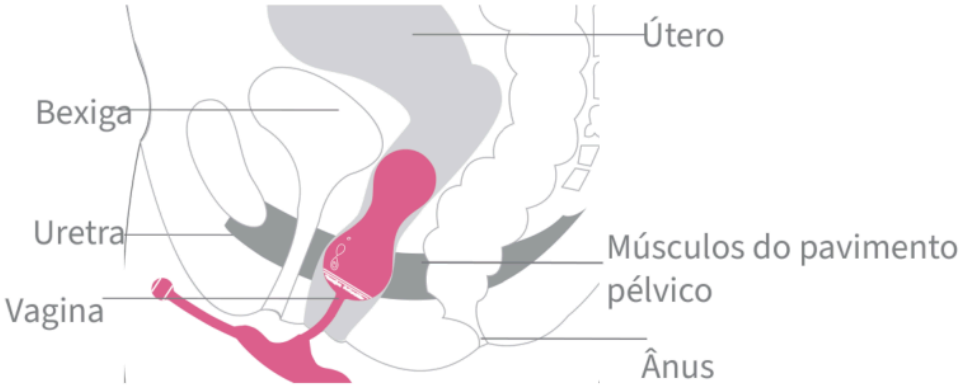

Dica: deixe pelo menos 4 cm do cabo de Kegel Master Gen2 fora do corpo para manter um bom sinal sem obstáculos.

Passo 4: desligar


Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo. O LED apaga-se para indicar que está desligado.

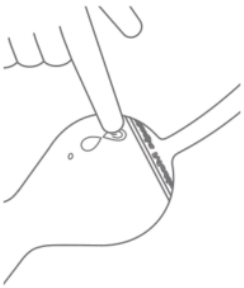

Dica: Kegel Master Gen2 desliga-se automaticamente após 5 minutos desligado da aplicação.


Modo Independente (sem SmartPhone) **- Aperte para Vibrar**

Ligue o Kegel Master Gen 2 e aperte os músculos do assoalho pélvico para controlar a força da vibração do dispositivo.

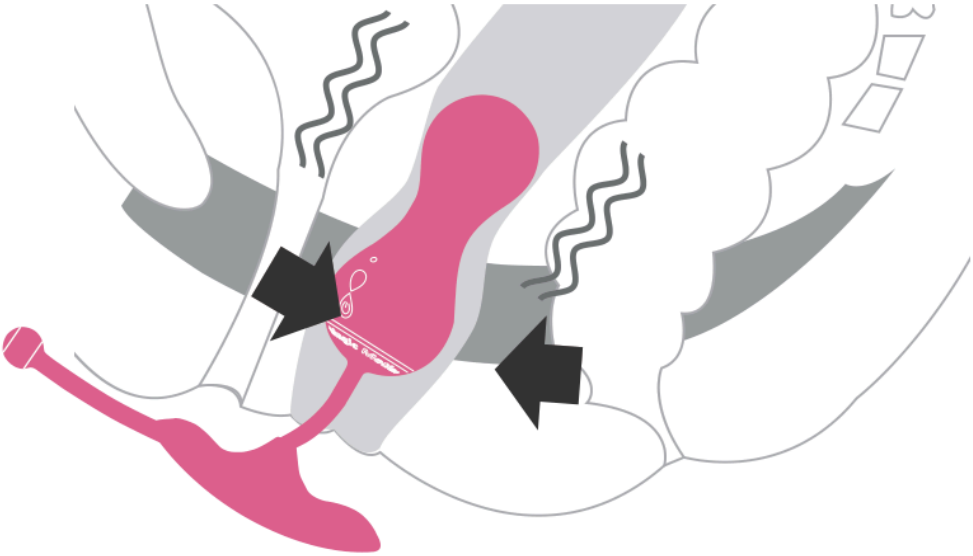


Carregar a bateria


Passo 1 Abra a tampa da porta de carregamento magnética para carregar.

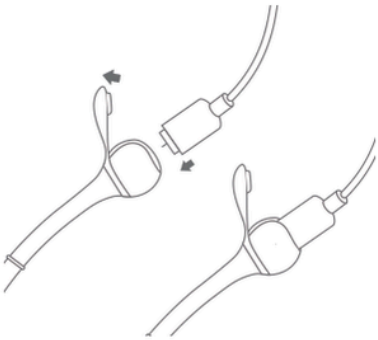

Passo 2 Ligue o conector USB a um adaptador de smartphone, portátil, computador ou bateria externa.

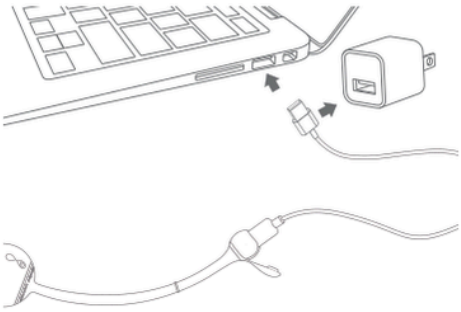

Passo 3 A luz do LED acende para mostrar que está carregando.
A luz LED estará apagada quando o carregamento estiver completo.

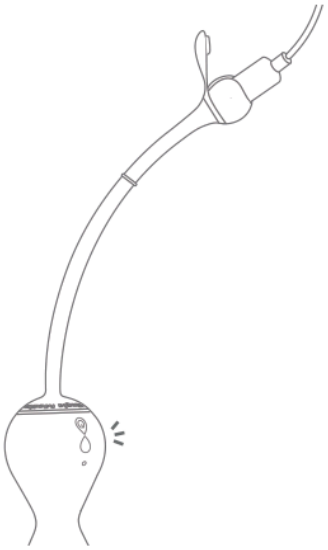

Dicas: Para o primeiro uso, por favor, carregue a bateria por 1 hora após a energia ser totalmente utilizada.

Limpando o Mágic Kegel Master Gen 2

Antes do Uso


Por favor, limpe o Kegel Master Gen 2 com detergente ou água morna e sabão antibacteriano antes de usar pela primeira vez.

Após o uso

Por favor, limpe o Kegel Master Gen 2 com limpador ou água morna e sabão antibacteriano e seque-o.

Armazenamento

Mantenha o Master em um local fresco e ventilado. Evite a luz solar direta e mantenha-a longe das crianças.

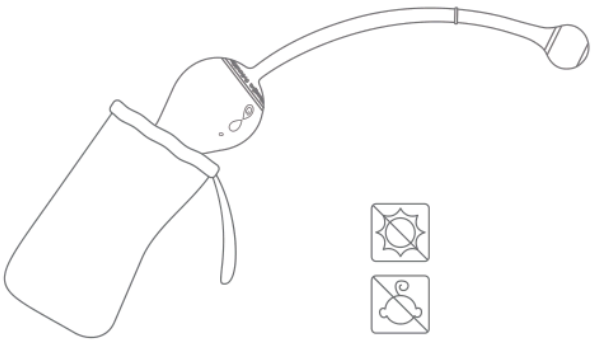

Especificação

Modelo: SMV02

Material: Silicone seguro para o corpo / ABS

Peso: 58g

Tensão de carga: 5V

Corrente máxima de carregamento: 500mA

Tempo de carga: 60 minutos

Tempo de trabalho: 180 minutos

À prova d'água: IPX6

Bateria: 200mAh

Banda de frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz
Potência máxima de transmissão de RF: −2.94 dBm

Informações de segurança importantes

Utilização segura: Apenas para adultos com 18 anos ou mais. Utilizar apenas conforme descrito neste guia. Manter fora do alcance das crianças. Risco de lesão! Remova piercings ou joias da zona íntima antes de usar. Não utilize o produto em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se sentir dor ou mal-estar. Não o use se estiver invulgarmente quente, danificado ou deformado, ou descolorado.


Carregamento seguro: Utilizar o cabo fornecido e uma fonte de alimentação compatível com a entrada nominal do dispositivo. Manter os contactos secos e o cabo e a fonte de alimentação afastados da água. Não utilizar durante o carregamento. Desligar quando estiver totalmente carregado.

Segurança da bateria: Não desmontar, perfurar ou aquecer o dispositivo ou a bateria, nem os expor ao fogo. Interromper a utilização e o carregamento em caso de calor anormal, inchaço, fuga ou danos.


Limpeza, armazenamento e eliminação: Limpar antes e depois da utilização conforme este guia e secar antes de guardar. Respeitar a classificação IPX6 indicada; não se aplica ao cabo de carregamento nem à fonte de alimentação. Guardar num local seco, protegido do sol e das crianças. Entregar o aparelho e a bateria num ponto de recolha adequado para equipamentos eletrónicos e baterias; não eliminar com o lixo doméstico.

Apoio ao cliente

Para assistência ou garantia: customercare@magicsmotion.com. Indique o modelo e o problema; junte o comprovativo de compra para a garantia.

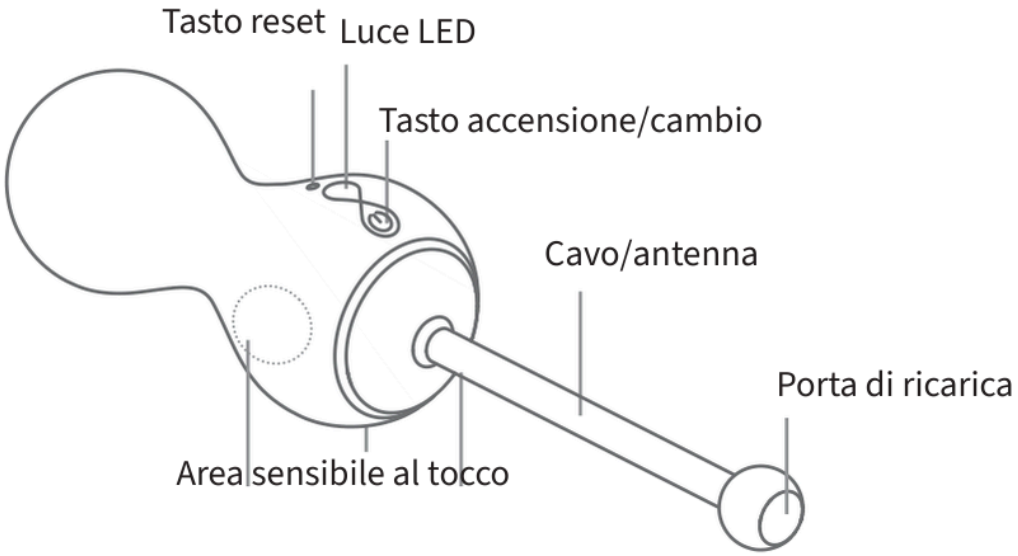

Contenuto della confezione

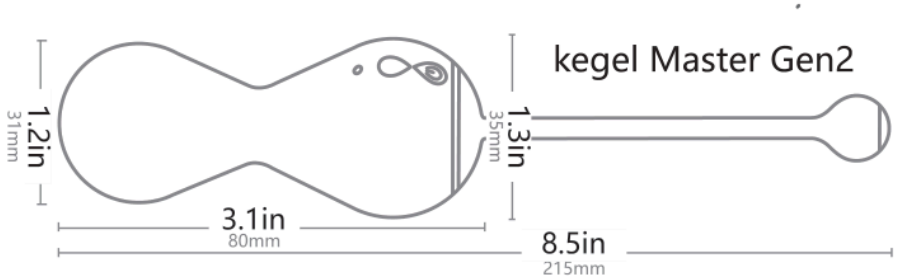



Ancora



Cavo USB magnetico



Guida utente



Sacchetto portaoggetti

Modalità allenamento con smartphone


Passo 1: download dell'APP

1. Cerca "Magic Kegel" nell'App Store iOS o su Google Play.
2. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare direttamente.
3. Scarica da

https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Passo 2: avvia l'APP "Magic Kegel"

Accendi il tuo dispositivo Kegel Master Gen2.

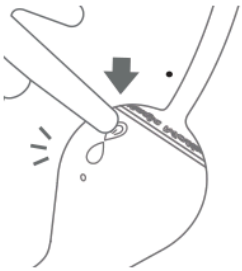

Segui la guida dell'app per connetterti.




La connessione è riuscita quando compare "Connessione riuscita".



Passo 3: goditi l'allenamento Kegel


Trova una posizione comoda per l'inserimento. Molte donne trovano più comodo stare sdraiate sulla schiena o in piedi. Inserisci Kegel Master Gen2 con il LED rivolto verso l'alto, come mostrato nella figura qui sotto. Per facilitare l'inserimento, applica un po' di lubrificante a base d'acqua sulla punta del dispositivo o sul preservativo.

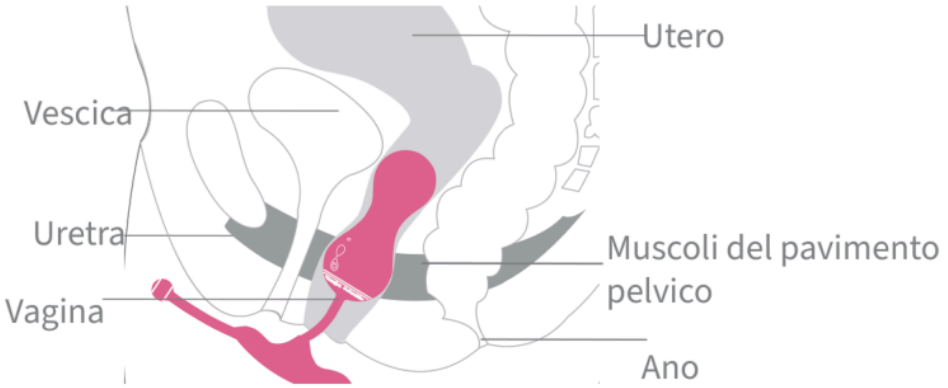

Consiglio: lascia fuori dal corpo almeno 4 cm del cavo di Kegel Master Gen2, per mantenere un buon segnale senza ostacoli.

Passo 4: spegnimento

Il dispositivo si spegne tenendo premuto il tasto di accensione per 3 secondi; il LED si spegne per indicare lo spegnimento.

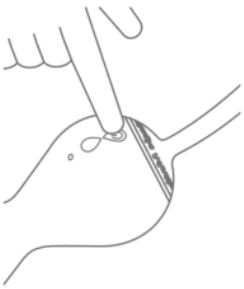


Consiglio: Kegel Master Gen2 si spegne automaticamente se rimane scollegato dall'app per 5 minuti.

Modalità indipendente (senza smartphone)


- Stringi per la vibrazione

Accendi Kegel Master Gen2 e contrai i muscoli del pavimento pelvico per controllare l'intensità della vibrazione del dispositivo.

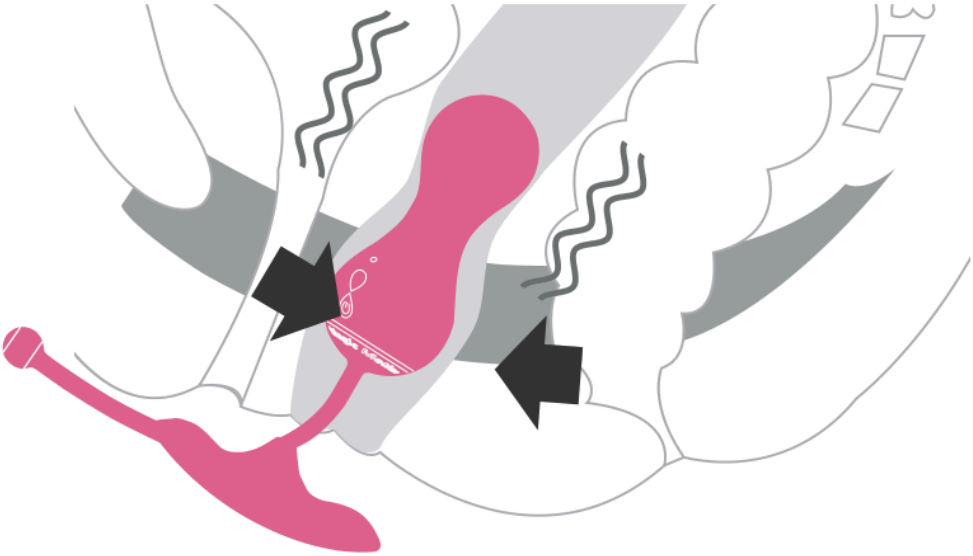


Ricarica della batteria


Passo 1 Apri il coperchio della porta di ricarica magnetica per caricare.

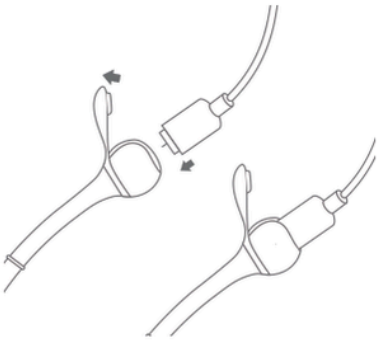

Passo 2 Collega il connettore USB all'alimentatore di uno smartphone, a un portatile, a un computer o a un power bank.

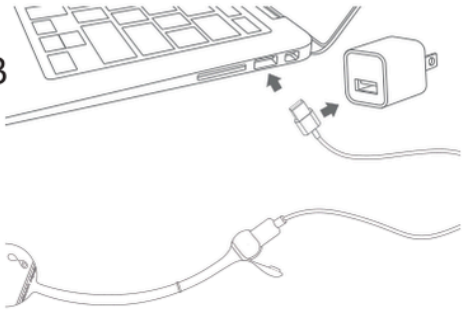

Passo 3 Il LED si accende per indicare che la ricarica procede normalmente. Il LED si spegne quando la ricarica è completata.

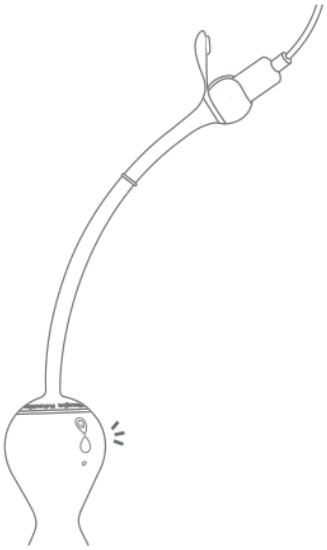

Consiglio: al primo utilizzo, ricarica la batteria per 1 ora dopo che si è scaricata completamente.

Pulizia di Kegel Master Gen2

Prima dell'uso


Prima del primo utilizzo, pulisci Kegel Master Gen2 con un detergente o con acqua tiepida e sapone antibatterico.

Dopo l'uso

Pulisci Kegel Master Gen2 con un detergente o con acqua tiepida e sapone antibatterico e asciugalo.

Conservazione

Conserva il dispositivo in un luogo fresco e ventilato. Evita la luce solare diretta e tienilo lontano dai bambini.

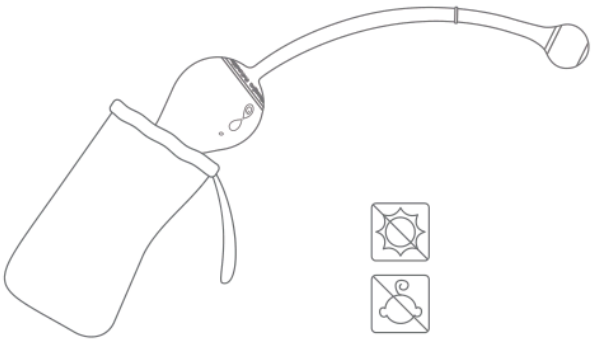

Specifiche

Modello: SMV02

Materiale: silicone sicuro per il corpo / ABS

Peso: 58g

Batteria: 200mAh

Tensione di carica: 5V

Corrente di carica massima: 500mA

Tempo di ricarica: 60 minuti

Tempo di funzionamento: 180 minuti

Impermeabilità: IPX6

Banda di frequenza operativa: 2402–2480 MHz

Massima potenza di trasmissione RF: −2.94 dBm

Informazioni importanti sulla sicurezza

Uso sicuro: Solo per adulti dai 18 anni. Utilizzare esclusivamente come descritto in questa guida. Tenere lontano dai bambini. Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli dalla zona intima. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesionata. Interrompere l'uso in caso di dolore o malessere. Non usarlo se è insolitamente caldo, danneggiato o deformato, o scolorito.


Ricarica sicura: Usare il cavo fornito e un alimentatore compatibile con l'ingresso nominale del dispositivo. Mantenere asciutti i contatti e tenere cavo e alimentatore lontani dall'acqua. Non usare durante la ricarica. Scollegare a ricarica completata.

Sicurezza della batteria: Non smontare, perforare o riscaldare il dispositivo o la batteria, né esporli al fuoco. Interrompere uso e ricarica in caso di calore anomalo, rigonfiamento, perdite o danni.


Pulizia, conservazione e smaltimento: Pulire prima e dopo l'uso secondo questa guida e asciugare prima di riporre. Rispettare il grado IPX6 indicato; non si applica al cavo di ricarica né all'alimentatore. Conservare all'asciutto, lontano dal sole e dai bambini. Consegnare il dispositivo e la batteria a un punto di raccolta idoneo per apparecchi elettronici e batterie; non smaltire nei rifiuti domestici.

Assistenza clienti

Per assistenza o garanzia: customercare@magicsmotion.com. Indicare modello e problema; allegare la prova d’acquisto per la garanzia.

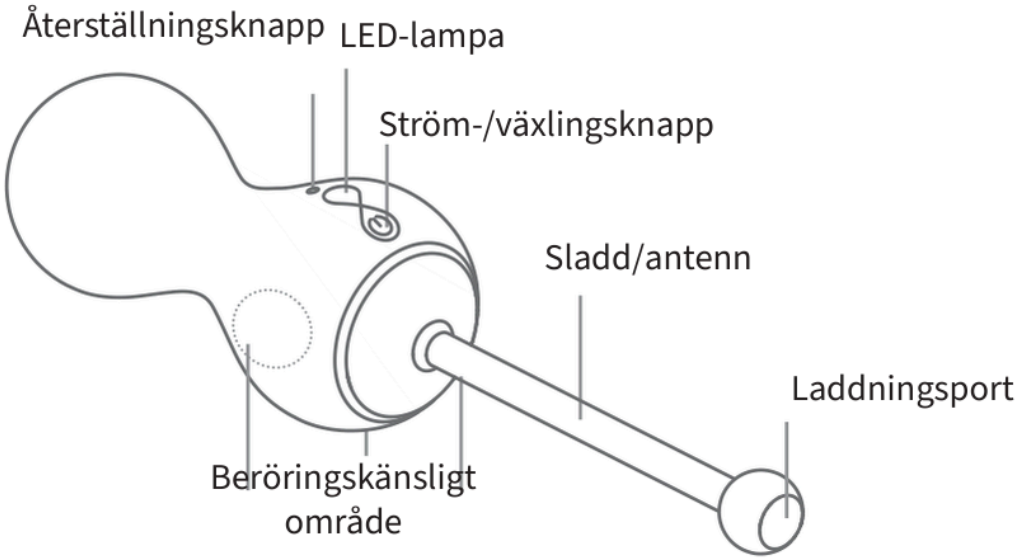

Förpackningens innehåll

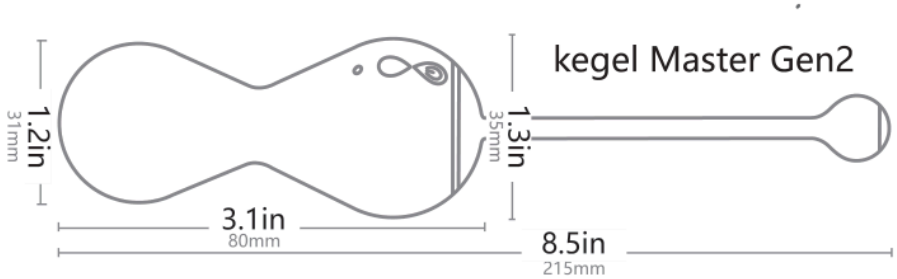


Ankare


Magnetisk USB-kabel


Bruksanvisning


Förvaringspåse

Träningsläge med smartphone


Steg 1: ladda ned appen

1. Sök efter ”Magic Kegel” i iOS App Store eller Google Play.
2. Skanna QR-koden nedan för att ladda ned direkt.
3. Ladda ned från


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Steg 2: starta appen ”Magic Kegel”


Slå på din Kegel Master Gen2.

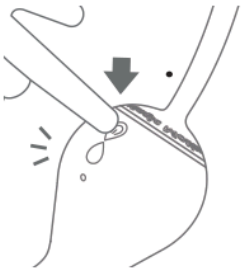

Följ appens instruktioner för att ansluta.

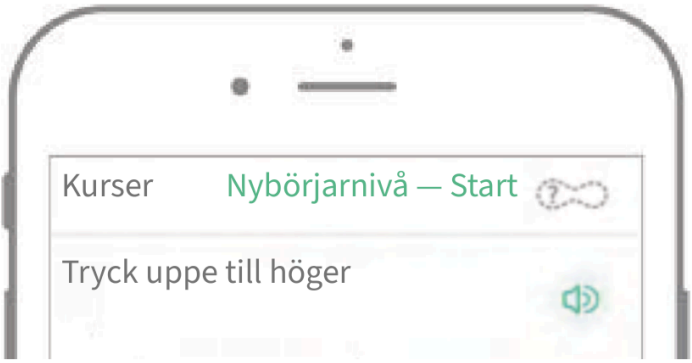


Anslutningen är klar när ”Anslutningen lyckades” visas.

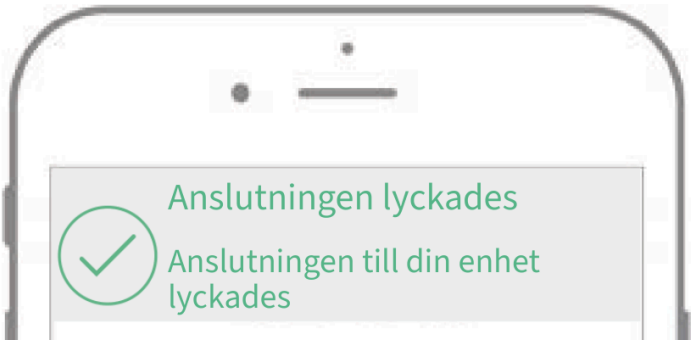

Steg 3: njut av kegelträningen


Hitta en bekväm position för införandet. Många kvinnor tycker att det är bekvämast att ligga på rygg eller stå. För in Kegel Master Gen2 med LED-lampan uppåt, se bilden nedan. För enklare införande kan du stryka lite vattenbaserat glidmedel på enhetens spets eller på kondomen.

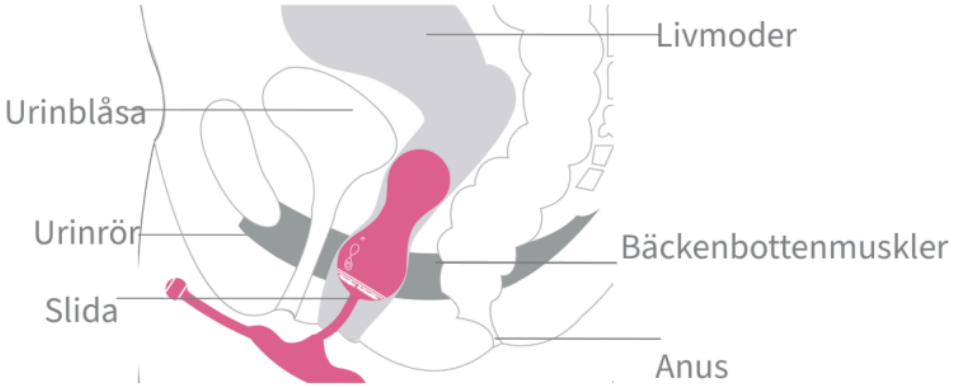

Tips: låt minst 4 cm av sladden på Kegel Master Gen2 vara utanför kroppen för att behålla en bra signal utan hinder.

Steg 4: stänga av

Enheten stängs av när du håller strömknappen intryckt i 3 sekunder; LED-lampan släcks för att visa att den är avstängd.

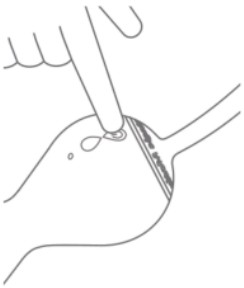


Tips: Kegel Master Gen2 stängs av automatiskt när den har varit frånkopplad från appen i 5 minuter.


Fristående läge (utan smartphone)

- Kläm för vibration


Slå på Kegel Master Gen2 och spänn bäckenbottenmusklerna för att styra vibrationens styrka.

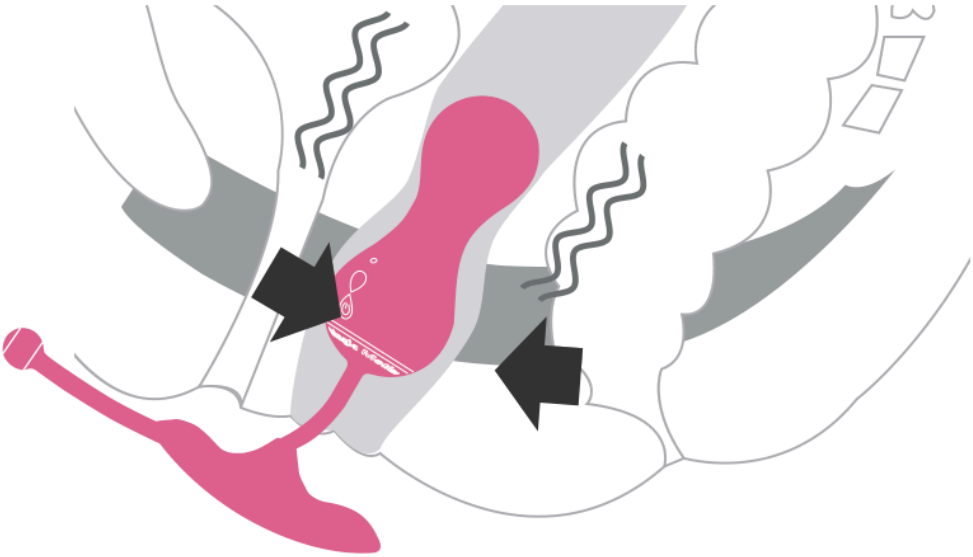

Ladda batteriet

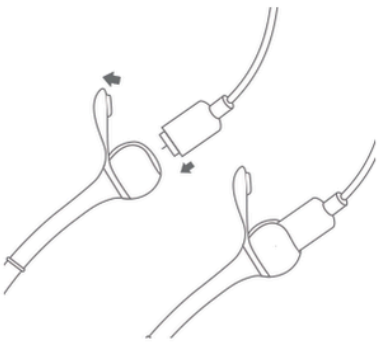


Steg 1 Öppna locket till den magnetiska laddningsporten för att ladda.

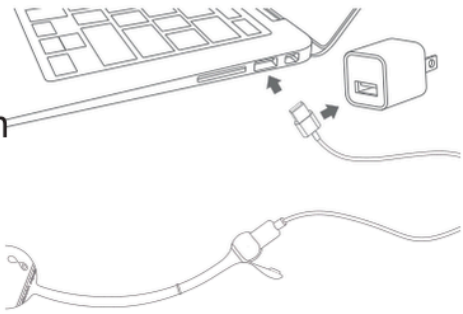

Steg 2 Anslut USB-kontakten till en nätadapter för smartphone, en bärbar dator, en dator eller en powerbank.

Steg 3 LED-lampan lyser för att visa att laddningen fungerar normalt. LED-lampan släcks när laddningen är klar.

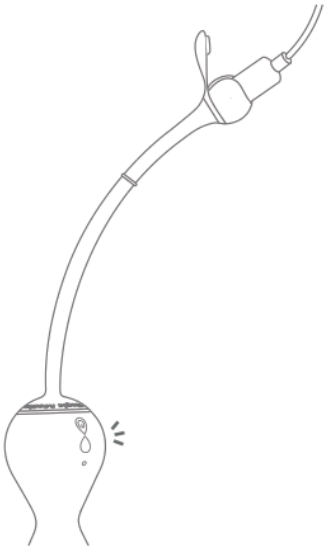

Tips: vid första användningen, ladda batteriet i 1 timme efter att det har laddats ur helt.

Rengöring av Kegel Master Gen2

Före användning


Rengör Kegel Master Gen2 med rengöringsmedel eller varmt vatten och antibakteriell tvål före första användningen.

Efter användning

Rengör Kegel Master Gen2 med rengöringsmedel eller varmt vatten och antibakteriell tvål och torka den.

Förvaring

Förvara enheten på en sval och ventilerad plats. Undvik direkt solljus och håll den borta från barn.

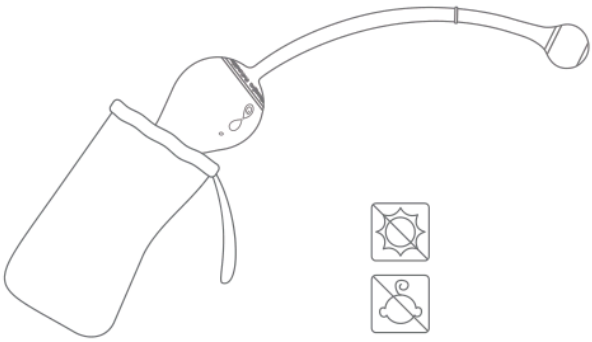

Specifikationer

Modell: SMV02

Material: kroppssäker silikon / ABS

Vikt: 58g

Batteri: 200mAh

Laddspänning: 5V

Maximal laddström: 500mA

Laddningstid: 60 minuter

Drifttid: 180 minuter

Vattentäthet: IPX6

Driftfrekvensband: 2402–2480 MHz

Maximal RF-sändareffekt: −2.94 dBm

Viktig säkerhetsinformation

Säker användning: Endast för vuxna från 18 år. Använd endast enligt denna bruksanvisning. Förvaras utom räckhåll för barn. Risk för skada! Ta bort piercingar eller smycken i underlivet före användning. Använd inte produkten på irriterad eller skadad hud. Sluta använda den om du får ont eller mår dåligt. Använd inte produkten om den: 1. är ovanligt varm, 2. är mekaniskt skadad eller deformerad, 3. är missfärgad.


Säker laddning: Använd den medföljande kabeln och en strömkälla som passar enhetens märkdata för strömingången. Håll laddningskontakterna torra och kabel och strömkälla borta från vatten. Använd inte under laddning. Koppla från när batteriet är fulladdat.

Batterisäkerhet: Ta inte isär, punktera eller värm enheten eller batteriet och utsätt dem inte för eld. Sluta använda och ladda vid onormal värme, svullnad, läckage eller skador.


Rengöring, förvaring och avfallshantering: Rengör före och efter användning enligt denna bruksanvisning och torka före förvaring. Följ den angivna IPX6-klassningen; den gäller inte laddkabeln eller nätadaptern. Förvara torrt, skyddat från solljus och barn. Lämna enheten och batteriet till lämplig insamling för elektronik och batterier; släng dem inte i hushållsavfallet.

Kundsupport

För support eller garanti: customercare@magicsmotion.com. Ange modell och problem; bifoga inköpsbevis vid garantifrågor.

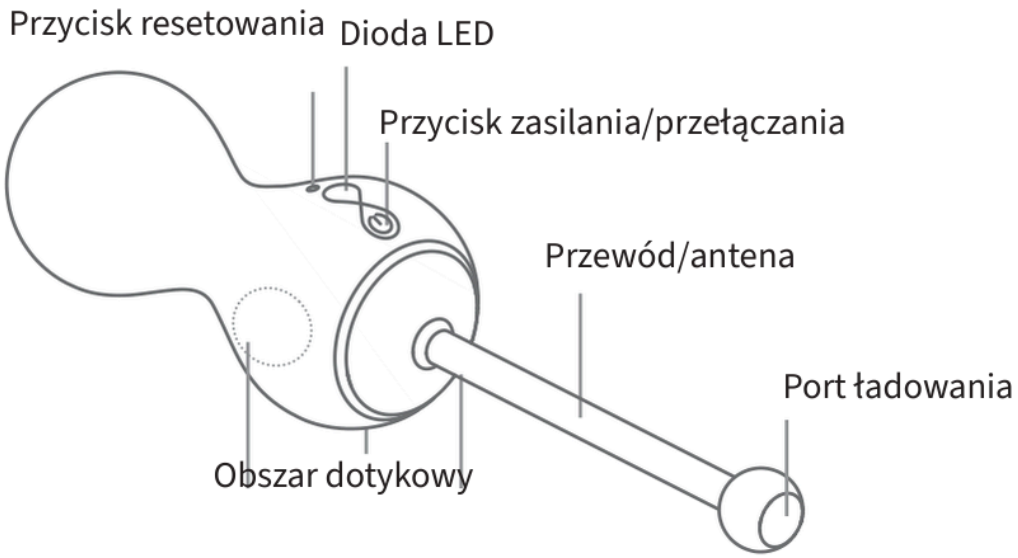

Zawartość opakowania

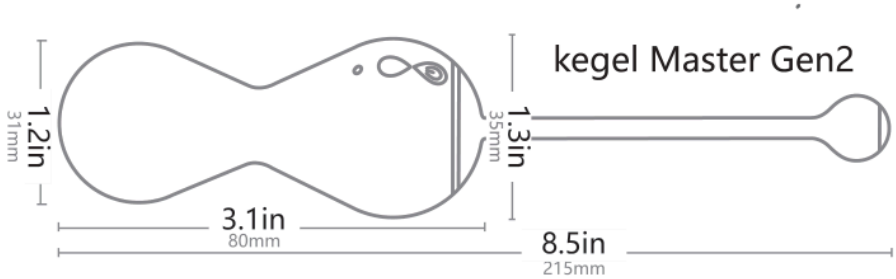



Kotwica



Magnetyczny kabel USB



Instrukcja obsługi



Woreczek do przechowywania

Tryb treningu ze smartfonem


Krok 1: pobierz aplikację

1. Wyszukaj „Magic Kegel” w iOS App Store lub Google Play.
2. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać bezpośrednio.
3. Pobierz ze strony


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Krok 2: uruchom aplikację „Magic Kegel”


Włącz urządzenie Kegel Master Gen2.

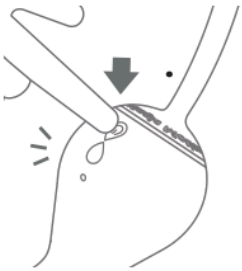

Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby się połączyć.

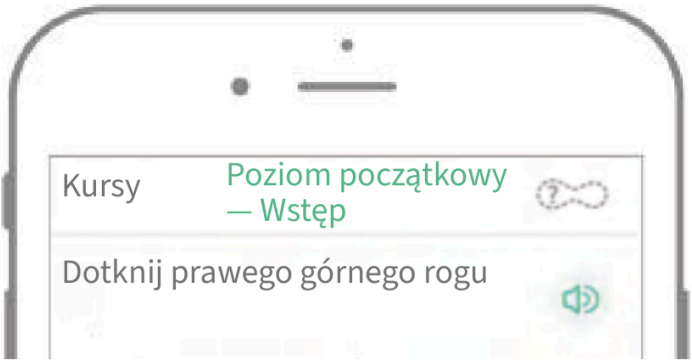


Połączenie jest nawiązane, gdy pojawia się „Połączenie nawiązane”.

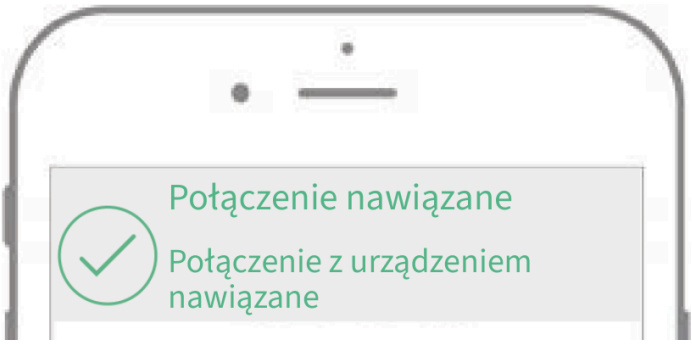

Krok 3: ciesz się treningiem Kegla


Znajdź wygodną pozycję do wprowadzenia. Wiele kobiet uważa, że najwygodniej jest leżeć na plecach lub stać. Wprowadź Kegel Master Gen2 diodą LED skierowaną do góry, jak pokazano na rysunku poniżej. Aby ułatwić wprowadzenie, nałóż odrobinę lubrykantu na bazie wody na końcówkę urządzenia lub na prezerwatywę.

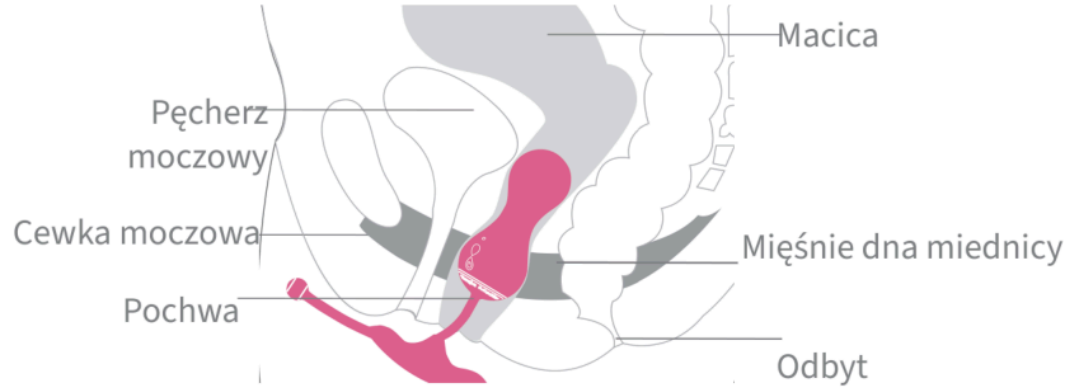

Wskazówka: pozostaw co najmniej 4 cm przewodu Kegel Master Gen2 na zewnątrz ciała, aby zachować dobry sygnał bez przeszkód.

Krok 4: wyłączanie

Urządzenie wyłącza się po przytrzymaniu przycisku zasilania przez 3 sekundy; dioda LED gaśnie, sygnalizując wyłączenie.

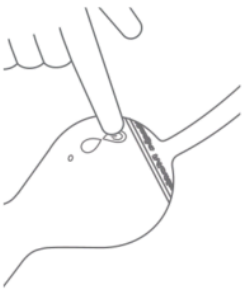


Wskazówka: Kegel Master Gen2 wyłącza się automatycznie, gdy przez 5 minut jest odłączony od aplikacji.


Tryb samodzielny (bez smartfona)

- Ściśnij, aby wibrować


Włącz Kegel Master Gen2 i napinaj mięśnie dna miednicy, aby sterować siłą wibracji urządzenia.

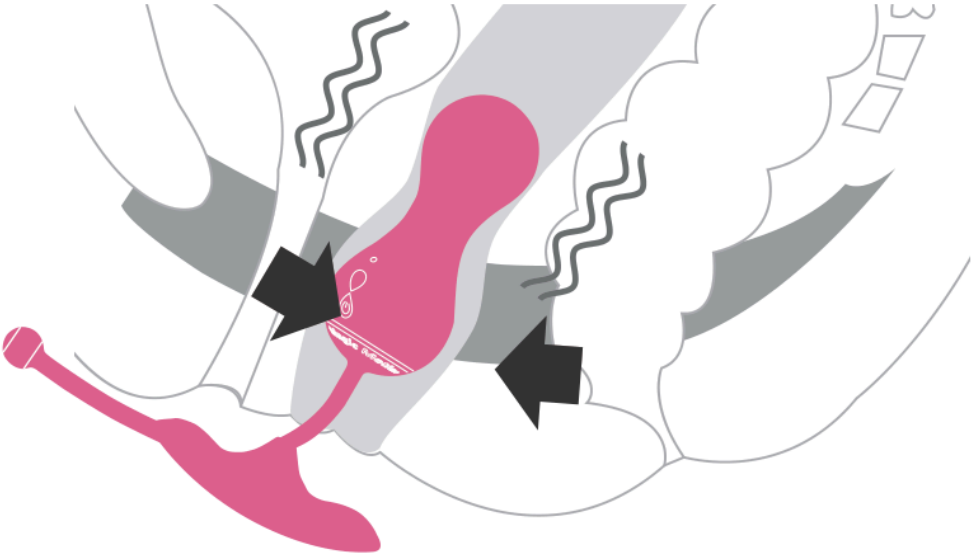

Ładowanie baterii

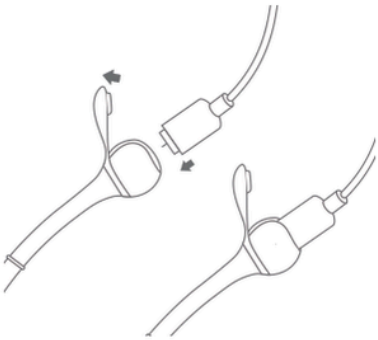


Krok 1 Otwórz zatyczkę magnetycznego portu ładowania, aby rozpocząć ładowanie.

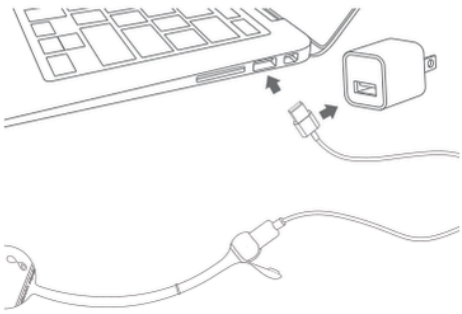

Krok 2 Podłącz wtyk USB do zasilacza smartfona, laptopa, komputera lub powerbanku.

Krok 3 Dioda LED świeci, sygnalizując prawidłowe ładowanie. Dioda LED gaśnie po zakończeniu ładowania.

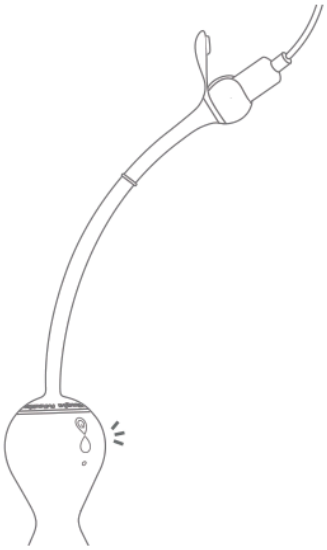

Wskazówka: przy pierwszym użyciu ładuj baterię przez 1 godzinę po jej całkowitym rozładowaniu.

Czyszczenie Kegel Master Gen2

Przed użyciem


Przed pierwszym użyciem umyj Kegel Master Gen2 środkiem czyszczącym lub ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym.

Po użyciu

Umyj Kegel Master Gen2 środkiem czyszczącym lub ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym i osusz.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w chłodnym, przewiewnym miejscu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i trzymaj z dala od dzieci.

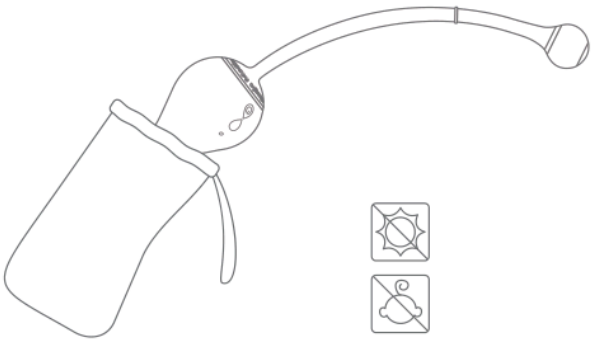

Specyfikacja

Model: SMV02

Materiał: silikon bezpieczny dla ciała / ABS

Waga: 58g

Bateria: 200mAh

Napięcie ładowania: 5V

Maksymalny prąd ładowania: 500mA

Czas ładowania: 60 minut

Czas pracy: 180 minut

Wodoodporność: IPX6

Pasmo częstotliwości roboczej: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc nadawcza RF: −2.94 dBm

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczne użytkowanie: Wyłącznie dla osób dorosłych od 18 lat. Używać tylko zgodnie z instrukcją. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko urazu! Przed użyciem zdejmij kolczyki lub biżuterię z okolic intymnych. Nie używaj produktu na podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Przerwij używanie w przypadku bólu lub złego samopoczucia. Nie używaj produktu, jeśli: 1. jest nienaturalnie gorący, 2. jest mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3. jest odbarwiony.


Bezpieczne ładowanie: Używaj dostarczonego kabla i zasilacza zgodnego ze znamionowymi parametrami wejściowymi urządzenia. Styki muszą być suche; trzymaj kabel i zasilacz z dala od wody. Nie używaj podczas ładowania. Odłącz po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo akumulatora: Nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie podgrzewaj urządzenia lub akumulatora i nie narażaj ich na ogień. Przerwij używanie i ładowanie przy nietypowym nagrzaniu, spuchnięciu, wycieku lub uszkodzeniu.


Czyszczenie, przechowywanie i utylizacja: Czyścić przed i po użyciu zgodnie z instrukcją i wysuszyć przed przechowywaniem. Przestrzegać podanej klasy IPX6; nie dotyczy ona kabla ładującego ani zasilacza. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca i dzieci. Oddać urządzenie i baterię do odpowiedniego punktu zbiórki elektroniki i baterii; nie wyrzucać z odpadami domowymi.

Obsługa klienta

Pomoc lub gwarancja: customercare@magicsmotion.com. Podaj model i problem; przy gwarancji dołącz dowód zakupu.

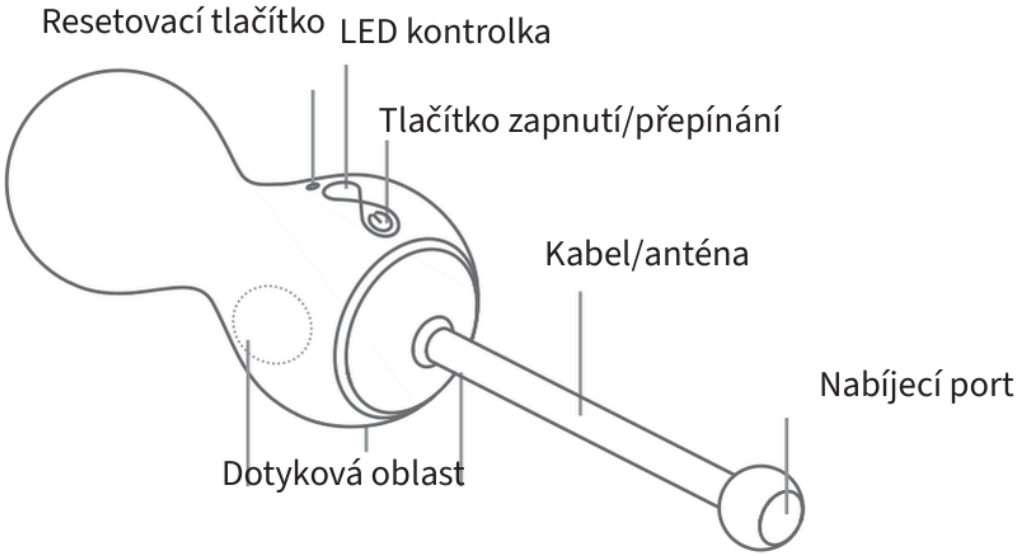

Obsah balení

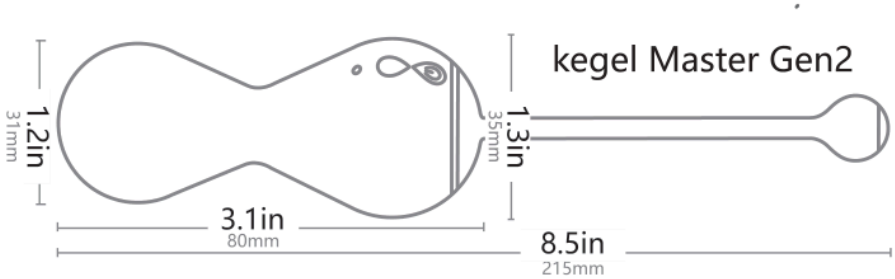


Kotva


Magnetický USB kabel


Uživatelská příručka


Úložný sáček

Tréninkový režim se smartphonem


Krok 1: stažení aplikace

1. Vyhledejte „Magic Kegel“ v iOS App Store nebo Google Play.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte aplikaci přímo.
3. Stáhnout z


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Krok 2: spusťte aplikaci „Magic Kegel“


Zapněte zařízení Kegel Master Gen2.

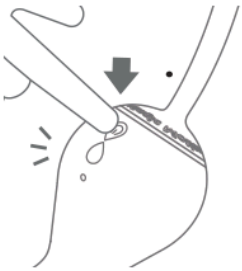

Pro připojení postupujte podle pokynů aplikace.

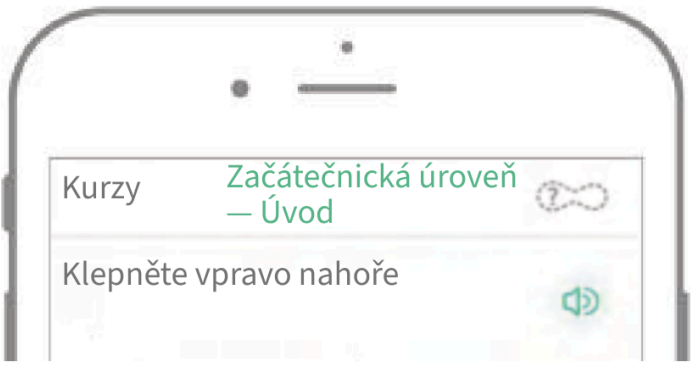


Připojení je úspěšné, když se zobrazí „Připojení úspěšné“.

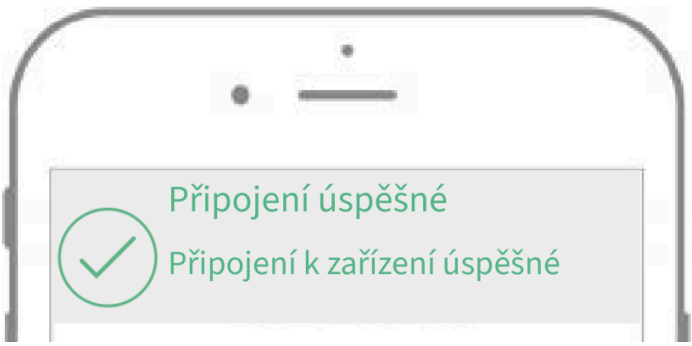

Krok 3: užijte si Kegelův trénink


Najděte pohodlnou polohu pro zavedení. Mnoho žen považuje za nejpohodlnější polohu vleže na zádech nebo vestoje. Zaveďte Kegel Master Gen2 s LED kontrolkou směřující nahoru, viz obrázek níže. Pro snadnější zavedení naneste trochu lubrikantu na vodní bázi na špičku zařízení nebo na kondom.

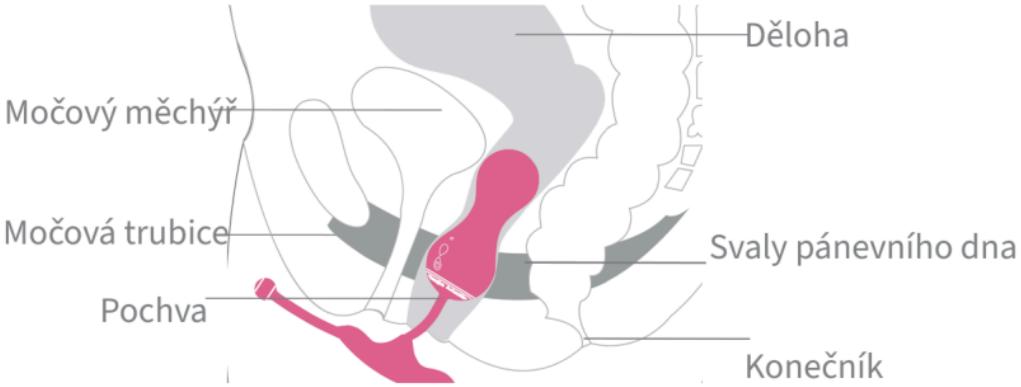

Tip: ponechte alespoň 4 cm kabelu Kegel Master Gen2 mimo tělo, aby byl signál dobrý a bez překážek.

Krok 4: vypnutí

Zařízení se vypne podržením vypínače po dobu 3 sekund; LED kontrolka zhasne a signalizuje vypnutí.

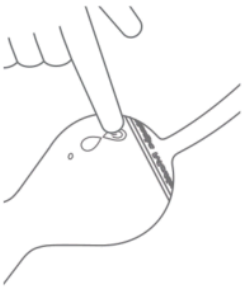


Tip: Kegel Master Gen2 se automaticky vypne, pokud je 5 minut odpojen od aplikace.

Samostatný režim (bez smartphonu)


- Stiskněte pro vibrace

Zapněte Kegel Master Gen2 a stahováním svalů pánevního dna ovládejte sílu vibrací zařízení.

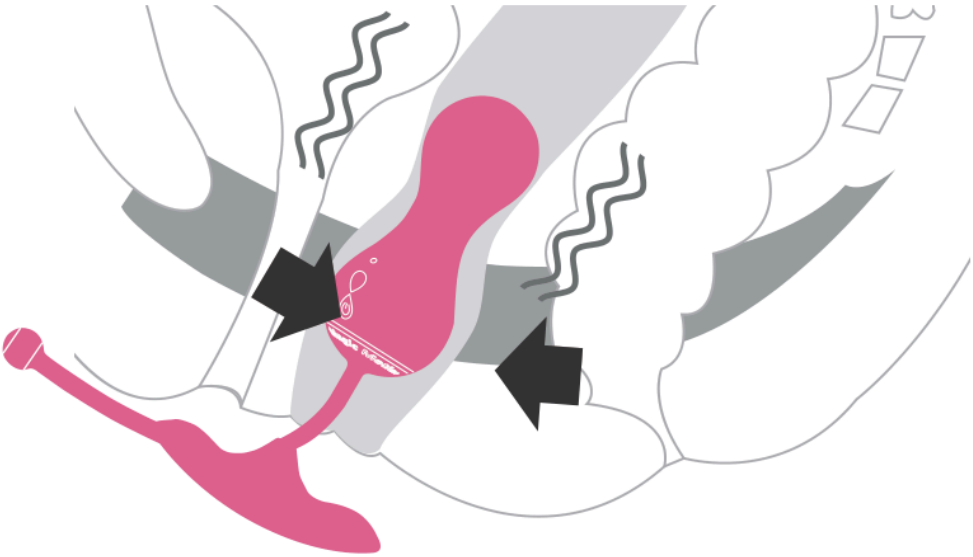


Nabíjení baterie


Krok 1 Pro nabíjení otevřete krytku magnetického nabíjecího portu.

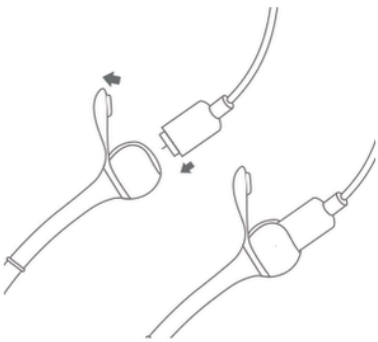

Krok 2 Připojte USB konektor k napájecímu adaptéru smartphonu, notebooku, počítači nebo powerbance.

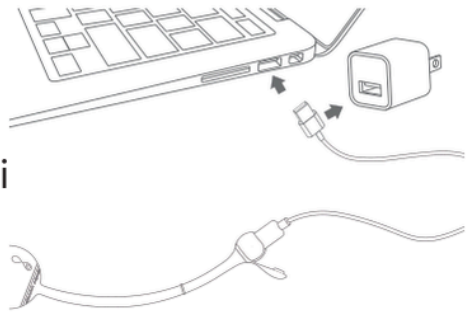

Krok 3 LED kontrolka svítí a signalizuje, že nabíjení probíhá normálně. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

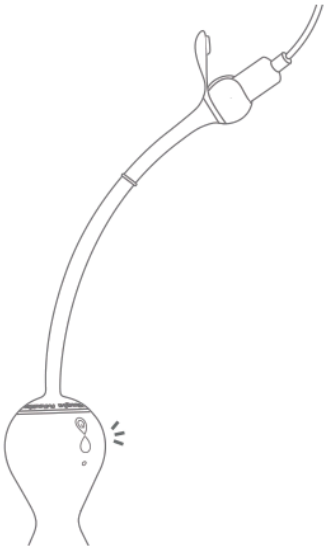

Tip: při prvním použití nabíjejte baterii 1 hodinu po jejím úplném vybití.

Čištění Kegel Master Gen2

Před použitím


Před prvním použitím očistěte Kegel Master Gen2 čisticím prostředkem nebo teplou vodou a antibakteriálním mýdlem.

Po použití

Očistěte Kegel Master Gen2 čisticím prostředkem nebo teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a osušte jej.

Skladování

Zařízení skladujte na chladném a větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a uchovávejte mimo dosah dětí.

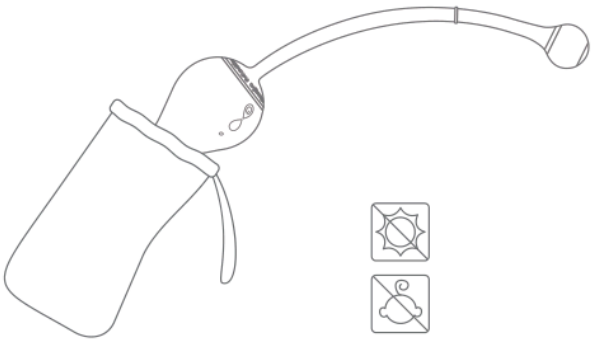

Specifikace

Model: SMV02

Materiál: silikon bezpečný pro tělo / ABS

Hmotnost: 58g

Baterie: 200mAh

Nabíjecí napětí: 5V

Maximální nabíjecí proud: 500mA

Doba nabíjení: 60 minut

Provozní doba: 180 minut

Voděodolnost: IPX6

Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální RF vysílací výkon: −2.94 dBm

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečné používání: Pouze pro dospělé od 18 let. Používejte pouze podle tohoto návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Riziko poranění! Před použitím odstraňte piercing nebo šperky z genitální oblasti. Výrobek nepoužívejte na podrážděné nebo poškozené pokožce. Přestaňte jej používat při bolesti nebo nevolnosti. Výrobek nepoužívejte, pokud je: 1. neobvykle horký, 2. mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3. zbarvený.


Bezpečné nabíjení: Používejte dodaný kabel a zdroj odpovídající jmenovitým vstupním parametrům zařízení. Nabíjecí kontakty udržujte suché a kabel i zdroj mimo vodu. Během nabíjení nepoužívejte. Po úplném nabití odpojte.

Bezpečnost baterie: Zařízení ani baterii nerozebírejte, nepropichujte, nezahřívejte ani nevystavujte ohni. Při neobvyklém zahřívání, nafouknutí, úniku nebo poškození přestaňte používat a nabíjet.

Čištění, skladování a likvidace: Čistěte před použitím a po něm podle tohoto návodu a před uložením vysušte. Dodržujte uvedené krytí IPX6; nevztahuje se na nabíjecí kabel ani napájecí zdroj. Skladujte v suchu, mimo sluneční světlo a dosah dětí. Přístroj a baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroniku a baterie; nevyhazujte je do domovního odpadu.


Zákaznická podpora

Podpora nebo záruka: customercare@magicsmotion.com. Uveďte model a problém; u záruky přiložte doklad o koupi.

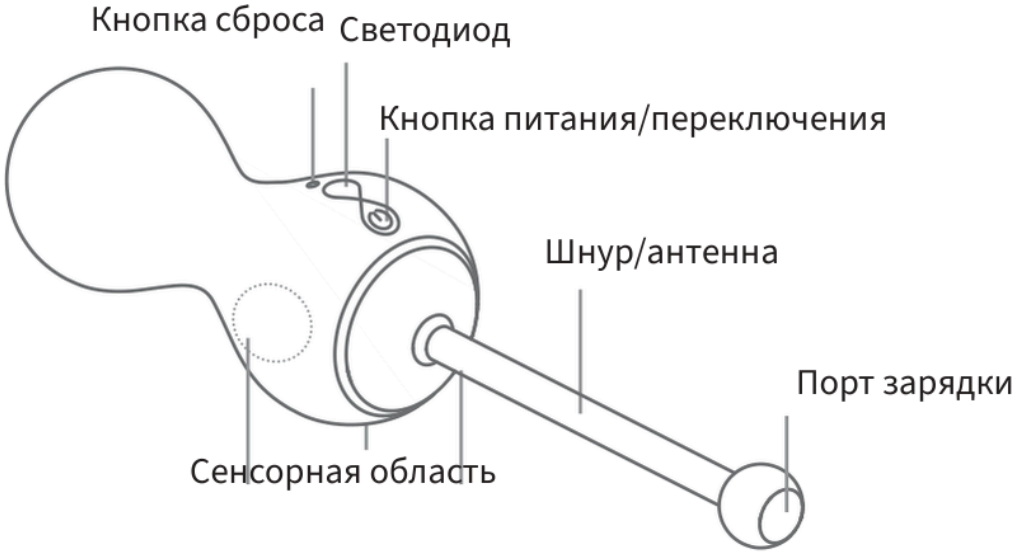

Состав упаковки

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

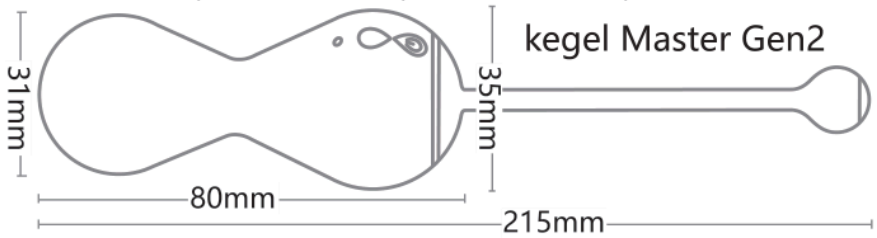



Ограничитель | Магнитный USB-кабель | Руководство пользователя | Мешочек для хранения

Первое использование

Шаг 1: Скачайте приложение

1. Найдите приложение **“Magic Kegel”** в App Store или Google Play.


2. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.

3. Скачайте приложение с сайта.


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Шаг 2 Запустите приложение "Magic Kegel"


Включите свой тренажер Kegel Master Gen 2.

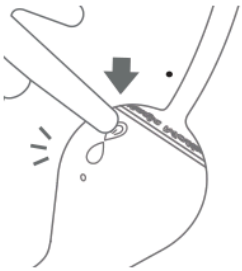

Следуйте подсказкам приложения для подключения.

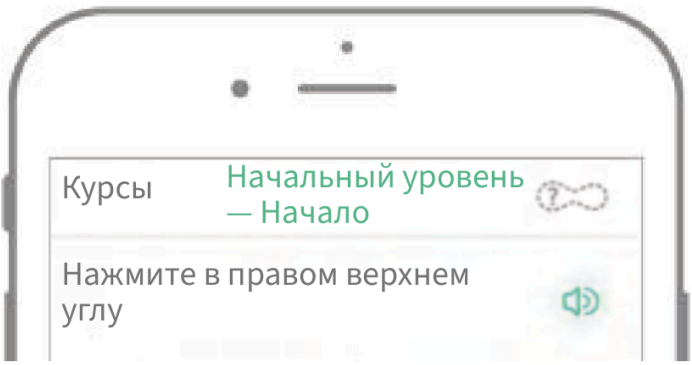


Подключение выполнено, когда появляется «Подключение выполнено».

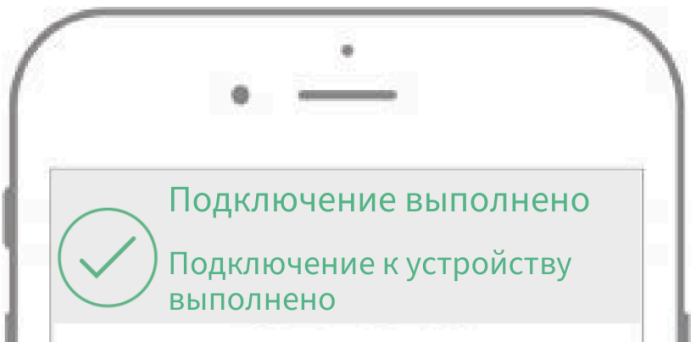

Шаг 3: тренировка Кегеля


Найдите удобное положение для введения. Многим женщинам удобнее лежать на спине или стоять. Вводите Kegel Master Gen2 светодиодом вверх, как показано ниже. Для облегчения введения нанесите немного лубриканта на водной основе на кончик устройства или на презерватив.

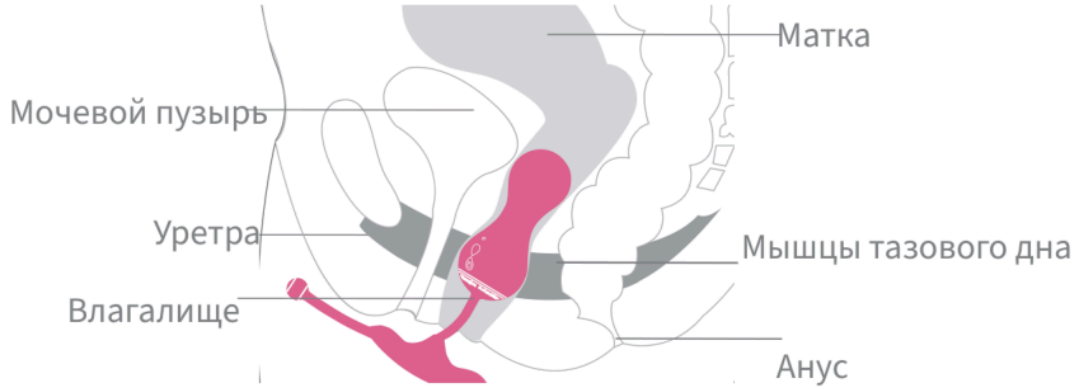

Совет: оставляйте не менее 4 см шнура Kegel Master Gen2 снаружи тела, чтобы обеспечить хороший сигнал без помех.

Шаг 4: выключение

Удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы выключить устройство. Светодиод погаснет, указывая на выключение.

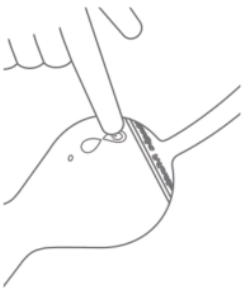


Совет: Kegel Master Gen2 автоматически выключается, если он отключён от приложения в течение 5 минут.

Автономные режимы(без смартфона)


Режим вибрации при сжатии
(режим по умолчанию)

Включите тренажер и напрягайте мышцы тазового дна, контролируя силу вибрации.

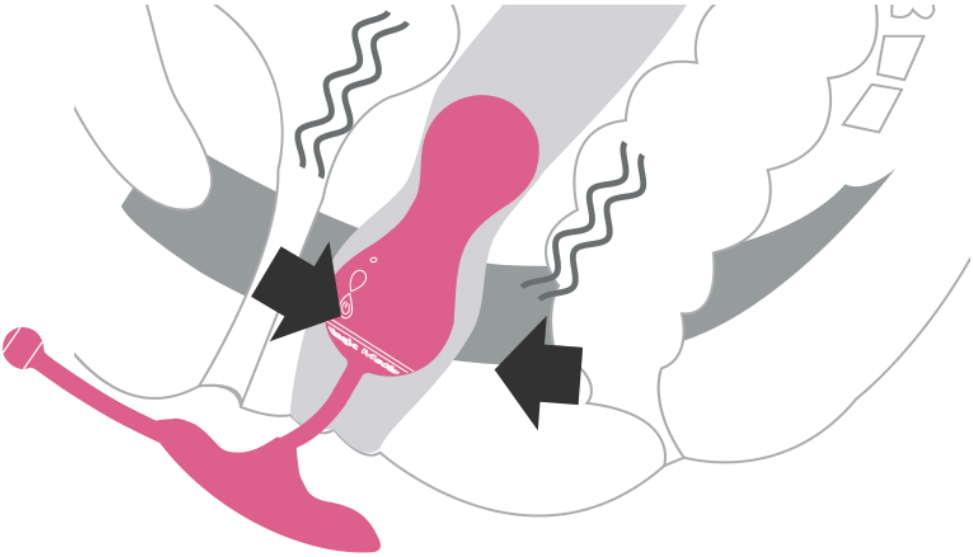


Зарядка аккумулятора

Шаг 1 Откройте крышку магнитного порта для зарядки.

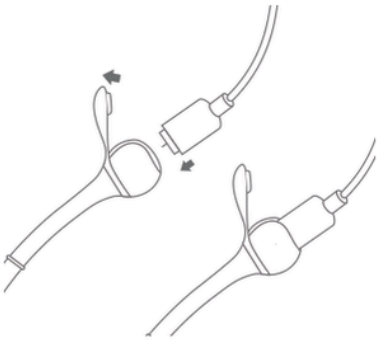

Шаг 2 Подключите USB-разъём к адаптеру питания смартфона, ноутбуку, компьютеру или внешнему аккумулятору.

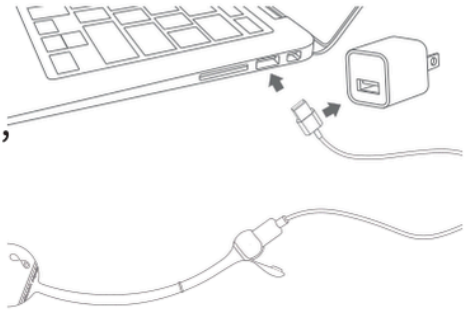

Шаг 3: Светодиодный индикатор загорится, показывая, что тренажер заряжается. Когда тренажер будет полностью заряжен, индикатор погаснет.



Подсказка: При первом использовании рекомендуется сначала полностью разрядить батарею, после чего заряжать прибор не менее 1 часа.

Очистка тренажера kegel Master Gen2

Перед использованием


Перед первым использованием очистите тренажер дезинфицирующим средством или теплой водой с антибактериальным мылом.

После использования

Очистите тренажер дезинфицирующим средством или теплой водой с антибактериальным мылом и высушите.

Хранение

Храните тренажер в прохладном вентилируемом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не давайте детям.

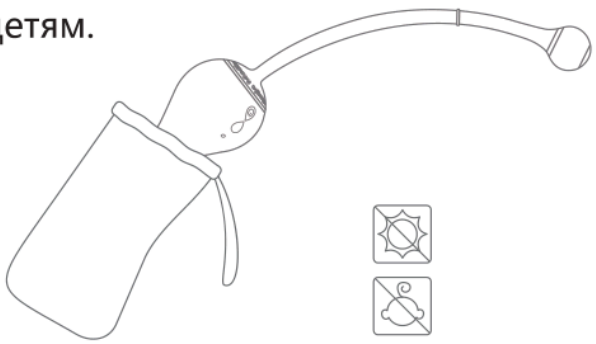

Техническая характеристика

Модель: SMV02

Материал: силикон / ABS

Аккумулятор: 200 мА·ч

Вес: 58 г

Зарядное напряжение: 5V

Водонепроницаемость: IPX6

Время зарядки: 60 минут

Рабочее время: 180 минут

Максимальный зарядный ток: 500mA

Рабочий диапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальная мощность передачи RF: −2.94 dBm

Важная информация по безопасности

Безопасное использование: Только для взрослых от 18 лет. Используйте только согласно этой инструкции. Храните в недоступном для детей месте. Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте изделие на раздражённой или повреждённой коже. Прекратите использование при боли или дискомфорте. Не используйте изделие, если оно необычно горячее, механически повреждено или деформировано, либо изменило цвет.


Безопасная зарядка: Используйте комплектный кабель и источник питания, совместимый с номинальными входными параметрами устройства. Контакты должны быть сухими; держите кабель и источник питания вдали от воды. Не используйте во время зарядки. Отключите после полной зарядки.

Безопасность аккумулятора: Не разбирайте, не прокалывайте, не нагревайте устройство или аккумулятор и не подвергайте их воздействию огня. Прекратите использование и зарядку при необычном нагреве, вздутии, утечке или повреждении.


Очистка, хранение и утилизация: Очищайте до и после использования согласно инструкции и высушивайте перед хранением. Соблюдайте указанную степень защиты IPX6; она не распространяется на зарядный кабель и блок питания. Храните в сухом месте вдали от солнца и детей. Сдавайте устройство и батарею в соответствующий пункт сбора электроники и батарей; не выбрасывайте с бытовыми отходами.

Служба поддержки

Поддержка и гарантия: customercare@magicsmotion.com. Укажите модель и проблему; для гарантии приложите подтверждение покупки.

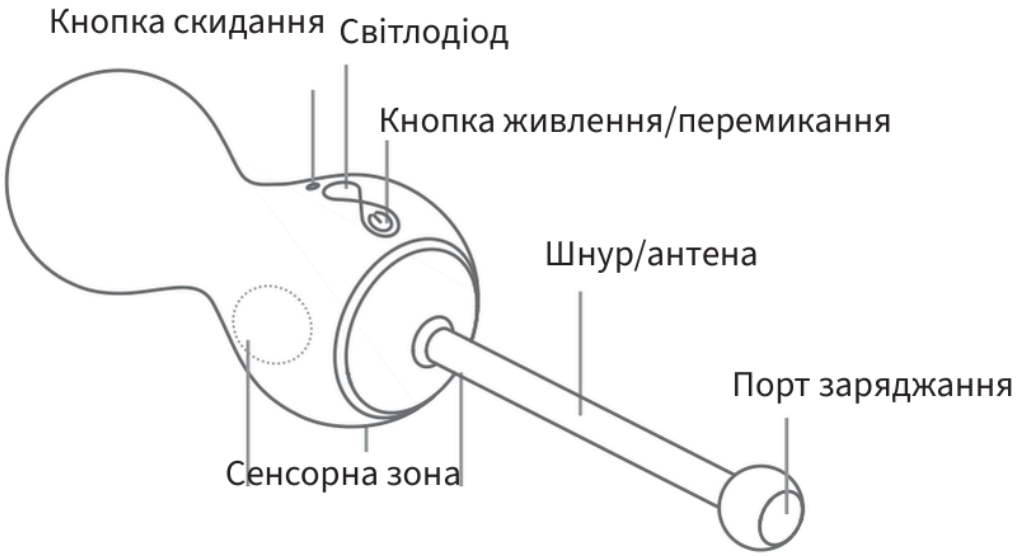

Комплектація

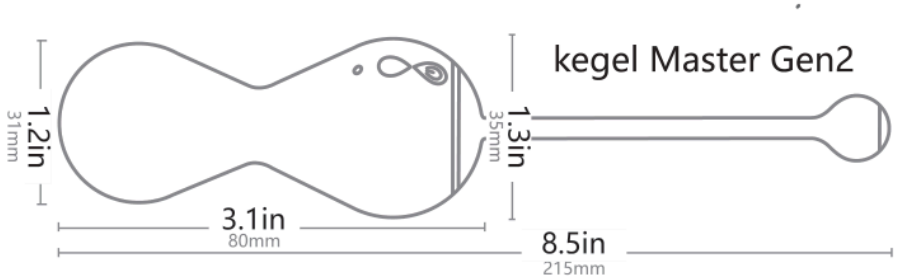



Якір



Магнітний USB-кабель



Посібник користувача



Мішечок для зберігання

Режим тренування зі смартфоном

Крок 1: завантаження застосунку

1. Знайдіть «Magic Kegel» в iOS App Store або Google Play.


2. Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити напряму.

3. Завантажте з


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Крок 2: запустіть застосунок «Magic Kegel»


Увімкніть пристрій Kegel Master Gen2.

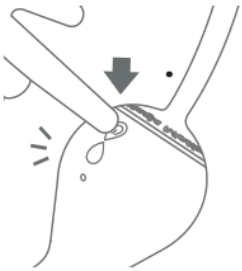

Дотримуйтеся підказок застосунку для підключення.

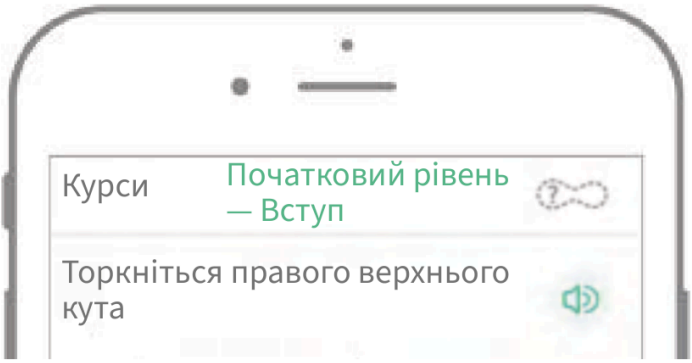


Підключення успішне, коли з’явиться «Підключення успішне».

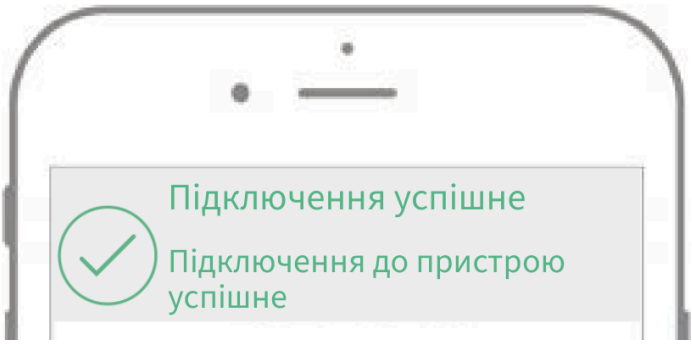

Крок 3: насолоджуйтеся тренуванням Кегеля


Знайдіть зручне положення для введення. Багатьом жінкам найзручніше лежати на спині або стояти. Вводьте Kegel Master Gen2 світлодіодом догори, як показано на малюнку нижче. Для легшого введення нанесіть трохи лубриканту на водній основі на кінчик пристрою або на презерватив.

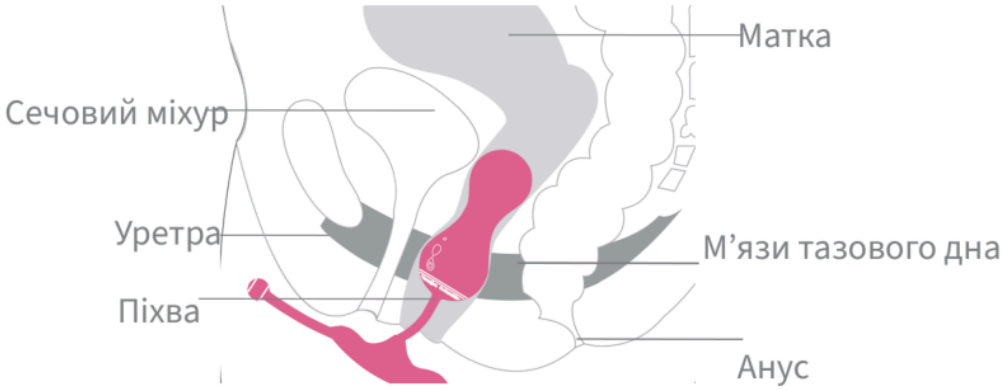

Порада: залишайте щонайменше 4 см шнура Kegel Master Gen2 поза тілом, щоб зберегти добрий сигнал без перешкод.

Крок 4: вимкнення

Пристрій вимикається після утримання кнопки живлення протягом 3 секунд; світлодіод гасне, вказуючи на вимкнення.

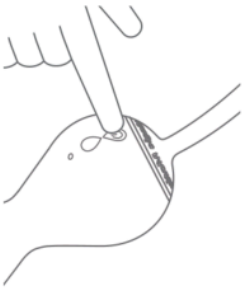


Порада: Kegel Master Gen2 автоматично вимикається, якщо протягом 5 хвилин він від’єднаний від застосунку.


Автономний режим (без смартфона)

- Стискайте для вібрації


Увімкніть Kegel Master Gen2 і стискайте м’язи тазового дна, щоб керувати силою вібрації пристрою.

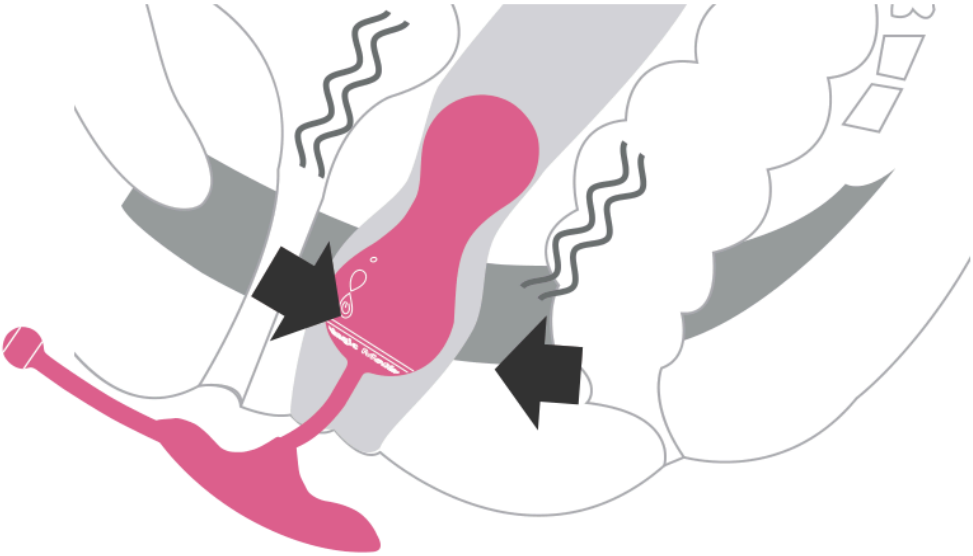

Заряджання акумулятора

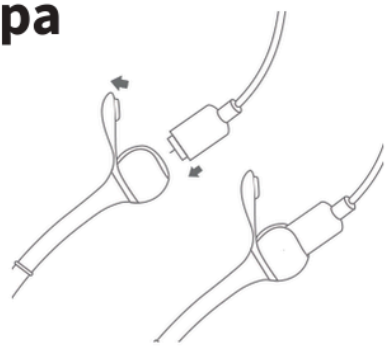


Крок 1 Відкрийте кришку магнітного порту заряджання, щоб зарядити пристрій.

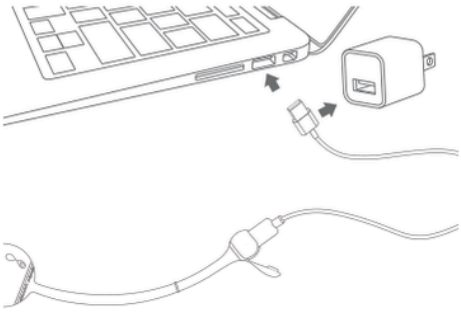

Крок 2 Підключіть USB-роз’єм до адаптера живлення смартфона, ноутбука, комп’ютера або павербанка.

Крок 3 Світлодіод світиться, показуючи, що заряджання відбувається нормально. Після завершення заряджання світлодіод гасне.

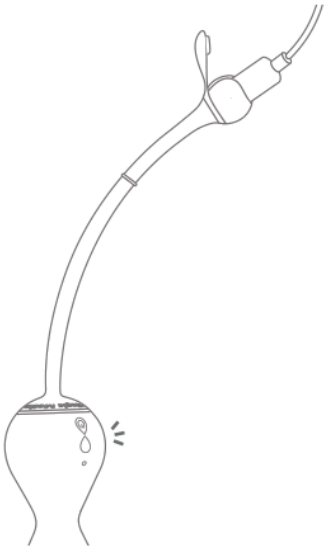

Порада: під час першого використання заряджайте акумулятор 1 годину після його повного розряджання.

Очищення Kegel Master Gen2

Перед використанням


Перед першим використанням очистьте Kegel Master Gen2 засобом для чищення або теплою водою з антибактеріальним милом.

Після використання

Очистьте Kegel Master Gen2 засобом для чищення або теплою водою з антибактеріальним милом і висушіть.

Зберігання

Зберігайте пристрій у прохолодному провітрюваному місці. Уникайте прямих сонячних променів і тримайте подалі від дітей.

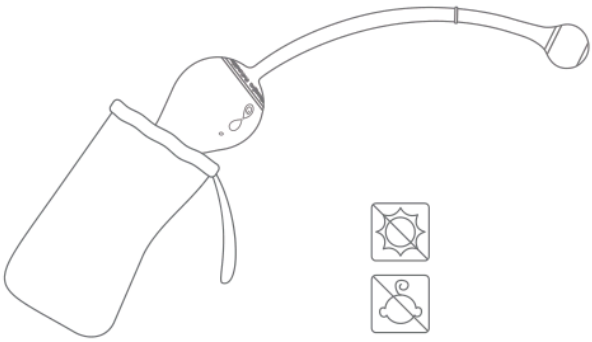

Технічні характеристики

Модель: SMV02

Матеріал: безпечний для тіла силікон / ABS

Вага: 58 г

Акумулятор: 200 мА·год

Напруга заряджання: 5 В

Максимальний струм заряджання: 500 мА

Час заряджання: 60 хвилин

Час роботи: 180 хвилин

Водозахист: IPX6

Робочий діапазон частот: 2402–2480 MHz

Максимальна потужність передавання RF: −2.94 dBm

Важлива інформація з безпеки

Безпечне використання: Лише для дорослих від 18 років. Використовуйте лише відповідно до цієї інструкції. Тримайте подалі від дітей. Небезпека травмування! Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуйте виріб на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання у разі болю або дискомфорту. Не використовуйте виріб, якщо він незвично гарячий, механічно пошкоджений або деформований чи змінив колір.


Безпечне заряджання: Використовуйте комплектний кабель і джерело живлення, сумісне з номінальними вхідними параметрами пристрою. Контакти мають бути сухими; тримайте кабель і джерело живлення подалі від води. Не використовуйте під час заряджання. Від'єднайте після повного заряджання.

Безпека акумулятора: Не розбирайте, не проколюйте, не нагрівайте пристрій чи акумулятор і не піддавайте їх дії вогню. Припиніть використання та заряджання при незвичному нагріванні, здутті, витіканні або пошкодженні.

Очищення, зберігання та утилізація: Очищайте до і після використання відповідно до інструкції та висушуйте перед зберіганням. Дотримуйтеся зазначеного ступеня захисту IPX6; він не поширюється на зарядний кабель і блок живлення. Зберігайте в сухому місці подалі від сонця й дітей. Здавайте пристрій і батарею до відповідного пункту збору електроніки та батарей; не викидайте з побутовими відходами.

Підтримка клієнтів


Підтримка та гарантія: customercare@magicsmotion.com. Вкажіть модель і проблему; для гарантії додайте підтвердження покупки.

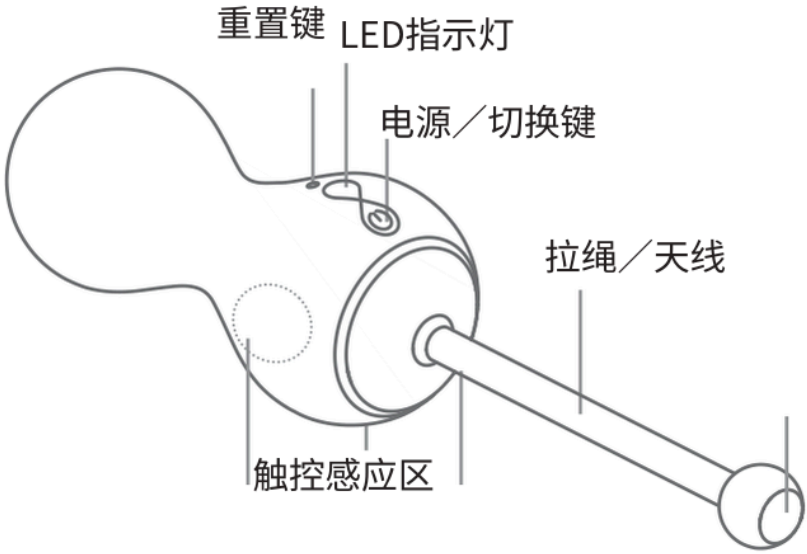

按键图标	按键名称	操作	按键作用
	开关键	短按/长按	开机/关机
	重置键	短按	恢复出厂设置

31mm/1.2in • 33mm/1.3in • 80mm/3.1in • 215mm/8.5in

包装列表

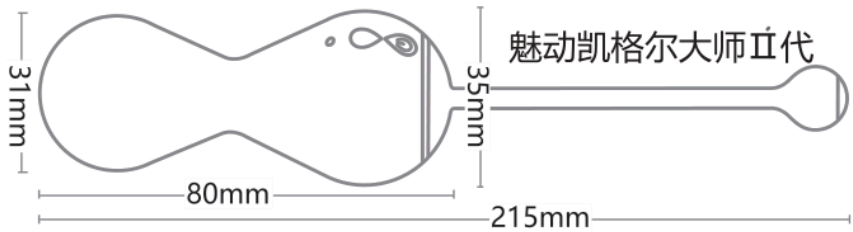


限位器


磁吸USB
充电线


使用指南


收纳袋

使用篇

Step1:下载APP

可以通过以下任意一种方式获得

1.IOS用户在 APP Store中搜索“凯格尔大师”。
安卓用户在 Google Play或应用宝中搜索"凯格尔大师”

2.扫描二维码下载

3.访问以下网址下载

https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Step2:连接到您的“凯格尔大师”应用

开启您的凯格尔大师II代。



按照App引导连接。



出现连接成功提示时，表示设备已连接。



步骤3：享受凯格尔训练


请选择舒适的姿势放入产品，许多女性觉得仰卧或站立最舒适。如图所示，将Kegel Master Gen2的LED指示灯朝上放入。为方便置入，可在产品顶端或安全套上涂少量水性润滑剂。



提示：请将Kegel Master Gen2的拉绳至少留4 cm在体外，以保持良好、无遮挡的信号。

步骤4：关机


长按电源键3秒即可关机；LED指示灯熄灭表示已关机。

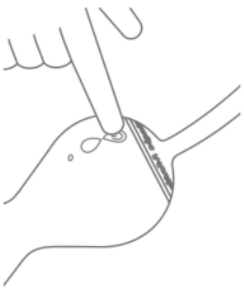

提示：Kegel Master Gen2与App断开连接达5分钟后会自动关机。


离线使用 (不连接手机)

凯格尔大师II代脱机模式训练专用，即压震模式；只需开启凯格尔大师II代，按图示，将凯格尔大师II代缓缓地放入体内，并通过盆底肌挤压来控制震动强弱。

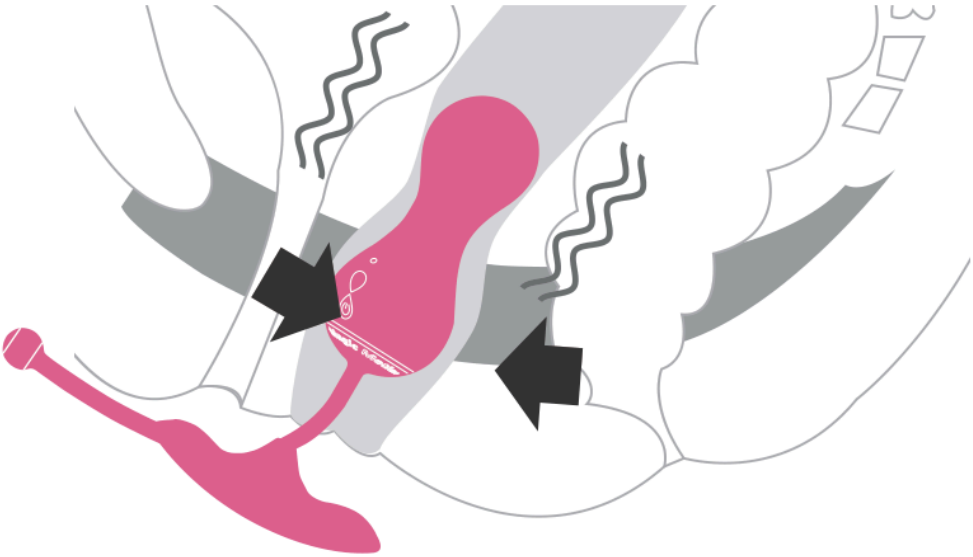


电池充电


步骤 1 打开磁吸充电口的盖子以进行充电。

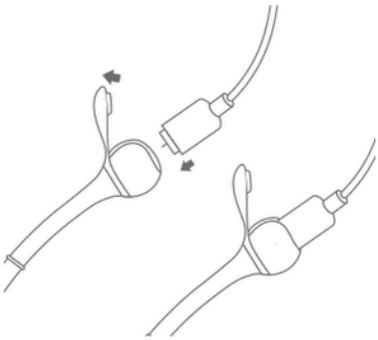

步骤 2 将USB接头连接至手机电源适配器、笔记本电脑、电脑或移动电源。

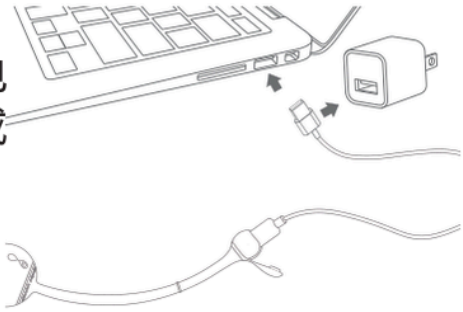

Step3 指示灯亮起来，表示正常充电；充电完成时，指示灯熄灭。

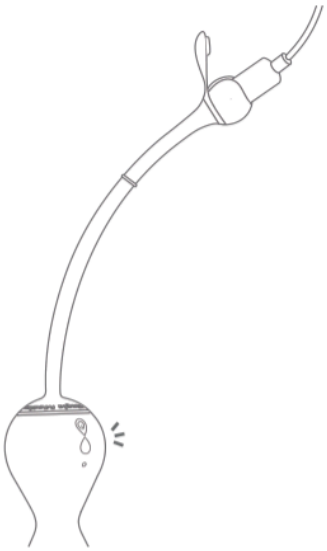


小提示:第一次使用时，请将电量耗尽，连续充电1小时左右。

清洁

清洁凯格尔大师I代请用水溶性清洁剂或者抗菌肥皂清洗干净并晾干。

存放

请将清洗后的凯格尔大师I代装在保护袋内，存放于干燥处，避免阳光直射以及儿童碰触。

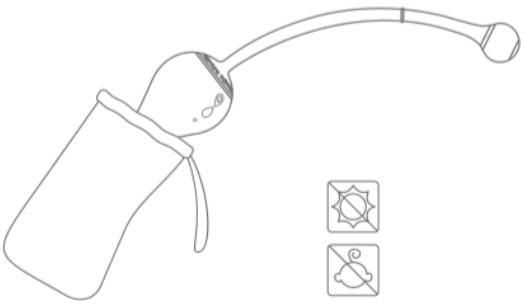

提示：女性经期期间不建议使用，如有妇科及其他不适症状，请咨询医生后方可使用。

产品规格书

产品型号：SMV02

材质：硅胶/ABS

重量：58g

电池：200mAh

额定电压：5V

最大充电电流：500mA

充电时间：60分钟

工作时间：180分钟

防水等级：IPX6

工作频段：2402–2480 MHz

最大发射功率：−2.94 dBm

重要安全信息

使用安全：仅供18岁及以上成人使用。仅按本手册指引使用。远离儿童。 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用本产品。如出现疼痛或不适，请立即停止使用。若产品异常发热、机械损坏或变形，或变色，请勿使用。

充电安全：使用随附充电线和与设备额定输入相匹配的电源。保持充电接点干燥，充电线与电源远离水。充电时禁用，充满后断开。


电池安全：不得拆卸、刺穿或加热设备或电池，不得投入火中。出现异常发热、鼓胀、漏液或损坏时，停止使用和充电。

清洁、储存与回收：使用前后按本手册清洁，干燥后存放。遵守标示的IPX6防水等级；该等级不适用于充电线或电源。干燥保存，避开阳光并远离儿童。将产品和电池交至适当的电子产品／电池回收点，不得混入生活垃圾。

测试标准：GB 4706.1-2005

客户支持


产品支持或保修咨询：customercare@magicsmotion.com。请说明型号和问题；保修咨询请附购买凭证。

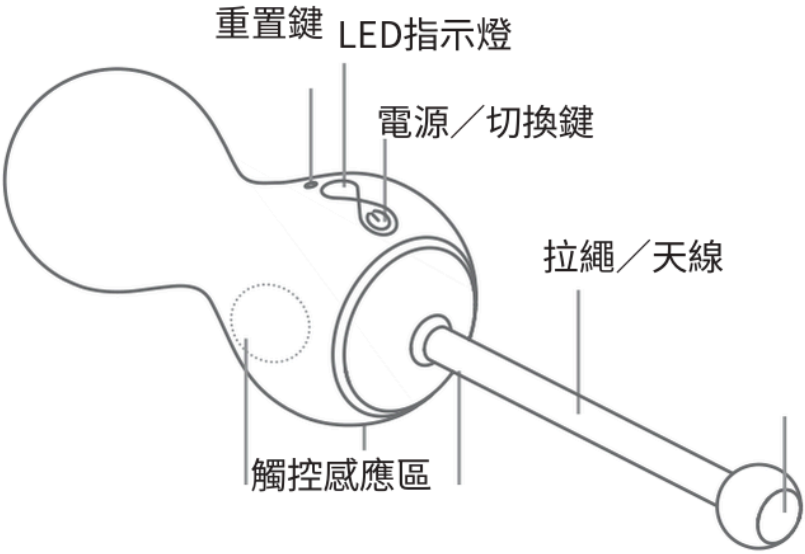

按鍵圖標	按鍵名稱	操作	按鍵作用
	開關鍵	短按/長按	開機/關機
	重置鍵	短按	恢復出廠設置

31mm/1.2in • 33mm/1.3in • 80mm/3.1in • 215mm/8.5in

包裝列表

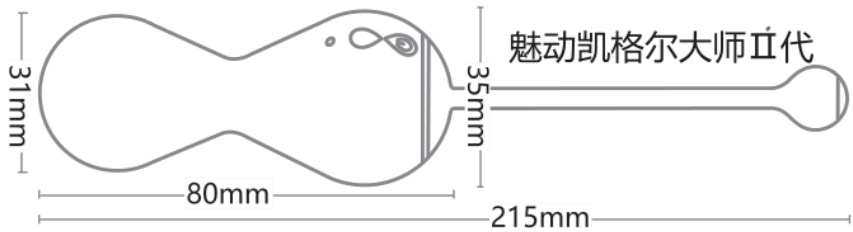


限位器


磁吸USB
充電線


使用指南


收納袋

使用步驟

Step1:下載APP

可以通過以下任意一種方式獲得

1.IOS用戶在 APP Store中搜索“凱格爾大師”。
安卓用戶在 Google Play或應用寶中搜索"凱格爾大師”


2.掃描二維碼下載

3.訪問以下網址下載

https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Step2:連接到您的“凱格爾大師”應用

開啟您的凱格爾大師II代。

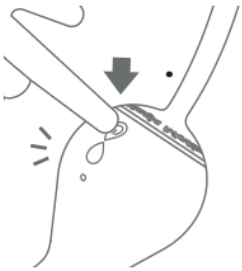

按照App引導連線。




顯示「連線成功」時表示連線成功。



步驟3：享受凱格爾訓練


請選擇舒適的姿勢放入產品，許多女性覺得仰臥或站立最舒適。如圖所示，將Kegel Master Gen2的LED指示燈朝上放入。為方便置入，可在產品頂端或保險套上塗少量水性潤滑劑。

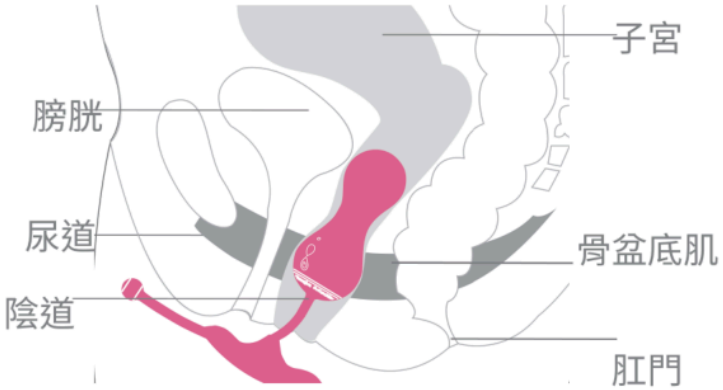

提示：請將Kegel Master Gen2的拉繩至少留4 cm在體外，以保持良好、無遮擋的訊號。

步驟4：關機


長按電源鍵3秒即可關機；LED指示燈熄滅表示已關機。

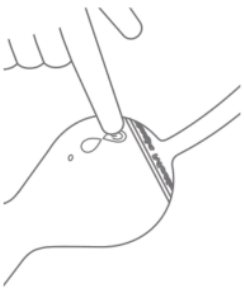

提示：Kegel Master Gen2與App斷開連線達5分鐘後會自動關機。


離線使用 (不連接手機)

凱格爾大師II代脫機模式訓練專用，即壓震模式；只需開啟凱格爾大師II代，按圖示，將凱格爾大師II代緩緩地放入體內，並通過盆底肌擠壓來控制震動強弱。

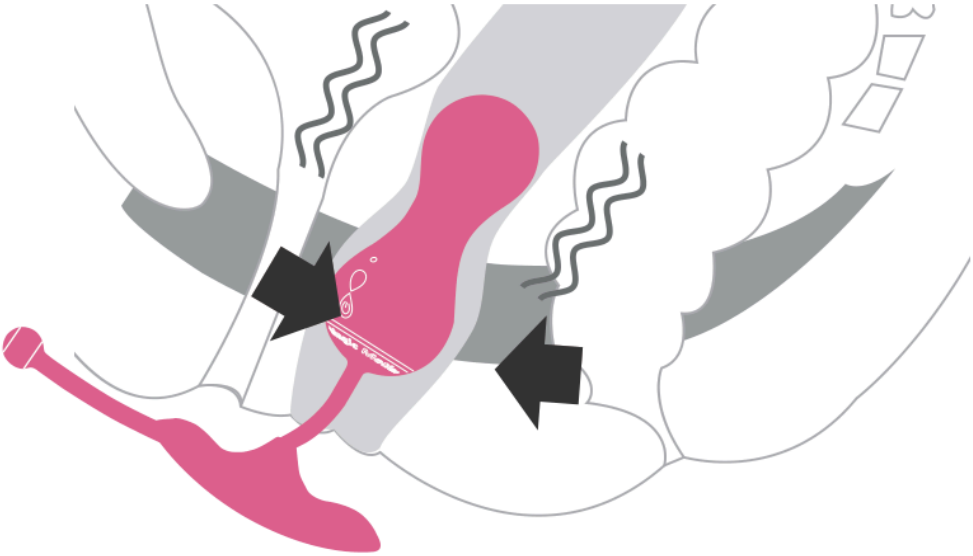


電池充電


步驟 1 打開磁吸充電口的蓋子以進行充電。

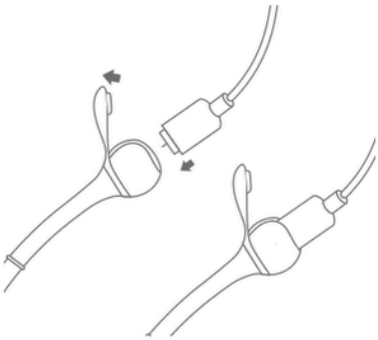

步驟 2 將USB接頭連接至手機電源轉接器、筆記型電腦、電腦或行動電源。

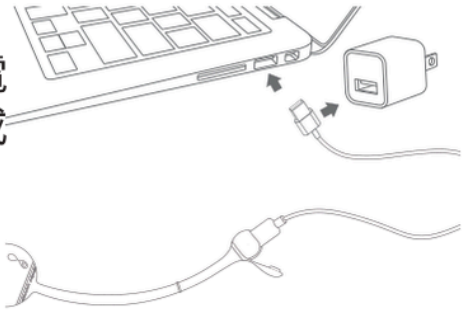

Step3 指示燈亮起來，表示正常充電；充電完成時，指示燈熄滅。

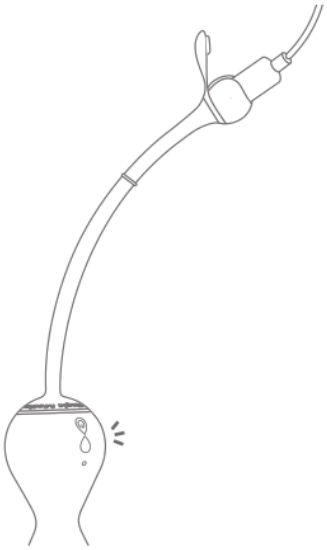


小提示:第一次使用時，請將電量耗盡，連續充電1小時左右。

清潔

清潔凱格爾大師I代請用水溶性清潔劑或者抗菌肥皂清洗乾淨並晾乾。

存放

請將清洗後的凱格爾大師I代裝在保護袋內，存放於乾燥處，避免陽光直射以及兒童碰觸。

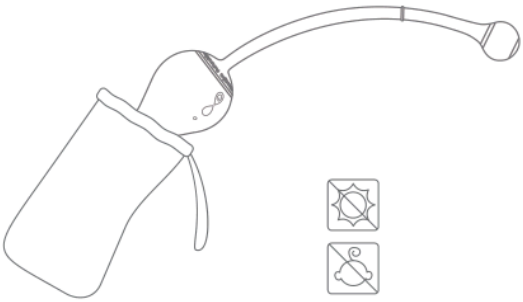

提示：女性經期期間不建議使用，如有婦科及其他不適症狀，請諮詢醫生後方可使用。

產品規格書

產品型號：SMV02

材質：矽膠/ABS

重量：58g

電池：200mAh

額定電壓：5V

最大充電電流：500mA

充電時間：60分鐘

工作時間：180分鐘

防水等級：IPX6

工作頻段：2402–2480 MHz

最大射頻發射功率：−2.94 dBm

重要安全資訊

使用安全：僅供18歲及以上成人使用。僅按本手冊指引使用。遠離兒童。 受傷危險！使用前請取下生殖器區域的穿孔或首飾。不要在受刺激或受損的皮膚上使用本產品。如出現疼痛或不適，請立即停止使用。若產品異常發熱、機械損壞或變形，或變色，請勿使用。


充電安全：使用隨附充電線及與裝置額定輸入相符的電源。保持充電接點乾燥，充電線及電源遠離水。充電時禁用，充滿後斷開。

電池安全：不得拆卸、刺穿或加熱裝置或電池，不得投入火中。出現異常發熱、膨脹、漏液或損壞時，停止使用及充電。


清潔、儲存與回收：使用前後按本手冊清潔，乾燥後存放。遵守標示的IPX6防水等級；該等級不適用於充電線或電源。乾燥保存，避開陽光並遠離兒童。將產品和電池交至適當的電子產品／電池回收點，不得混入生活垃圾。


客戶支援

產品支援或保固諮詢：
customercare@magicsmotion.com。請說明型號及問題；保固諮詢請附購買憑證。

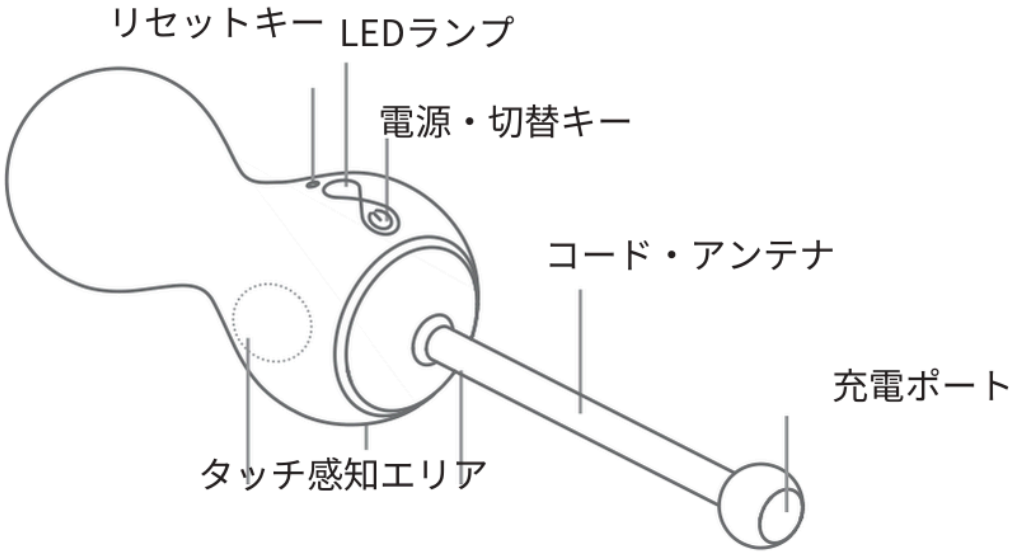

パッキングリスト

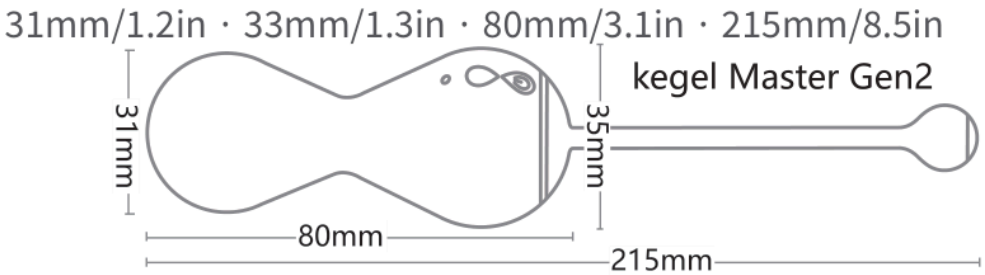

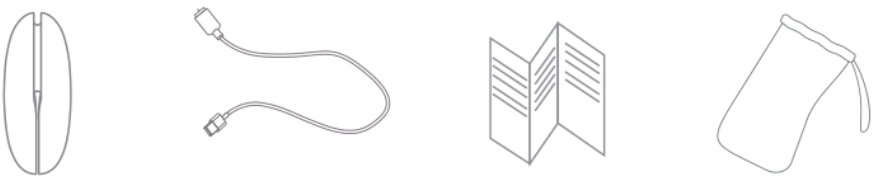

ストッパー　マグネット式USBケーブル　取扱説明書　収納袋

初めてお使いの方へ

ステップ1. アプリのダウンロード

ダウンロードには3種類の方法がございます。

1.「Magic Kegel」を
IOS App StoreまたはGoogle Play

2.QRコードのスキャンからダウンロード
を行うことができます。

3.以下のウェブサイトからダウンロード
を進めることも可能です。

https://www.magicsmotion.com/kegel.html

ステップ2. 「Magic kegel」アプリを起動してください。

Kegel Master Gen2の電源を
オンにします。



アプリの案内
に従って接続
します。




「接続成功」
と表示された
ら接続成功で
す。



ステップ3：ケーゲルトレーニング


挿入しやすい姿勢をとります。仰向けに寝るか、立った姿勢が楽だと感じる方が多いです。下図のように、Kegel Master Gen2のLEDランプを上に向けて挿入します。挿入しやすくするため、本体の先端またはコンドームに水性潤滑剤を少量塗ってください。

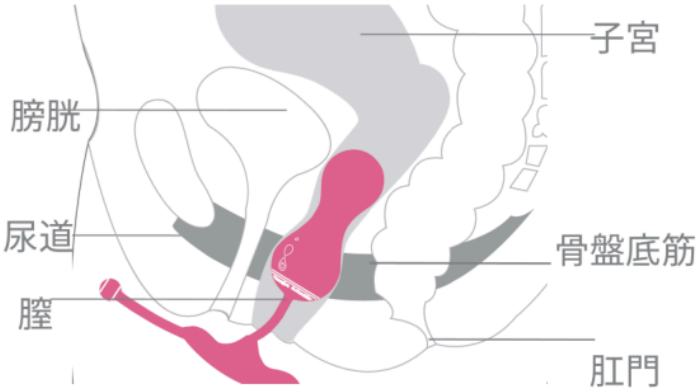

ヒント：電波が遮られず良好に届くよう、Kegel Master Gen2のコードを少なくとも4 cm体外に出してください。

ステップ4：電源を切る


電源キーを3秒間長押しすると電源が切れます。LEDランプが消灯し、電源オフを示します。

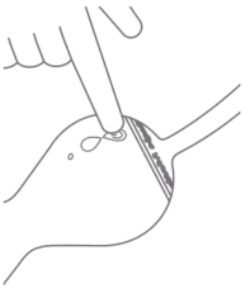

ヒント：アプリとの接続が切れた状態が5分間続くと、Kegel Master Gen2は自動的に電源が切れます。


オフラインモード(スマートフォンを使用しない場合) - 振動を絞る

Kegel Master Gen 2をオンにして骨盤底を絞る装置の振動の強さを制御する筋肉。

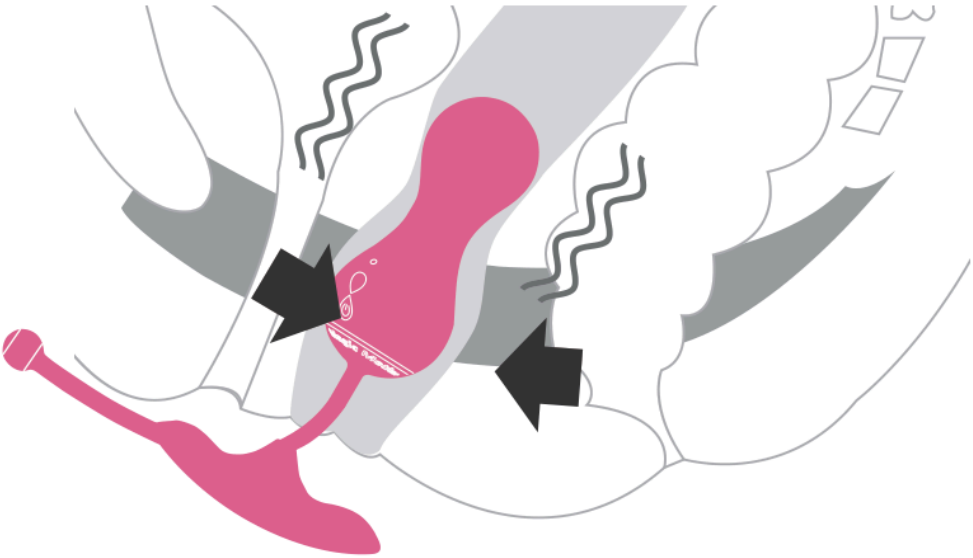


バッテリーの充電


ステップ 1 充電するには、マグネット式充電ポートのキャップを開けます。

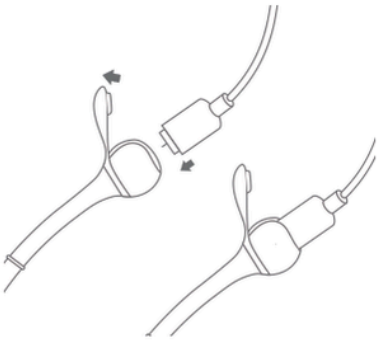

ステップ 2 USB端子をスマートフォン用電源アダプター、ノートパソコン、パソコン、またはモバイルバッテリーに接続します。

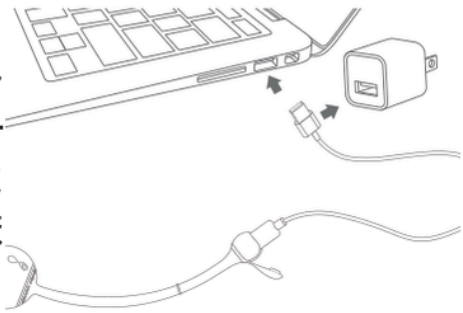

ステップ3 充電が正常に機能していることを示すライトが点灯します。充電完了時にはこのライトが消えます。

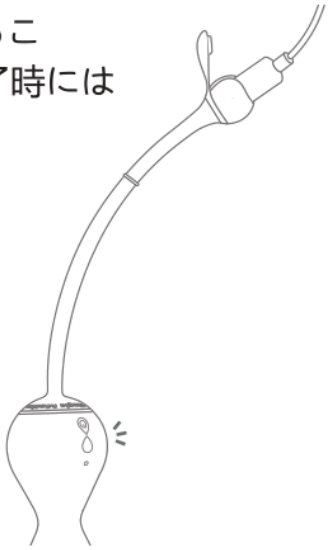

初回ご使用時には電池を使い切った後に1時間ほど充電を行ってください。

Kegel Master Gen2のお手入れ

使用前


初めて使用する前に、Kegel Master Gen2を洗浄剤、または温水と抗菌石けんで洗ってください。

使用後

使用後は、Kegel Master Gen2を洗浄剤、または温水と抗菌石けんで洗い、乾燥させてください。

保管

涼しく風通しのよい場所に保管し、
直射日光を避けてください。
子どもの手の届かない所に置いてください。

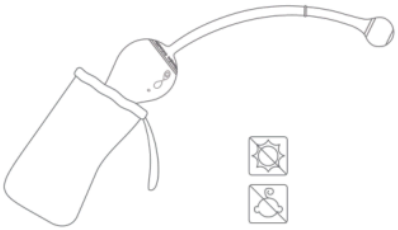

製品仕様

モデル：SMV02

素材：FDA認証シリコン/ABS

電池：200mAh

重量：58g

最大充電電流：500mA

充電電圧：5V

防水性能：IPX6

充電時間：60分

稼働時間：180分

動作周波数帯：2402–2480 MHz

最大RF送信電力：−2.94 dBm

安全上の重要なお知らせ

安全な使用：18歳以上の成人専用です。本書の説明に従って使用してください。子どもの手の届かない場所に保管してください。 けがのおそれがあります。使用前に性器周辺のピアスや装飾品を外してください。刺激や損傷のある皮膚には使用しないでください。痛みや不快感がある場合は使用を中止してください。異常に熱い、機械的に損傷または変形している、または変色している場合は使用しないでください。


充電時の安全：付属の充電ケーブルと、本体の定格入力に適合する電源を使用してください。充電接点を乾燥させ、ケーブルと電源を水から遠ざけてください。充電中は使用しないでください。充電完了後は接続を外してください。

電池の安全：本体や電池を分解、穿孔、加熱したり、火にさらしたりしないでください。異常な発熱、膨張、液漏れ、破損がある場合は、使用と充電を中止してください。

お手入れ、保管、廃棄：使用前後に本書の指示に従って洗浄し、乾燥させてから保管してください。表示されたIPX6等級を守ってください。充電ケーブルや電源には適用されません。乾燥した場所で直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管してください。製品と電池は適切な電子機器・電池回収場所に出し、家庭ごみに捨てないでください。


カスタマーサポート

製品サポート・保証のお問い合わせ：customercare@magicsmotion.com。型番と問題をお知らせください。保証の場合は購入証明を添えてください。

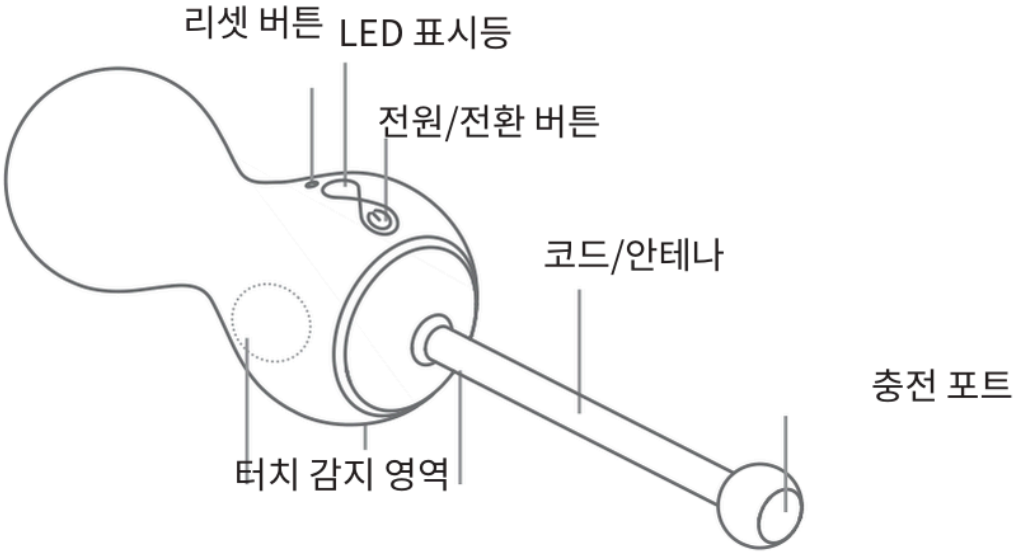

포장 목록

31mm/1.2in · 33mm/1.3in · 80mm/3.1in · 215mm/8.5in

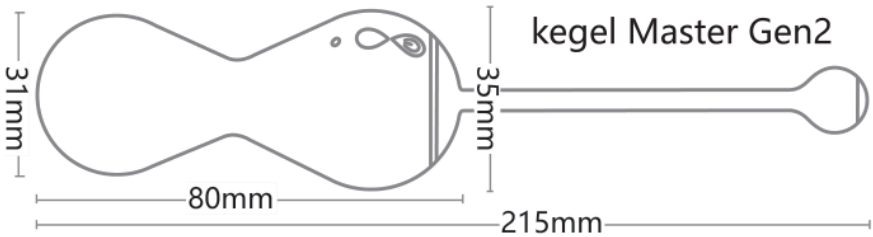


스토퍼


마그네틱 USB 케이블


사용 설명서


보관 주머니

스마트폰 구동 모드

Step1: APP 다운로드

1. IOS App store 나 Google Play 에서 “Magic Kegel” 검색


2. 아래 QR 코드를 스캔해서 바로 다운로드.

3. 에서 다운로드


https://www.magicsmotion.com/kegel.html

Step2: “Magic Kegel” APP 실행


Kegel Master Gen 2 장치를 킵니다

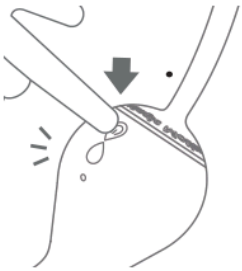

앱 안내에 따라 연결하세요.

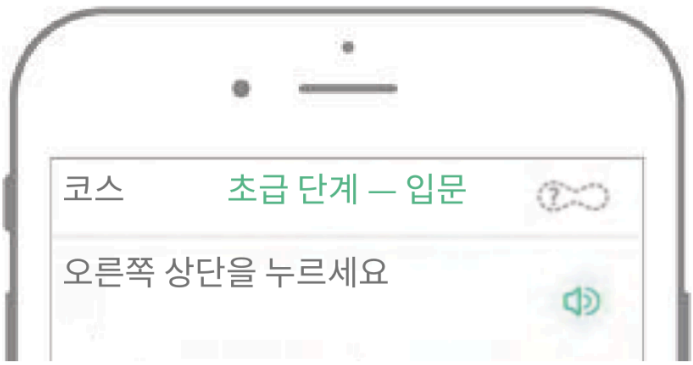


“연결 성공”가 표시되면 연결된 것입니다.

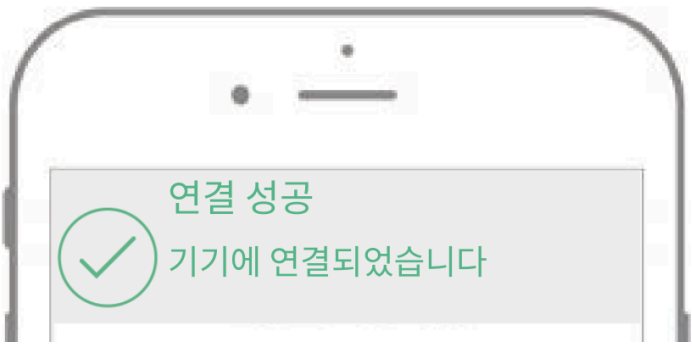

3단계: 케겔 운동 즐기기


삽입하기 편안한 자세를 취하세요. 많은 여성은 등을 대고 눕거나 선 자세가 편하다고 느낍니다. 아래 그림처럼 Kegel Master Gen2의 LED가 위를 향하도록 삽입하세요. 쉽게 삽입하려면 기기 끝이나 콘돔에 수성 윤활제를 조금 바르세요.

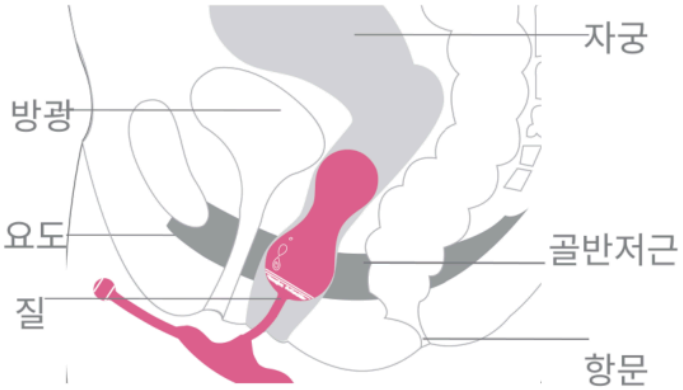

도움말: 신호가 방해받지 않도록 Kegel Master Gen2의 코드를 최소 4 cm 이상 몸 밖으로 남겨 두세요.

4단계: 전원 끄기


전원 버튼을 3초간 길게 누르면 기기가 꺼집니다. LED가 꺼져 전원 꺼짐을 알려 줍니다.

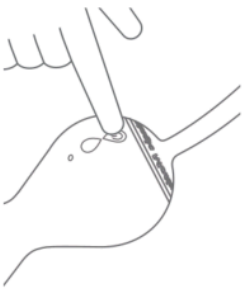


도움말: 앱과 연결이 끊긴 상태가 5분간 지속되면 Kegel Master Gen2가 자동으로 꺼집니다.

독립 모드 (스마트폰 없이)
- 진동을 위해 힘을 주세요


Kegel Master Gen 2를 켜시고 골반 근육을 이용해 힘을 주어 진동 강도를 컨트롤 하십시오.

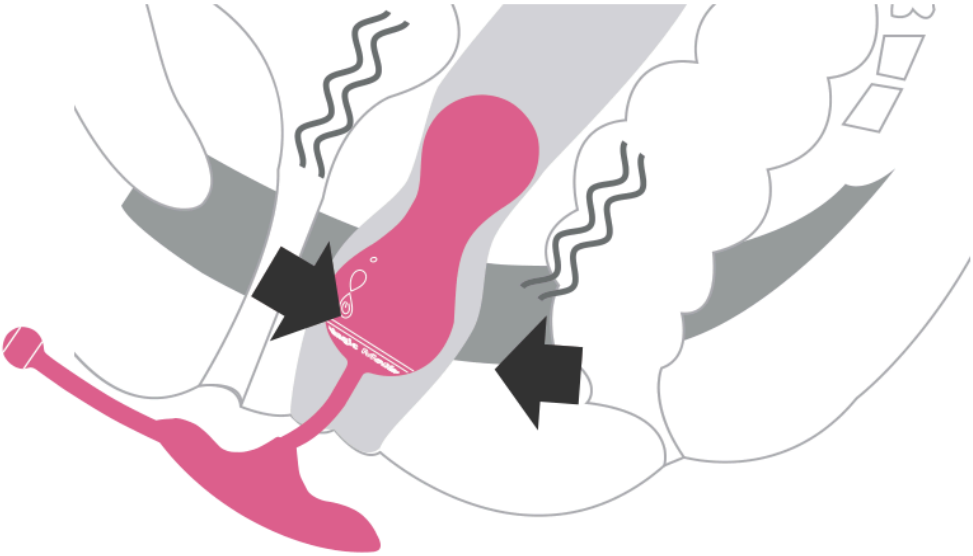

배터리 충전

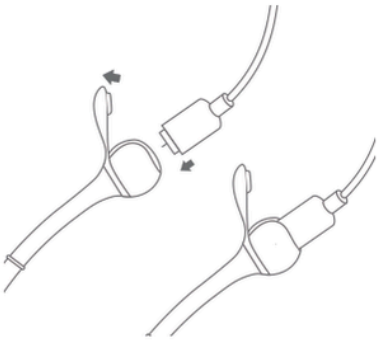


단계 1 충전하려면 마그네틱 충전 포트의 덮개를 여세요.

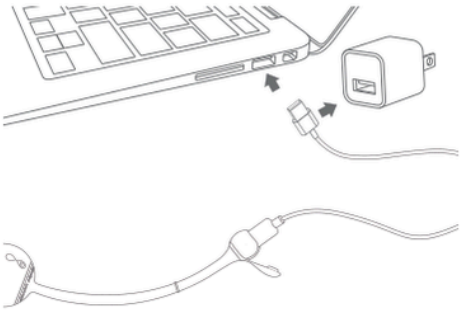

단계 2 USB 커넥터를 스마트폰 전원 어댑터, 노트북, 컴퓨터 또는 보조 배터리에 연결하세요.

3단계 LED가 켜지면 정상적으로 충전 중입니다. 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.

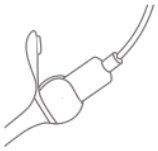



팁: 첫 사용시, 완전히 방전될 때까지 사용하시고 난 후에, 1시간 동안 배터리를 충전해 주십시오.

Magic kegel Master Gen 2 세정

사용 전


처음 사용하시기 전에 세정제나 혹은 따뜻한 물과 항균 비누로 Kegel Master Gen 2를 깨끗이 씻어 주시기 바랍니다.

사용 후

Kegel Master Gen 2를 세정제나 따뜻한 물과 항균 비누로 깨끗이 씻어 말려주시기 바랍니다.

보관

시원하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오. 직사광선을 피하고 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.

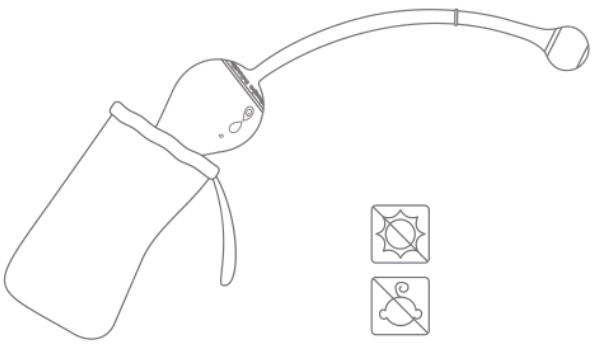

사양

모델: SMV02

재료: 실리콘 / ABS

중량: 58g

배터리: 200mAh

충전 전압: 5V

충전 시 최대 전류: 500mA

충전 시간: 60 분

구동 시간: 180 분

방수: IPX6

작동 주파수 대역: 2402–2480 MHz

최대 RF 송신 전력: −2.94 dBm

중요 안전 정보

안전한 사용: 18세 이상 성인 전용입니다. 이 설명서에 따라 사용하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상 위험! 사용 전에 생식기 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하십시오. 자극을 받았거나 손상된 피부에는 제품을 사용하지 마십시오. 통증이나 불편함이 있으면 사용을 중지하십시오. 비정상적으로 뜨겁거나 기계적으로 손상 또는 변형되었거나 변색된 경우 사용하지 마십시오.

충전 안전: 동봉된 충전 케이블과 기기의 정격 입력에 맞는 전원을 사용하세요. 충전 접점을 건조하게 유지하고 케이블과 전원을 물에서 멀리 두세요. 충전 중에는 사용하지 말고 완전히 충전되면 분리하세요.

배터리 안전: 기기나 배터리를 분해하거나 찌르거나 가열하거나 불에 노출하지 마세요. 비정상적인 발열, 부풀음, 누액 또는 손상이 있으면 사용과 충전을 중단하세요.

세척, 보관 및 폐기: 사용 전후에 이 설명서에 따라 세척하고 건조한 후 보관하십시오. 표시된 IPX6 등급을 준수하십시오. 이 등급은 충전 케이블이나 전원에는 적용되지 않습니다. 햇빛과 어린이를 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 제품과 배터리는 적절한 전자제품 및 배터리 수거 장소에 배출하고 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.

고객 지원

제품 지원 및 보증 문의: customercare@magicsmotion.com. 모델명과 문제를 알려주세요. 보증 문의에는 구매 증빙을 첨부하세요.

Touch Beyond Your Thought

Magic Motion

www.magicsmotion.com

MANUFACTURER
Vtrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1001, 1st Floor, Building B, No. 555 Dongchuan Road,
Minhang District, Shanghai, China

EC REP
Interslash BV
Tomatenmarkt 1, 1681PH Zwaagdijk, NL